

# Gebrauchsanleitung

# HERO **NXT**



# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>ALLGEMEINE INFORMATIONEN</b>	<b>4</b>
1.1	Vorwort	4
1.2	Zweckbestimmung und Indikation	5
1.3	Hinweise	5
1.4	Konformitätserklärung	5
1.5	Gewährleistungsbedingungen	5
1.6	Service und Reparaturen	6
1.7	Gebrauchsschulung	6
<b>2</b>	<b>SICHERHEITSHINWEISE &amp; EINBAU IM KFZ</b>	<b>7</b>
2.1	Sicherheitshinweise	7
2.2	Verwendung im Fahrzeug	8
2.3	Einbau ins Auto	9
2.4	Anlegen der Gurte	11
2.5	Einstellen der Kopfstütze	12
<b>3</b>	<b>HANDHABUNG DES GRUNDMODELLS</b>	<b>14</b>
3.1	Sitzwinkel einstellen	14
3.2	Drehfunktion	14
3.3	Ausstiegsfunktion	15
3.4	Pflege & Wartung	15
<b>4</b>	<b>VERWENDUNG DES OPTIONALEN ZUBEHÖRS</b>	<b>16</b>
4.1	Thoraxpelotten	16
4.2	Abduktionskeil	16

# Inhaltsverzeichnis

4.3	Stütz- und Sicherheitspolster	17
4.4	Schutzmatte	17
5	GARANTIE	18
6	KENNZEICHNUNG	19
7	TECHNISCHE DATEN	20
8	MATERIALAUFSTELLUNG	21

# 1. Allgemeine Informationen

## 1 Allgemeine Informationen

### 1.1 Vorwort

Sie haben sich für den Autokindersitz „HERO-NXT“ entschieden und bekommen hiermit ein hochwertiges Produkt aus unserem Haus. Wir möchten Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen danken.

Damit Sie recht lange viel Freude mit diesem Produkt haben und es Ihnen hilft den Alltag zu erleichtern, überreichen wir Ihnen dieses Handbuch. Es zeigt Ihnen die korrekte und einfache Bedienung und die erforderliche Pflege und Wartung. Um Beschädigungen auf Grund von Bedienungsfehlern zu vermeiden und eine optimale Nutzung zu ermöglichen, lesen Sie bitte sorgfältig die nachfolgenden Anleitungen bzw. Hinweise. Ergeben sich darüber hinaus Fragen oder Probleme, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Wir wünschen Ihnen eine problemlose Nutzung und hoffen, dass unsere Produkte Ihren Erwartungen entsprechen.

Technische Änderungen zu der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Ausführung behalten wir uns vor.

Vor dem Einbau in Ihrem PKW und der ersten Nutzung bitten wir Sie im Speziellen die Einbauhinweise auf den Seiten 9-13 zu lesen und zu beachten.

Bitte stellen Sie sicher, dass die Gebrauchsanweisung am Produkt bleibt und somit für jeden Benutzer zur Verfügung steht.

Ihre HERNIK GmbH

# 1. Allgemeine Informationen

## 1.2 Zweckbestimmung und Indikation

Der HERO-NXT wurde für den Transport von Kindern mit besonderen Bedürfnissen in Kraftfahrzeugen entwickelt. Kinder mit schlechter Kopf- und Rumpfkontrolle (z.B. infantile Cerebralparese, Muskeldystrophie, Hypotonie) können mittels individuell positionierbarer Thoraxpelotten und spezieller Polster in deren Haltung unterstützt werden, wodurch ein sicherer Transport gewährleistet werden kann.

Durch wichtiges optionales Zubehör kann im Einzelnen auf spezielle Aspekte eingegangen werden, z. B. auf die Sitzneigung, der Installation eines stabilen Abduktionskeiles oder von Thoraxpelotten. Mehr dazu im Kapitel 4.

## 1.3 Hinweise

Der HERO-NXT Reha-Kinderautositz besteht aus zwei Modulen:

1. Ein handelsüblicher DUALFIX-Kinderautositz der Fa. Römer-Britax (bitte beachten Sie dazu die Gebrauchsanweisung des Herstellers).
2. Anpassungsmodul mit Zubehör, das die Möglichkeit bietet, den Autositz entsprechend individueller Bedürfnisse auszustatten. Dafür beachten Sie bitte die Gebrauchsanweisung der HERNIK GmbH.

## 1.4 Konformitätserklärung

Die HERNIK GmbH erklärt in alleiniger Verantwortung, dass der Autokindersitz „HERO-NXT“ mit den grundlegenden Anforderungen (Anhang 1 der Richtlinie 93/42 EWG) übereinstimmt. Das Produkt ist mit dem CE-Kennzeichen nach der oben genannten Richtlinie gekennzeichnet.

## 1.5 Gewährleistungsbedingungen

Eine Gewährleistung kann nur übernommen werden, wenn das Produkt unter den vorgegebenen Bedingungen und zu den vorgesehenen Zwecken eingesetzt wird. Für Schäden, die durch Bauteile und Ersatzteile verursacht werden, die nicht vom Hersteller freigegeben wurden, haftet der Hersteller nicht.

# 1. Allgemeine Informationen

## 1.6 Service und Reparaturen

Service und Reparaturen am „HERO-NXT“ dürfen nur vom Fachhandel durchgeführt werden. Wenden Sie sich bei Problemen an Ihren zuständigen Fachhändler. Bei Reparaturen erhalten Sie dort ausschließlich Original-Ersatzteile.

## 1.7 Gebrauchsschulung

Der Autositz wird komplett montiert geliefert. Bei Auslieferung weist der Fachhändler den Benutzer unter Zuhilfenahme der Gebrauchsanweisung in den Gebrauch des Hilfsmittels ein. Der Fachhändler sollte gemeinsam mit dem Benutzer den Autositz in den PKW einbauen und den korrekten Sitz des Isofix-Adapters sicherstellen.

Wenn Sie den Autositz einbauen, fassen Sie ihn am besten mit der einen Hand vorne mittig, und mit der anderen seitlich oben an. Um eine optimale Sitzposition zu erreichen, ist es notwendig den Autositz individuell auf die Gegebenheiten des Kindes einzustellen. Dies sollte grundsätzlich vom Fachhändler erfolgen.

## 2. Sicherheitshinweise & Einbau im KFZ

### 2 Sicherheitshinweise & Einbau im KFZ

#### 2.1 Sicherheitshinweise

- Der „HERO-NXT“ ist immer gemäß Einbauanleitung im Fahrzeug zu befestigen, auch wenn er nicht benutzt wird. Ein nicht befestigter Sitz kann bei einer Notbremsung andere Autoinsassen verletzen.
- Der „HERO-NXT“ ist im Auto so zu befestigen, dass er nicht durch die Vordersitze oder die Fahrzeugtüren eingeklemmt wird.
- Die Gurte dürfen nicht verdreht oder eingeklemmt sein und müssen gestrafft werden.
- Nach einem Unfall darf der Autositz nicht wieder verwendet werden!
- Legen Sie Ihrem Kind immer den Gurt an.
- Kontrollieren Sie vor jeder Fahrt, dass obwohl das Gurtschloss als auch der ISOFIX korrekt verriegelt sind und der Standfuss korrekt sitzt.


## 2. Sicherheitshinweise & Einbau im KFZ

### 2.2 Verwendung im Fahrzeug

Bitte beachten Sie die Anweisungen zur Verwendung von Kinderrückhaltesystemen in der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs. Beachten Sie etwaige Einschränkungen durch Airbags bei der Verwendung. Bitte entnehmen Sie der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs die Informationen über die Fahrzeugsitze, welche nach R16 für die Verwendung von Kinderrückhaltesystemen ECE zugelassen sind.

Verwendungsmöglichkeiten HERO-NXT (i-SIZE)\*

in Fahrtrichtung	Ja <sup>1)</sup>
entgegen der Fahrtrichtung	Ja <sup>1)</sup>
Mit 2-Punkt- oder 3-Punkt-Sicherheitsgurt	Nein
auf Sitzen mit: ISOFIX-Befestigungen	Ja <sup>2)</sup>

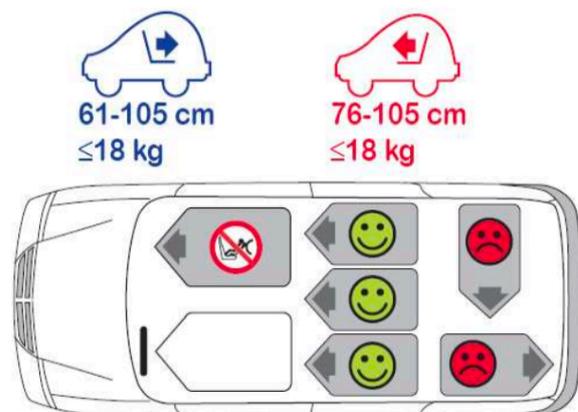

\*(Bitte beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Vorschriften)


- In Fahrtrichtung 76-105 cm / Entgegen der Fahrtrichtung 61-105 cm
- In Fahrtrichtung 76-105 cm: Bei Vorhandensein eines Beifahrer-Airbags: Schieben Sie den Beifahrersitz weit zurück und befolgen Sie etwaige Anweisungen in der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs.
- Entgegen der Fahrtrichtung 61-105 cm: Nicht auf Beifahrersitzen mit aktivem Front-Airbag verwenden!
- Bei Kindern ab 3 Jahren für ausreichend Platz nach oben (ca. 1 Handbreit zum Dach) und nach vorn zur Beifahrersitzlehne sorgen (min. 76 cm frontgerichtet).

## 2. Sicherheitshinweise & Einbau im KFZ

### 2.3 Einbau ins Auto


Wenn Ihr Fahrzeug nicht standardmäßig mit ISOFIX Einführhilfen ausgestattet ist, klemmen Sie die zwei Einführhilfen (2), welche im Lieferumfang des Sitzes enthalten sind, mit nach obenweisendem Ausschnitt auf die zwei ISOFIX-Befestigungspunkte (1) Ihres Fahrzeugs.

**TIPPI!** Die ISOFIX-Befestigungspunkte befinden sich zwischen der Sitzfläche und der Rückenlehne des Fahrzeugsitzes

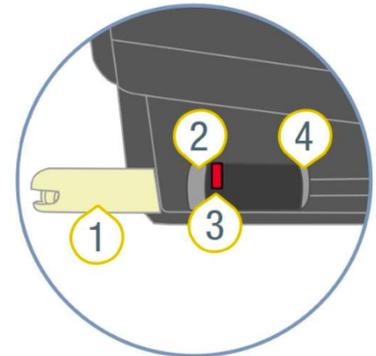

#### 2.3.1 ISOFIX vorbereiten


Drücken Sie den Sicherungsknopf (4) und den Löseknopf (2) gegeneinander und schieben Sie den ISOFIX-Rastarm (1) maximal heraus. Schieben Sie den zweiten Rastarm ebenfalls maximal heraus.

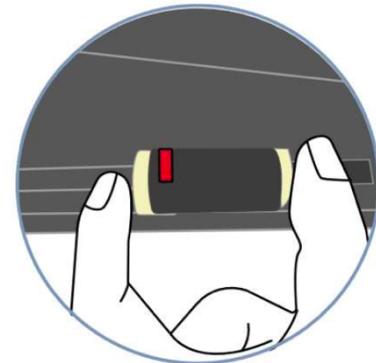

#### 2.3.2 ISOFIX befestigen

Verbinden Sie den ISOFIX-Rastarm (1) mit den ISOFIX-Haltebügeln des Fahrzeugsitzes. Beide ISOFIX-Rastarme (1) rasten hörbar ein und zeigen die Farbe Grün an.

**ACHTUNG!** Verletzungsgefahr durch ungesicherten Kindersitz. Stellen Sie sicher, dass beide ISOFIX-Rastarme vollständig eingerastet sind. Beide Arme müssen die Farbe Grün anzeigen.

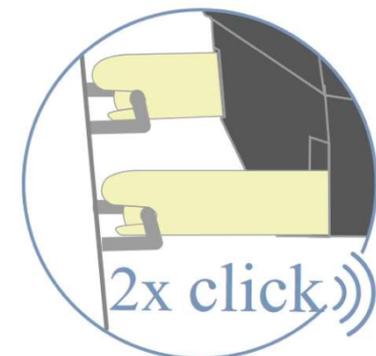

#### 2.3.3 Befestigen des Kindersitzes


Spannen Sie die ISOFIX-Verbindung, indem Sie den Kindersitz mit Kraft in die Rückenlehne des Fahrzeugsitzes drücken.

Erhöhen Sie die Spannung der ISOFIX-Verbindung, indem Sie vorne an der Basisstation seitlich mit Kraft drücken.

#### 2.3.4 Befestigung prüfen

Prüfen Sie, ob die ISOFIX-Rastarme (1)

- gleich weit eingefahren sind (beide Indikatoren müssen die gleiche Nummer zeigen).
- mit den ISOFIX-Haltebügeln auf beiden Seiten verbunden sind, indem Sie an dem Kindersitz ziehen.

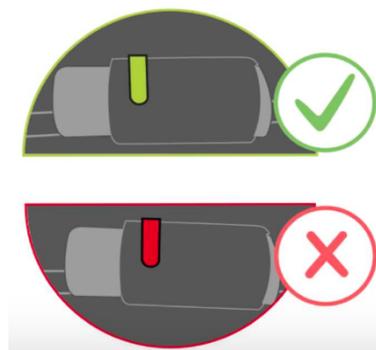

## 2. Sicherheitshinweise & Einbau im KFZ




### 2.3.5 Stützbein einstellen

Klappen Sie das Stützbein (1) von dem Kindersitz vollständig weg, bis es hörbar einrastet. Die rote Markierung (2) darf nicht mehr sichtbar sein.

Halten Sie die Verstelltaste (3) gedrückt und fahren Sie das Stützbein bis zum Fußboden des Fahrzeugs aus.

Lassen Sie die Verstelltaste (3) los. Diese rastet nun hörbar ein. Der Stütz-Indikator (4) zeigt die Farbe Grün an.

**ACHTUNG!** Das Stützbein (1) darf nie in der Luft hängen oder mit Gegenständen unterlegt werden. Achten Sie auch darauf, dass das Stützbein (1) nicht das HERO-NXT-Unterteil von der Sitzfläche des Fahrzeugs hebt.

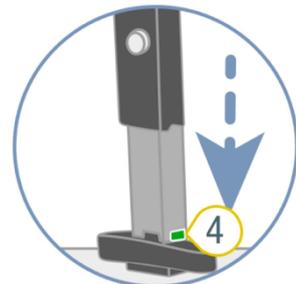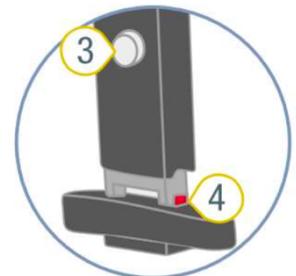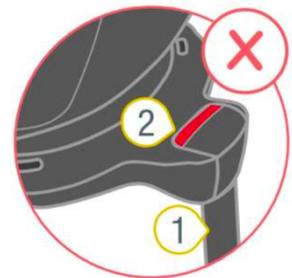

## 2. Sicherheitshinweise & Einbau im KFZ

### 2.4 Anlegen der Gurte

#### 2.4.1 Schultergurte lockern

Um das Gurtzeug zu lockern, drücken Sie die Verstelltaste (3) und ziehen Sie gleichzeitig die beide Schultergurte (1) nach vorne.

**ACHTUNG!** Ziehen Sie nicht an den Schulterpolstern.

#### 2.4.2 Gurtschloss öffnen

Öffnen Sie das Gurtschloss (2), indem Sie die rote Taste drücken.

#### 2.4.3 Kind in Kindersitz setzen

Achten Sie darauf, dass das Gurtschloss (2) nach vorne umgelegt ist, und setzen Sie Ihr Kind in den Kindersitz.

**GEFAHRI** Verwenden Sie den Kindersitz nur rückwärtsgerichtet auf dem Beifahrersitz, wenn der Front-Airbag deaktiviert ist.

#### 2.4.4 Schultergurt platzieren

Legen Sie die Schultergurte (1) über die Schultern Ihres Kindes.

**ACHTUNG!** Die Schultergurte (1) dürfen nicht verdreht oder vertauscht sein.




#### 2.4.5 Gurtschloss schließen

Führen Sie die beiden Schlosszungen (5) zusammen und rasten Sie diese mit einem hörbaren „Klick“-Geräusch im Gurtschloss (2) ein.

#### 2.4.6 Verstellgurt spannen

Ziehen Sie am Verstellgurt (4), bis der Gurt flach und eng am Körper Ihres Kindes anliegt.

**WARNUNG!** Die Hüftgurte müssen so tief wie möglich über die Leistenbeuge Ihres Kindes verlaufen.

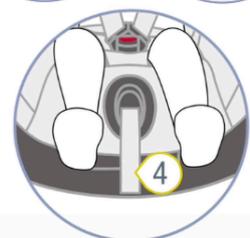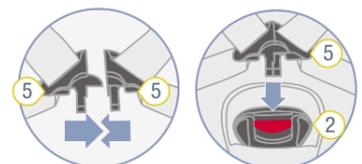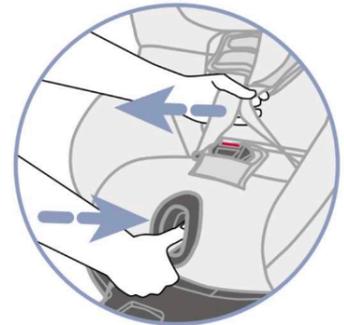

## 2. Sicherheitshinweise & Einbau im KFZ

### 2.5 Einstellen der Kopfstütze




Eine richtig eingestellte Kopfstütze (1) gewährleistet optimalen Schutz für Ihr Kind im Kindersitz. Die Kopfstütze (1) muss so eingestellt werden, dass die Schultergurte (5) auf Schulterhöhe Ihres Kindes oder ein wenig darüber liegen.

**ACHTUNG!** Die Schultergurte (5) dürfen nicht hinter dem Rücken, auf Höhe oder über den Ohren des Kindes verlaufen.

- Lockern Sie das Gurtzeug.
- Halten Sie die Lösetaste (6) der Kopfstütze (1) gedrückt und verschieben Sie die Kopfstütze (1) bis zur richtigen Schultergurthöhe.
- Prüfen Sie, ob die Kopfstütze (1) richtig eingerastet ist, indem Sie die Kopfstütze ein wenig nach unten verschieben.

#### Hinweis zum Kopfpolster:

Das per Klett an der Kopfstütze befestigte Polsterinlet ist 3-teilig. Bei Bedarf können die beiden äußeren Flügel entfernt werden, womit mehr Platz für den Kopf Ihres Kindes entsteht.

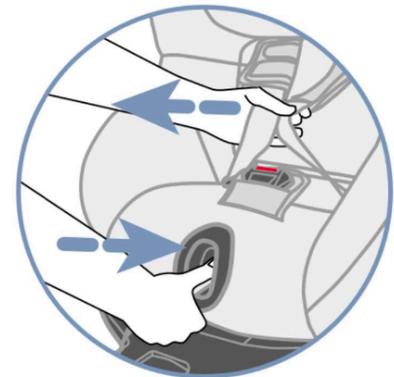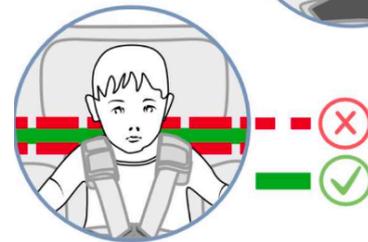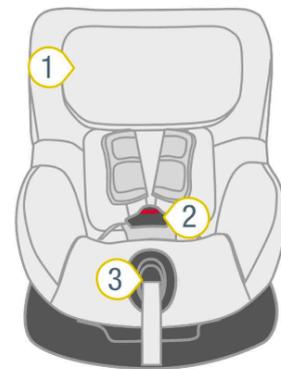


## 2. Sicherheitshinweise & Einbau im KFZ

### Hinweis, wenn Thoraxpelotten installiert sind:

Parallel zum Lösen der Verriegelung muss mit der anderen Hand die Kunststoff-Platte (1) unten in der Griffmulde leicht von der Klettverbindung gelöst werden.

Danach lässt sich das Rücken- und Kopfteil leicht bewegen. Ist die gewünschte Position erreicht, wird die Klettverbindung durch Loslassen der Kunststoffplatte automatisch wiederhergestellt.

Um eine durchgehende, komfortable Polsterung zu ermöglichen, wurde ein spezielles Rückenkissen (2) entwickelt. Der obere Teil ist mit der Kopfstütze verbunden und bewegt sich nach oben, während der untere Teil des Kissens bei Bedarf ausgeklappt und somit verlängert werden kann.

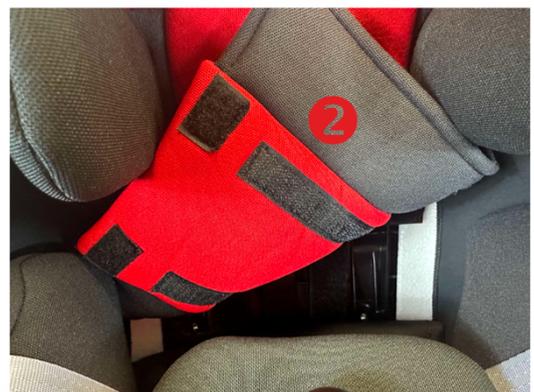

## 3. Handhabung des Grundmodells

### 3 Handhabung des Grundmodells

#### 3.1 Sitzwinkel einstellen

Die Sitzeinheit des HERO-NXT kann vorwärts- und rückwärtsgerichtet in jeweils sechs verschiedenen Neigungswinkeln verwendet werden.

Zum Verstellen des Sitzwinkels:

Ziehen Sie den Verstellgriff (1) nach vorne und drücken/schieben Sie die Sitzschale (2) in die gewünschte Position.

**ACHTUNG!** Die Sitzschale (2) muss in jeder Position fest mit einem „Klick“-Geräusch einrasten. Ziehen Sie an der Sitzschale (2), um das Einrasten zu überprüfen.

#### 3.2 Drehfunktion

Der HERO-NXT kann:




1. Von 61-105 cm (<18 kg) rückwärtsgerichtet verwendet werden.
2. Ab 15 Monate: 76-105 cm (<18 kg) vorwärtsgerichtet verwendet werden.

Zum Wechsel der Fahrtrichtung drücken Sie die Drehungstaste (2) und drehen Sie den Sitz in die gewünschte Richtung, bis er einrastet.

Bei vorwärtsgerichteter Verwendung, muss sich der Dämpfungsbügel in der senkrechten Position befinden.

**ACHTUNG!** Stellen Sie vor jeder Autofahrt sicher, dass der drehbare Teil des Kindersitzes ganz eingerastet ist, indem Sie versuchen, den Kindersitz in beide Richtungen zu drehen. Die 2 Indikatoren (3) sollen die Farbe schwarz anzeigen.



**ACHTUNG!** Verwenden Sie den Kindersitz nicht in vorwärtsgerichteter Stellung wenn Ihr Kind kleiner als 76 cm bzw. unter 15 Monate alt ist.

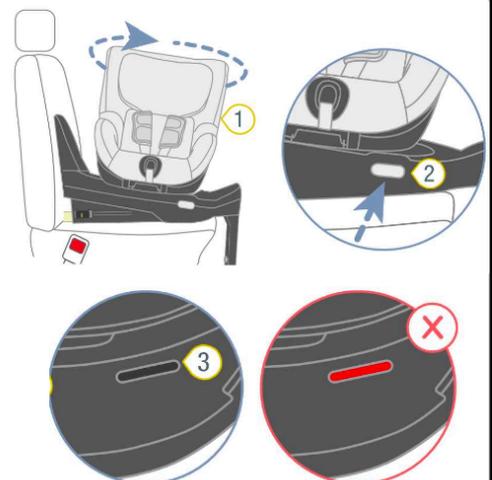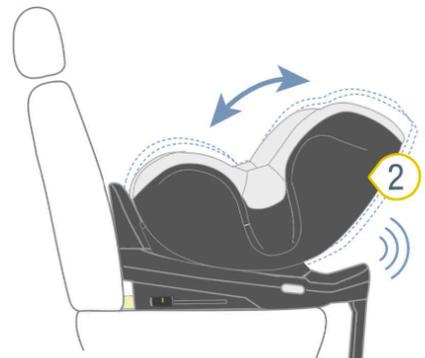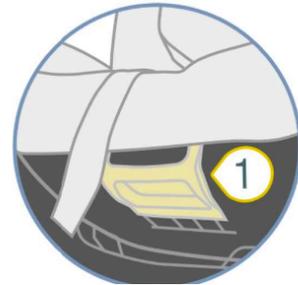

## 3. Handhabung des Grundmodells

### 3.3 Ausstiegsfunktion

1. Drücken Sie die Drehtaste (2) seitlich am Unterteil und drehen Sie gleichzeitig die Sitzeinheit (1) um 90° Richtung Fahrzeughür.
2. Nun können Sie Ihr Kind bequem hineinsetzen bzw. herausnehmen.
3. Sichern Sie Ihr Kind.
4. Drehen Sie die Sitzeinheit um 90° zurück, in die dem Alter des Kindes entsprechende Fahrtrichtung, bis diese mit einem „Klick“-Geräusch einrastet.

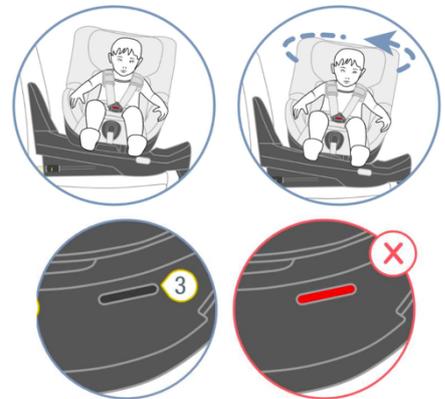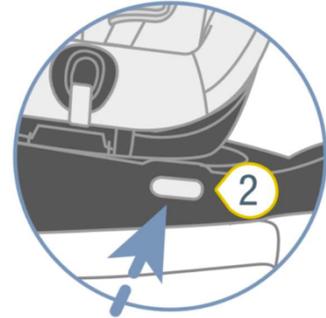

**Achtung:** Stellen Sie vor jeder Fahrt sicher, dass die drehbare Sitzeinheit vollständig eingerastet ist und beide Indikatoren die Farbe schwarz anzeigen.

### 3.4 Pflege & Wartung

Verwenden Sie ausschließlich Original HERNIK Sitzbezüge. Der Sitzbezug ist ein integraler Bestandteil des Kindersitzes und erfüllt wichtige Funktionen zur Sicherstellung der einwandfreien Funktion des Systems. Ersatz-Sitzbezüge erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

- Der Bezug kann abgenommen und mit einem milden Waschmittel im Feinwaschprogramm der Waschmaschine (30 ° C) gewaschen werden. Bitte beachten Sie die Hinweise auf dem Waschetikett des Bezugs.
- Der Polstereinsatz kann wie der Bezug gewaschen werden. Entfernen Sie alle Schaumteile aus Ober- und Unterteil vor dem Waschen. Diese dürfen nicht mitgewaschen werden.
- Die Schulterpolster können abgenommen und mit lauwarmer Seifenlauge gewaschen werden.
- Die Kunststoffteile und die Gurte können mit Seifenlauge gereinigt werden. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel (wie Lösemittel).

## 4. Verwendung des optionalen Zubehörs

### 4 Verwendung des optionalen Zubehörs

#### 4.1 Thoraxpelotten

Die Thoraxpelotten helfen Ihrem Kind, den Oberkörper zu stabilisieren wenn die Rumpfkontrolle eingeschränkt ist. Sie sind in der Tiefe mittels einer Verschraubung verstellbar.

Die Pelotten werden mittels einer Klett-Verbindung auf einer Montageplatte befestigt. Sie können mit leichter Kraft gelöst werden. Hat man eine optimale Position gefunden, sollten die Pelotten mit Druck in Richtung Rücken bei leichtem Drehen erneut fixiert werden.


Die Thoraxpelotten lassen sich in der Breite um 9 cm und in der Höhe um 11 cm verstellen.

Der Bezug ist abnehm- und waschbar.

#### 4.2 Abduktionskeil

Der Abduktionskeil hilft Ihrem Kind, die Beine in einer kontrollierten Position zu halten. Er ist nicht verstellbar, sondern auf einer stabilen Kunststoffplatte aufgebracht, die sich unter dem Bezug befindet.

Bei korrektem Sitz des Kissens ist der Drücker zum Lösen des 5-Punkt-Gurtes leicht erreichbar.

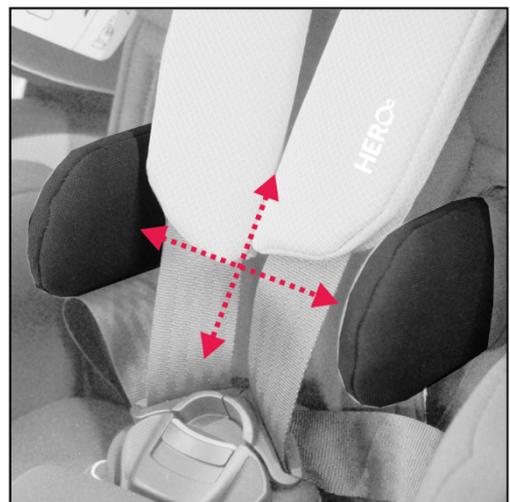

## 4. Verwendung des optionalen Zubehörs

### 4.3 Stütz- und Sicherheitspolster

Das Stütz- und Sicherheitspolster ermöglicht Ihrem Kind, die Arme abzulegen und so den Oberkörper zu stabilisieren.

Es ist auf der Unterseite mit Klettband ausgestattet, damit ein fester Sitz gewährleistet ist. Um es zu montieren, muss der Tisch vorne angehoben und in den Schlitz zwischen Rücken- und Sitzteil geklemmt werden. Danach bitte mit den Bändern am Rückenteil ankletten.

Der Bezug ist abnehm- und waschbar



### 4.4 Schutzmatte

1. Positionieren Sie die Schutzmatte auf dem Sitz Ihres Fahrzeugs, ohne die Aussparungen für den ISOFIX zu blockieren.
2. Stellen Sie den HERO-NXT mittig auf die Schutzmatte und sichern Sie ihn wie im Kapitel 2.3 erläutert.



## 5. Garantie

### 5 Garantie

HERNIK-Produkte entsprechen dem neuesten Stand der Technik und werden nach strengen Qualitätsnormen gefertigt. Sollten Sie ausnahmsweise Grund zur Beanstandung haben, so garantiert die HERNIK GmbH entsprechend den allgemeinen Geschäftsbedingungen, nach Lieferung

- 24 Monate auf alle festen Bauteile.
- 12 Monate auf alle beweglichen Teile.

Für Sonderanfertigungen kann keine Garantie übernommen werden, soweit diese sich nicht aus Fertigungs- oder Materialfehlern begründet. Hier wird Ersatz des zu beanstandenden Produktes für 12 Monate gewährt.

Die Ansprüche entsprechend dieser Garantiezusage setzen voraus, dass das Gerät ordnungsgemäß, entsprechend der Gebrauchsanweisung, verwendet wurde.

Bei konstruktiven Veränderungen, Nacharbeiten oder unsachgemäßen Instandsetzungen ohne vorherige Abstimmung mit der GmbH, entfällt der HERNIK Garantieanspruch.

Weitergehende Ansprüche, gleichgültig aus welchem Rechtsgrund, insbesondere auf Ersatz eines mittelbaren oder unmittelbaren Schadens, sind ausgeschlossen.

## 6. Kennzeichnung

### 6 Kennzeichnung

Auf der Rückseite finden Sie folgende Kennzeichnung:

	<b>HERNIK</b>	Gewerbering 8 83543 Rott am Inn Germany
<b>HERO-NXT</b>		<b>UDI</b> 4260675480118 4260675480125
<b>MD</b>	<b>CE</b>	
Date: 22.07.2025 SNR: HNXT-2025-XXXX		

	<b>HERNIK</b>
i-size Universal ISOFIX	
<b>HERO-NXT</b>	
61 - 105 cm max. 18 kg	
	
030241 S	
UN-Regulation No. 129/03	

## 7. Technische Daten

### 7 Technische Daten

	HERO-NXT	HERO-NXT
	MIT Polstereinlage	OHNE Polstereinlage
SITZBREITE (Becken)	21	25 cm
SITZBREITE (Knie)	28	28 cm
SITZTIEFE	25	28 cm
RÜCKENHÖHE	21 (24) - 34	27 - 35 cm
SCHEITELHÖHE	41 - 53	44 - 56 cm
BRUSTBREITE (Pelotten)	12 - 21 cm	
Gesamthöhe	66 - 73 cm (ohne Standfuß 60 cm)	
Gesamtbreite	50 cm	
Gesamttiefe	65 cm	
Sitzwinkel	bis 45°	
Rückenwinkel	90°	
Größe des Kindes	61 - 106 cm	
Gewicht	15 kg	
getestete Belastbarkeit	bis 18 kg	

## 8. Materialaufstellung

### 8 Materialaufstellung

Folgende Materialien kommen zum Einsatz:

- Kunststoff (Sitzereinheit und Verkleidung Unterkonstruktion)
- Stahl (Dreheinheit, Isofix und Stützfuß)
- Aluminium (Thoraxpelotten)
- Polyester (Gurtband)
- Schaumkaschierte Maschenware, anthrazit (Bezug)
- Schaumstoff Raumgewicht

# Notizen

# Notizen



**HERNIK GmbH**  
**Gewerbering 8**  
**83543 Rott am Inn • Germany**

 **+49 8039-9093930** •  **+49 8039-90939319**  
 **info@hernik.de** •  **www.hernik.de**