

# Gebrauchsanweisung

**IPAI** **LGIT**



# Inhaltsverzeichnis

<b>I. Allgemeine Informationen</b>	Seite
1.1 Vorwort	2
1.2 Zweckbestimmung & Indikation	2
1.3 Hinweise	2
1.4 Gewährleistungsbedingungen	3
1.5 Service und Reparaturen	3
1.6 Gebrauchsschulung	3
1.7 Konformitätserklärung	3
1.8 Freigabe/Kompatibilität hinsichtlich der Kombination mit handelsüblichen Autokindersitzen	3
1.9 Kontraindikationen	3
<b>II. Sicherheit &amp; Einbau im Kfz</b>	
2.1 Sicherheitshinweise	4
2.2 Lernen Sie den IPAI-LGT kennen	5
2.3 Einbau im Auto - mit ISOFIX	6-7
2.4 Einstellen der Kopfstütze	8
2.5 Anlegen der Gurte	9-10
<b>III. Handhabung und Funktion des Grundmodells</b>	
3.1 Einstellen des 5-Punkt-Gurts	11
3.2 Einstellen der Thoraxpelotten	11
3.3 Einstellen des Sitzwinkels	12
<b>IV. Verwendung des optionalen Zubehöres</b>	
4.2 Abduktionskeil	13-14
4.3 Sitztiefenadapter	15-16
4.4 Stütz- und Sicherheitspolster	17
<b>V. Garantie</b>	18
<b>VI. Kennzeichnung</b>	18
<b>VII. Pflege &amp; Wartung</b>	19
<b>VIII. Technische Daten</b>	20
<b>IX. Materialaufstellung</b>	20

# I. Allgemeine Informationen

## 1.1 Vorwort

Sie haben sich für den Autokindersitz „IPAI-LGT“ entschieden und bekommen hiermit ein hochwertiges Produkt aus unserem Haus. Wir möchten Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen danken. Damit Sie recht lange viel Freude mit diesem Produkt haben und es Ihnen hilft den Alltag zu erleichtern, überreichen wir Ihnen dieses Handbuch. Es zeigt Ihnen die korrekte und einfache Bedienung und die erforderliche Pflege und Wartung. Um Beschädigungen auf Grund von Bedienungsfehlern zu vermeiden und eine optimale Nutzung zu ermöglichen, lesen Sie bitte sorgfältig die nachfolgenden Anleitungen bzw. Hinweise. Ergeben sich darüber hinaus Fragen oder Probleme, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Wir wünschen Ihnen eine problemlose Nutzung und hoffen, dass unsere Produkte Ihren Erwartungen entsprechen.

Technische Änderungen zu der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Ausführung behalten wir uns vor.

Vor dem Einbau in Ihren PKW und der ersten Nutzung bitten wir Sie im Speziellen die Einbauhinweise auf den Seiten 4 - 6 zu lesen und zu beachten.

Bitte stellen Sie sicher, dass die Gebrauchsanweisung am Produkt bleibt und somit für jeden Benutzer zur Verfügung steht.

Ihre HERNIK GmbH

## 1.2 Zweckbestimmung & Indikation

Der IPAI-LGT wurde für den Transport von Kinder mit besonderen Bedürfnissen (GMFCS 3-5; Beispielsweise ausgeprägte muskuläre Hypotonie mit fehlender Kopf- und Rumpfkontrolle) in Kraftfahrzeugen entwickelt. Kinder mit schlechter Kopf- und Rumpfkontrolle (z.B. Cerebralparese, Muskeldystrophie, Hypotonie, motorische Entwicklungsstörung) können durch in der Grundausstattung enthaltenen 5-Punkt-Gurt, Polster und Thoraxpelotten in der richtigen Positionierung im Sitz unterstützt werden, wodurch ein sicherer Transport gewährleistet werden kann.

Durch wichtiges optionales Zubehör kann im Einzelnen auf spezielle Aspekte eingegangen werden, z. B. der Installation eines stabilen Abduktionskeiles, Thoraxpelotten, Sitztiefenadapter oder des Stütz- und Sicherheitspolsters. Mehr dazu im Kapitel IV.

## 1.3 Hinweise

Der IPAI-LGT Reha-Kinderautositz besteht aus zwei Modulen:

1. Ein handelsüblicher Kidfix-Kinderautositz der Fa. Römer-Britax (bitte beachten Sie dazu die Gebrauchsanweisung des Herstellers).
2. Anpassungsmodul mit Zubehör, das die Möglichkeit bietet, den Autositz entsprechend individueller Bedürfnisse auszustatten. Dafür beachten Sie bitte die Gebrauchsanweisung der HERNIK GmbH. “

## **I. Allgemeine Informationen**

### **1.4 Gewährleistungsbedingungen**

Eine Gewährleistung kann nur übernommen werden, wenn das Produkt unter den vorgegebenen Bedingungen und zu den vorgesehenen Zwecken eingesetzt wird. Für Schäden, die durch Bauteile und Ersatzteile verursacht werden, die nicht vom Hersteller freigegeben wurden, haftet der Hersteller nicht.

### **1.5 Service und Reparaturen**

Service und Reparaturen am IPAI-LGT dürfen nur vom Fachhandel durchgeführt werden. Wenden Sie sich bei Problemen an Ihren zuständigen Fachhändler. Bei Reparaturen erhalten Sie dort ausschließlich Original-Ersatzteile.

### **1.6 Gebrauchsschulung**

Der Autositz wird komplett montiert geliefert. Bei Auslieferung weist der Fachhändler den Benutzer unter Zuhilfenahme der Gebrauchsanweisung in den Gebrauch des Hilfsmittels ein. Der Fachhändler sollte gemeinsam mit dem Benutzer den Autositz in den PKW einbauen und den korrekten Sitz des Isofix-Adapters sicherstellen. Wenn Sie den Autositz einbauen, fassen Sie ihn am besten mit der einen Hand vorne mittig, und mit der anderen seitlich oben an. Um eine optimale Sitzposition zu erreichen, ist es notwendig den Autositz individuell auf die Gegebenheiten des Kindes einzustellen. Dies sollte grundsätzlich vom Fachhändler erfolgen.

### **1.7. Konformitätserklärung**

Die HERNIK GmbH erklärt in alleiniger Verantwortung, dass der Autokindersitz „IPAI-LGT“ mit den grundlegenden Anforderungen (Anhang 1 der Richtlinie 93/42 EWG) übereinstimmt. Das Produkt ist mit dem CE-Kennzeichen nach der oben genannten Richtlinie gekennzeichnet.

### **1.8 Freigabe/Kompatibilität hinsichtlich der Kombination mit handelsüblichen Autokindersitzen**

Der IPAI-LGT ist ein zugelassener Autokindersitz inkl. aller Zubehörteile nach ECE R129/03. Einzelteile und Zubehörteile des IPAI-LGT sind nicht für die Kombination mit anderen handelsüblichen Autokindersitzen freigegeben. Durch eine Änderung könnte die Zulassung des IPAI-LGT wie auch die des handelsüblichen Autokindersitz erlöschen.

### **1.9 Kontraindikationen**

Es sind keine Kontraindikationen bekannt.

## II. Sicherheit & Einbau im Kfz

### 2.1 Sicherheitshinweise

- Vor der Benutzung müssen die Komponenten auf einwandfreie Funktion und Zustand überprüft werden.
- Die Gebrauchsanweisung muss immer mit dem Autokindersitz mitgeführt werden.
- Die Sicherheit Ihres Kindes ist nur dann gewährleistet, wenn der Sitz richtig eingebaut und das Kind exakt fixiert ist.

Bitte prüfen Sie:





- A) ob der Beckengurt in den linken und rechten dunkelgrünen Gurtführungen sitzt.
- B) ob der Diagonalgurt auf beiden Seiten in der dunkelgrünen Gurtführung sitzt.
- C) ob der Diagonalgurt in der hellgrünen Gurtführung sitzt.
- D) ob der Sicherheitsgurt straff gezogen und nicht verdreht ist.
- E) ob das Kind richtig angeschnallt ist.
- F) ob keine Textilien eingeklemmt sind.

- Achten Sie darauf, dass sich keine festen Gegenstände wie Stifte, Gurtschlösser usw. zwischen Kind und Gurt befinden. Dies könnte im Falle eines Unfalls zu Verletzungen führen.
- Erklären Sie Ihrem Kind, wie wichtig es ist, gut angeschnallt zu sein und dass der Verlauf der Gurte nicht verändert werden darf. Es sollte weder an den Gurten ziehen, noch die Gurtschlösser öffnen.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Autositz vor, sonst gefährden Sie die Sicherheit Ihres Kindes..
- Der Autositz darf nicht durch bewegliche Teile im Auto oder durch Türen beschädigt werden.
- Lassen Sie Ihr Kind niemals allein im Kindersitz sitzen.
- Informieren Sie Ihre Mitfahrer, wie Ihr Kind nach einem Unfall aus dem Sitz genommen werden kann.
- Nach einem Unfall muss der gesamte Kinderautositz erneuert werden.

## II. Sicherheit & Einbau im Kfz

### 2.2 Lernen Sie den IPAI-LGT kennen

- 01 Diagonal belt
- 02 Lap belt
- 03 Seat belt lock
- 04 Insertion aid
- 05 ISOFIX installation bracket
- 06 Green area
- 07 Red release button
- 08 Locking button
- 09 ISOFIX locking arms
- 10 Adjustment button
- 11 ISOFIX adjustment button
- 12 Dark-green belt guide
- 13 Light-green belt holder
- 14 Headrest

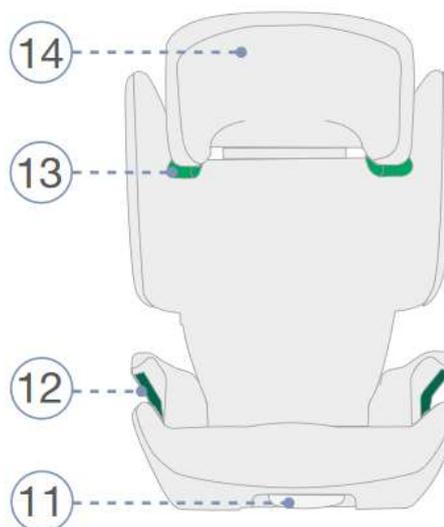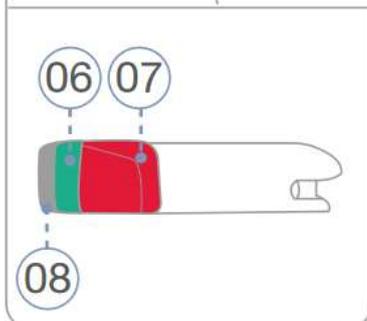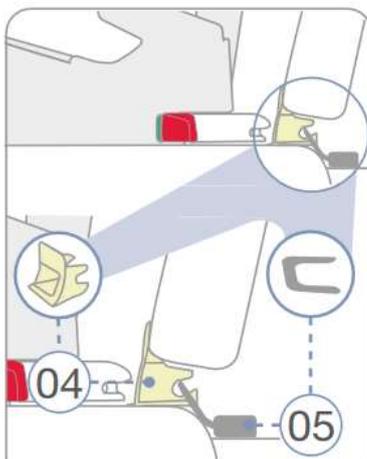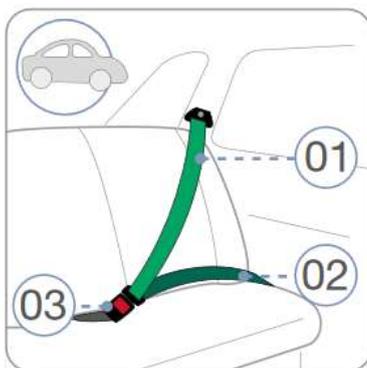

## II. Sicherheit & Einbau im Kfz

### 2.3 Einbau im Auto - mit ISOFIX

Der IPAI-LGT wird mit den ISOFIX-Verriegelungsarmen (09) in Ihrem Auto fest installiert. Ihr Kind wird dann mit dem 3-Punkt-Gurt des Fahrzeugs angeschnallt.




1. Wenn Ihr Fahrzeug nicht serienmäßig mit ISOFIX-Einhängehilfen ausgestattet ist, klemmen Sie die beiden Einhängehilfen (04), die im Lieferumfang des Sitzes enthalten sind, mit der Aussparung nach oben auf die beiden ISOFIX-Einbauhalterungen (05) Ihres Fahrzeugs.

**TIPP!** Die ISOFIX-Befestigungspunkte befinden sich zwischen dem Sitz und der Rückenlehne des Fahrzeugsitzes.

2. Bringen Sie die Kopfstütze des Fahrzeugsitzes in ihre oberste Position.
3. Halten Sie die ISOFIX-Einstelltaste (11) gedrückt und schieben Sie die ISOFIX-Verriegelungsarme (09) ganz heraus.


**Hinweis!** Wenn Ihr Sitz mit einem Sitztiefenadapter ausgestattet ist, verlängern Sie den Adapter, um den Einstellknopf zu erreichen (mehr auf Seite 15)

4. Drücken Sie den Verriegelungsknopf (08) und den roten Entriegelungsknopf (07) auf beiden Seiten des Sitzes gegeneinander. Dadurch wird sichergestellt, dass beide Haken an den ISOFIX-Verriegelungsarmen (09) geöffnet und einsatzbereit sind.
5. Setzen Sie den Kindersitz in Fahrtrichtung auf einen dafür zugelassenen Fahrzeugsitz. Achten Sie darauf, dass die Rückenlehne flach an der Rückenlehne des Fahrzeugsitzes anliegt.

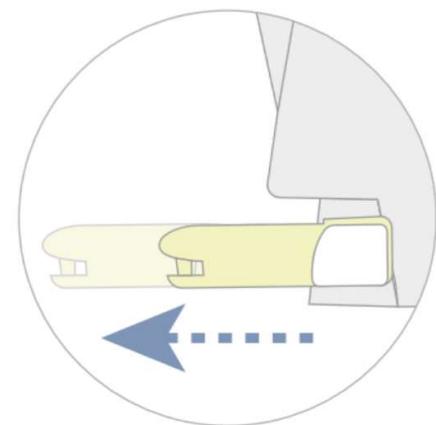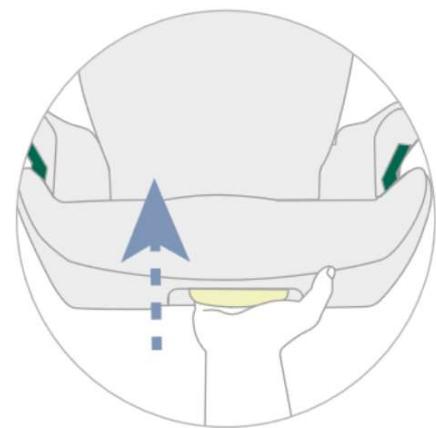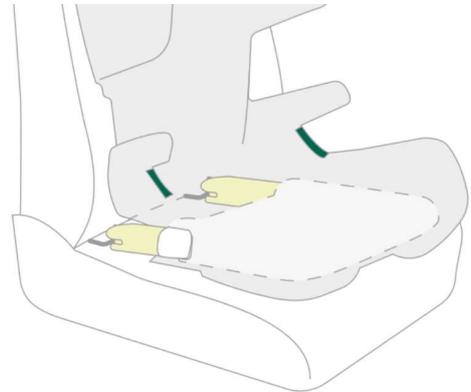


## II. Sicherheit & Einbau im Kfz

7. Schieben Sie beide ISOFIX-Rastarme (09) in die Einführhilfen (04), bis die ISOFIX-Rastarme (09) auf beiden Seiten mit einem "Klick"-Geräusch einrasten.

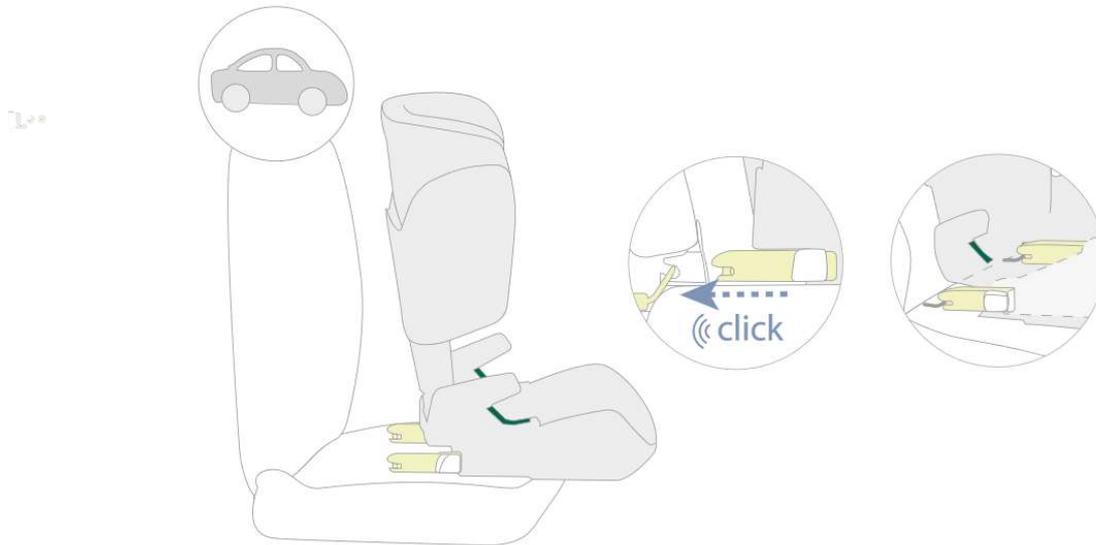

8. Halten Sie die ISOFIX-Einstelltaste (11) gedrückt und schieben Sie den Kindersitz so weit wie möglich zurück.
9. Wackeln Sie am Kindersitz, um sicherzustellen, dass er sicher befestigt ist, und prüfen Sie, ob der grüne Bereich (06) an beiden Verriegelungsarmen sichtbar ist.



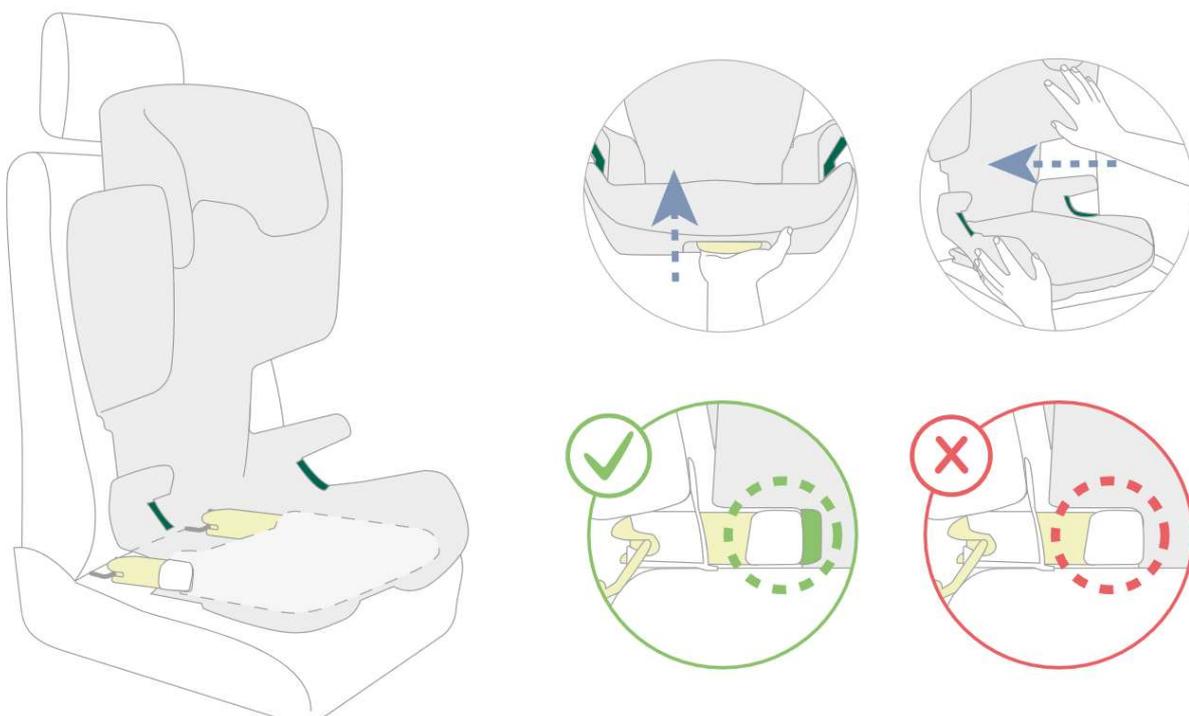


## II. Sicherheit & Einbau im Kfz

### 2.4 Einstellen der Kopfstütze

Eine richtig eingestellte Kopfstütze (14) sorgt für einen optimalen Verlauf des Fahrzeugdiagonalgurts (1) und bietet Ihrem Kind maximalen Schutz. Die Kopfstütze (14) muss so eingestellt werden, dass zwischen den Schultern Ihres Kindes und der Kopfstütze (14) noch Platz für zwei Finger ist.

1. Greifen Sie den Verstellknopf (10) an der Rückseite der Kopfstütze (14) und ziehen Sie ihn nach oben. Jetzt ist die Kopfstütze entriegelt.
2. Nun können Sie die entriegelte Kopfstütze (14) auf die gewünschte Höhe schieben. Sobald Sie den Verstellgriff (10) loslassen, rastet die Kopfstütze (14) ein.
3. Setzen Sie den Kindersitz auf den Fahrzeugsitz.
4. Lassen Sie Ihr Kind auf dem Kindersitz Platz nehmen und überprüfen Sie die Höhe. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis sich die Kopfstütze (14) in der richtigen Höhe befindet.

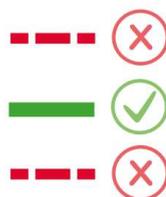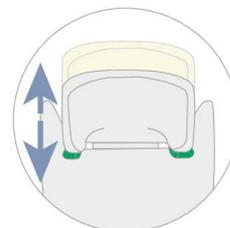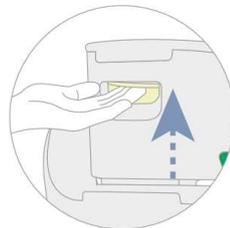



## II. Sicherheit & Einbau im Kfz

### 2.5 Anlegen der Gurte


1. Ziehen Sie den Fahrzeuggurt (1) heraus und führen Sie ihn vor Ihrem Kind durch den hellgrünen Gurthalter (13) zum Gurtschloss (3).

**ACHTUNG!** Achten Sie darauf, dass der Fahrzeuggurt nicht verdreht ist, da sonst die volle Schutzwirkung des Rückhaltesystems nicht gegeben ist.

2. Legen Sie den Diagonalgurt (1) und den Beckengurt (2) in die dunkelgrüne Gurtführung (12) des Autositzes.

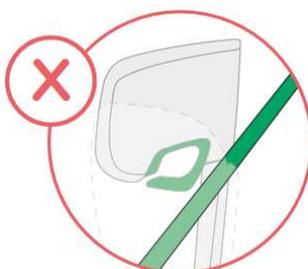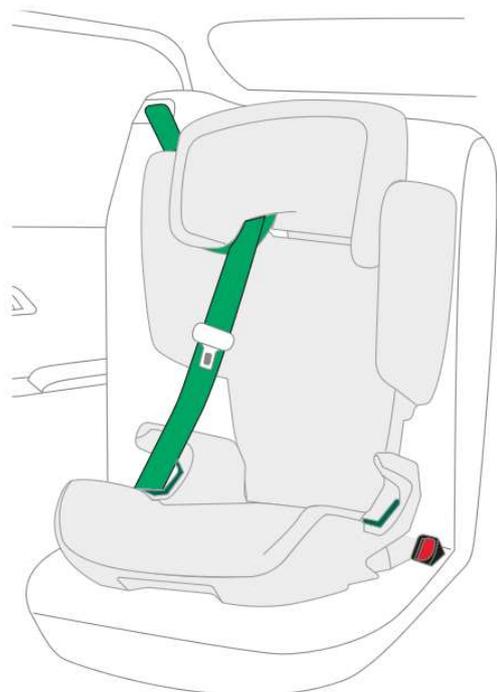

## II. Sicherheit & Einbau im Kfz

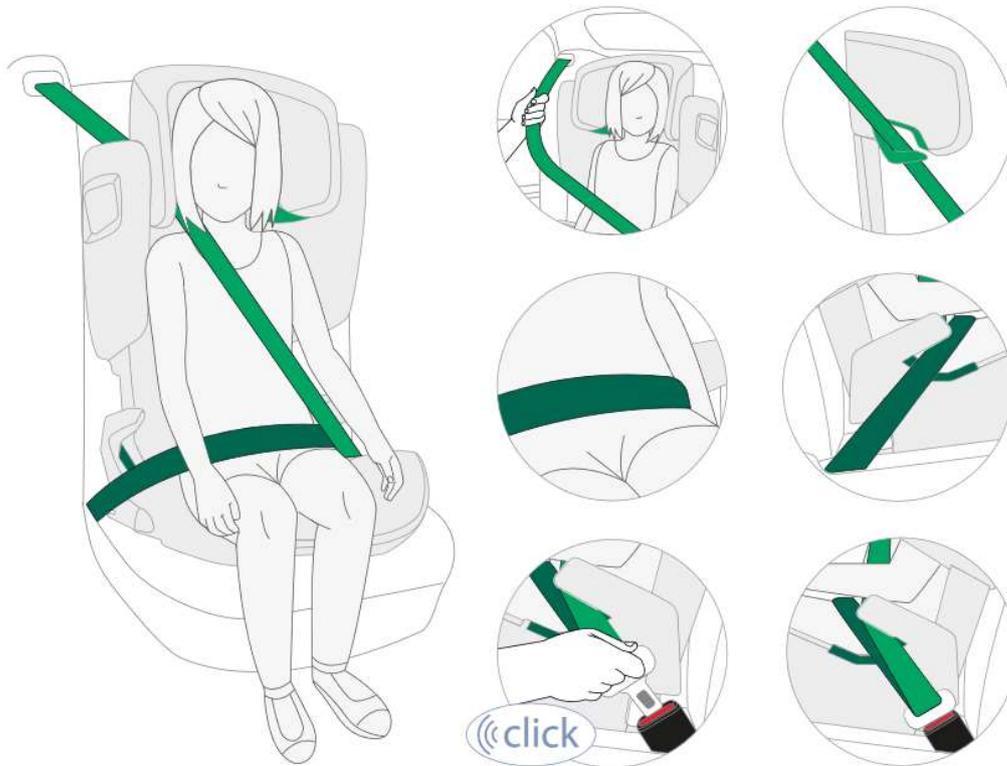

3. Lassen Sie das Gurtschloss mit einem KLICK in das Schloss (3) des Fahrzeugs einrasten.

**ACHTUNG!** Der Beckengurt (2) muss auf beiden Seiten so tief wie möglich über die Hüften Ihres Kindes verlaufen.

**TIPP!** Wenn die Rückenlehne den Gurthalter (13) verdeckt, können Sie die Kopfstütze (14) nach oben verstellen. Der Diagonalgurt (1) lässt sich nun leicht einführen. Stellen Sie nun die Kopfstütze (14) wieder auf die richtige Höhe. Achten Sie darauf, dass der Knopf am Gurthalter (13) ganz geschlossen ist.

5. Achten Sie darauf, dass der Diagonalgurt (1) über das Schlüsselbein Ihres Kindes und nicht gegen den Hals verläuft.

**TIPP!** Sie können auch die Höhe der Kopfstütze (14) im Fahrzeug einstellen.

**ACHTUNG!** Der Diagonalgurt (1) muss diagonal nach hinten verlaufen. Sie können den Verlauf des Gurtes mit dem verstellbaren Gurtumlenker Ihres Fahrzeugs regulieren.

**VORSICHT!** Der Diagonalgurt (1) darf niemals zum Gurtumlenker am Fahrzeug führen. Ist dies der Fall, dann verwenden Sie den Kindersitz nur auf dem Rücksitz.

## III. Handhabung und Funktion des Grundmodells

### 3.1 Einstellen des 5-Punkt-Gurts

Verlängern Sie zunächst die Gurte, indem Sie gleichzeitig den grauen Knopf an den Gurtverstellern **1** drücken und an den Gurten ziehen. Legen Sie nun die Gurte über die Schultern des Kindes.

Stecken Sie dann die beiden Metallzungen in das Gurtschloss **3** bis sie einrasten. Ziehen Sie dann das Gurtsystem durch Ziehen am linken und rechten Ende des Gurtes **2** fest, bis eine stabile Sitzposition gefunden ist.

Wenn Sie das Kind aus dem Kindersitz nehmen wollen, lösen Sie zunächst den Gurt, indem Sie den grauen Knopf an den Gurtverstellern **1** drücken und an den Gurten ziehen. Dann kann das Gurtschloss **3** durch einen kräftigen Druck auf den roten runden Knopf geöffnet werden.



### 3.2 Einstellung der Thoraxpelotten

Der IPAI-LGT ist standardmäßig mit einem Paar anatomisch geformter Thoraxpelotten **4** ausgestattet. Diese können Kinder mit schlechter Oberkörperkontrolle in ihrer Haltung unterstützen.

Lösen Sie die Thoraxpelotten durch leichtes Ziehen, bis die Klettverbindung gelöst ist. Da die Innenseite der seitlichen Rückenführung mit Klettelementen abgedeckt wurde, kann nun eine geeignete Position völlig frei gefunden werden, indem sie wieder mit Klettverschluss fixiert wird.



## III. Handhabung und Funktion des Grundmodells

### 3.3 Einstellen des Sitzwinkels

Wurde der IPAI-LGT mittels ISOFIX im Fahrzeug eingebaut, kann die Sitzeinheit durch Herausfahren der ISOFIX-Rastarme **2** nach vorne gezogen werden. Da die Rücken- und Sitzelemente mit einem beweglichen Gelenk ausgestattet sind, wird dadurch der Rückenwinkel geöffnet. Ihr Kind hat sofort eine entspannte Position eingenommen.

Drücken Sie dazu den grauen Verstellknopf **1** an der Vorderseite des Sitzes und ziehen Sie die Sitzeinheit nach vorne. Der Rückenwinkel öffnet sich. Für einen kleineren Winkel können beliebige Zwischenpositionen gewählt werden.

Möchte Ihr Kind später eine aktivere Sitzposition einnehmen, z.B. wenn es geschlafen hat, können Sie die Sitzeinheit auf die gleiche Weise nach hinten schieben, wodurch der Rückenwinkel steiler wird.



## IV. Verwendung des optionalen Zubehörs

### 4.2 Abduktionskeil

#### Installationsanweisungen:

1. Stellen Sie das IPAI-LGT auf eine stabile Arbeitsfläche.
2. Nehmen Sie nun die Montageplatte **1**, die vier Klettstreifen **2**, die vier Klettstreifen und den Abduktionsblock **3** aus der Verpackung.
3. Entfernen Sie zunächst die weiße Schutzfolie von den vier Klettbändern. Achten Sie darauf, dass die Unterseite des Autositzes sauber ist - sie muss frei von Staub und Feuchtigkeit sein. Bringen Sie nun die Klettstreifen an der Unterseite des Sitzteils an - siehe Markierung in Abbildung 1.
4. Hängen Sie nun die Montageplatte ein (siehe Abbildung 2). Das U-Profil **4** muss auf die Kunststoffkante **5** aufgesetzt werden. Die Montageplatte muss flach auf die Unterseite des Sitzteils aufgesetzt werden, wobei die Klettstreifen eine Verbindung bilden.
5. Drehen Sie den IPAI-LGT wieder um. Nun kann der Abduktionsblock **3** in die Halterung eingesetzt und mit dem Kipphebel fixiert werden.

**TIPP!** Wenn der Abduktionsblock **3** nicht verwendet wird, sollte die Montageplatte entfernt werden. Es besteht sonst Verletzungsgefahr durch hervorstehende Metallteile.



Abb. 1



Abb. 3



Abb. 2

## IV. Verwendung des optionalen Zubehörs

### Einstellen des Abduktionsblocks

Die Tiefe des Abduktionsblocks kann eingestellt werden.

- 1) Lösen Sie die 2 Schrauben ❶ an der Unterseite des Sitzes mit einem Inbusschlüssel (siehe Abbildung 1).
- 2) Der Bügel ❷ kann nun in die gewünschte Position verschoben und fixiert werden.
- 3) Setzen Sie den Abduktionsblock ❸ in die Halterung und fixieren Sie ihn mit dem Kipphebel ❹.



Abb. 1



## IV. Verwendung des optionalen Zubehörs

### 4.3 Sitztiefenadapter

1. Stellen Sie das IPAI-LGT auf eine stabile Arbeitsfläche.
2. Nehmen Sie nun die Montageplatte **1**, die vier Klettbänder **2** und den Sitztiefenadapter **3** aus der Verpackung.
3. Entfernen Sie zunächst die weiße Schutzfolie von den vier Klettbändern. Achten Sie darauf, dass die Unterseite des Autositzes sauber ist - sie muss frei von Staub und Feuchtigkeit sein. Bringen Sie nun die Klettstreifen an der Unterseite des Sitzteils an - siehe Markierung in Abbildung 1.
4. Hängen Sie nun die Montageplatte ein (siehe Abbildung 2). Das U-Profil **4** muss auf die Kunststoffkante **5** aufgesetzt werden. Die Montageplatte muss flach auf die Unterseite des Sitzteils aufgesetzt werden, wobei die Klettstreifen eine Verbindung bilden.
5. Drehen Sie das IPAI-LGT wieder um. Nun kann der Seetiefenadapter **3** in die Halterung eingesetzt werden (siehe Abbildung 3).



Abb. 1

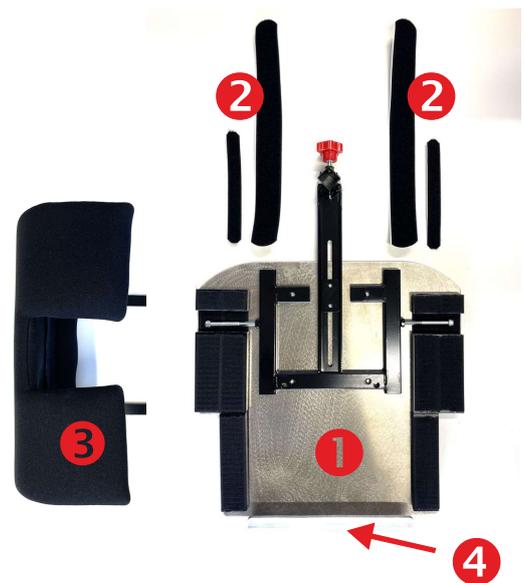


Abb. 3



Abb. 2

## IV. Verwendung des optionalen Zubehörs

### Einstellen des Sitztiefenadapters:

Der Sitztiefenadapter kann auf die gewünschte Sitztiefe eingestellt werden.

- 1) Lösen Sie die 2 Schrauben **1** auf beiden Seiten des Autositzes mit einem Inbusschlüssel.
- 2) Der Sitztiefenadapter **3** kann nun in die gewünschte Position gebracht werden.
- 3) Ziehen Sie die 2 Schrauben **1** wieder fest.



## IV. Verwendung des optionalen Zubehörs

### 4.4 Stütz- und Sicherheitspolster

#### Installationsanweisung:

1. Lassen Sie sich bei der Übergabe des Autositzes den Einbau der Sicherheitsschale zeigen.
2. Setzen Sie das Stütz- und Sicherheitspolster **1** auf den Autositz, nachdem Sie Ihr Kind hineingesetzt und angeschnallt haben.
3. Befestigen Sie das Polster mit den mitgelieferten Klettbindern **2** an der Rückseite des Autositzes.
4. Die Arme Ihres Kindes sollten auf dem Tisch ruhen, was zu einer aufrechten Sitzposition führt. Dies stützt den Oberkörper.
5. Achten Sie darauf, dass Sie die Gefahr von Spielzeug, das sich auf dem Polster befinden könnte, vermeiden. Verwenden Sie keine harten, festen oder scharfkantigen Gegenstände.



## V. Garantie

HERNIK-Produkte entsprechen dem neuesten Stand der Technik und werden nach strengen Qualitätsnormen gefertigt. Sollten Sie ausnahmsweise Grund zur Beanstandung haben, so garantiert die HERNIK GmbH entsprechend den allgemeinen Geschäftsbedingungen, nach Lieferung

- 24 Monate auf alle festen Bauteile
- 12 Monate auf alle beweglichen Teile

Für Sonderanfertigungen kann keine Garantie übernommen werden, soweit diese sich nicht aus Fertigungs- oder Materialfehlern begründet. Hier wird Ersatz des zu beanstandenden Produktes für 12 Monate gewährt.

Die Ansprüche entsprechend dieser Garantiezusage setzen voraus, dass das Gerät ordnungsgemäß, entsprechend der Gebrauchsanweisung, verwendet wurde.

Bei konstruktiven Veränderungen, Nacharbeiten oder unsachgemäßen Instandsetzungen ohne vorherige Abstimmung mit der HERNIK GmbH entfällt der Garantieanspruch.

Weitergehende Ansprüche, gleichgültig aus welchem Rechtsgrund, insbesondere auf Ersatz eines mittelbaren oder unmittelbaren Schadens, sind ausgeschlossen.

## VI. Kennzeichnung

 **Hernik GmbH**

Auf der Gröb 2 c • 83064 Raubling

  **IPAI-LGT (36 kg)**  
**SNR: IPAI-LGT-2024-1016**

**Restraint device for special requirements "S" (EN)**

Please read the user manual  
before use!

## VII. Pflege & Wartung

### Allgemeine Pflege- und Wartungshinweise

Zur Sicherstellung der vollen Schutzwirkung des Kindersitzes:

- Im Fall eines Unfalls mit einer Aufprallgeschwindigkeit über 10 km/h kann der Kindersitz unter Umständen beschädigt werden, ohne dass der Schaden dann unmittelbar offensichtlich ist. In diesem Fall muss der Kindersitz ersetzt werden. Bitte entsorgen Sie ihn ordnungsgemäß.
- Prüfen Sie alle wichtigen Teile regelmäßig auf Beschädigungen. Stellen Sie sicher, dass insbesondere alle mechanischen Bauteile einwandfrei funktionieren.
- Um Beschädigungen zu vermeiden, achten Sie darauf, dass der Kindersitz nicht zwischen harten Gegenständen (Autotür, Sitzschienen usw.) eingeklemmt wird.
- Lassen Sie den Kindersitz grundsätzlich überprüfen, wenn er beschädigt wurde (z.B. wenn er zu Boden gefallen ist).
- Schmieren oder ölen Sie niemals Teile des Kindersitzes.
- Damit er Ihr Kind richtig schützen kann, ist es zwingend erforderlich, dass Sie den IPAI-LGT genau wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben einbauen und verwenden.

## VIII. Technische Daten

	IPAI-LGT
SITZBREITE (Becken)	31 cm
SITZBREITE (Knie)	42 cm
SITZTIEFE	32 cm
RÜCKENHÖHE	41- 54 cm
SCHEITELHÖHE	59 - 74 cm
Höhe Thoraxpelotten	20 - 33 cm
Abstand Thoraxpelotten	14 - 28 cm
Rückenwinkel	85° - 120°
Gesamthöhe	68 - 88 cm
Gesamtbreite	44 cm
Gesamttiefe	42 cm
Gewicht	7,0 kg
getestete Belastbarkeit	36 kg

### Standard -Ausstattung:

- 5-Punkt-Gurt mit Polsterung, höhenverstellbar
- ISOFIX-Adapter, verstellbar
- Kopfstütze, höhenverstellbar
- Seitenaufprallschutz SICT
- dreiteiliger, abnehmbarer und atmungsaktiver Bezug (waschbar bei 30 °C)
- Seitenpelotten, höhenverstellbar

## IX. Materialaufstellung

### Folgende Materialien kommen zum Einsatz:

- Kunststoff (Sitzereinheit und Verkleidung Unterkonstruktion)
- Stahl (Zubehörteile)
- Aluminium (Thoraxpelotten)
- Polyester (Gurtband)
- Schaumkaschierte Maschenware, anthrazit (Bezug)
- Schaumstoff Raumgewicht



HERNIK GmbH  
Auf der Gröb 2c  
83064 Raubling • Germany

 +49 8035-9580448 •  +49 8035-9580446  
 info@hernik.de •  www.hernik.de