

návod k použití

HERO **NXT**



Obsah

1	OBECNÉ INFORMACE	4
1.1	Předmluva	4
1.2	Účel a indikace	5
1.3	Upozornění	5
1.4	Prohlášení o shodě	5
1.5	Záruční podmínky	5
1.6	Servis a opravy	6
1.7	Školení k používání	6
2	BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A MONTÁŽ DO VOZIDLA	7
2.1	Bezpečnostní pokyny	7
2.2	Použití ve vozidle	8
2.3	Montáž do automobilu	9
2.4	Zapínání pásů	11
2.5	Nastavení opěrky hlavy	12
3	OBSLUHA ZÁKLADNÍHO MODELU	14
3.1	Nastavení úhlu sedadla	14
3.	Otočná funkce	14
3.3	Funkce vystupování	15
3.4	Péče a údržba	15
4	POUŽITÍ VOLITELNÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ	16
4.1	Hrudní polštářky	16
4.2	Abdukční klín	16

Obsah

4.	Opěrné a bezpečnostní polštáře	17
4.4	Ochranná podložka	17
5	ZÁRUKA	18
6	OZNAČENÍ	19
7	TECHNICKÉ ÚDAJE	20
8	SEZNAM MATERIÁLŮ	21

1.Obecné informace

1 Obecné informace

1.1 Předmluva

Rozhodli jste se pro dětskou autosedačku „HERO-NXT“ a tím jste získali vysoce kvalitní produkt z naší firmy. Děkujeme vám za projevenou důvěru.

Aby vám tento produkt dlouho sloužil a usnadňoval vám každodenní život, předáváme vám tuto příručku. Najdete v ní správný a jednoduchý návod k obsluze a potřebnou péči a údržbu. Abyste předešli poškození v důsledku nesprávného používání a umožnili optimální využití, přečtěte si prosím pozorně následující pokyny a upozornění. Pokud máte další otázky nebo problémy, obraťte se prosím na svého prodejce. Přejeme vám bezproblémové používání a doufáme, že naše produkty splní vaše očekávání.

Vyhrazujeme si právo na technické změny oproti provedení popsanému v tomto návodu k obsluze.

Před instalací do vašeho automobilu a prvním použitím si prosím přečtěte a dodržujte zejména pokyny k instalaci na stranách 9–13.

Ujistěte se, že návod k použití zůstane u produktu a je tak k dispozici pro každého uživatele.

Vaše společnost HERNIK GmbH

1. Obecné informace

1.2 Účel a indikace

HERO-NXT byl vyvinut pro přepravu dětí se speciálními potřebami v motorových vozidlech. Děti se špatnou kontrolou hlavy a trupu (např. dětská mozková obrna, svalová dystrofie, hypotonie) mohou být podpořeny v jejich držení pomocí individuálně polohovatelných hrudních polštářků a speciálních polštářů, čímž je zajištěna bezpečná přeprava.

Díky důležitému volitelnému příslušenství lze řešit konkrétní speciální aspekty, např. sklon sedadla, instalaci stabilního abdukčního klínu nebo hrudních polštářků. Více informací naleznete v kapitole 4.

1.3 Poznámky

Rehabilitační dětská autosedačka HERO-NXT se skládá ze dvou modulů:

1. Běžně dostupná dětská autosedačka DUALFIX od společnosti Römer-Britax (viz návod k použití od výrobce).
2. Adaptační modul s příslušenstvím, který umožňuje vybavit autosedačku podle individuálních potřeb. V tomto případě dodržujte návod k použití společnosti HERNIK GmbH.

1.4 Prohlášení o shodě

Společnost HERNIK GmbH na vlastní odpovědnost prohlašuje, že dětská autosedačka „HERO-NXT“ splňuje základní požadavky (příloha 1 směrnice 93/42 EHS). Výrobek je označen značkou CE podle výše uvedené směrnice.

1.5 Záruční podmínky

Záruka může být poskytnuta pouze v případě, že je výrobek používán za stanovených podmínek a k určeným účelům. Výrobce neodpovídá za škody způsobené součástmi a náhradními díly, které nebyly schváleny výrobcem.

1.Obecné informace

1.6 Servis a opravy

Servis a opravy produktu „HERO-NXT“ smí provádět pouze specializovaní prodejci. V případě problémů se obraťte na svého specializovaného prodejce. Při opravách vám budou poskytnuty výhradně originální náhradní díly.

1.7 Školení o používání

Autosedačka se dodává kompletně smontovaná. Při dodání prodejce za pomoci návodu k použití seznámí uživatele s používáním pomůcky. Prodejce by měl společně s uživatelem autosedačku nainstalovat do automobilu a zajistit správné usazení adaptéru Isofix.

Při instalaci autosedačky ji uchopte jednou rukou uprostřed přední části a druhou rukou na horní straně po straně. Pro dosažení optimální polohy sezení je nutné autosedačku individuálně nastavit podle potřeb dítěte. To by mělo být provedeno odborným prodejcem.

2. Bezpečnostní pokyny & Montáž v automobilu

2 Bezpečnostní pokyny & Montáž v automobilu

2.1 Bezpečnostní pokyny

- Sedačku „HERO-NXT“ je nutné vždy upevnit ve vozidle podle montážního návodu, i když se nepoužívá. Neupevněná sedačka může při nouzovém brzdění zranit ostatní cestující.
- „HERO-NXT“ musí být v automobilu upevněn tak, aby nebyl sevřen předními sedadly nebo dveřmi vozidla.
- Pásky nesmí být zkroucené ani zaklíněné a musí být napnuté.
- Po nehodě nesmí být autosedačka znovu použita!
- Vždy připoutejte své dítě.
- Před každou jízdou zkontrolujte, zda jsou správně zajištěny jak spona pásu, tak ISOFIX a zda je podstavec správně usazen.


2. Bezpečnostní pokyny & Montáž v automobilu

2.2 Použití ve vozidle

Dodržujte pokyny pro použití dětských zádržných systémů uvedené v návodu k obsluze vašeho vozidla. Při používání dodržujte případná omezení související s airbagy. Informace o sedadlech vozidla, která jsou podle R16 schválena pro použití dětských zádržných systémů ECE, najdete v návodu k obsluze vašeho vozidla.

Možnosti použití HERO-NXT (i-SIZE)*

in Fahrtrichtung	Ja ¹⁾
entgegen der Fahrtrichtung	Ja ¹⁾
Mit 2-Punkt- oder 3-Punkt-Sicherheitsgurt	Nein
auf Sitzen mit: ISOFIX-Befestigungen	Ja ²⁾

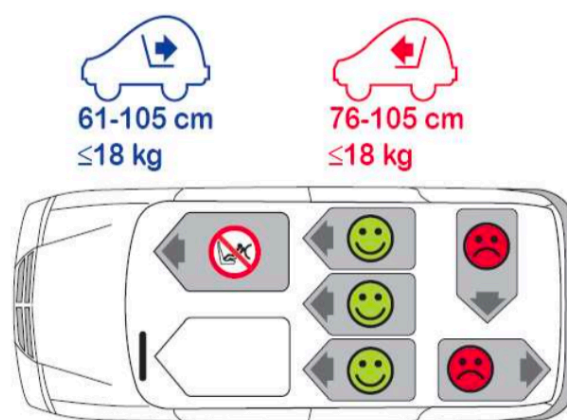

*(Dodržujte předpisy platné ve vaší zemi)

- Ve směru jízdy 76–105 cm / proti směru jízdy 61–105 cm
- Ve směru jízdy 76–105 cm: Pokud je ve vozidle airbag spolujezdce: Posuňte sedadlo spolujezdce co nejvíce dozadu a postupujte podle pokynů v návodu k obsluze vašeho vozidla.
- Proti směru jízdy 61–105 cm: Nepoužívejte na sedadlech spolujezdce s aktivním předním airbagem!
- U dětí od 3 let zajistěte dostatečný prostor nad hlavou (cca 1 šířka dlaně od stropu) a před sedadlem spolujezdce (min. 76 cm ve směru jízdy).

2. Bezpečnostní pokyny & Montáž v automobilu

2.3 Instalace do automobilu

Pokud vaše vozidlo není standardně vybaveno úchyty ISOFIX, připevněte dva úchyty (2), které jsou součástí dodávky sedačky, výřezem směřujícím nahoru na dva úchyty ISOFIX (1) ve vašem vozidle.

TIP! Upevňovací body ISOFIX se nacházejí mezi sedákem a opěradlem sedadla vozidla.

2.3.1 Příprava ISOFIX

Stiskněte pojistné tlačítko (4) a uvolňovací tlačítko (2) proti sobě a vysuňte aretační rameno ISOFIX (1) na maximum. Vysuňte také druhé aretační rameno na maximum.

2.3.2 Upevnění ISOFIX

Spojte aretační rameno ISOFIX (1) s úchytnými rameny ISOFIX sedadla vozidla. Obě aretační ramena ISOFIX (1) zapadnou s slyšitelným cvaknutím a zobrazí se zelená barva.

POZOR! Nebezpečí zranění nezajištěnou dětskou sedačkou. Ujistěte se, že jsou oba ISOFIX-zajišťovací ramena zcela zasunuty. Obě ramena musí svítit zeleně.

2.3.3 Upevnění dětské sedačky





Napněte spoj ISOFIX tak, že dětskou sedačku silou zatlačíte do opěradla sedadla vozidla.

Zvyšte napnutí spojení ISOFIX silným zatlačením na přední část základny ze strany.

2.3.4 Kontrola upevnění

Zkontrolujte, zda jsou ISOFIX úchyty (1)

- jsou zasunuty stejně daleko (oba indikátory musí ukazovat stejné číslo).
- jsou spojeny s úchyty ISOFIX na obou stranách, a to zatažením za dětskou autosedačku.

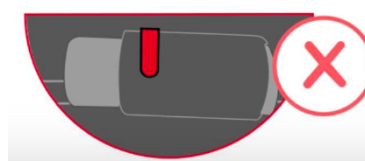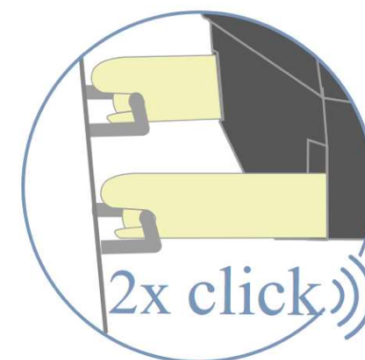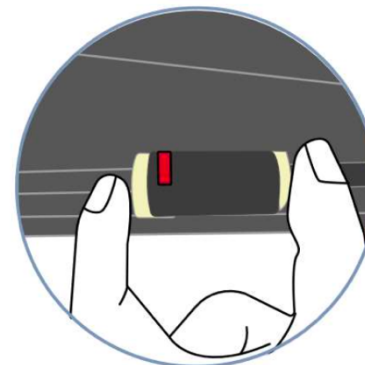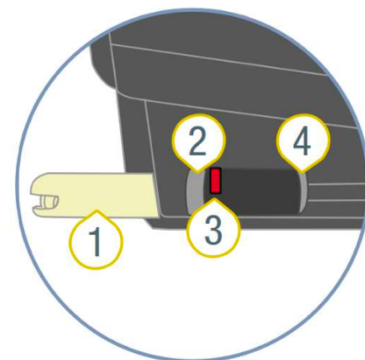

2. Bezpečnostní pokyny & Montáž v automobilu




2.3.5 Nastavení opěrné nohy

Sklopte opěrnou nohu (1) dětské sedačky zcela dozadu, až zaskočí. Červená značka (2) nesmí být viditelná.

Podržte nastavovací tlačítko (3) a vysuňte opěrnou nohu až k podlaze vozidla.

Uvolněte nastavovací tlačítko (3). To nyní slyšitelně zacvakne. Indikátor podpěry (4) svítí zeleně.

POZOR! Opěrná noha (1) nesmí nikdy viset ve vzduchu ani být podložena předměty. Dbejte také na to, aby opěrná noha (1) nezvedala spodní část HERO-NXT ze sedáku sedadla vozidla.

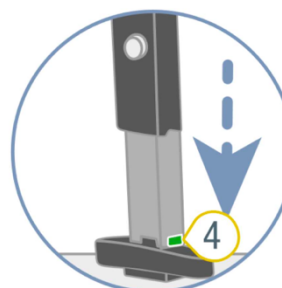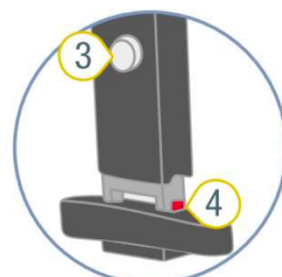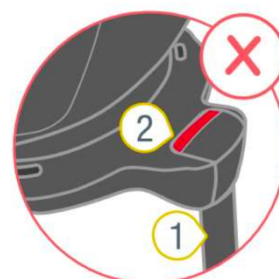

2. Bezpečnostní pokyny & Montáž v automobilu

2.4 Zapnutí pásů

2.4.1 Uvolnění ramenních pásů

Chcete-li popruhy uvolnit, stiskněte nastavovací tlačítko (3) a současně zatáhněte za oba ramenní popruhy (1) dopředu.

POZOR! Netahat za ramenní polštářky.

2.4.2 Otevření spony pásu

Otevřete sponu (2) stisknutím červeného tlačítka.

2.4.3 Posadit dítě do dětské sedačky

Ujistěte se, že je spona pásu (2) sklopena dopředu, a posadte dítě do dětské sedačky.

NEBEZPEČÍ! Dětskou sedačku používejte na sedadle spolujezdce pouze v poloze proti směru jízdy, pokud je deaktivován přední airbag.

2.4.4 Umístění ramenního pásu

Položte ramenní pásy (1) přes ramena dítěte.

POZOR! Ramenné pásy (1) nesmí být zkroucené ani zaměněné.





2.4.5 Zavření spony pásu

Spojte obě jazýčky spony (5) a zacvakněte je do spony pásu (2), až uslyšíte slyšitelné „kliknutí“.

2.4.6 Napnutí nastavovacího popruhu

Zatáhněte za nastavovací popruh (4), dokud popruh nepřiléhá rovně a těsně k tělu vašeho dítěte.

VAROVÁNÍ! Bederní pásy musí být umístěny co nejnižše nad třísky vašeho dítěte.

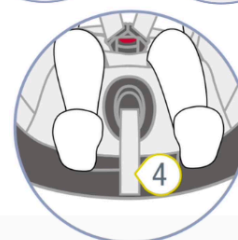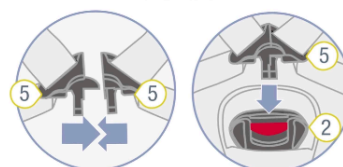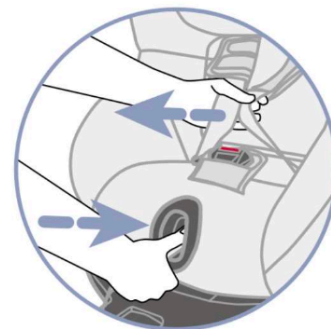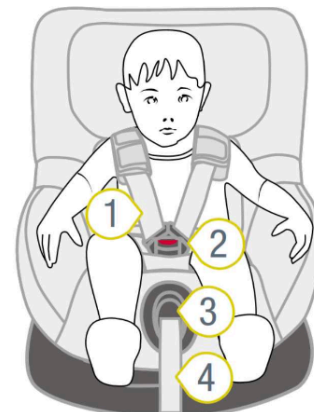

2. Bezpečnostní pokyny & Montáž v automobilu

2.5 Nastavení opěrky hlavy




Správně nastavená opěrka hlavy (1) zajišťuje optimální ochranu vašeho dítěte v dětské sedačce. Opěrka hlavy (1) musí být nastavena tak, aby ramenní pásy (5) byly v úrovni ramen vašeho dítěte nebo mírně nad nimi.

POZOR! Ramenné pásy (5) nesmí vést za zády, ve výšce uší nebo nad ušima dítěte.

- Uvolněte popruhy.
- Podržte stisknuté uvolňovací tlačítko (6) opěrky hlavy (1) a posuňte opěrku hlavy (1) do správné výšky ramenních pásů.
- Zkontrolujte, zda je opěrka hlavy (1) správně zajištěna, a to tak, že opěrku hlavy mírně posunete dolů.

Poznámka k polstrování hlavy:

Polstrování připevněné k opěrce hlavy pomocí suchého zipu se skládá ze 3 částí. V případě potřeby lze odstranit obě vnější křídla, čímž se vytvoří více prostoru pro hlavu vašeho dítěte.

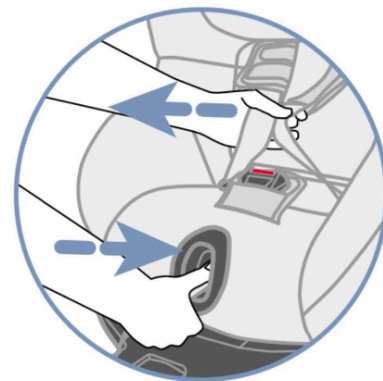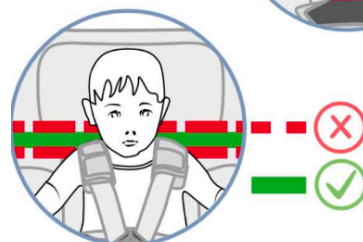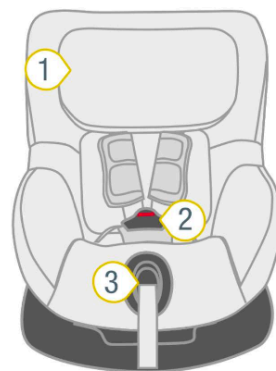



2. Bezpečnostní pokyny & Montáž v automobilu

Poznámka, pokud jsou nainstalovány hrudní vložky:

Současně s uvolněním zámku je třeba druhou rukou lehce uvolnit plastovou desku (1) ve spodní části úchytu z suchého zipu.

Poté lze snadno pohybovat opěrkou zad a hlavovou opěrkou. Po dosažení požadované polohy se suchý zip automaticky znovu připojí uvolněním plastové desky.

Aby bylo možné zajistit souvislé a pohodlné polstrování, byl vyvinut speciální zadní polštář (2). Horní část je spojena s opěrkou hlavy a pohybuje se nahoru, zatímco spodní část polštáře lze v případě potřeby vyklopit a prodloužit.

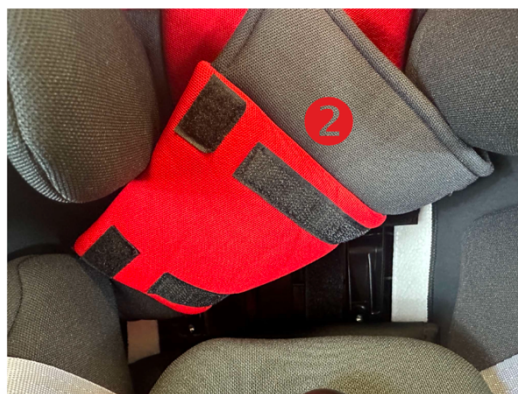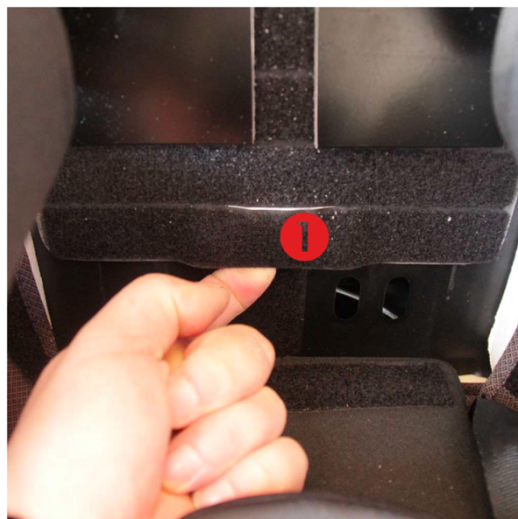

3. Ovládání základního modelu

3 Ovládání základního modelu

3.1 Nastavení úhlu sedáku

Sedadlo HERO-NXT lze použít v přední i zadní poloze v šesti různých úhlech sklonu.

Nastavení úhlu sedadla:

Vytáhněte nastavovací páčku (1) dopředu a zatlačte/posuňte sedací část (2) do požadované polohy.

POZOR! Sedák (2) musí v každé poloze pevně zacvaknout. Zatáhněte za sedák (2), abyste zkontrolovali, zda zacvakl.

3.2 Otočná funkce

HERO-NXT lze:





1. Od 61 do 105 cm (<18 kg) používat v pozici proti směru jízdy.
2. Od 15 měsíců: 76–105 cm (<18 kg) použít ve směru jízdy.

Chcete-li změnit směr jízdy, stiskněte otočné tlačítko (2) a otočte sedadlo do požadovaného směru, dokud nezacvakne.

Při použití ve směru jízdy musí být tlumič nárazů ve svislé poloze.

POZOR! Před každou jízdou autem se ujistěte, že otočná část dětské sedačky je zcela zajištěna, a to tak, že zkusíte otočit dětskou sedačku v obou směrech. Oba indikátory (3) by měly mít černou barvu.



POZOR! Nepoužívejte dětskou sedačku v poloze směřující dopředu, pokud je vaše dítě menší než 76 cm nebo mladší 15 měsíců.

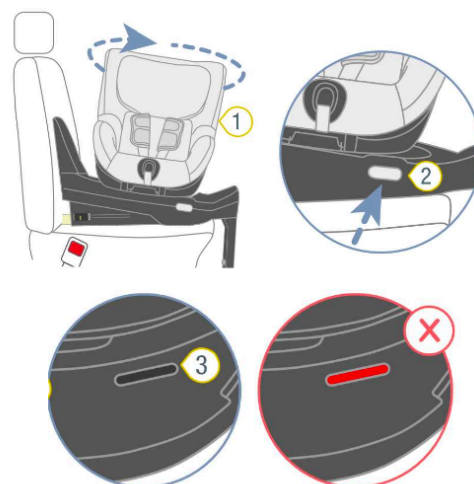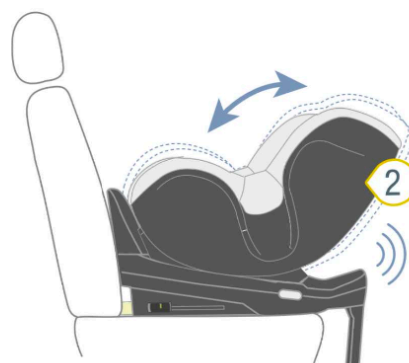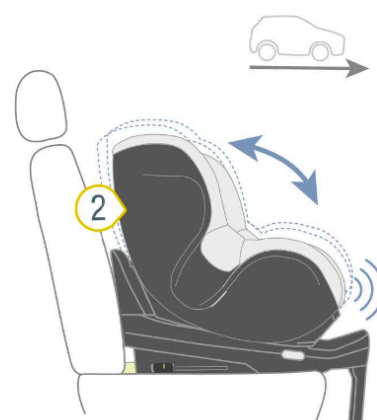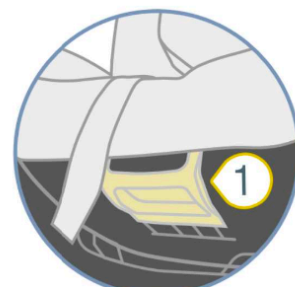

3.Ovládání základního modelu

3.3 Funkce výstupu

1. Stiskněte otočné tlačítko (2) na boku spodní části a současně otočte sedací část (1) o 90° směrem ke dveřím vozidla.
2. Nyní můžete dítě pohodlně posadit nebo vyjmout.
3. Zajistěte dítě.
4. Otočte sedací jednotku zpět o 90° ve směru jízdy odpovídajícím věku dítěte, až zapadne s cvaknutím.

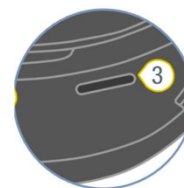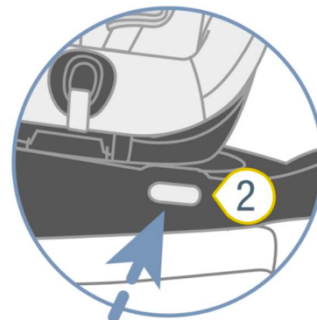

Upozornění: Před každou jízdou se ujistěte, že otočná sedací jednotka je zcela zajištěna a oba indikátory svítí černě.

3.4 Péče a údržba

Používejte výhradně originální potahy sedadel HERNIK.

Potah sedadla je nedílnou součástí dětské sedačky a plní důležité funkce pro zajištění bezchybného fungování systému. Náhradní potahy sedadel jsou k dostání u vašeho specializovaného prodejce.

- Potah lze sundat a prát v pračce na jemný program (30 °C) s jemným pracím prostředkem. Dodržujte pokyny na štítku potahu.
- Polstrování lze prát stejně jako potah. Před praním odstraňte všechny pěnové části z horní a spodní části. Tyto části se nesmí prát.
- Ramenné polštářky lze sejmut a prát vlažnou mýdlovou vodou.
- Plastové části a popruhy lze čistit mýdlovou vodou. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky (např. rozpouštědla).

4. Použití volitelného příslušenství

4 Použití volitelného příslušenství


4.1 Hrudní vložky

Hrudní polštářky pomáhají vašemu dítěti stabilizovat horní část těla, pokud má omezenou kontrolu nad trupem. Jejich hloubku lze nastavit pomocí šroubového spojení.

Polštářky se připevňují na montážní desku pomocí suchého zipu. Lze je uvolnit lehkým tahem. Po nalezení optimální polohy by měly být polštářky znovu upevněny tlakem směrem k zadům a mírným otočením.

Hrudní polštářky lze nastavit v šířce o 9 cm a ve výšce o 11 cm.

Potah je snímatelný a pratelný.

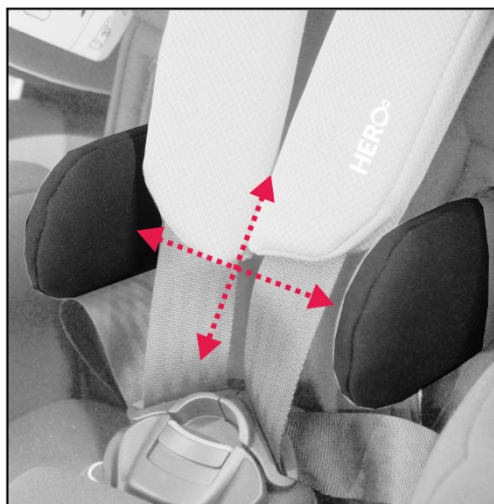

4.2 Abdukční klín

Abdukční klín pomáhá vašemu dítěti udržet nohy v kontrolované poloze. Není nastavitelný, ale je připevněn na stabilní plastové desce, která se nachází pod potahem.

Při správném usazení polštáře je tlačítko pro uvolnění 5bodového pásu snadno dosažitelné.



4. Použití volitelného příslušenství

4.3 Opěrné a bezpečnostní polstrování

Opěrné a bezpečnostní polstrování umožňuje vašemu dítěti opřít si ruce a stabilizovat tak horní část těla.

Na spodní straně je vybaveno suchým zipem, aby bylo zajištěno pevné uchycení. Pro montáž je třeba zvednout přední část stolu a zasunout jej do štěrby mezi opěrkou a sedákem. Poté jej prosím připevněte pomocí pásků na opěrce.

Potah je odnímatelný a pratelný.



4.4 Ochranná podložka

1. Umístěte ochrannou podložku na sedadlo vašeho vozidla tak, aby nezakrývala otvory pro ISOFIX.
2. Umístěte HERO-NXT doprostřed ochranné podložky a zajistěte jej podle pokynů v kapitole 2.3.



5.Záruka

5 Záruka

Výrobky HERNIK odpovídají nejnovějšímu stavu techniky a jsou vyráběny podle přísných norem kvality. Pokud byste výjimečně měli důvod k reklamaci, společnost HERNIK GmbH garantuje v souladu s obecnými obchodními podmínkami po dodání

- 24 měsíců na všechny pevné součásti.
- 12 měsíců na všechny pohyblivé části.

Na zakázkové výrobky se záruka nevztahuje, pokud se nejedná o výrobní nebo materiálové vady. V takovém případě je poskytována náhrada reklamovaného produktu po dobu 12 měsíců.

Nároky podle tohoto záručního slibu předpokládají, že zařízení bylo používáno správně, v souladu s návodem k použití.

V případě konstrukčních změn, dodatečných úprav nebo nesprávných oprav bez předchozího souhlasu společnosti GmbH zaniká nárok na záruku HERNIK.

Další nároky, bez ohledu na právní důvod, zejména nárok na náhradu přímé nebo nepřímé škody, jsou vyloučeny.

6.Označení

6 Označení

Na zadní straně najdete následující označení:



7. Technické údaje

7 Technické údaje

	HERO-NXT MIT Polstereinlage	HERO-NXT OHNE Polstereinlage
SITZBREITE (Becken)	21	25 cm
SITZBREITE (Knie)	28	28 cm
SITZTIEFE	25	28 cm
RÜCKENHÖHE	21 (24) - 34	27 - 35 cm
SCHEITELHÖHE	41 - 53	44 - 56 cm
BRUSTBREITE (Pelotten)	12 - 21 cm	
Gesamthöhe	66 - 73 cm (ohne Standfuß 60 cm)	
Gesamtbreite	50 cm	
Gesamttiefe	65 cm	
Sitzwinkel	bis 45°	
Rückenwinkel	90°	
Größe des Kindes	61 - 106 cm	
Gewicht	15 kg	
getestete Belastbarkeit	bis 18 kg	

8.Složení materiálu

8 Složení materiálu

Použity jsou následující materiály:

- plast (sedák a obložení spodní konstrukce)
- Ocel (otočná jednotka, Isofix a opěrná noha)
- Hliník (hrudní polštářky)
- Polyester (popruh)
- Pěnová síťovina, antracitová (potah)
- Hustota pěnové hmoty

poznámky

poznámky



HERNIK GmbH
Gewerbering 8
83543 Rott am Inn • Germany

 **+49 8039-9093930** •  **+49 8039-90939319**
 **info@hernik.de** •  **www.hernik.de**