

bruksanvisning

HERO **NXT**



Innehållsförteckning

1	ALLMÄN INFORMATION	4
1.1	Förord	4
1.2	Avsikt och indikation	5
1.3	Anvisningar	5
1.4	Försäkran om överensstämmelse	5
1.5	Garantivillkor	5
1.6	Service och reparationer	6
1.7	Användarutbildning	6
2	SÄKERHETSANVISNINGAR OCH INSTALLATION I FORDON	7
2.1	Säkerhetsanvisningar	7
2.	Användning i fordon	8
2.3	Montering i bilen	9
2.4	Användning av säkerhetsbälten	11
2.5	Justering av nackstödet	12
3	HANTERING AV BASMODELLEN	14
3.1	Justera sittvinkeln	14
3.2	Vridfunktion	14
3.3	Utstigningsfunktion	15
3.4	Skötsel och underhåll	15
4	ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR (TILLVAL)	16
4.1	Bröstkorgskuddar	16
4.2	Abduktionskil	16

Innehållsförteckning

4.3	Stöd- och säkerhetskuddar	17
4.4	Skyddsmatta	17
5	GARANTI	18
6	MÄRKNING	19
7	TEKNISKA DATA	20
8	MATERIALFÖRTECKNING	21

1 Allmän information

1 Allmän information

1.1 Förord

Du har valt bilbarnstolen "HERO-NXT" och får därmed en högkvalitativ produkt från vårt företag. Vi vill tacka dig för ditt förtroende.

För att du ska ha glädje av denna produkt under lång tid och för att den ska underlätta din vardag, överlämnar vi denna bruksanvisning till dig. Den visar dig hur du använder produkten på ett korrekt och enkelt sätt samt hur du sköter och underhåller den. För att undvika skador på grund av felaktig användning och för att möjliggöra optimal användning, läs noggrant igenom följande anvisningar och råd. Om du har ytterligare frågor eller problem, vänligen kontakta din återförsäljare. Vi önskar dig en problemfri användning och hoppas att våra produkter uppfyller dina förväntningar.

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar av den modell som beskrivs i denna bruksanvisning.

Innan du monterar produkten i din bil och använder den för första gången ber vi dig att läsa och följa monteringsanvisningarna på sidorna 9–13.

Se till att bruksanvisningen förblir kvar på produkten så att den är tillgänglig för alla användare.

HERNIK GmbH

1 Allmän information

1.2 Avsedd användning och indikation

HERO-NXT har utvecklats för transport av barn med särskilda behov i motorfordon. Barn med dålig kontroll över huvud och bål (t.ex. infantil cerebral pares, muskeldystrofi, hypotoni) kan få stöd i sin hållning med hjälp av individuellt positionerbara bröstorgskuddar och specialstoppning, vilket garanterar en säker transport.

Med hjälp av viktiga tillbehör kan man ta hänsyn till särskilda aspekter, t.ex. sittlutning, installation av en stabil abduktionskil eller bröstorgskuddar. Mer information finns i kapitlet4 .

1.3 Anmärkningar

HERO-NXT rehabiliteringsbilbarnstol består av två moduler:

1. En vanlig DUALFIX-bilbarnstol från Römer-Britax (se tillverkarens bruksanvisning).
2. Anpassningsmodul med tillbehör som gör det möjligt att utrusta bilbarnstolen efter individuella behov. Se bruksanvisningen från HERNIK GmbH.

1.4 Försäkran om överensstämmelse

HERNIK GmbH förklarar på eget ansvar att bilbarnstolen "HERO-NXT" uppfyller de grundläggande kraven (bilaga 1 till direktiv 93/42 EWG). Produkten är märkt med CE-märkning enligt ovanstående direktiv.

1.5 Garantivillkor

Garanti kan endast ges om produkten används under de angivna förhållandena och för de avsedda ändamålen. Tillverkaren ansvarar inte för skador som orsakas av komponenter och reservdelar som inte har godkänts av tillverkaren.

1 Allmän information

1.6 Service och reparationer

Service och reparationer av "HERO-NXT" får endast utföras av fackhandlare. Vid problem, vänd dig till din fackhandlare. Vid reparationer får du endast originalreservdelar där.

1.7 Användarutbildning

Bilbarnstolen levereras helt monterad. Vid leveransen instruerar fackhandlaren användaren i hur hjälpmedlet ska användas med hjälp av bruksanvisningen. Fackhandlaren bör tillsammans med användaren montera bilbarnstolen i bilen och se till att Isofix-adaptern sitter korrekt.

När du monterar bilbarnstolen är det bäst att hålla den med ena handen mitt fram och med den andra sidan upptill. För att uppnå en optimal sittposition är det nödvändigt att justera bilbarnstolen individuellt efter barnets förutsättningar. Detta bör i princip göras av en fackhandlare.

2 Säkerhetsanvisningar & Montering i bilen

2 Säkerhetsanvisningar & Montering i bilen

2.1 Säkerhetsanvisningar

- HERO-NXT ska alltid fästas i bilen enligt monteringsanvisningarna, även när den inte används. En ofästad stol kan skada andra passagerare vid en nödbromsning.
- HERO-NXT ska fästas i bilen så att den inte fastnar i framsätena eller bildörrarna.
- Bältena får inte vara vridna eller fastklämda och måste spännas åt.
- Efter en olycka får bilbarnstolen inte användas igen!
- Spänn alltid fast säkerhetsbältet på ditt barn.
- Kontrollera före varje resa att både bältesspännet och ISOFIX är korrekt låsta och att fotstödet sitter korrekt.


2Säkerhetsanvisningar & Montering i bilen

2.2 Användning i fordon

Följ anvisningarna för användning av barnsäkerhetssystem i bruksanvisningen för din bil. Observera eventuella begränsningar på grund av airbags vid användning. Information om vilka bilsäten som är godkända enligt R16 för användning av barnsäkerhetssystem ECE finns i bruksanvisningen för din bil.

Användningsmöjligheter HERO-NXT (i-SIZE)*

in Fahrtrichtung	Ja ¹⁾
entgegen der Fahrtrichtung	Ja ¹⁾
Mit 2-Punkt- oder 3-Punkt-Sicherheitsgurt	Nein
auf Sitzen mit: ISOFIX-Befestigungen	Ja ²⁾

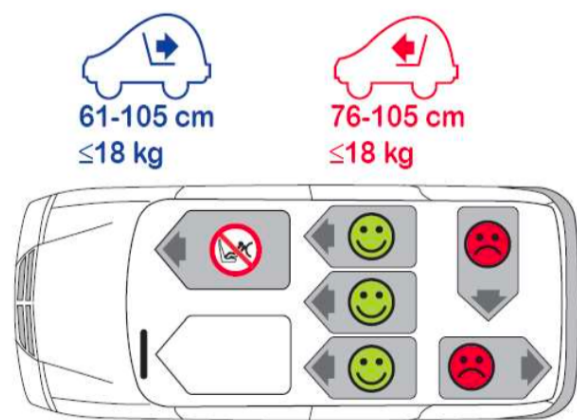

*(Observera de regler som gäller i ditt land)

- I körriktningen 76–105 cm / Mot körriktningen 61–105 cm
- I körriktningen 76–105 cm: Om det finns en passagerarairbag: Skjut passagerarsätet långt bakåt och följ eventuella anvisningar i bruksanvisningen för din bil.
- Mot körriktningen 61–105 cm: Använd inte på passagerarsäten med aktiv frontkrockkudde!
- För barn från 3 år ska det finnas tillräckligt med utrymme uppåt (ca 1 handbredd till taket) och framåt till passagerarsätets ryggstöd (minst 76 cm framåt).

2Säkerhetsanvisningar & Montering i bilen


2.3 Montering i bilen

Om din bil inte är utrustad med ISOFIX-fästen som standard, kläm fast de två fästena (2) som medföljer stolen med den uppåtvända delen på de två ISOFIX-fästpunkterna (1) i din bil.

TIPS! ISOFIX-fästpunkterna finns mellan sätets sittdel och ryggstödet på fordonets säte.

2.3.1 Förbered ISOFIX


Tryck säkerhetsknappen (4) och frigöringsknappen (2) mot varandra och skjut ut ISOFIX-fästarmen (1) maximalt. Skjut även ut den andra fästarmen maximalt.

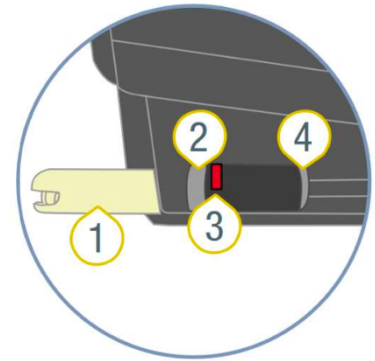

2.3.2 Fästa ISOFIX

Anslut ISOFIX-fästarmen (1) till ISOFIX-fästena på bilsätet. Båda ISOFIX-fästarmarna (1) låses hörbart och visar färgen grön.


WARNING! Risk för skador på grund av osäkrad barnstol. Se till att båda ISOFIX-fästarmarna är helt inlådade. Båda armarna måste visa grönt.

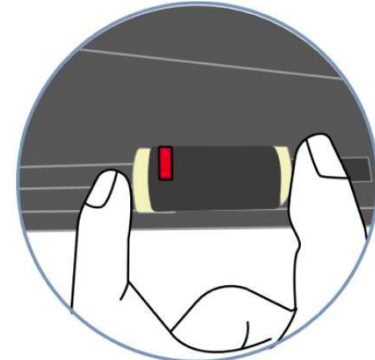

2.3.3 Fästa barnstolen

Spänn ISOFIX-fästet genom att trycka barnstolen kraftigt mot ryggstödet på bilsätet.


Öka spänningen på ISOFIX-fästet genom att trycka kraftigt på framsidan av basstationen.

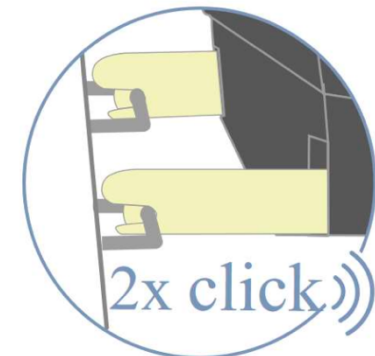

2.3.4 Kontrollera fastsättningen

Kontrollera att ISOFIX-fästarmarna (1)

- är lika långt inskjutna (båda indikatorerna måste visa samma nummer).
- är anslutna till ISOFIX-fästena på båda sidor genom att dra i barnstolen.

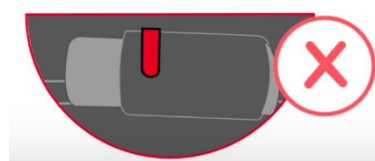

2Säkerhetsanvisningar & Montering i bilen




2.3.5 Justera stödbenet

Fäll ut stödbenet (1) från barnstolen helt tills det hörbart låser sig. Den röda markeringen (2) får inte längre vara synlig.

Håll inställningsknappen (3) intryckt och fäll ut stödbenet till bilens golv.

Släpp inställningsknappen (3). Den låses nu hörbart. Stödindikatorn (4) visar färgen grön.

WARNING! Stödbenet (1) får aldrig hänga i luften eller understödjas med föremål. Se också till att stödbenet (1) inte lyfter HERO NXT-underdelen från fordonets sätesyta.

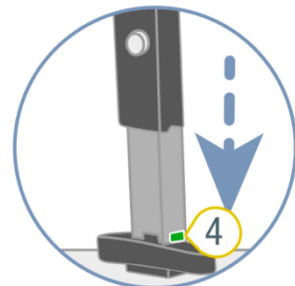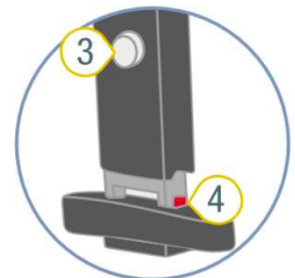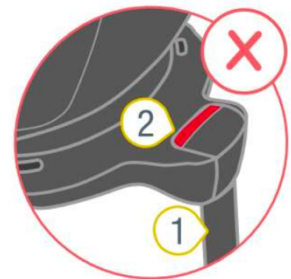

2Säkerhetsanvisningar & Montering i bilen

2.4 Anlägga bältena

2.4.1 Lossa axelremmarna

För att lossa selen trycker du på justeringsknappen (3) och drar samtidigt båda axelremmarna (1) framåt.

VARNING! Dra inte i axelpolstren.

2.4.2 Öppna bältesspännet

Öppna bältesspännet (2) genom att trycka på den röda knappen.

2.4.3 Sätt barnet i barnstolen

Se till att bältesspännet (2) är fällt framåt och sätt barnet i barnstolen.

FARA! Använd endast barnstolen bakåtvänd på passagerarsätet om frontkrockkudden är avaktiverad.

2.4.4 Placera axelbältet

Lägg axelremmarna (1) över barnets axlar.

VARNING! Axelremmarna (1) får inte vara vridna eller förväxlade.





2.4.5 Stäng bälteslåset

För ihop de två spännena (5) och lås dem i bältesspännet (2) med ett hörbart klick.

2.4.6 Spänna justeringsremmen

Dra i justeringsremmen (4) tills remmen ligger platt och tätt mot barnets kropp.

VARNING! Höftbältena måste sitta så lågt som möjligt över barnets ljumskar.

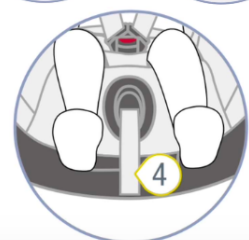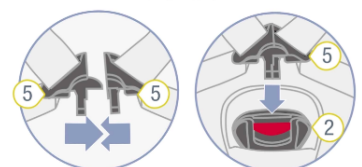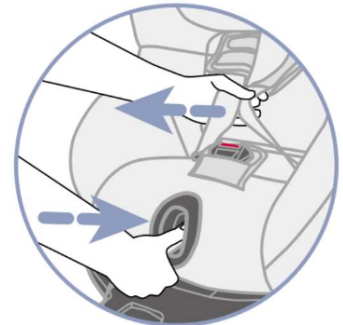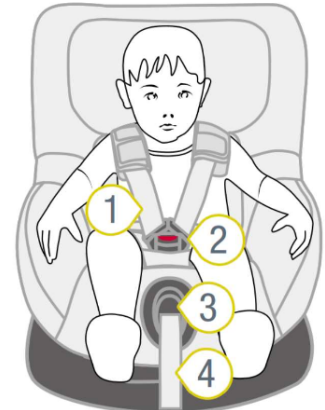

2 Säkerhetsanvisningar & Montering i bilen

2.5 Justera nackstödet




En korrekt inställd nackstöd (1) garanterar optimal skydd för ditt barn i barnstolen. Nackstödet (1) måste ställas in så att axelremmarna (5) ligger i höjd med barnets axlar eller något ovanför.

VARNING! Axelremmarna (5) får inte gå bakom ryggen, i höjd med eller över barnets öron.

- Lossa selen.
- Håll ned frigöringsknappen (6) på huvudstödet (1) och flytta huvudstödet (1) till rätt höjd för axelremmarna.
- Kontrollera att huvudstödet (1) är korrekt fastspänt genom att flytta huvudstödet något nedåt.

Anmärkning om huvudkudden:

Kudden som fästs med kardborreband på nackstödet består av tre delar. Vid behov kan de två yttre delarna tas bort, vilket ger mer utrymme för barnets huvud.

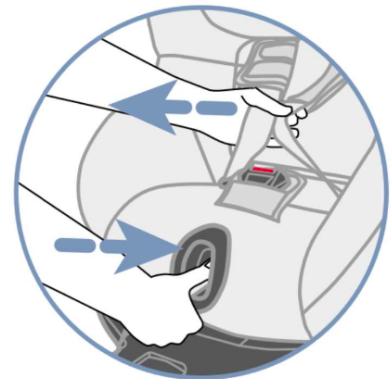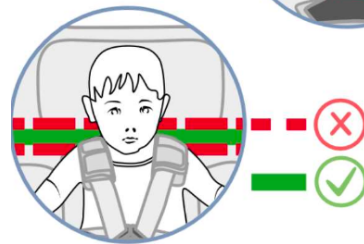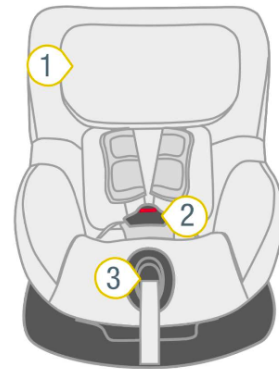



2Säkerhetsanvisningar & Montering i bilen

Anmärkning om bröstkoragskuddar är installerade:

Parallellt med att låset lossas måste plastplattan (1) längst ner i handtaget lossas något från kardborrefästet med den andra handen.

Därefter kan rygg- och huvuddelen lätt flyttas. När önskad position har uppnåtts återställs kardborrefästet automatiskt genom att plastplattan släpps.

För att möjliggöra en genomgående, bekväm stoppning har ett speciellt ryggkudde (2) utvecklats. Den övre delen är förbunden med nackstödet och rör sig uppåt, medan den nedre delen av kudden kan fällas ut och därmed förlängas vid behov.

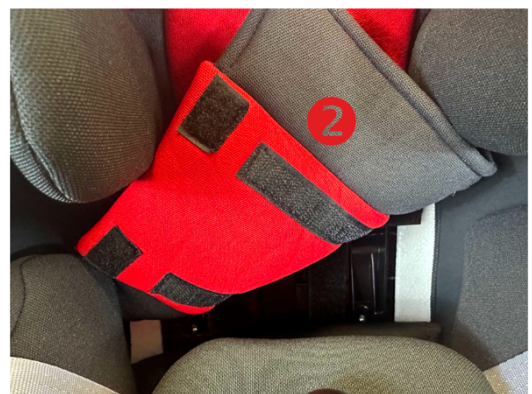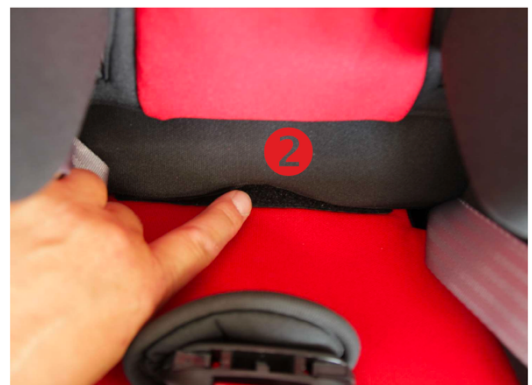

3 Hantering av basmodellen

3 Hantering av basmodellen

3.1 Justera sittvinkeln

Sitsenheten på HERO-NXT kan användas framåt- och bakåtvänd i sex olika lutningsvinklar.

Så här justerar du sittvinkeln:

Dra justeringshandtaget (1) framåt och tryck/skjut sittskalet (2) till önskad position.

OBS! Sitsen (2) måste låsas fast i varje läge med ett klickljud. Dra i sitsen (2) för att kontrollera att den har låsts fast.

3.2 Vridfunktion

HERO-NXT kan:




1. Användas bakåtvänd från 61–105 cm (<18 kg).
2. Från 15 månader: 76–105 cm (<18 kg) användas framåtvänd.

För att ändra körriktningen trycker du på vridknappen (2) och vrider sätet i önskad riktning tills det låses fast.

Vid användning i framåtvänd position måste dämpningsbågen vara i vertikalt läge.

WARNING! Se till att den vridbara delen av barnstolen är helt fastlåst innan varje bilresa genom att försöka vrida barnstolen i båda riktningarna. De två indikatorerna (3) ska visa färgen svart.


WARNING! Använd inte barnstolen i framåtvänd läge om ditt barn är kortare än 76 cm eller yngre än 15 månader.

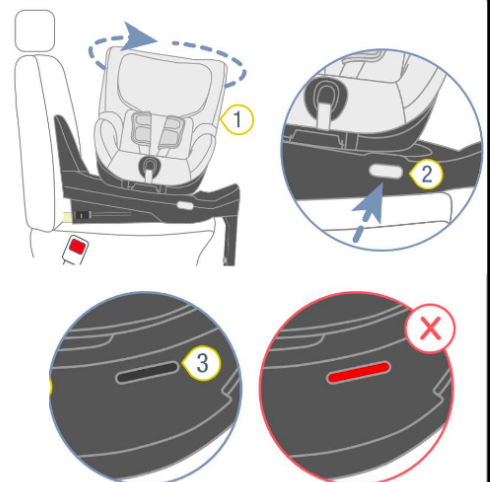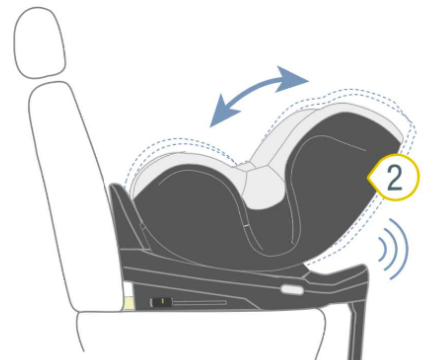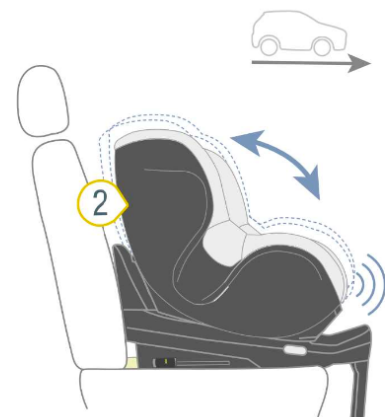


3 Hantering av basmodellen

3.3 Utstigningsfunktion

1. Tryck på vridknappen (2) på sidan av underdelen och vrid samtidigt sätesenheten (1) 90° mot bildörren.
2. Nu kan du enkelt sätta i eller ta ut ditt barn.
3. Säkra ditt barn.
4. Vrid sätet 90° tillbaka i den korriktning som motsvarar barnets ålder tills det låses fast med ett klick.

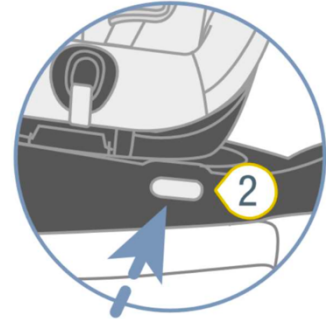

Observera: Se till att den vridbara sätesenheten är helt fastlåst och att båda indikatorerna visar färgen svart före varje resa.

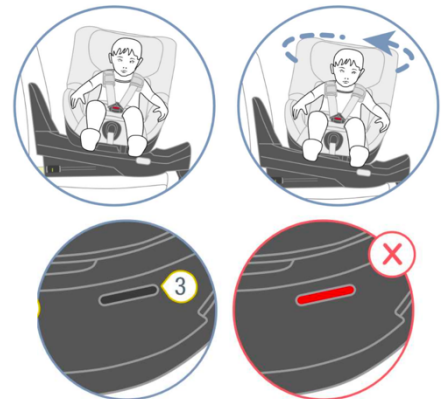

3.4 Skötsel och underhåll

Använd endast original HERNIK-sittklädsel. Sittklädseln är en integrerad del av barnstolen och fyller viktiga funktioner för att säkerställa att systemet fungerar korrekt.

Ersättningssittklädsel finns att köpa hos din återförsäljare.

- Klädseln kan tas av och tvättas med ett mildt tvättmedel i tvättmaskinens finprogram (30 °C). Följ anvisningarna på tvättetiketten på klädseln.
- Stoppningen kan tvättas på samma sätt som överdraget. Ta bort alla skumdelar från över- och underdelen före tvätt. Dessa får inte tvättas.
- Axelkuddarna kan tas av och tvättas med ljummet tvålatten.
- Plastdelarna och remmarna kan rengöras med tvålatten. Använd inga starka rengöringsmedel (t.ex. lösningsmedel).

4Användning av tillbehör (tillval)

4 Användning av tillbehör (tillval)


4.1 Bröstkorgskuddar

Bröstkorgskuddar hjälper ditt barn att stabilisera överkroppen när kontrollen över bålen är begränsad. De kan justeras i djupet med hjälp av en skruvförbindelse.

Pelotten fästs på en monteringsplatta med hjälp av kardborreband. De kan lossas med lätt kraft. När man har hittat en optimal position ska pelotten fixeras igen genom att trycka mot ryggen och vrida lätt.

Bröstkorgskuddar kan justeras 9 cm i bredd och 11 cm i höjd.

Överdraget är avtagbart och tvättbart.

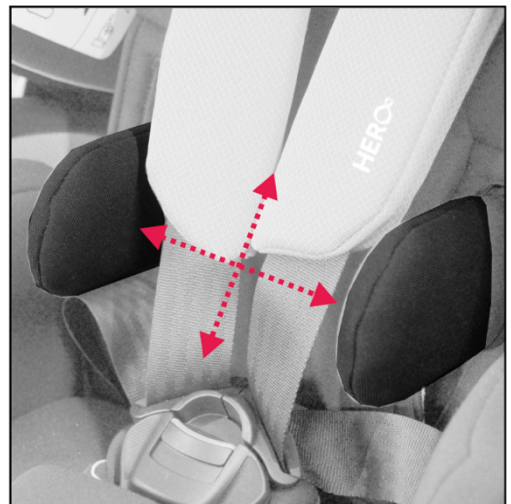

4.2 Abduktionskil

Abduktionskilen hjälper ditt barn att hålla benen i en kontrollerad position. Den är inte justerbar, utan är fäst på en stabil plastplatta som sitter under överdraget.

När kudden sitter korrekt är tryckknappen för att lossa 5-punktsbältet lätt att nå.



4Användning av tillbehör (tillval)

4.3 Stöd- och säkerhetsdyna

Stöd- och säkerhetsdynan gör det möjligt för ditt barn att vila armarna och därmed stabilisera överkroppen.

Den är försedd med kardborreband på undersidan för att säkerställa ett fast grepp. För att montera den måste bordet lyftas framåt och klämmas fast i spalten mellan rygg- och sittdelen. Fäst sedan med banden på ryggdelen.

Överdraget är avtagbart och tvättbart



4.4 Skyddsmatta

1. Placera skyddsmattan på sätet i din bil utan att blockera utrymmena för ISOFIX.
2. Placera HERO-NXT mitt på skyddsmattan och fäst den enligt beskrivningen i kapitel 2.3.



5Garanti

5 Garanti

HERNIK-produkterna motsvarar den senaste tekniken och tillverkas enligt strikta kvalitetsnormer. Om du i undantagsfall har anledning att reklamera garanterar HERNIK GmbH enligt de allmänna affärsvillkoren efter leverans

- 24 månader på alla fasta komponenter.
- 12 månader på alla rörliga delar.

För specialtillverkade produkter kan ingen garanti ges, såvida dessa inte beror på tillverknings- eller materialfel. I detta fall ersätts den reklamerade produkten under 12 månader.

Krav enligt denna garanti förutsätter att enheten har använts korrekt i enlighet med bruksanvisningen.

Vid konstruktionsändringar, efterbearbetningar eller felaktiga reparationer utan föregående överenskommelse med GmbH upphör HERNIK-garantikravet att gälla.

Ytterligare anspråk, oavsett rättslig grund, särskilt ersättning för indirekta eller direkta skador, är uteslutna.

6Märkning

6 Märkning

På baksidan hittar du följande märkning:



7Tehniska data

7 Tehniska data

	HERO-NXT MIT Polstereinlage	HERO-NXT OHNE Polstereinlage
SITZBREITE (Becken)	21	25 cm
SITZBREITE (Knie)	28	28 cm
SITZTIEFE	25	28 cm
RÜCKENHÖHE	21 (24) - 34	27 - 35 cm
SCHEITELHÖHE	41 - 53	44 - 56 cm
BRUSTBREITE (Pelotten)	12 - 21 cm	
Gesamthöhe	66 - 73 cm (ohne Standfuß 60 cm)	
Gesamtbreite	50 cm	
Gesamttiefe	65 cm	
Sitzwinkel	bis 45°	
Rückenwinkel	90°	
Größe des Kindes	61 - 106 cm	
Gewicht	15 kg	
getestete Belastbarkeit	bis 18 kg	

8Materialförteckning

8 Materialförteckning

Följande material används:

- Plast (sitsenhet och klädsel, underkonstruktion)
- Stål (svängbar enhet, Isofix och stödfot)
- Aluminium (bröstkorgskuddar)
- Polyester (bältesband)
- Skumlaminerad nätväv, antracit (klädsel)
- Skumplastens densitet

anteckningar

anteckningar



HERNIK GmbH
Gewerbering 8
83543 Rott am Inn • Germany

 **+49 8039-9093930** •  **+49 8039-90939319**
 **info@hernik.de** •  **www.hernik.de**