

käyttöohje

HERO



Sisällysluettelo

1	YLEISTÄ TIETOA	4
1.1	Esipuhe	4
1.2	Käyttötarkoitus ja käyttöaiheet	4
1.3	Huomautukset	5
1.4	Vaatimustenmukaisuusilmoitus	5
1.5	Takuuehdot	5
1.6	Huolto ja korjaukset	6
1.7	Käyttökoulutus	6
1.	Hyväksyntä/yhteensopivuus tavallisten autojen lastenistuimien kanssa	6
2	TURVALLISUUS JA ASENNUS AJONEUVOON	7
2.1	Tutustu HERO-XL:ään	7
2	Turvallisuusohjeet	9
2.	Käyttö ajoneuvossa	10
2.	Alemmat kiinnityskohdat	10
2.	Kiristyshihnojen kiinnittäminen	11
2.	Asennus ajoneuvoon	13
3	PERUSMALLIN KÄSITTELY	15
3.1	Lapsen kiinnittäminen	15
3	Pääntuen säätäminen	19
3.	Irrottaminen ajoneuvosta	20
3.	Hoito ja huolto	21
4	LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÖ	22

Sisällysluettelo

4.1	Rintakehätyynyt	22
4.2	Abduktiokiila	22
4.3	Istumasyvyyden sovitin	23
4.	Tukityynyt ja turvatyynt	23
5	TAKUU	24
6	MERKINNÄT	25
7	TEKNISET TIEDOT	26

1.Yleistä tietoa

1 Yleistä tietoa

1.1 Esipuhe

Olette valinneet HERO-XL-turvaistuimen ja saatte näin korkealaatuisen tuotteen valmistajalta. Kiitämme teitä luottamuksestanne.

Jotta voisitte nauttia tästä tuotteesta pitkään ja se helpottaisi arkeanne, toimitamme teille tämän käyttöohjeen. Siinä kerrotaan tuotteen oikea ja helppo käyttö sekä tarvittava hoito ja huolto. Välttääksesi käyttövirheistä johtuvat vauriot ja varmistaaksesi tuotteen optimaalisen käytön, lue seuraavat ohjeet ja huomautukset huolellisesti. Jos sinulla on kysyttävää tai ongelmia, ota yhteyttä jälleenmyyjään. Toivotamme sinulle ongelmattonta käyttöä ja toivomme, että tuotteemme vastaavat odotuksiasi.

Pidätämme oikeuden tehdä teknisiä muutoksia tässä käyttöohjeessa kuvattuun malliin.

Ennen asennusta autoon ja ensimmäistä käyttökertaa lukekaa erityisesti asennusohjeet sivuilla 7–15 ja noudattakaa niitä.

Varmista, että käyttöohjeet jäävät tuotteen mukana, jotta ne ovat kaikkien käyttäjien saatavilla.

HERNIK GmbH

1.2 Käyttötarkoitus ja käyttöaiheet

HERO-XL on kehitetty erityistarpeisten lasten (GMFCS 3–5, esimerkiksi voimakas lihasheikkous ja pään ja vartalon hallinnan puute) kuljettamiseen moottoriajoneuvoissa. Lapset, joilla on heikko pään ja vartalon hallinta (esim. aivohalvaus, lihasdystrofia, hypotonia, motorinen kehityshäiriö), voivat saada tukea ryhtiinsä vakiovarusteisiin kuuluvan istuinkulman säätömahdollisuuden ja erityisten pehmusteiden avulla, mikä takaa turvallisen kuljetuksen.

Tärkeillä lisävarusteilla voidaan ottaa huomioon erityistarpeet, kuten tukevan abduktiokiilan, rintakehätyynyjen, istuinsyvyuden säätölaitteen tai tuki- ja turvatyynyn asentaminen.

Lisätietoja on luvussa 4.3.

1.Yleistä tietoa

1.3 Huomautukset

HERO-XL -vammaisten lasten turvaistuin koostuu seuraavista osista:

1. tavallisella Axxid-merkkisellä lasten turvaistuimella (huomioi valmistajan käyttöohjeet).
2. sovitusmoduuli lisävarusteineen, jonka avulla turvaistuin voidaan varustaa lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaan. Huomioi HERNIK GmbH:n käyttöohjeet.

1.4 Vaatimustenmukaisuusilmoitus

HERNIK GmbH vakuuttaa yksin vastuullaan, että lasten turvaistuin "HERO-XL" täyttää perusvaatimukset (liite 1 direktiivissä 93/42 EWG). Tuote on merkitty CE-merkinnällä edellä mainitun direktiivin mukaisesti.

1.5 Takuuehdot

Takuu voidaan myöntää vain, jos tuotetta käytetään määräysten mukaisesti ja sille tarkoitettuihin tarkoituksiin. Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat valmistajan hyväksymättömistä osista ja varaosista.

1.Yleistä tietoa

1.6 Huolto ja korjaukset

HERO-XL:n huolto ja korjaukset saa suorittaa vain valtuutettu jälleenmyyjä. Ota yhteyttä jälleenmyyjään, jos sinulla on ongelmia. Korjauksissa käytetään vain alkuperäisiä varaosia.

1.7 Käyttökoulutus

Autoturvaistuin toimitetaan täysin koottuna. Toimituksen yhteydessä jälleenmyyjä opastaa käyttäjää apuvälineen käytössä käyttöohjeen avulla. Jälleenmyyjän tulee asentaa autoturvaistuin yhdessä käyttäjän kanssa autoon. Optimaalisen istuma-asennon saavuttamiseksi autoturvaistuin on säädettävä yksilöllisesti lapsen mukaan. Tämä tulee aina tehdä jälleenmyyjän toimesta.

1.8 Hyväksyntä/yhteensopivuus tavallisten lastenautoturvaistuinten kanssa

HERO-XL on kaikkine lisävarusteineen ECE R129/03 -hyväksytty lasten turvaistuin. HERO-XL:n yksittäisiä osia ja lisävarusteita ei ole hyväksytty käytettäväksi yhdessä muiden tavallisten lasten turvaistuinten kanssa. Muutos voi mitätöidä HERO-XL:n ja tavallisen lasten turvaistuimen hyväksynnän.


2.:n turvallisuus ja asennus autoon

2.:n turvallisuus ja asennus autoon

2.1 Tutustu HERO-XL:ään



2.:n turvallisuus ja asennus autoon

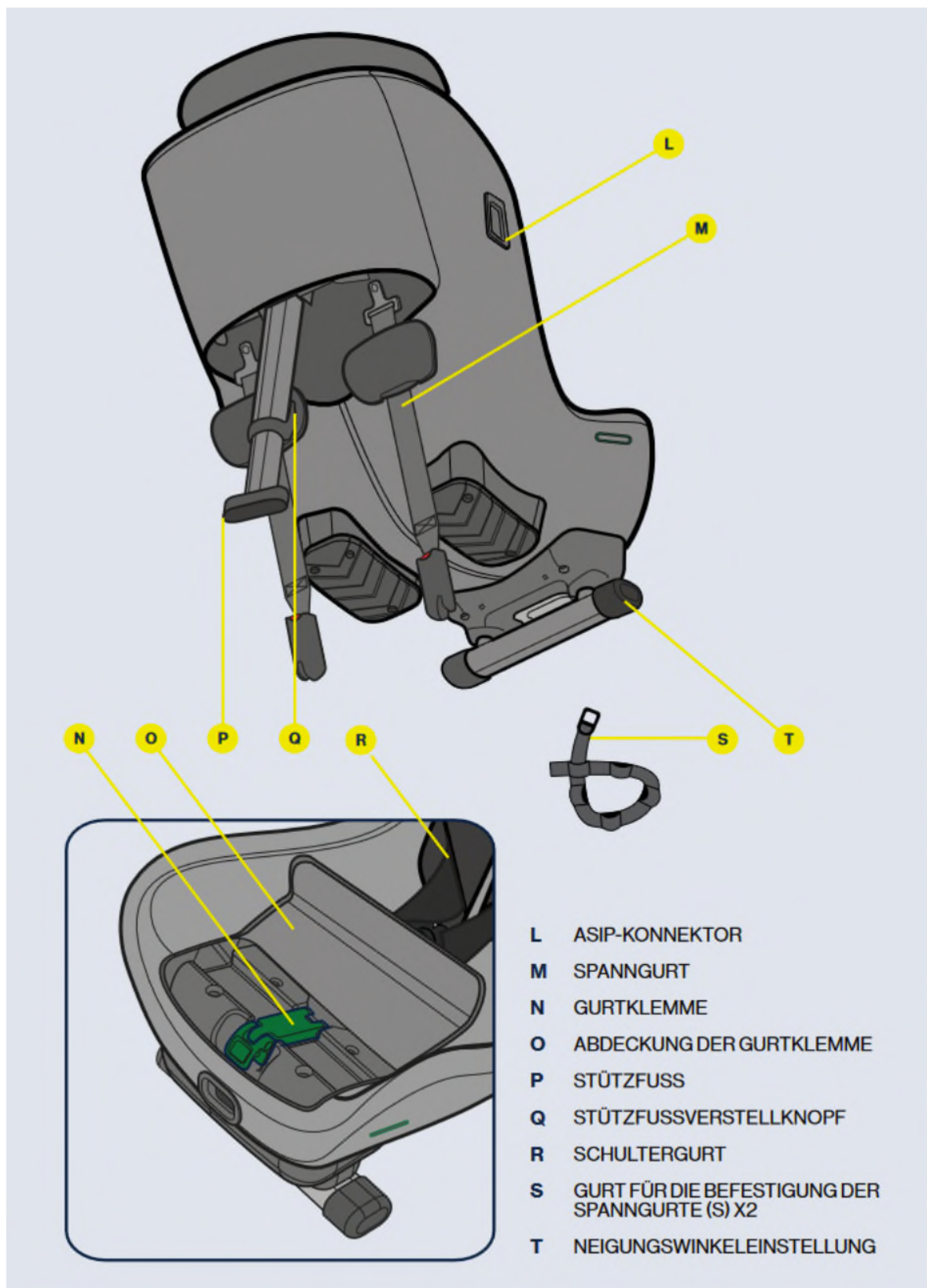

2.:n turvallisuus ja asennus autoon

2.2 Turvallisuusohjeet

HERO-XL on aina kiinnitettävä ajoneuvoon asennusohjeiden mukaisesti, myös silloin, kun sitä ei käytetä. Kiinnittämätön istuin voi jo hätäjarrutuksessa aiheuttaa vammoja muille ajoneuvon matkustajille.

- HERO-XL on kiinnitettävä autoon siten, että se ei jää etuistuinten tai auton ovien väliin.
- Hihnat eivät saa olla kiertyneitä tai puristuksissa, ja ne on kiristettävä.
- Turvaistuinta ei saa käyttää uudelleen onnettomuuden jälkeen.
- Kiinnitä aina lapsesi turvavyö.
- Tarkista ennen jokaista ajomatkaa, että turvavyön lukko on kunnolla kiinni ja jalka on oikeassa asennossa.
- Varmista myös, että kaikki HERO-XL:n kiinteät osat ja muoviosat on kiinnitetty siten, että ne eivät voi jää kiinni liikkuvaan istuimeen tai oveen auton päivittäisessä käytössä.
- Suosittelemme kiinnittämään matkatavarat ja muut esineet asianmukaisesti.
- Turvaistuinta ei saa käyttää ilman päällistä.
- Huomaa, että turvaistuin voi kuumentua liikaa lapsen iholle, jos se on pitkään auringossa ilman tekstiilipäällistä.
- Päällinen saa korvata vain alkuperäisellä HERNIK-päällisellä.
- Älä jätä lasta ilman valvontaa turvaistuimeen.
- Älä tee laitteeseen muutoksia tai lisäyksiä.
- Noudata tarkasti HERNIKin toimittamia asennusohjeita.
- Käyttöohjeet on pidettävä aina mukana ajoneuvossa.

2.:n turvallisuus ja asennus autoon

2.3 Käyttö ajoneuvossa

HERO-XL-kuntoutusauton turvaistuin saa asentaa vain taaksepäin. Se sopii useimpiin, mutta ei kaikkiin istuimiin. Tarkista ajoneuvon käyttöohjeesta, mitkä istuimet ovat ECE R16 -standardin mukaisia lasten turvajärjestelmien käyttöä varten.

Käyttömahdollisuudet HERO-XL (i-SIZE):

Beifahrersitz (kein aktiver Airbag)	JA/NEIN*
Beifahrersitz (aktiver Airbag)	NEIN
Rücksitz mit Dreipunkt-Sicherheitsgurt	JA
Sitz mit Zweipunkt-Sicherheitsgurt	NEIN
Seit- und rückwärtsgerichtete Sitze	NEIN



TÄRKEÄÄ! Jos haluat asentaa HERO-XL-lastenistuimen etuturvatyynyllä varustetulle istuimelle, turvatyyny on poistettava käytöstä ajoneuvon valmistajan ohjeiden mukaisesti. Huomaa, että joissakin ajoneuvoissa turvatyynyn poistaminen käytöstä voidaan tehdä vain valtuutetussa huoltokeskuksessa.

2.4 Alemmat kiinnityskohdat


Eteenpäin suuntautuvat kiristyshihnat parantavat lasten turvallisuutta autossa, sillä ne mahdollistavat kiinteän ja vakaan asennuksen vyökiinnitteisille, taaksepäin suunnatuille lastenistuimille. Tämä kiinnitys parantaa lapsesi turvallisuutta kaikentyyppisissä törmäyksissä, mukaan lukien ympäripyörähdykset ja takaa-ajot.

Kiinnityshihnat takaavat tarkan ja helpon asennuksen ajoneuvoihin, joissa on valmiiksi asennetut kiinnityskohdat. Valmiiksi asennetut kiinnityskohdat ajoneuvoissa sijaitsevat usein lattiaan kiinnitettyjen istuinkiskoissa, mutta myös muut sijainnit ovat mahdollisia. Lisätietoja käytettävistä kiinnityspisteistä on ajoneuvon käyttöohjeessa. Jos ajoneuvossa ei ole alempia kiinnityspisteitä, voit käyttää HERO-XL:n mukana toimitettuja lisäkiinnityshihnoja (S). Asennusohjeet ovat tässä käyttöohjeessa.

TÄRKEÄÄ! Älä koskaan käytä HERO-XL-turvaistuinta ilman etukiinnityshihnoja. Ne ovat tärkeä turvallisuusominaisuus ja niitä on käytettävä aina turvaistuimen asennuksessa.


2.:n turvallisuus ja asennus autoon

2.5 Kiristyshihnojen kiinnittäminen

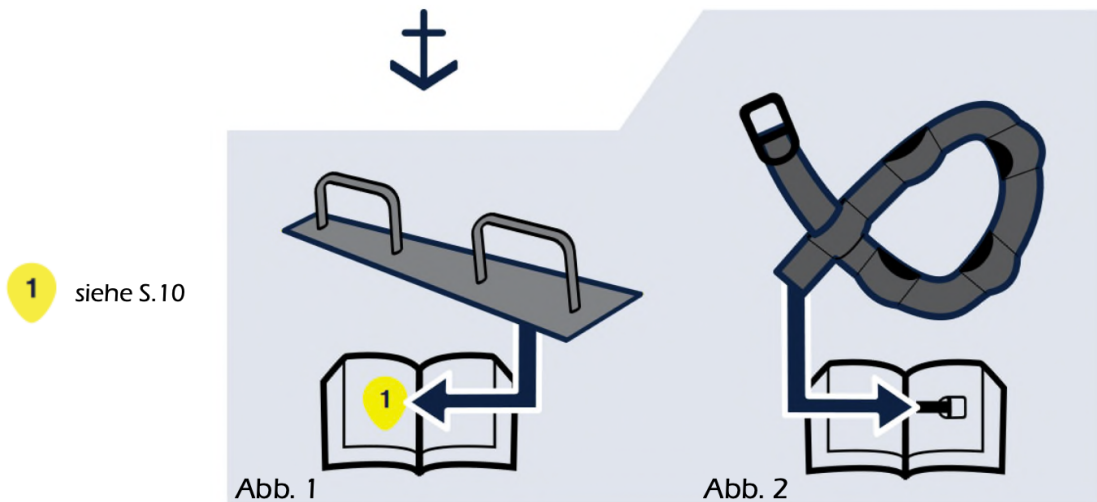

Jos ajoneuvossasi ei ole sopivia valmiiksi asennettuja kiinnityspisteitä (kuva 1), voit käyttää HERO-XL:n mukana toimitettuja alakiinnityshihnoja (kuva 2). Ajoneuvosta ja lastenistuimen asennuskohdasta riippuen hihnojen kiinnityspisteitä on useita (katso seuraava sivu):

Asenna alakiinnityshihnat (S) yksinkertaisesti kiertämällä hihna valitun kiinnityskohdan ympäri ja pujottamalla metallikiinnike hihnan aukkojen läpi (kuva 3). Kiinnityshihnassa on useita aukkoja, joita voidaan käyttää. Varmista, että käytät metallikiinnikkeeseen lähinnä olevaa aukkoa, jotta metallikiinnike asennetaan mahdollisimman lähelle ajoneuvon pohjaa. Kiristä sitten metallikiinnikettä hihnaa kiristääksesi ja toista sama toiselle hihnalle. Käytä HERO-XL:n asennuksessa aina kahta kiinnityskohtaa, joiden tulisi olla erillään toisistaan, jotta asennus on vakaampi.

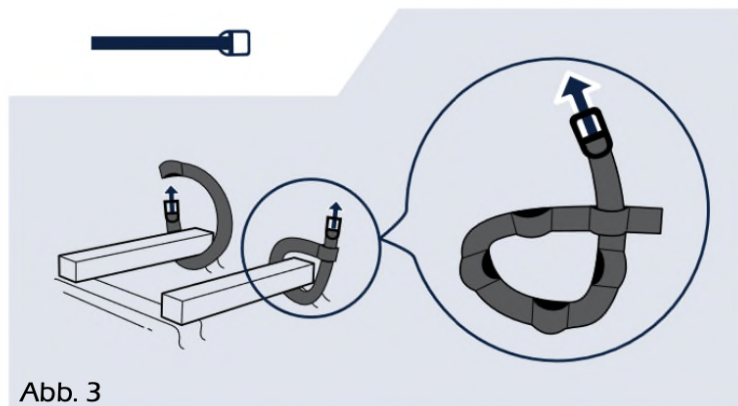

Kiinnityshihnan ohjausvaihtoehdot:

vaihtoehto a) Vie hihna esiasennetun kiinnityskohdan reunan ympäri (käytä tätä menetelmää vain, jos esiasennetut kiinnityskohdat eivät sovi suoraan alempiin kiinnityshihnoihin).


2.:n turvallisuus ja asennus autoon

vaihtoehto b) Kiinnitä hihna lastenistuimen edessä olevan istuinkiskon ympärille johtamalla hihna istuinkiskon ja ajoneuvon lattian välistä tai istuinkiskon sopivasta reiästä.

vaihtoehto c) Kiinnitä vyö lastenistuimen edessä olevan ajoneuvon istuimen istuinkytkimen ympärille viemällä vyö ajoneuvon istuimen selkänojan ja istuintyynyn välistä.

vaihtoehto d) Kiinnitä vyö lastenistuimen alla olevan istuinkiskon ympärille viemällä vyö istuinkiskon ja ajoneuvon lattian välistä tai istuinkiskon sopivan reiän läpi.

vaihtoehto e) Jos HERO-XL asennetaan etumatkustajan istuimelle eikä mikään edellä mainituista vaihtoehtoista ole mahdollinen, voit kiinnittää alakiinnityshihnat sopivaan kiinnityskohtaan ajoneuvon takaosassa ja viedä hihnat ajoneuvon istuimen alla ajoneuvon etuosaan. Varmista, että kiinnityshihnat eivät tule näkyviin istuimen etuosassa vaan sivuilla.

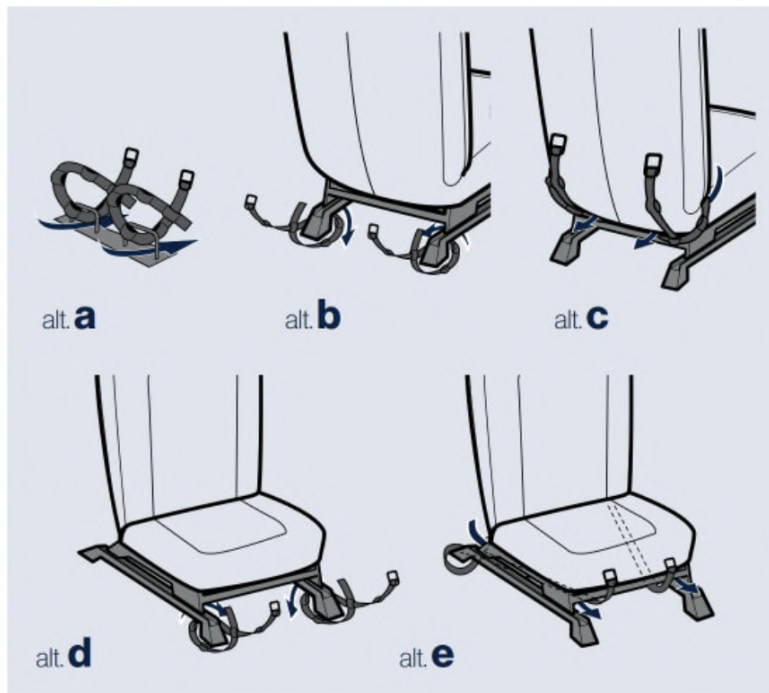


2.:n turvallisuus ja asennus autoon

2.6 Asennus ajoneuvoon

1) Avaa vetoketju ja avaa hihnan kiinnittimen kansi (O).


2) Aseta HERO-XL ajoneuvon istuimelle siten, että lastenistuimen takaosa on ajoneuvon etuosaa kohti. Säädä lapsen jalkatilaa siirtämällä lastenistuinta ajoneuvon istuimella eteen ja taakse. HERO-XL voidaan asentaa tiiviisti ajoneuvon istuimen selkänojaan, mutta sitä ei saa koskaan asentaa siten, että kantapää (J) ulottuu ajoneuvon istuimen reunan yli. Varmista, että kantapään (J) pystysuora linja (K) ei koskaan ylitä ajoneuvon istuimen reunaa.

Säädä lastenistuimen istumakulma painamalla kallistuskulman säätövipua (G) ja valitsemalla sopiva istumakulma. Valitse mahdollisimman pysty asento turvallisuuden maksimoimiseksi ja varmista samalla, että lapsen pää ei putoa eteenpäin nukkuessaan. Mukavuuden ja turvallisuuden vuoksi kallistuskulma on säädettävä pystyyn lapsen kasvaessa. Huomaa, että lastenistuimen kallistuskulma muuttuu hieman taaksepäin, kun kiristyshihnat (M) kiristetään, koska se painuu auton istuimen pehmusteeseen. Kun HERO-XL asennetaan etumatkustajan istuimelle, lastenistuimen takaosa voi koskettaa kojelautaa, mutta se ei ole välttämätöntä.

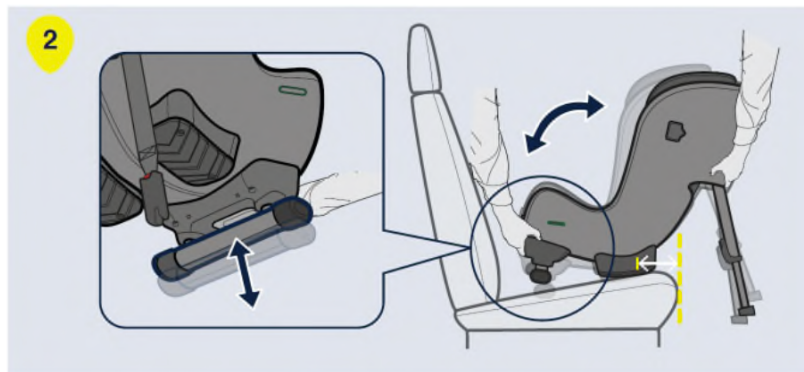


3) Avaa vyön kiinnitin (N). Vedä auton turvavyötä käsivarren pituuden verran ulos ja pujota se lähimpänä olevaan turvavyöaukkoon (D). Pujota vyö vyön kiinnittimen (N) läpi ja sitten vastakkaisella puolella olevaan turvavyöaukkoon (D). Kiinnitä ajoneuvon turvavyö vyön lukolla ja vedä voimakkaasti ajoneuvon turvavyön olkapääosasta, jotta se istuu tiukasti ja lastenistuin on kiinnitetty turvallisesti. Mitä voimakkaammin vedät, sitä tiukemmin istuin kiinnittyy. Kun lastenistuin on kiinnitetty tiukasti, sulje vyön kiinnitin (N) ja lukitse ajoneuvon turvavyö paikalleen. Varmista, että sekä olkapää- että lantiohihna ovat lukittuina yhdessä vyön lukitteeseen (N). Sulje vyön lukitteen kansi (O) ja sulje vetoketju. Saadaksesi vielä tukevamman ja vakaamman kiinnityksen, paina lastenistuinta alaspäin samalla kun vedät turvavyön olkapääosasta.

2.:n turvallisuus ja asennus autoon

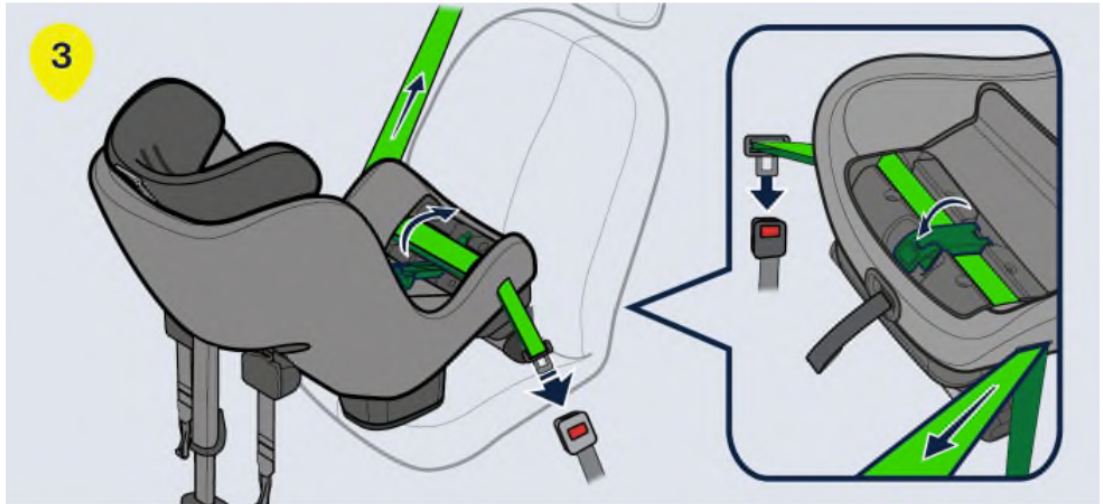


4) Vedä kiristyshihnat (M) lastenistuimesta ja kiinnitä ne ajoneuvon alaosassa oleviin kiinnityspisteisiin. Lisätietoja on tämän käyttöohjeen sivulla 10 kohdassa "Alaosassa olevat kiinnityspisteet". Paina lastenistuimen yläosaa alaspäin ja heiluttele lastenistuinta sivusuunnassa. HERO-XL:n itsestään kiristyvät hihnat (M) kiristyvät automaattisesti. Kiristämällä hihnat (M) säädät myös lastenistuimen lopullisen kallistuskulman. Paina lastenistuinta, kunnes se on kiinnittynyt tukevasti ja istuinkulma on sopiva. Tarkista, että valkoinen merkki on näkyvä alahihnassa. Jos merkkiä ei näy, alemmat kiinnityskohdat ovat liian lähellä lastenistuinta ja niitä on säädettävä. Jos tämä ei ole mahdollista, voit myös ristittää istuimen takana olevat kiristyshihnat saadaksesi hieman lisää tilaa.

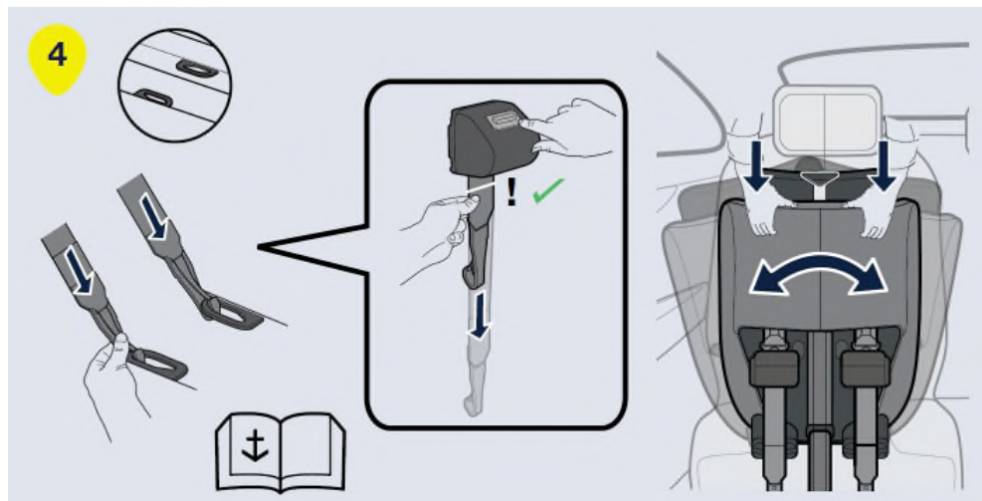


5) Vedä tukijalka (P) pois lastenistuimesta. Paina tukijalan painiketta (Q) ja vedä tukijalkaa (P) alaspäin, kunnes se koskettaa auton lattiaa. Vapauta tukijalan painike (Q) ja nosta lastenistuin ylöspäin, jotta tukijalka (P) tulee ulos, kunnes kuulet napsahduksen. Tukijalan (P) pitäisi nyt

3.Perusmallin käsittely

olla lukittu ja painautunut tiukasti ajoneuvon lattiaa vasten. Varmista, että tukijalka (P) on noin 10° kulmassa ajoneuvon etuosan suhteen. Tarkista uudelleen, että ajoneuvon turvavyö on edelleen tiukasti kiinnitetty ja että lantio- ja olkapäävyöt eivät ole löystyneet alaisten kiinnityshihnojen ja tukijalan kiristämisen yhteydessä. Jos ajoneuvon turvavyö on hieman löystynyt, kiristä se toistamalla tämän ohjeen vaihe 2 irrottamatta kiristyshihnoja.

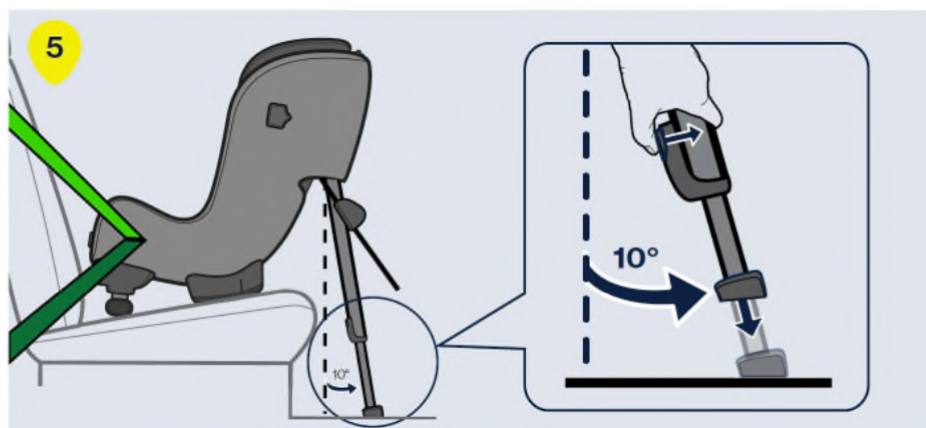

6) Työnnä ASIP (I) ASIP-liittimen (L) uriin ja työnnä sitä alaspäin, kunnes ASIP (I) lukittuu paikalleen. Jos ASIP-liittimestä (L) on muovikansi, poista se ja aseta se ASIP-liittimeen (L) istuimen vastakkaiselle puolelle ennen ASIP (I):n kiinnittämistä. Varmista, että ASIP (I) on kiinnitetty HERO-XL-lastenistuimen puolelle, joka on lähinnä ajoneuvon ovea.

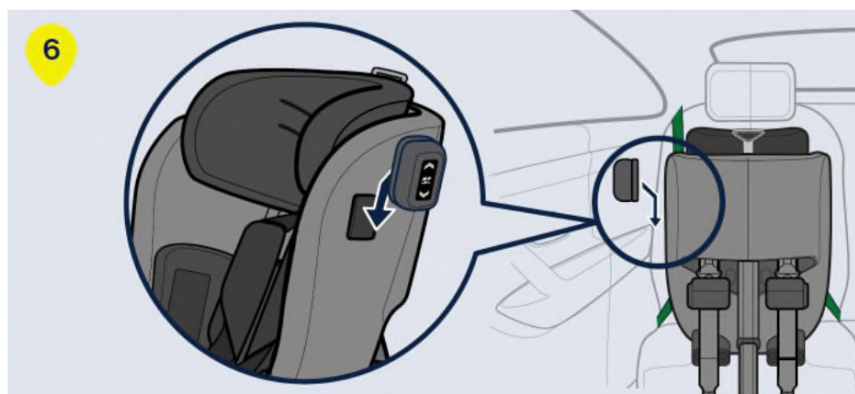

3 Perusmallin käsittely


3.1 Lapsen kiinnittäminen

Ennen kuin kiinnität lapsen HERO-XL-turvaistuimeen, varmista, että istuimessa on oikea lisäosa. HERO-XL on suunniteltu kasvamaan lapsen mukana ja takaamaan mukavan ja turvallisen istuimen lapsille. Lisäosaa suositellaan käytettäväksi, kunnes se on lapselle liian ahdas.


3.Perusmallin käsittely

HERO-XL on varustettu automaattisella pääntuella (A), joka laskeutuu automaattisesti oikeaan asentoon, kun integroitu turvavyö kiinnitetään. Optimaalisen asennon varmistamiseksi HERNIK suosittelee tämän toiminnon käyttöä aina, kun kiinnität lapsesi turvavyöhön. Ennen kuin asetat lapsen turvaistuimeen, varmista, että automaattinen pääntuki (A) on lukitsemattomassa asennossa.

7) Varmista, että pääntuen jarruvipu (H) on lukitsemattomassa asennossa. Jos vipu on lukitussa asennossa, paina se lukitsemattomaan asentoon.

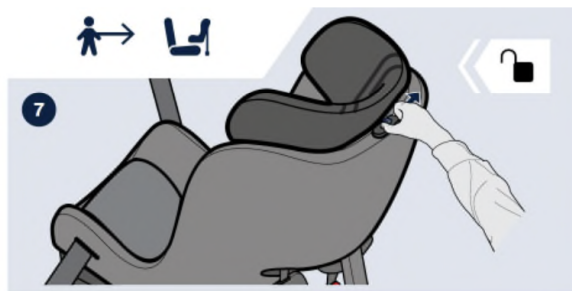


8) Irrota integroitu turvavyö painamalla vyön vapautuspainiketta (E) ja vetämällä molemmat olkahihnat (R) samanaikaisesti ulos. Vältä vetämästä vain yhdestä vyöstä, koska olkahihnat (R) voivat tällöin mennä epätasaisiksi. Varmista, että pääntuki (A) on yläasennossa:

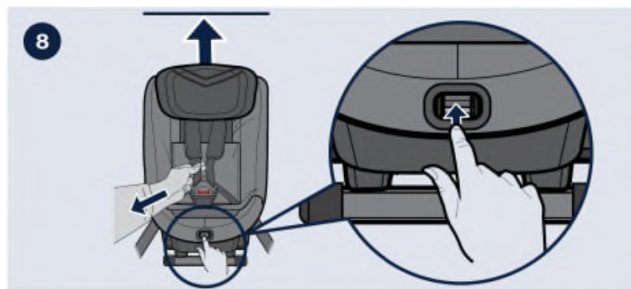


3.Perusmallin käsittely

9) Avaa vyön lukitus painamalla lukituksen avauspainiketta (C) ja aseta vyöt istuimen ulkopuolelle.

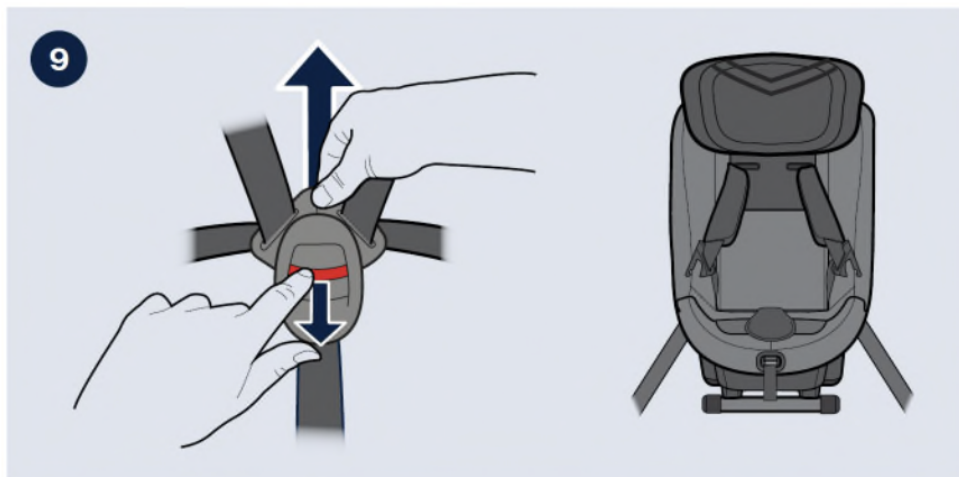


10) Aseta lapsi istuimelle ja aseta olkahihnat (R) lapsen olkapäiden yli. Lukitse integroitu turvavyö yhdistämällä ensin olkahihnoihin (R) kiinnitetyt lukon osat ja työntämällä ne sitten lukkoon, kunnes kuulet napsahduksen.

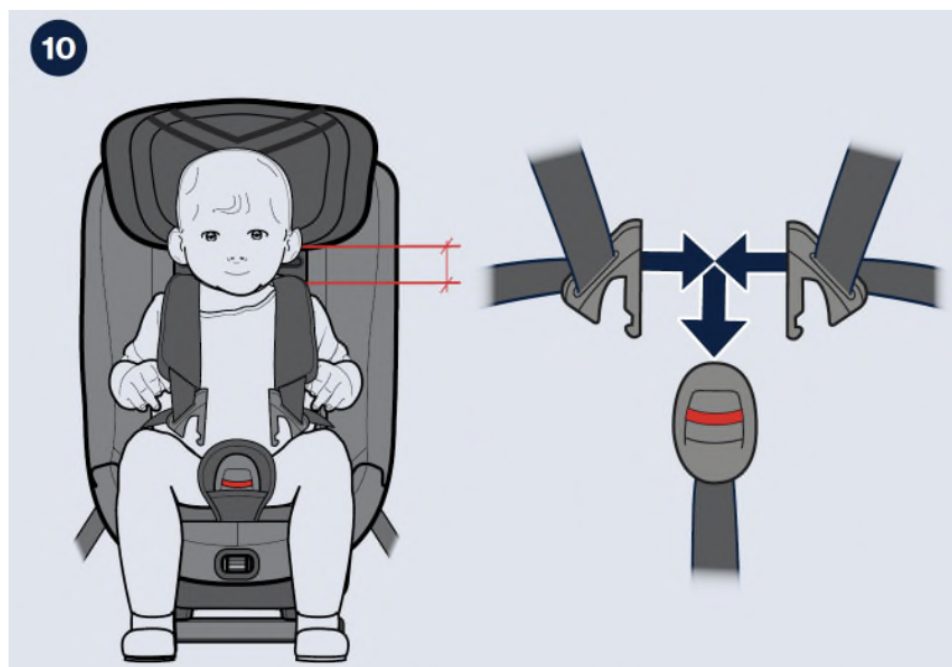

3.Perusmallin käsittely

11) Vedä olkahihnoista (R) kiristääksesi integroidun turvavyön lapsen lantion yli. Kun olkahihnat (R) ovat kiristettyinä, vedä turvavyön kiristyslaitetta (F) suoraan pois lastenistuimesta, kunnes vyö on tarpeeksi kireällä. Olkahihnojen (R) ja lapsen olkapäiden väliin ei saa mahtua enempää kuin yksi sormi. Vyötä kiristettäessä päätuki (A) liikkuu automaattisesti alas lapselle sopivaan asentoon.

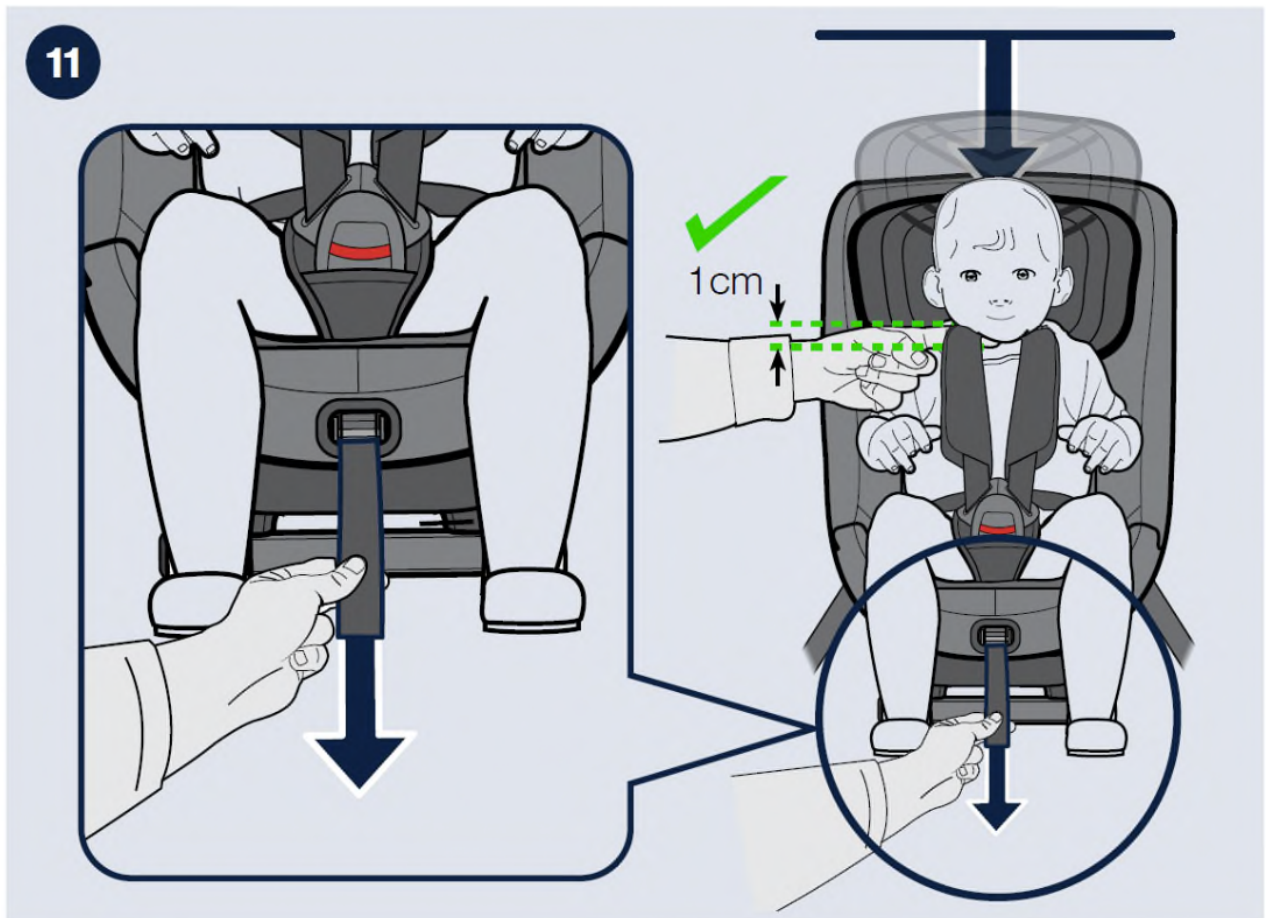

3.Perusmallin käsittely

3.2 Pääntuen säätäminen

HERO-XL on varustettu automaattisella pääntuella (A), joka varmistaa, että pääntuki (A) on aina lapsellesi sopivassa asennossa. Kun integroitu turvavyö kiristyy, pääntuki (A) laskeutuu oikeaan korkeuteen ja lukittuu automaattisesti. Kun vyö irrotetaan, pääntuki (A) nousee takaisin ylimmään asentoonsa ja lukitus avautuu. Optimaalisen asennon varmistamiseksi on suositeltavaa käyttää tätä toimintoa aina, kun kiinnität lapsesi turvavyöhön.

Pääntuki (A) lukittuu auki vain yläasennossaan. Siksi on tärkeää varmistaa, että pääntuki (A) palaa täysin yläasentoon integroidun turvavyön löysätessä, koska muuten pääntuki (A) jää lukittuun asentoon eikä laskeudu alas vyötä kiristettäessä. Jos haluat poistaa automaattisen säädön käytöstä ja pitää pääntuen (A) kiinteässä asennossa, aseta pääntuki (A) haluttuun asentoon ja siirrä pääntuen jarruvipu (H) lukittuun asentoon. Pääntuki (A) on nyt lukittu oikeaan korkeuteen eikä liiku, ennen kuin palautat pääntuen jarruvivun (H) takaisin lukitsemattomaan asentoon.

Jos käytät HERO-XL -turvaistuinta kiinteällä pääntuella (A), varmista, että pääntuki (A) on lapsellesi sopivassa asennossa. Varmista, että olkahihnat (R) kulkevat suoraan lapsen olkapäiden yli tai enintään 1 cm niiden yläpuolella istuimen läpi. Jos näin ei ole, säädä pääntukea (A) siirtämällä pääntuen jarruvipu (H) lukitsemattomaan asentoon ja työntämällä pääntuki (A) ylöspäin lukituksen avaamiseksi ja toistamalla sitten sama toimenpide.


HUOMAUTUS! Kun pääntuki on vedetty ulos, selkänojan pehmuste voidaan taittaa auki (kuva 1). Kun pääntuen korkeutta lasketaan, selkänojan pehmuste on taitettava vastaavasti (kuva 2).




3.Perusmallin käsittely

3.3 Irrottaminen ajoneuvosta


1) Avaa vetoketju ja avaa turvavyön kiinnikkeen kansi (O). Avaa ajoneuvon turvavyö painamalla turvavyön lukon punaista painiketta. Avaa turvavyön kiinnike (N) ja vedä ajoneuvon turvavyö vyöaukkojen (D) läpi poistaaksesi sen lastenistuimesta (kuva 1).

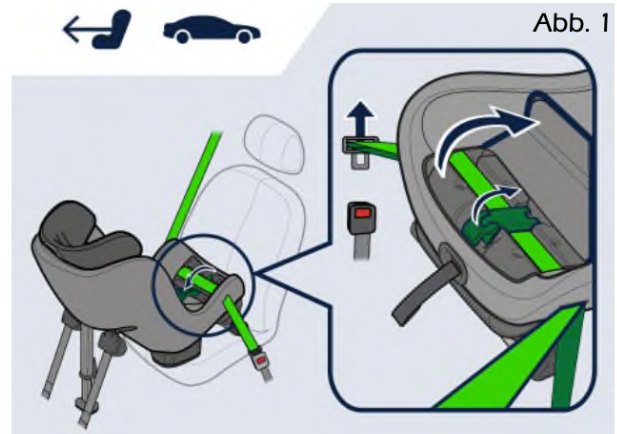

2) Vapauta alemmat kiinnityshihnat (M) pitämällä kiinni liitoskappaleista kädellä ja painamalla punaista painiketta peukalolla. Pidä liitoskappale kädessäsi ja vie se hitaasti takaisin turvaistuimeen. Varo, ettet päästä irti alemman kiinnityshihnan liitoskappaleesta, koska se vetäytyy automaattisesti suurella nopeudella (kuva 2).

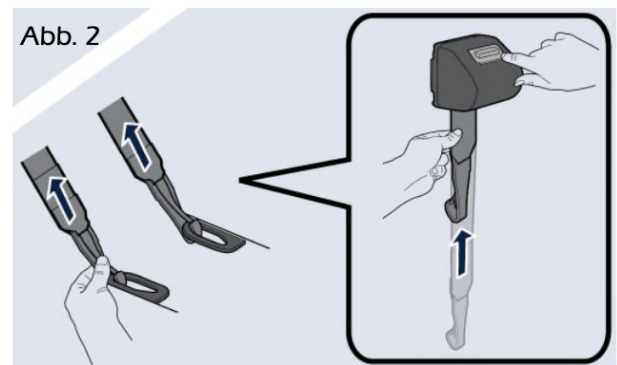

3) Paina tukijalan painiketta (Q) ja aseta tukijalka (P) lyhimpään asentoonsa (kuva 3).

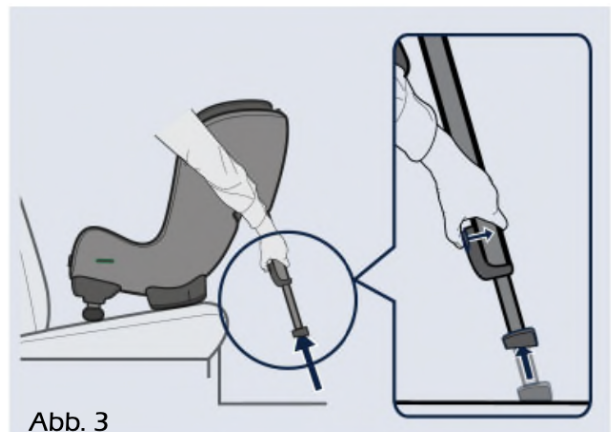

3.Perusmallin käsittely

4) Paina istuinkulman säätövipua (G) ja paina istuinkulman säätölaite (T) lyhimpään asentoon. Nosta HERO-XL ulos ajoneuvosta.

VINKKI! Lukitse turvavyön lukko ja kiristä turvavyö ennen kuin otat lastenistuimen pois ajoneuvosta. Voit sitten käyttää olkahihnoja (R) kantokahvana, jotta lastenistuin on helpompi nostaa ja kuljettaa ajoneuvon ulkopuolella.

TÄRKEÄÄ! Älä koskaan kanna lastenistuinta päntuesta (A).

3.4 Hoito ja huolto

Yleiset hoito- ja huolto-ohjeet

Lastenistuimen täyden suojavaikutuksen varmistamiseksi:

- Jos onnettomuuden törmäysnopeus on yli 10 km/h, lastenistuin voi vaurioitua ilman, että vaurioita on heti havaittavissa. Tällöin lastenistuin on vaihdettava uuteen. Hävitä vanha istuin asianmukaisesti.
- Tarkista säännöllisesti kaikki tärkeät osat vaurioiden varalta. Varmista erityisesti, että kaikki mekaaniset osat toimivat moitteettomasti.
- Vaurioiden välttämiseksi varmista, että lastenistuinta ei jää puristuksiin kovien esineiden (auton oven, istuinkiskoja jne.) väliin.
- Tarkistuta lastenistuin aina, jos se on vaurioitunut (esim. jos se on pudonnut lattialle).
- Älä koskaan voitele tai öljyä lastenistuimen osia.
- Jotta HERO-XL voi suojata lasta oikein, on ehdottomasti välttämätöntä asentaa ja käyttää sitä täsmälleen tämän käyttöohjeen mukaisesti.

4.Lisävarusteiden käyttö

4 Lisävarusteiden käyttö

4.1 Rintakehäpehmusteet

Rintakehäpehmusteet auttavat lasta vakauttamaan ylävartaloa, jos vartalon hallinta on heikentynyt. Pehmusteet kiinnitetään kiinnityslevyyn tarranauhalla. Ne voidaan irrottaa helposti. Kun optimaalinen asento on löydetty, pehmusteet kiinnitetään uudelleen painamalla niitä selkää kohti ja kääntämällä hieman. Rintakehätyynyjen päällinen on irrotettava ja pestävä.



4.2 Abduktiokiila

Abduktiokiila auttaa lasta pitämään jalat hallitussa asennossa. Se on kiinnitetty tukevaan asennustelineeseen ja sen syvyyttä ja korkeutta voidaan säätää pikakiristysvivulla. Abduktiokiilan päällinen on irrotettava ja pestävä.



4. Lisävarusteiden käyttö

4.3 Istumasyvyyden sovitin

Istumasyvyyden sovitin (1) avulla istumasyvyyttä voidaan lisätä noin 10 cm. Näin HERO-XL sopii myös isommille lapsille.

Istumasyvyyden sovitin on kiinnitetty tukevaan asennuskarmiin ja sen syvyyttä voidaan säätää pikakiristysvivulla (2).

Päällinen on irrotettava ja pestävä.



4.4 Tuki- ja turvapehmuste

Tuki- ja turvatyyny (1) antaa lapsellesi mahdollisuuden laskea kädet ja vakauttaa ylävartaloa.

Se kiinnitetään istuimen takaosaan kahdella tarranauhalla.

Päällinen on irrotettava ja pestävä.



5.Takuu

5 Takuu

HERNIK-tuotteet ovat uusinta tekniikkaa ja valmistettu tiukkojen laatustandardien mukaisesti. Jos sinulla on poikkeuksellisesti syytä valitukseen, GmbH takaa HERNIKin yleisten sopimusehtojen mukaisesti toimituksen jälkeen

- 24 kuukautta kaikille kiinteille osille
- 12 kuukautta kaikille liikkuville osille

Erikoistilauksille ei myönnetä takuuta, ellei se johdu valmistus- tai materiaalivirheestä. Tällöin valituksen kohteena oleva tuote korvataan 12 kuukauden ajan.

Tämän takuun mukaiset vaatimukset edellyttävät, että laitetta on käytetty asianmukaisesti käyttöohjeiden mukaisesti.


HERNIKin takuu ei ole voimassa, jos laitteeseen on tehty rakenteellisia muutoksia, jälkikäsitteilyä tai virheellisiä korjauksia ilman GmbH:n etukäteen antamaa lupaa.

Muut vaatimukset, riippumatta niiden oikeudellisesta perusteesta, erityisesti välittömän tai välillisen vahingon korvaaminen, ovat poissuljettuja.

6.Merkintä

6 Merkintä

Takapuolella on seuraava merkintä:

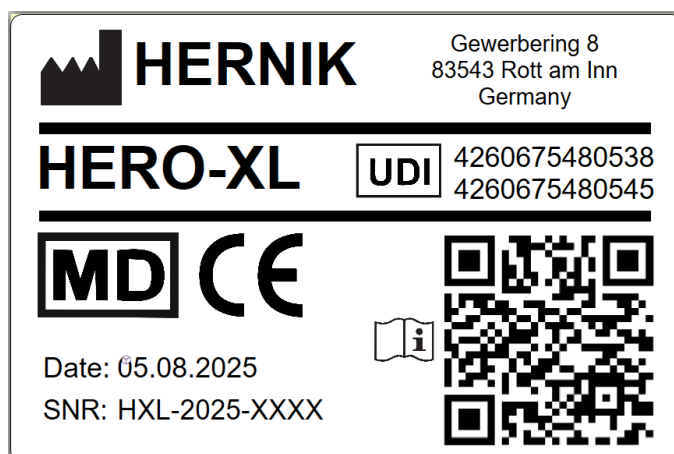

**Restraint device for special
requirements "S" (EN)**

Please read the user manual
before use!

7.Tekniset

7 Tekniset

HERO-XL	
SITZBREITE (Becken)	24 cm
SITZBREITE (Knie)	27 cm
SITZTIEFE	25 - 34 cm
RÜCKENHÖHE	28 - 45 cm
SCHEITELHÖHE	48 - 68 cm
Höhe Thoraxpelotten	13 - 20 cm
Gesamthöhe	65 - 82 cm
Gesamtbreite	43 cm
Gesamttiefe	55 cm
getestete Belastbarkeit	36 kg

muistiinpanot

muistiinpanot



HERNIK GmbH
Gewerbering 8
83543 Rott am Inn • Germany

 **+49 8039-9093930** •  **+49 8039-90939319**
 **info@hernik.de** •  **www.hernik.de**