

bruksanvisning

HERO



Innholdsfortegnelse

1	GENERELL INFORMASJON	4
1.1	Forord	4
1.2	Formål og indikasjon	4
1.3	Merknader	5
1.4	Erklæring om samsvar	5
1.5	Garantibetingelser	5
1.6	Service og reparasjoner	6
1.7	Brukeropplæring	6
1.8	Godkjenning/kompatibilitet med hensyn til kombinasjon med vanlige bilbarneseter	6
2	SIKKERHET OG MONTERING I BIL	7
2.1	Bli kjent med HERO-XL	7
2	Sikkerhetsinformasjon	9
2.	Bruk i kjøretøy	10
2.	Nedre festepunkter	10
2.5	Montering av spennbåndene	11
2.6	Montering i kjøretøyet	13
3	HÅNDTERING AV GRUNNMODELLEN	15
3.1	Festing av barnet	15
3	Justering av hodestøtten	19
3.	Demontering fra kjøretøyet	20
3.	Pleie og vedlikehold	21
4	BRUK AV EKSTRAUTSTYR	22

Innholdsfortegnelse

4.1	Brystkassestøtter	22
4.2	Abduksjonskile	22
4.3	Sittehøydeadapter	23
4.4	Støtte- og sikkerhetspolstring	23
5	GARANTI	24
6	MERKING	25
7	TEKNISKE DATA	26

1. Generell informasjon

1 Generell informasjon

1.1 Forord

Du har valgt bilbarnestolen «HERO-XL» og får herved et høykvalitetsprodukt fra vårt firma. Vi vil takke deg for tilliten du har vist oss.

For at du skal ha glede av dette produktet i lang tid og at det skal gjøre hverdagen din enklere, gir vi deg denne bruksanvisningen. Den viser deg hvordan du bruker produktet riktig og enkelt, samt nødvendig pleie og vedlikehold. For å unngå skader på grunn av feil bruk og for å sikre optimal bruk, må du lese følgende instruksjoner og anvisninger nøye. Hvis du har spørsmål eller problemer, kan du kontakte forhandleren. Vi ønsker deg problemfri bruk og håper at produktene våre oppfyller dine forventninger.

Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer i forhold til den utførelsen som er beskrevet i denne bruksanvisningen.

Før du monterer produktet i bilen og bruker det for første gang, må du lese og følge monteringsanvisningen på side 7–15.

Sørg for at bruksanvisningen forblir på produktet, slik at den er tilgjengelig for alle brukere.

HERNIK GmbH

1.2 Formål og indikasjon

HERO-XL er utviklet for transport av barn med spesielle behov (GMFCS 3-5; for eksempel uttalt muskelhypotoni med manglende kontroll over hode og overkropp) i motorvogner. Barn med dårlig kontroll over hodet og overkroppen (f.eks. cerebral parese, muskeldystrofi, hypotoni, motorisk utviklingsforstyrrelse) kan støttes i sin holdning ved hjelp av setevinkelen og spesielle polstringer som inngår i grunnutstyret, slik at sikker transport kan garanteres.

Viktig ekstrautstyr gjør det mulig å ta hensyn til spesielle behov, for eksempel montering av en stabil abduksjonsskil, bryststøtte, setedybdeadapter eller støtte- og sikkerhetspolstring.

Mer om dette i kapittelet «4.3 » (Tilpasning og tilbehør).

1. Generell informasjon

1.3 Merk

HERO-XL bilbarnestol for funksjonshemmede barn består av:

1. et standard barnesete fra Axxid (følg bruksanvisningen fra produsenten).
2. et tilpasningsmodul med tilbehør som gjør det mulig å utstyre bilbarnestolen etter barnets individuelle behov. Vennligst følg bruksanvisningen fra HERNIK GmbH.

1.4 Erklæring om samsvar

HERNIK GmbH erklærer på eget ansvar at bilbarnesetet «HERO-XL» oppfyller de grunnleggende kravene (vedlegg 1 til direktiv 93/42 EØF). Produktet er merket med CE-merket i henhold til ovennevnte direktiv.

1.5 Garantibetingelser

Garanti kan kun gis dersom produktet brukes under de angitte betingelser og til det tiltenkte formål. Produsenten er ikke ansvarlig for skader forårsaket av komponenter og reservedeler som ikke er godkjent av produsenten.

1. Generell informasjon

1.6 Service og reparasjoner

Service og reparasjoner på HERO-XL må kun utføres av fagforhandlere. Kontakt din autoriserte forhandler ved problemer. Ved reparasjoner får du kun originale reservedeler.

1.7 Bruksopplæring

Bilsetet leveres ferdig montert. Ved levering vil forhandleren instruere brukeren i bruk av hjelpemiddelet ved hjelp av bruksanvisningen. Forhandleren bør montere bilsetet i bilen sammen med brukeren. For å oppnå en optimal sittestilling er det nødvendig å justere bilsetet individuelt etter barnets behov. Dette bør alltid utføres av forhandleren.

1.8 Godkjenning/kompatibilitet med hensyn til kombinasjon med vanlige bilbarneseter

HERO-XL er inkludert alle tilbehørsdele en godkjent bilbarnestol i henhold til ECE R129/03. Enkelte deler og tilbehørsdele til HERO-XL er ikke godkjent for bruk sammen med andre bilbarnestoler som er tilgjengelige i handelen. Endringer kan føre til at godkjenningen av HERO-XL og den bilbarnestolen som er tilgjengelig i handelen, opphører.


2.Sikkerhet - og montering i bil

2 Sikkerhet - og montering i bil

2.1 Bli kjent med HERO-XL



2.Sikkerhet - og montering i bil

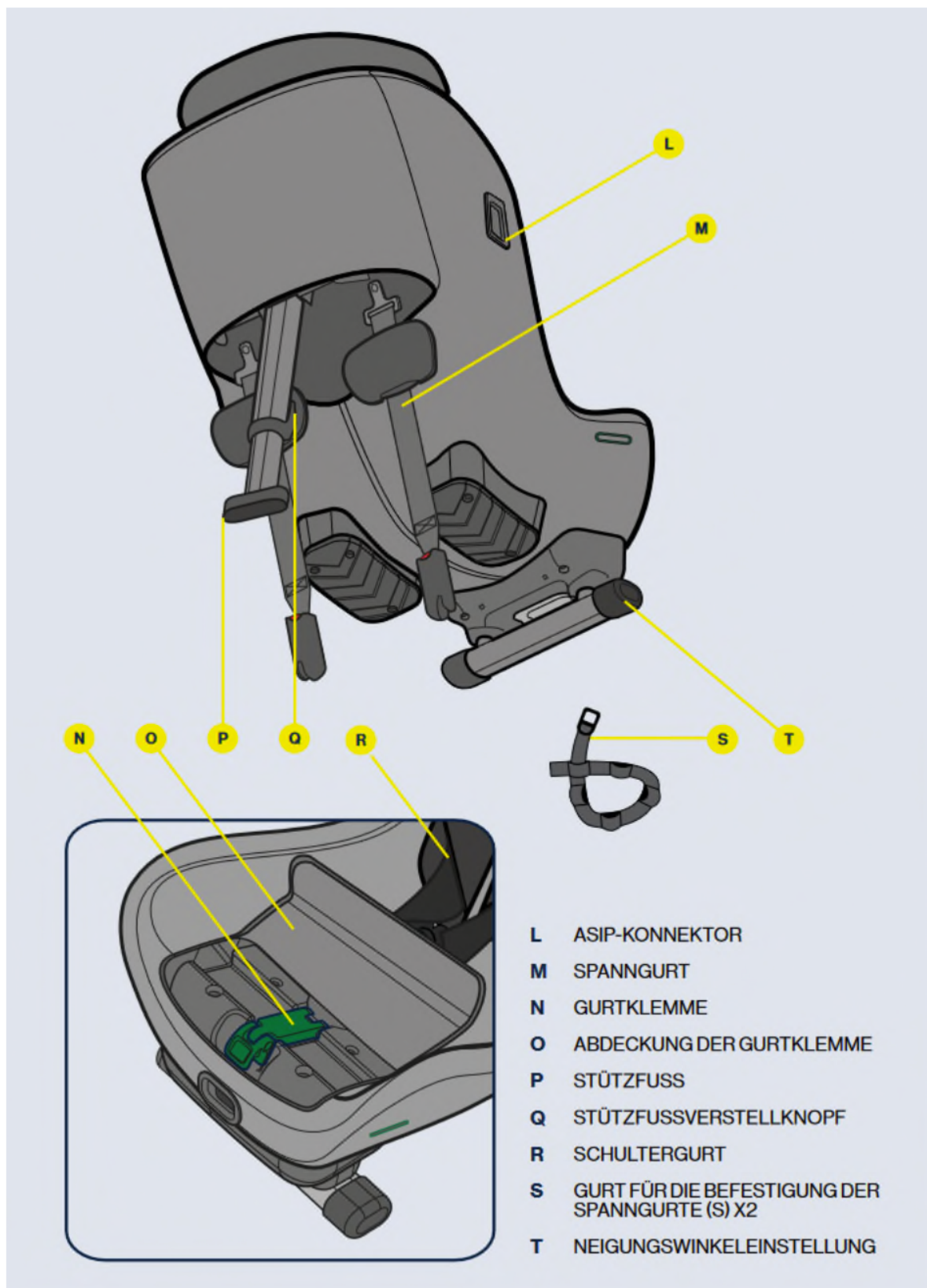

2.Sikkerhet - og montering i bil

2.2 Sikkerhetsinformasjon

HERO-XL må alltid festes i bilen i henhold til monteringsanvisningen, også når den ikke er i bruk. Et sete som ikke er festet, kan skade andre passasjerer i bilen ved en nødbremsing.

- HERO-XL må festes i bilen slik at den ikke blir klempt fast mellom forsetene eller bildørene.
- Sele må ikke være vridt eller klempt fast og må være strammet.
- Etter en ulykke må bilbarnesetet ikke brukes igjen.
- Sørg alltid for at barnet har på seg sikkerhetsbeltet.
- Kontroller før hver kjøretur at beltespennen er riktig låst og at fotstøtten er riktig plassert.
- Forsikre deg også om at alle faste gjenstander og plastdeler på HERO-XL er festet slik at de ikke kan klemmes fast av et bevegelig sete eller i en dør ved daglig bruk av bilen.
- Det anbefales å sikre bagasje og andre gjenstander på riktig måte.
- Bilsetet må ikke brukes uten trekk.
- Vær oppmerksom på at bilsetet kan bli for varmt for barnets hud hvis det står i solen uten tekstiltrekk i lengre tid.
- Trekk må kun erstattes med originaltrekk fra HERNIK.
- Ikke la barnet være uten tilsyn i bilbarnestolen.
- Ikke foreta endringer eller tillegg på enheten.
- Følg nøye installasjonsveiledningen fra HERNIK.
- Bruksanvisningen skal alltid oppbevares i bilen.

2.Sikkerhet - og montering i bil

2.3 Bruk i kjøretøy

HERO-XL rehabiliteringsbarnesete må kun monteres bakovervendt. Det passer på de fleste, men ikke alle seter. Se bruksanvisningen til bilen for informasjon om hvilke seter som er godkjent for bruk av barnesikringssystemer i henhold til ECE R16.

Bruksmuligheter HERO-XL (i-SIZE):

Beifahrersitz (kein aktiver Airbag)	JA/NEIN*
Beifahrersitz (aktiver Airbag)	NEIN
Rücksitz mit Dreipunkt-Sicherheitsgurt	JA
Sitz mit Zweipunkt-Sicherheitsgurt	NEIN
Seit- und rückwärtsgerichtete Sitze	NEIN



VIKTIG! Hvis du ønsker å montere HERO-XL barnesete på et sete med front-airbag, må airbagen deaktiveres i henhold til bilprodusentens anvisninger. Vær oppmerksom på at på enkelte biler kan airbagen kun deaktiveres av et autorisert servicecenter.

2.4 Nedre festepunkter

Spennestropper foran brukes for å forbedre sikkerheten for barn i biler ved å sikre en fast og stabil montering av bakovervendte barneseter med bilbelte. Denne festemåten øker sikkerheten for barnet ditt ved alle typer kollisjoner, inkludert velt og påkjøringsulykker.


Spennbåndene sikrer en passform og enkel montering i biler med forhåndsmonterte nedre festepunkter. Forhåndsmonterte nedre festepunkter i biler finnes ofte på seteskiner festet til gulvet, men andre plasseringer er også mulig. Du finner mer informasjon om brukbare festepunkter i bruksanvisningen til kjøretøyet. Hvis kjøretøyet ikke har nedre festepunkter, kan du bruke de ekstra stroppene for nedre festing (S) som følger med HERO-XL.

Monteringsanvisningen finner du i denne bruksanvisningen.

VIKTIG! Bruk aldri HERO-XL uten spennbåndene foran. De er en viktig sikkerhetsfunksjon og må alltid brukes når du monterer barnesetet.


2.Sikkerhet - og montering i bil

2.5 Montering av spennstropper

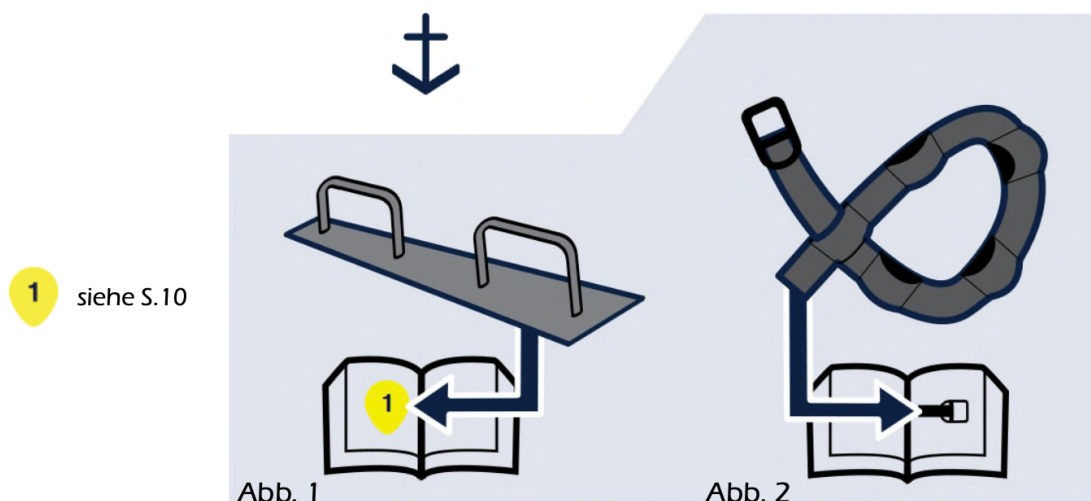

Hvis bilen din ikke har egnede forhåndsmonterte nedre festepunkter (fig. 1), kan du bruke stroppene for nedre festing som følger med HERO-XL (fig. 2). Avhengig av kjøretøy og seteposisjonen du ønsker å installere barnesetet i, finnes det forskjellige mulige festepunkter for å feste stroppene (se neste side):

For å installere stroppene for nedre festing (S), fører du stroppen rundt det valgte festepunktet og fører metallforankringen gjennom en av sporene på stroppen (fig. 3). Festestroppen har flere spor som kan brukes. Pass på å bruke spalten som er nærmest metallforankringen, slik at metallforankringen monteres så nær bilbunnen som mulig. Trekk deretter i metallforankringen for å stramme stroppen, og gjenta prosessen for den andre stroppen. Bruk alltid to festepunkter når du monterer HERO-XL, og sørg for at disse er adskilt fra hverandre, da dette gir en mer stabil montering.

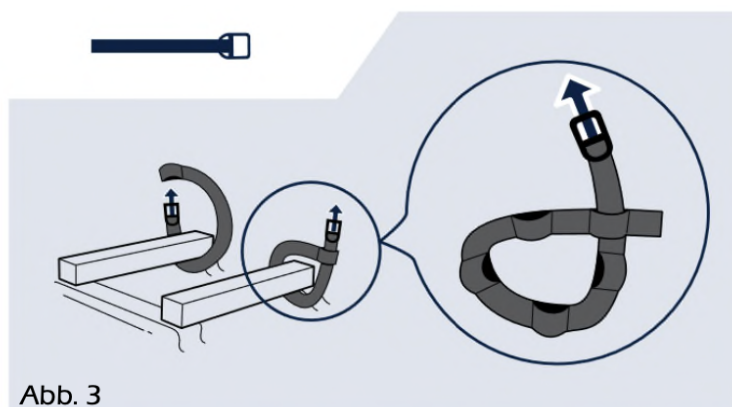

Alternativer for føring av festestroppen:

2.Sikkerhet - og montering i bil


alt. a) Før stroppen rundt kanten av det forhåndsinstallerte festepunktet (bruk denne metoden bare hvis de forhåndsinstallerte festepunktene ikke passer direkte sammen med de nedre festestroppene).

alternativ b) Fest stroppen rundt seteskinnen foran barnesetet ved å føre stroppen mellom seteskinnen og bilgulvet eller gjennom et passende hull i seteskinnen.

alt. c) Fest beltet rundt seteledet på bilsetet foran barnesetet ved å føre beltet mellom ryggstøtten på bilsetet og setepolstringen.

alt. d) Fest beltet rundt seteskinnen under barnesetet ved å føre beltet mellom seteskinnen og bilgulvet eller gjennom et passende hull i seteskinnen.

alt. e) Hvis HERO-XL monteres på et passasjersele og ingen av de ovennevnte alternativene er mulige, kan du feste beltene for den nedre festingen til et egnet festepunkt i bakenden av kjøretøyet og føre beltene under kjøretøyet sete til den fremre delen av kjøretøyet. Pass på at festestroppene ikke kommer til syne foran på setet, men på sidene.

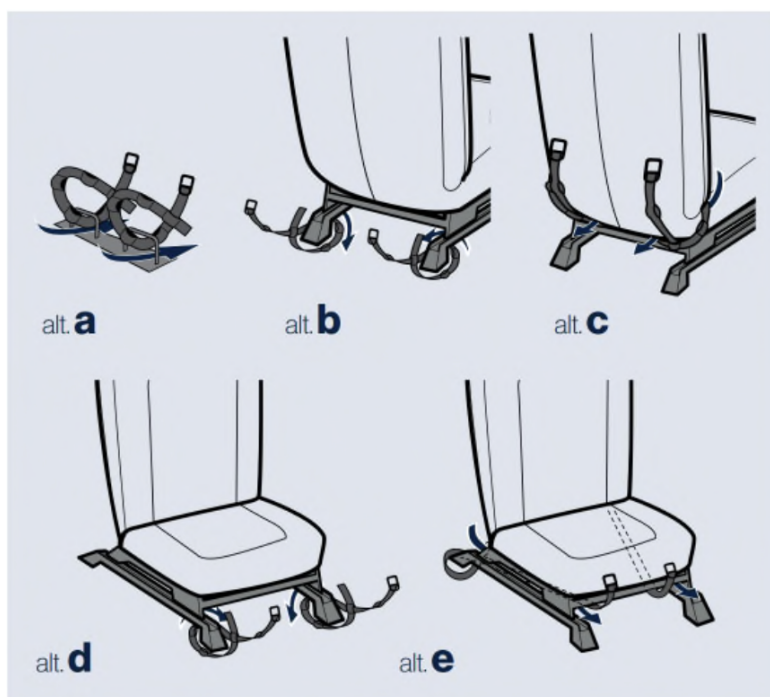


2.Sikkerhet - og montering i bil

2.6 Montering i kjøretøyet


- 1) Åpne glidelåsen og åpne dekselet til belteklammen (O).
- 2) Plasser HERO-XL på bilsetet med baksiden av barnesetet vendt mot fronten av bilen. Juster benplassen for barnet ved å flytte barnesetet fremover og bakover på bilsetet. HERO-XL kan monteres tett inntil bilens ryggstøtte, men må aldri monteres slik at hælen (J) henger over kanten av bilsetet. Pass på at den vertikale linjen (K) på hælen (J) aldri krysser kanten av bilsetet.

Juster barnesetet ved å trykke på spaken for justering av hellingsvinkelen (G) og velge en passende setevinkel. For maksimal sikkerhet bør du velge en så oppreist stilling som mulig, samtidig som du sørger for at barnets hode ikke faller fremover når det sover. Av hensyn til komfort og sikkerhet bør hellingsvinkelen justeres til en mer oppreist stilling etter hvert som barnet vokser. Vær oppmerksom på at barnesetet vipper litt mer bakover når spennbåndene (M) strammes, da det synker ned i polstringen på bilsetet. Når HERO-XL monteres på et passasjersele, er det mulig, men ikke nødvendig, at baksiden av barnesetet kommer i kontakt med dashbordet.

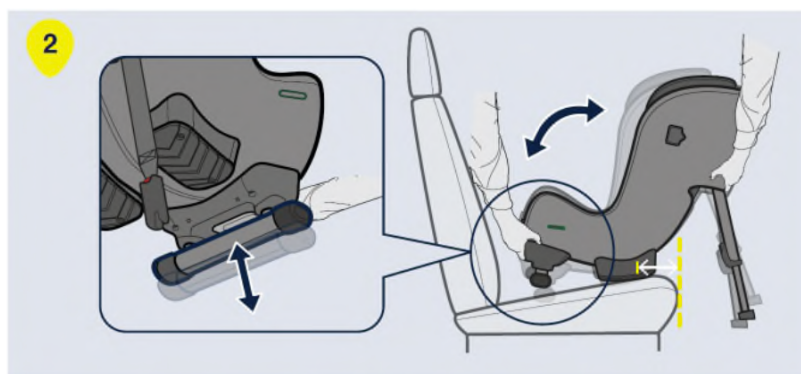


- 3) Åpne belteklemmen (N). Trekk ut en armlengde av bilbeltet og før det gjennom sikkerhetsbelteåpningen (D) nærmest deg. Før beltet gjennom belteklemmen (N) og deretter gjennom sikkerhetsbelteåpningen (D) på motsatt side. Fest bilbeltet med beltespennen og trekk kraftig i skulderdelen av bilbeltet slik at det sitter stramt og barnesetet er sikkert festet. Jo hardere du trekker, jo fastere blir installasjonen. Når barnesetet er festet, lukker du belteklipsen (N) og låser bilbeltet i sin posisjon. Kontroller at både skulder- og hofteselen er låst sammen i belteklipsen (N). Lukk belteklipsdekselet (O) og lukk glidelåsen. For å oppnå en enda fastere og mer stabil festing, trykk barnesetet ned mens du trekker i skulderdelen av sikkerhetsbeltet.

2.Sikkerhet - og montering i bil

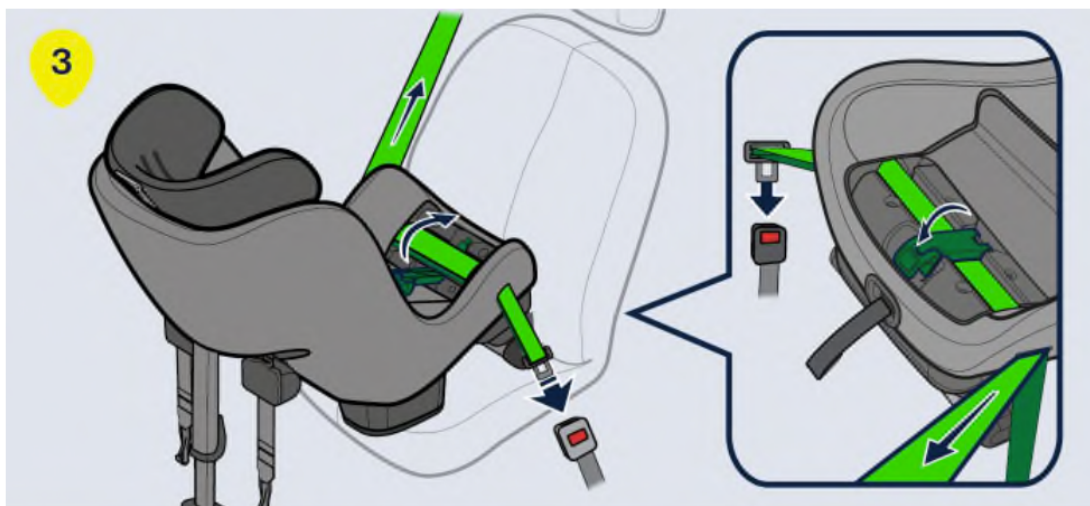


4) Trekk strammebåndene (M) ut av barnesetet og fest dem til de nedre festepunktene i bilen. Du finner mer informasjon i avsnittet «Nedre festepunkter» på side 10 i denne bruksanvisningen. Trykk toppdelen av barnesetet ned og ryst barnesetet fra side til side. De selvspennende stroppene (M) på HERO-XL blir da automatisk strammet. Ved å stramme stroppene (M) stiller du også inn den endelige hellingsvinkelen på barnesetet. Trykk på barnesetet til det sitter godt fast og du har oppnådd en passende sittevinkel. Kontroller at den hvite markeringen på den nedre festestroppen er synlig. Hvis ikke, er de nedre festepunktene for nær barnesetet og må justeres. Hvis dette ikke er mulig, kan du også krysse spennstroppene bak setet for å få litt mer avstand.

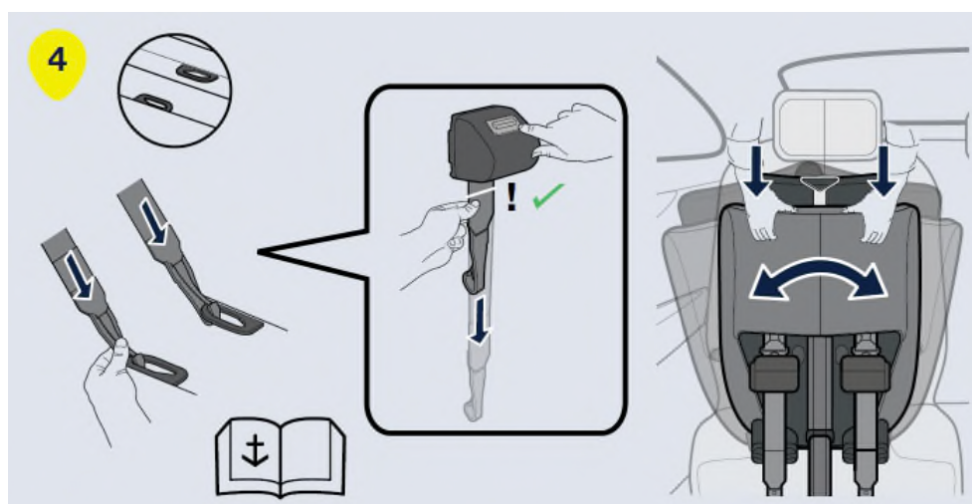


5) Trekk støttebenet (P) ut av barnesetet. Trykk på støttebenknappen (Q) og trekk støttebenet (P) nedover til det berører bilgulvet. Slipp støttefotknappen (Q) og løft barnesetet opp for å trekke støttefoten (P) videre ut til du hører et klikk. Støttebenet (P) skal nå være låst og presset

3. Håndtering av grunnmodellen

fast mot bilgulvet. Pass på at støttebenet (P) er vippt ca. 10° mot bilens front. Kontroller igjen at bilens sikkerhetsbelte fortsatt er stramt og at hofteselen ikke har løsnet når du strammer de nedre festestroppene og støttebenet. Hvis bilbeltet har mistet litt spenning, strammer du det ganske enkelt ved å gjenta trinn 2 i denne veiledningen uten å løsne spennstroppene.

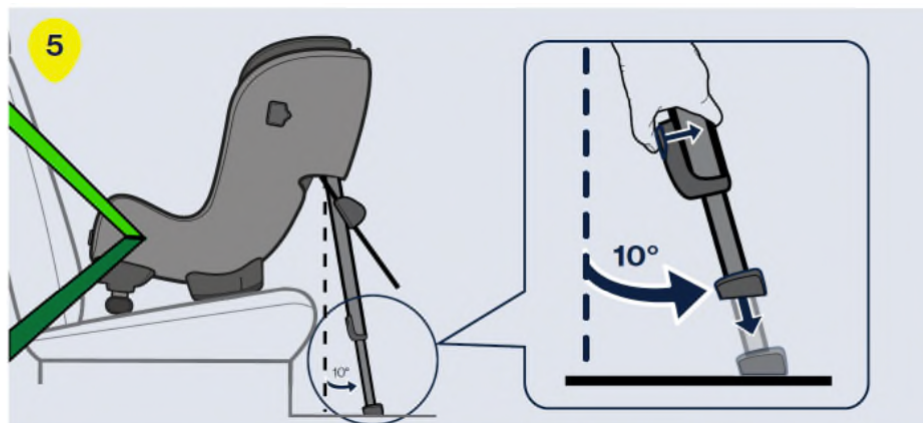

6) Skyv ASIP (I) inn i sporene på ASIP-kontakten (L) og skyv den nedover til ASIP (I) klikker på plass. Hvis det er en plastdeksel på ASIP-kontakten (L), fjern den og plasser den på ASIP-kontakten (L) på motsatt side av setet før du monterer ASIP (I). Sørg for at ASIP (I) er montert på siden av HERO-XL barnesetet som er nærmest bildøren.

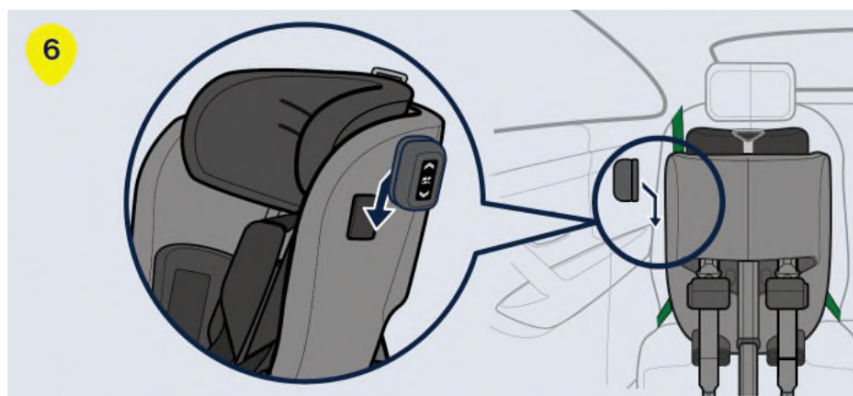

3 Håndtering av grunnmodellen

3.1 Spenne fast barnet

Før du fester barnet i HERO-XL barnesetet, må du kontrollere at riktig innlegg er i setet. HERO-XL er utviklet for å vokse med barnet ditt og sikre en komfortabel og sikker sittestilling for barn. Det anbefales å bruke innlegget til det blir for trangt for barnet ditt.

HERO-XL er utstyrt med en automatisk nakkestøtte (A) som automatisk senkes til riktig posisjon når det integrerte sikkerhetsbeltet festes. For å sikre optimal posisjon anbefaler


3.Håndtering av grunnmodellen

HERNIK at du bruker denne funksjonen hver gang du fester barnet. Før du setter barnet i barnesetet, må du kontrollere at den automatiske hodestøtten (A) er i ulåst posisjon.

7) Kontroller at bremsespaken til hodestøtten (H) er i ulåst posisjon. Hvis spaken er i låst posisjon, trykk den til den er i ulåst posisjon.




8) Løsne den integrerte sikkerhetsbeltet ved å trykke på utløserknappen for beltet (E) og trekk begge skulderbeltene (R) ut samtidig. Unngå å trekke i bare én belte, da dette kan føre til at skulderbeltene (R) blir ujevne. Kontroller at hodestøtten (A) er i øverste posisjon:

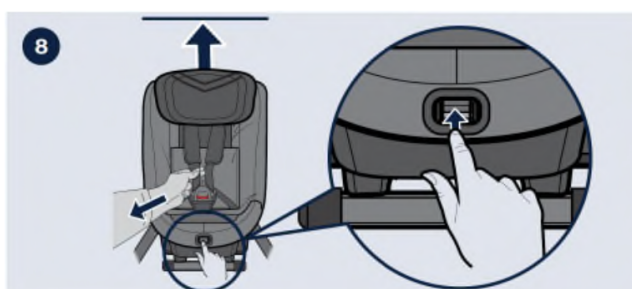


3.Håndtering av grunnmodellen

9) Lås opp beltespennen ved å trykke på låseknappen (C) og legg beltene utenfor setet.

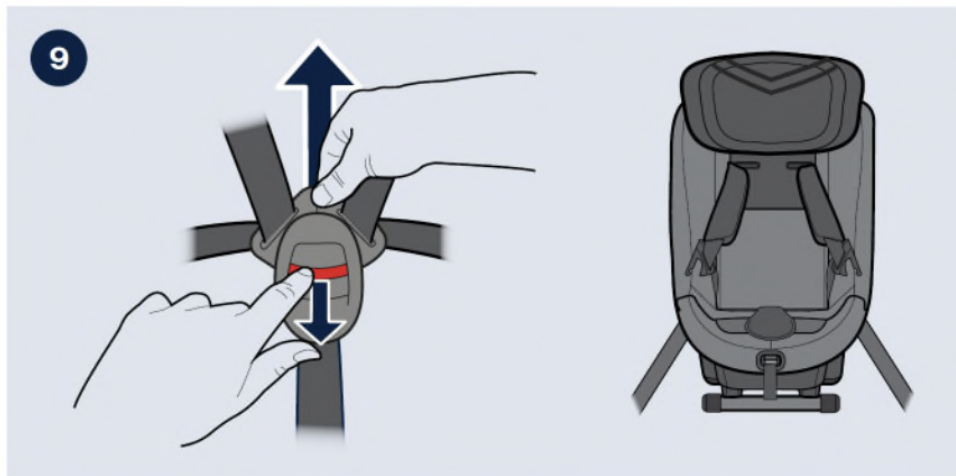


10) Sett barnet i setet og legg skulderbeltene (R) over barnets skuldre. Lås det integrerte sikkerhetsbeltet ved først å føre delene av låsen som er festet til skulderbeltene (R) sammen og deretter skyve dem inn i låsen til du hører et klikk.

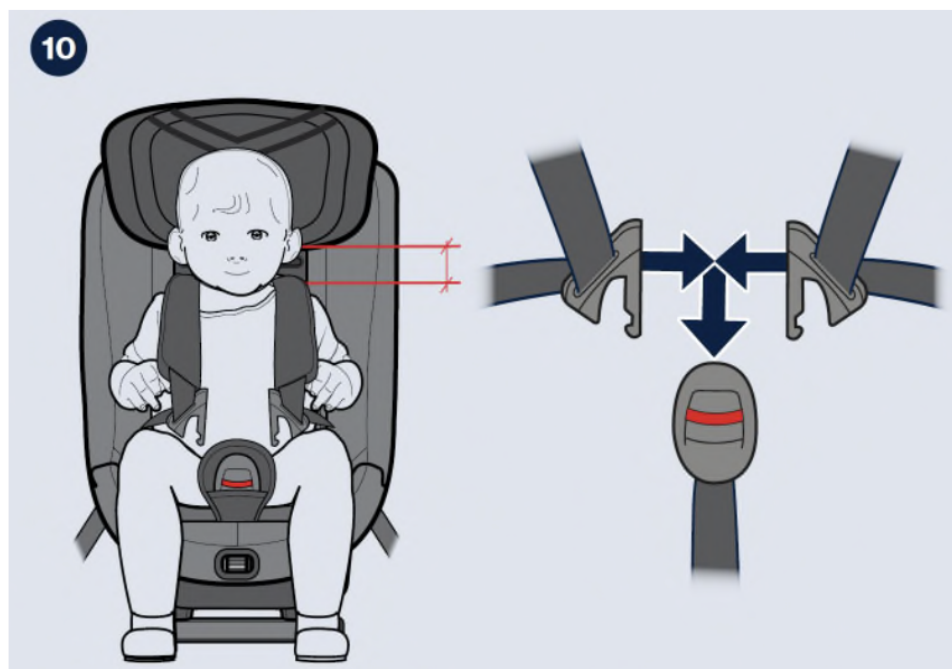

3.Håndtering av grunnmodellen

11) Trekk i skulderbeltene (R) for å stramme det integrerte sikkerhetsbeltet over barnets hofter. Mens skulderbeltene (R) er strammet, trekker du beltestrammeren (F) rett bort fra barnesetet til beltet sitter stramt nok. Det skal ikke være mer enn en finger mellom skulderbeltene (R) og barnets skuldre. Når beltet strammes, beveger hodestøtten (A) seg automatisk ned til en posisjon som passer for barnet ditt.

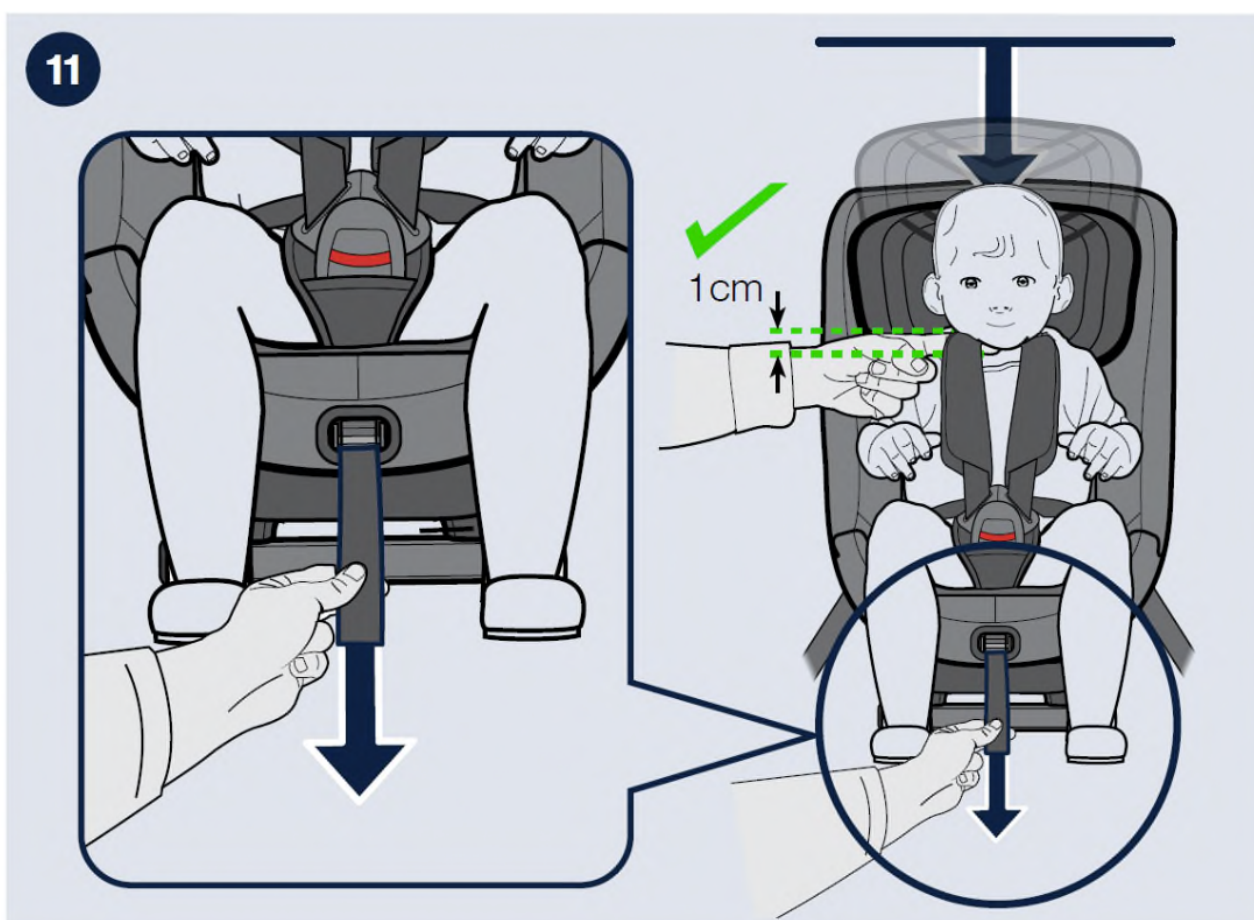

3. Håndtering av grunnmodellen

3.2 Justering av hodestøtten

HERO-XL er utstyrt med en automatisk nakkestøtte (A) som sørger for at nakkestøtten (A) alltid er i den optimale posisjonen for barnet ditt. Når den integrerte sikkerhetsbeltet strammes, senkes nakkestøtten (A) til riktig høyde og låses automatisk. Når selen løsnes, beveger hodestøtten (A) seg tilbake til sin øverste posisjon og låses opp. For å sikre optimal posisjon anbefales det å bruke denne funksjonen hver gang du spenner fast barnet.

Hodestøtten (A) låses kun opp i sin øverste posisjon. Det er derfor viktig å sørge for at hodestøtten (A) går helt tilbake til sin øverste posisjon når du løsner den integrerte sikkerhetsbeltet, da hodestøtten (A) ellers forblir låst og ikke beveger seg nedover når beltet strammes. Hvis du vil deaktivere den automatiske justeringen og holde hodestøtten (A) i en fast posisjon, setter du hodestøtten (A) i ønsket posisjon og beveger bremsespaken på hodestøtten (H) til låst posisjon. Nakkestøtten (A) er nå låst i riktig høyde og beveger seg ikke lenger før du setter bremsespaken til nakkestøtten (H) tilbake i ulåst posisjon.

Hvis du bruker HERO-XL med fast nakkestøtte (A), må du kontrollere at nakkestøtten (A) er i riktig posisjon for barnet. Kontroller at skulderbeltene (R) går rett over skuldrene til barnet eller maksimalt 1 cm over skuldrene gjennom setet. Hvis ikke, justerer du hodestøtten (A) ved å sette bremsespaken på hodestøtten (H) i ulåst posisjon og skyve hodestøtten (A) oppover for å låse den opp, og deretter gjenta prosessen.

MERK! Når hodestøtten er trukket ut, kan ryggputen foldes ut (fig. 1). Så snart høyden på hodestøtten reduseres igjen, må ryggputen foldes ned tilsvarende (fig. 2).



Abb. 1

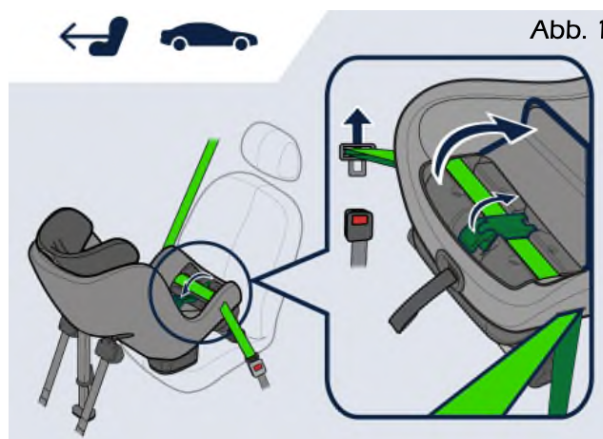


Abb. 2


3. Håndtering av grunnmodellen

3.3 Demontering fra kjøretøyet


1) Åpne glidelåsen og åpne dekslet til belteklemmen (O). Lås opp bilbeltet ved å trykke på den røde knappen på beltelåsen. Åpne belteklemmen (N) og trekk bilbeltet gjennom beltesporene (D) for å fjerne det fra barnesetet (fig. 1).



2) Lås opp de nedre festestroppene (M) ved å holde fast koblingene med hånden og trykke på den røde knappen med tommelen. Hold koblingen i hånden og før den sakte tilbake til barnesetet. Pass på at du ikke slipper koblingen til den nedre festestroppen, da den trekkes tilbake automatisk med høy hastighet (fig. 2).

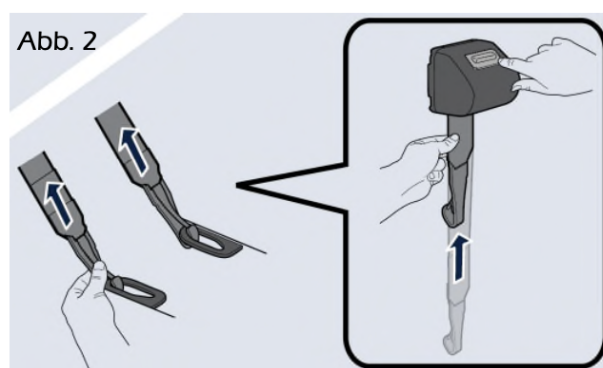

3) Trykk på støttefotknappen (Q) og sett støttefoten (P) i korteste posisjon (fig. 3).

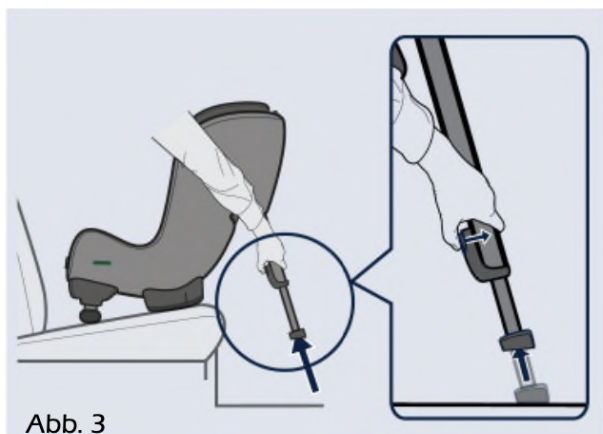

3.Håndtering av grunnmodellen

4) Trykk på spaken for setevinkeljustering (G) og trykk setevinkeljusteringen (T) til korteste posisjon. Løft HERO-XL ut av bilen.

TIPS! Lås beltespennen og stram selen før du tar barnesetet ut av bilen. Du kan da bruke skulderbeltene (R) som bærehåndtak for å løfte barnesetet lettere ut og transportere det utenfor bilen.

VIKTIG! Bær aldri barnesetet i nakkestøtten (A).

3.4 Pleie og vedlikehold

Generelle pleie- og vedlikeholdsanvisninger

For å sikre at barnesetet gir full beskyttelse:

- Ved en kollisjon med en kollisjonshastighet over 10 km/t kan barnesetet bli skadet uten at skaden er umiddelbart synlig. I så fall må barnesetet skiftes ut. Kast det på riktig måte.
- Kontroller alle viktige deler regelmessig for skader. Sørg for at alle mekaniske deler fungerer som de skal.
- For å unngå skader må du passe på at barnesetet ikke kommer i klem mellom harde gjenstander (bildør, seteskiner osv.).
- La barnesetet alltid kontrolleres hvis det er skadet (f.eks. hvis det har falt på gulvet).
- Smør eller olje aldri deler av barnesetet.
- For at den skal kunne beskytte barnet ditt på riktig måte, er det absolutt nødvendig at du monterer og bruker HERO-XL nøyaktig som beskrevet i denne bruksanvisningen.

4. Bruk av ekstraustyr

4 Bruk av ekstraustyr

4.1 Brystplater

Brystpelotene hjelper barnet ditt med å stabilisere overkroppen når kontrollen over overkroppen er begrenset. Pelotene festes til en monteringsplate med borrelås. De kan løsnes med lett kraft. Når du har funnet en optimal posisjon, bør pelotene festes på nytt ved å trykke dem mot ryggen og vri dem litt. Trekk til thoraxpelotene er avtakbart og vaskbart.



4.2 Abduksjonskile

Abduksjonskilen hjelper barnet ditt med å holde bena i en kontrollert posisjon. Den er festet til en stabil monteringsramme og kan justeres i dybde og høyde ved hjelp av hurtigspenningshåndtak. Trekk til abduksjonskilen kan tas av og vaskes.



4. Bruk av ekstra utstyr

4.3 Sittedybdeadapter

Med sittedybdeadapteren (1) kan sittedybden forlenges med ca. 10 cm. Dermed kan HERO-XL også brukes til større barn.

Sittehøydeadapteren er festmontert på et stabilt monteringsramme og kan justeres i dybden ved hjelp av hurtigspenningshåndtak (2).

Trekk er avtakbart og vaskbart.



4.4 Støtte- og sikkerhetspolstring

Støtte- og sikkerhetspolstringen (1) gjør at barnet kan legge armene ned og dermed stabilisere overkroppen.

Den festes med to borrelåsstropper på ryggdelen av setet.

Trekkene er avtakbare og vaskbare.



5.Garanti

5 Garanti

HERNIK-produkter er i henhold til den nyeste teknologien og er produsert i henhold til strenge kvalitetsnormer. Skulle du mot formodning ha grunn til å klage, garanterer GmbH i henhold til HERNIKs generelle forretningsbetingelser etter levering

- 24 måneder på alle faste komponenter
- 12 måneder på alle bevegelige deler

Det gis ingen garanti på spesialtilpassede produkter, med mindre det er snakk om produksjons- eller materialfeil. I slike tilfeller erstattes det reklamerte produktet innen 12 måneder.

Krav i henhold til denne garantien forutsetter at enheten er brukt på riktig måte i henhold til bruksanvisningen.


Ved konstruksjonsendringer, etterarbeid eller feilaktig reparasjon uten forhåndsavtale med GmbH, bortfaller HERNIKs garantikrav.

Videre krav, uansett rettslig grunnlag, spesielt krav på erstatning for direkte eller indirekte skader, er utelukket.

6.Merking

6 Merking

På baksiden finner du følgende merking:

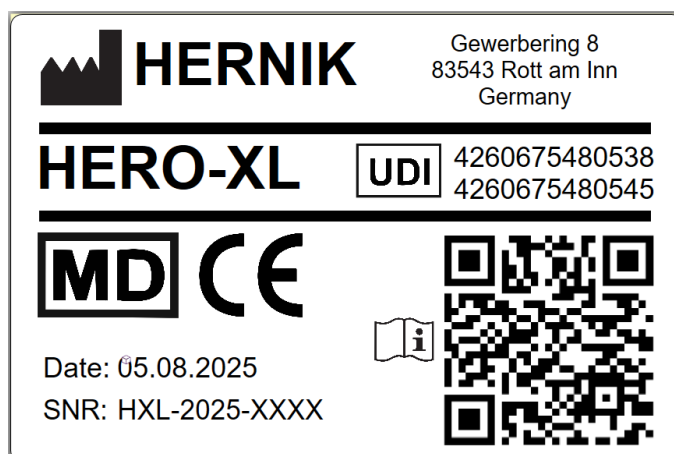

**Restraint device for special
requirements "S" (EN)**

Please read the user manual
before use!

7.Tekniske

7 Tekniske

HERO-XL	
SITZBREITE (Becken)	24 cm
SITZBREITE (Knie)	27 cm
SITZTIEFE	25 - 34 cm
RÜCKENHÖHE	28 - 45 cm
SCHEITELHÖHE	48 - 68 cm
Höhe Thoraxpelotten	13 - 20 cm
Gesamthöhe	65 - 82 cm
Gesamtbreite	43 cm
Gesamttiefe	55 cm
getestete Belastbarkeit	36 kg

Notater

Notater



HERNIK GmbH
Gewerbering 8
83543 Rott am Inn • Germany

 **+49 8039-9093930** •  **+49 8039-90939319**
 **info@hernik.de** •  **www.hernik.de**