

instrukcja obsługi

IPA1 **LGT**



Spis treści

1	INFORMACJE OGÓLNE	4
1.1	Przedmowa	4
1.2	Przeznaczenie i wskazania	5
1.3	Wskazówki	5
1.4	Warunki gwarancji	5
1.5	Serwis i naprawy	6
1.6	Szkolenie użytkowników	6
1.7	Deklaracja zgodności	6
1.8	Zatwierdzenie/kompatybilność w zakresie połączenia z dostępnymi w handlu fotelikami dziecięcymi 6	
1.9	Przeciwwskazania	6
2	BEZPIECZEŃSTWO I MONTAŻ W POJEŹDZIE	7
2.1	Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	7
2.2	Poznaj IPAI-LGT	9
2.3	Montaż w samochodzie – z ISOFIX	10
2.4	Regulacja zagłówka	12
2.5	Zapinanie pasów	13
3	OBSŁUGA MODELU PODSTAWOWEGO	15
3.1	Regulacja 5-punktowego pasa bezpieczeństwa	15
3.2	Regulacja poduszek piersiowych	15
3.3	Regulacja kąta nachylenia siedziska	16
4	KORZYSTANIE Z OPCJONALNYCH AKCESORIÓW	18
4.1	Klin odwodzący	18

Spis treści

4.2	Adapter głębokości siedziska	20
4.3	Poduszki podtrzymujące i zabezpieczające	22
5	GWARANCJA	23
6	OZNAKOWANIE	24
7	KONSERWACJA I PIEŁĘGNACJA	25
8	DANE TECHNICZNE	26
9	SKŁAD MATERIAŁÓW	27

1 Informacje ogólne

1 Informacje ogólne

1.1 Przedmowa

Wybrali Państwo fotelik samochodowy „IPAI-LGT” i otrzymali Państwo wysokiej jakości produkt naszej firmy. Chcielibyśmy podziękować Państwu za zaufanie. Aby mogli Państwo długo cieszyć się tym produktem i aby ułatwiać on Państwu codzienne życie, przekazujemy Państwu niniejszą instrukcję obsługi. Zawiera ona informacje dotyczące prawidłowej i łatwej obsługi oraz niezbędnej pielęgnacji i konserwacji. Aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych błędną obsługą i umożliwić optymalne wykorzystanie produktu, prosimy o uważne przeczytanie poniższych instrukcji i wskazówek. W razie dodatkowych pytań lub problemów prosimy o kontakt z dystrybutorem. Życzymy Państwu bezproblemowego użytkowania i mamy nadzieję, że nasze produkty spełnią Państwa oczekiwania.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych w stosunku do wersji opisanej w niniejszej instrukcji obsługi.

Przed montażem w samochodzie i pierwszym użyciem prosimy o zapoznanie się z instrukcją montażu na stronach 9-13 i przestrzeganie jej.

Prosimy upewnić się, że instrukcja obsługi pozostaje przy produkcie i jest dostępna dla każdego użytkownika.

HERNIK GmbH

1 Informacje ogólne

1.2 Przeznaczenie i wskazania

Urządzenie IPAI-LGT zostało opracowane do transportu dzieci ze specjalnymi potrzebami (GMFCS 3-5; np. wyraźne osłabienie mięśniowe z brakiem kontroli głowy i tułowia) w pojazdach silnikowych. Dzieciom z zaburzeniami kontroli głowy i tułowia (np. porażeniem mózgowym, dystrofią mięśniową, hipotonią, zaburzeniami rozwoju motorycznego) można zapewnić prawidłowe ułożenie w foteliku dzięki zawartym w podstawowym wyposażeniu 5-punktowym pasom bezpieczeństwa, wyściółkom i podkładkom piersiowym, co gwarantuje bezpieczny transport.

Dzięki ważnym akcesoriom opcjonalnym można zająć się konkretnymi aspektami, np. montażem stabilnego klina odwodzącego, poduszek piersiowych, adaptera głębokości siedziska lub poduszki podtrzymującej i zabezpieczającej. Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale „4 ” (Akcesoria i wyposażenie dodatkowe).

1.3 Wskazówki

Fotelik samochodowy IPAI-LGT Reha składa się z dwóch modułów:

1. Standardowy fotelik samochodowy Kidfix firmy Römer-Britax (proszę zapoznać się z instrukcją obsługi producenta).
2. Moduł dostosowujący z akcesoriami, który umożliwia wyposażenie fotelika samochodowego zgodnie z indywidualnymi potrzebami. W tym celu należy zapoznać się z instrukcją obsługi firmy HERNIK GmbH.

1.4 Warunki gwarancji

Gwarancja ma zastosowanie tylko wtedy, gdy produkt jest używany zgodnie z podanymi warunkami i przeznaczeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez części i części zamienne, które nie zostały zatwierdzone przez producenta.

1 Informacje ogólne

1.5 Serwis i naprawy

Serwis i naprawy urządzenia IPAI-LGT mogą być wykonywane wyłącznie przez specjalistyczne punkty sprzedaży. W razie problemów należy skontaktować się z właściwym sprzedawcą. W przypadku napraw otrzymują Państwo wyłącznie oryginalne części zamienne.

1.6 Szkolenie z użytkowania

Fotelik samochodowy jest dostarczany w stanie całkowicie zmontowanym. W momencie dostawy sprzedawca specjalistyczny instruuje użytkownika w zakresie użytkowania urządzenia, korzystając z instrukcji obsługi. Sprzedawca specjalistyczny powinien wspólnie z użytkownikiem zamontować fotelik samochodowy w samochodzie i upewnić się, że adapter Isofix jest prawidłowo zamocowany. Podczas montażu fotelika najlepiej chwycić go jedną ręką za środek z przodu, a drugą za bok u góry. Aby uzyskać optymalną pozycję siedzącą, konieczne jest indywidualne dostosowanie fotelika do budowy dziecka. Zasadniczo powinno to zrobić specjalistyczne centrum sprzedaży.

1.7 Deklaracja zgodności

Firma HERNIK GmbH oświadcza na własną odpowiedzialność, że fotelik samochodowy „IPAI-LGT” spełnia podstawowe wymagania (załącznik 1 do dyrektywy 93/42 EWG). Produkt posiada oznaczenie CE zgodnie z powyższą dyrektywą.

1.8 Zatwierdzenie/kompatybilność w zakresie połączenia z dostępnymi w handlu fotelikami dziecięcymi

IPAI-LGT wraz ze wszystkimi akcesoriami jest fotelikiem samochodowym zatwierdzonym zgodnie z normą ECE R129/03. Poszczególne części i akcesoria IPAI-LGT nie są dopuszczone do łączenia z innymi dostępnymi w handlu fotelikami samochodowymi. Wprowadzenie zmian może spowodować utratę homologacji zarówno IPAI-LGT, jak i dostępnego w handlu fotelika samochodowego.

1.9 Przeciwwskazania

Nie są znane żadne przeciwwskazania.

2 Bezpieczeństwo i montaż w samochodzie

2 Bezpieczeństwo i montaż w samochodzie

2.1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- Przed użyciem należy sprawdzić, czy wszystkie elementy działają prawidłowo i są w dobrym stanie.
- Instrukcja obsługi musi zawsze znajdować się w samochodzie wraz z fotelikiem dziecięcym.
- Bezpieczeństwo dziecka jest zapewnione tylko wtedy, gdy fotelik jest prawidłowo zamontowany, a dziecko jest dokładnie przypięte.

Należy sprawdzić:

- A) czy pas biodrowy znajduje się w lewym i prawym ciemnozielonym prowadzeniu pasa.
 - B) czy pas ukośny jest umieszczony po obu stronach w ciemnozielonych prowadnicach pasów.
 - C) czy pas ukośny znajduje się w jasnozielonym prowadzeniu pasa.
 - D) czy pas bezpieczeństwa jest napięty i nie jest skręcony.
 - E) czy dziecko jest prawidłowo zapięte.
 - F) czy żadne elementy odzieży nie są zakleszczone.
-
- Upewnij się, że między dzieckiem a pasem nie ma żadnych twardych przedmiotów, takich jak długopisy, klamry pasów itp. W razie wypadku mogłoby to spowodować obrażenia.
 - Należy wyjaśnić dziecku, jak ważne jest prawidłowe zapięcie pasów i że nie wolno zmieniać przebiegu pasów. Dziecko nie powinno ciągnąć za pasy ani otwierać klamer pasów.
 - Nie należy wprowadzać żadnych zmian w foteliku samochodowym, ponieważ zagraża to bezpieczeństwu dziecka.
 - Fotelik samochodowy nie może być uszkodzony przez ruchome części w samochodzie lub drzwi.
 - Nigdy nie pozostawiaj dziecka samego w foteliku samochodowym.
 - Poinformuj pasażerów, w jaki sposób można wyjąć dziecko z fotelika po wypadku.


2Bezpieczeństwo i montaż w samochodzie

- Po wypadku należy wymienić cały fotelik samochodowy.

2 Bezpieczeństwo i montaż w samochodzie

2.2 Poznaj IPAI-LGT

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 01 Diagonal belt | 08 Locking button |
| 02 Lap belt | 09 ISOFIX locking arms |
| 03 Seat belt lock | 10 Adjustment button |
| 04 Insertion aid | 11 ISOFIX adjustment button |
| 05 ISOFIX installation bracket | 12 Dark-green belt guide |
| 06 Green area | 13 Light-green belt holder |
| 07 Red release button | 14 Headrest |

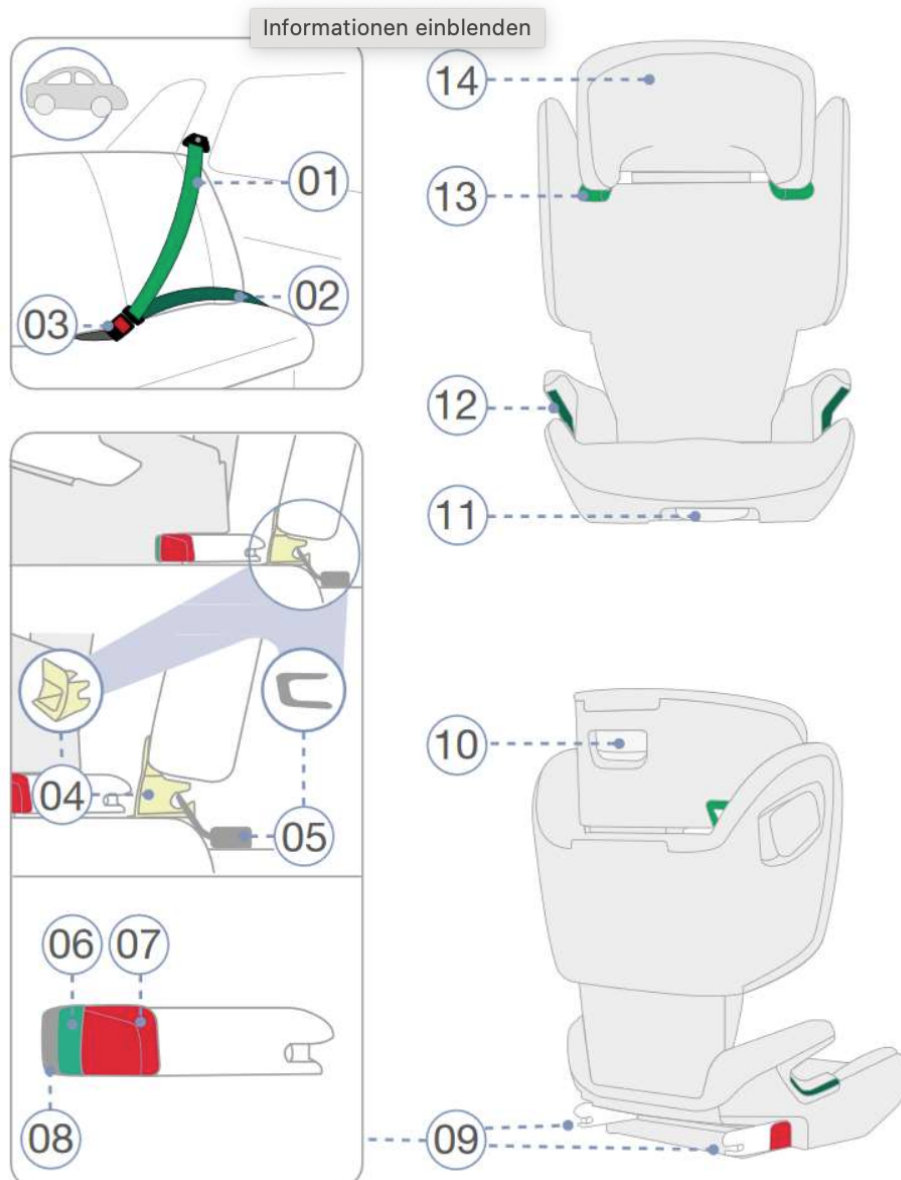

2 Bezpieczeństwo i montaż w samochodzie

2.3 Montaż w samochodzie – z ISOFIX

Fotelik IPAI-LGT jest zamontowany na stałe w samochodzie za pomocą ramion mocujących ISOFIX (09). Dziecko jest następnie przypinane 3-punktowymi pasami bezpieczeństwa pojazdu.




1. Jeśli Twój samochód nie jest standardowo wyposażony w zaczepy ISOFIX, zamocuj dwa zaczepy (04) do fotelika, umieszczając ich wycięcia w górnej części dwóch uchwytów montażowych ISOFIX (05) w samochodzie.

WSKAZÓWKI! Punkty mocowania ISOFIX znajdują się między siedziskiem a oparciem fotela samochodowego.

2. Ustaw zagłówek siedzenia samochodowego w najwyższej pozycji.
3. Przytrzymaj przycisk regulacji ISOFIX (11) i całkowicie wysuń ramiona blokujące ISOFIX (09).


Uwaga! Jeśli fotelik jest wyposażony w adapter głębokości siedziska, należy go przedłużyć, aby uzyskać dostęp do przycisku regulacji (więcej informacji na stronach 18 i 19).

4. Nacisnąć przycisk blokujący (08) i czerwony przycisk odblokowujący (07) po obu stronach fotelika. Dzięki temu oba haczyki na ramionach blokujących ISOFIX (09) zostaną otwarte i będą gotowe do użycia.
5. Umieść fotelik dziecięcy w kierunku jazdy na zatwierdzonym do tego celu siedzeniu samochodowym. Upewnij się, że oparcie fotelika przylega płasko do oparcia siedzenia samochodowego.

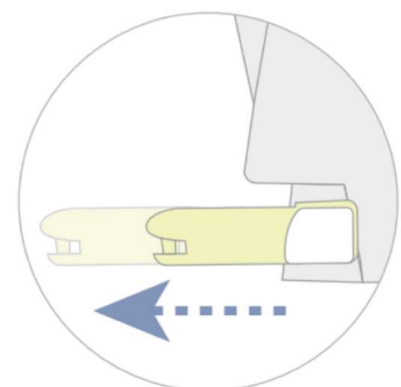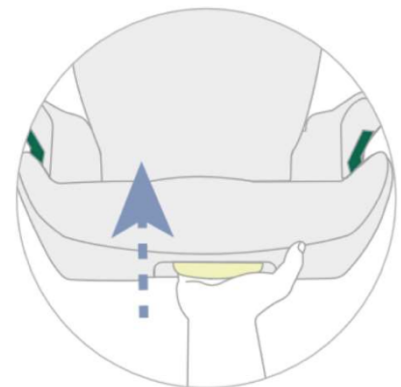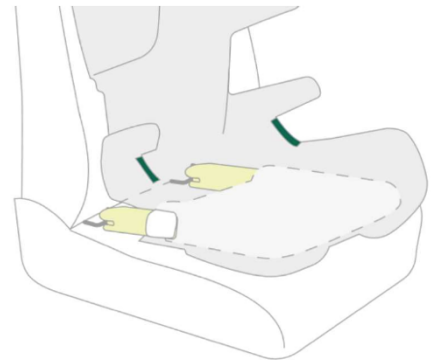


2 Bezpieczeństwo i montaż w samochodzie

6. Wsuń oba ramiona blokujące ISOFIX (09) w elementy pomocnicze (04), aż ramiona blokujące ISOFIX (09) z obu stron zaskoczą z charakterystycznym kliknięciem.

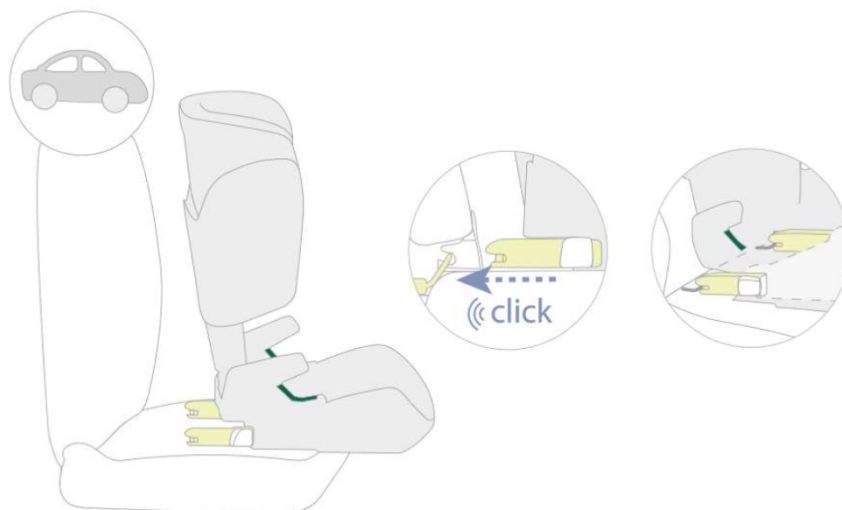

7. Przytrzymaj przycisk regulacji ISOFIX (11) i przesunąć fotelik dziecięcy jak najdalej do tyłu.
8. Potrząśnij fotelikiem dziecięcym, aby upewnić się, że jest dobrze zamocowany, i sprawdź, czy zielony obszar (06) jest widoczny na obu ramionach blokujących.

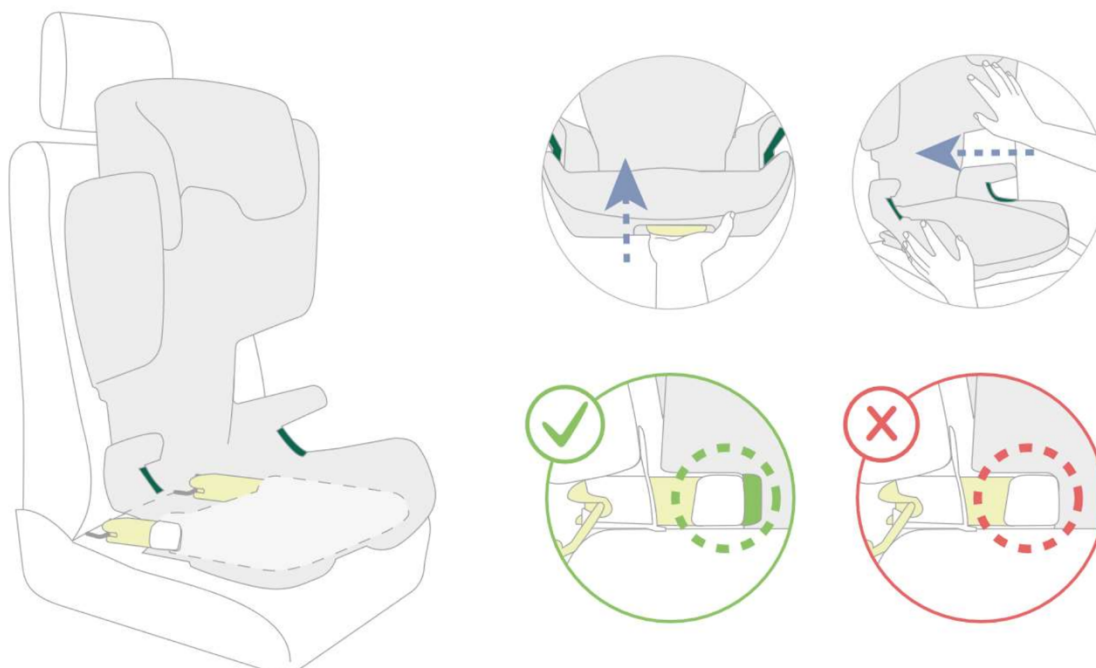


2 Bezpieczeństwo i montaż w samochodzie

2.4 Regulacja zagłówka

Prawidłowo ustawiony zagłówek (14) zapewnia optymalny przebieg pasów bezpieczeństwa (01) i maksymalną ochronę dziecka. Zagłówek (14) należy ustawić tak, aby między ramionami dziecka a zagłówkiem (14) pozostało miejsce na dwa palce.

1. Chwyć pokrętło regulacyjne (10) z tyłu zagłówka (14) i pociągnij je do góry. Zagłówek jest teraz odblokowany.
2. Teraz można przesunąć odblokowany zagłówek (14) na żadaną wysokość. Po zwolnieniu pokrętła regulacyjnego (10) zagłówek (14) zaskoczy.
3. Umieść fotelik dziecięcy na siedzeniu pojazdu.
4. Posadź dziecko w foteliku i sprawdź wysokość. Powtarzaj tę czynność, aż zagłówek (14) znajdzie się na odpowiedniej wysokości.

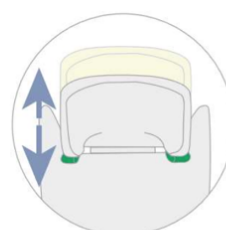



2 Bezpieczeństwo i montaż w samochodzie

2.5 Zapinanie pasów


1. Wyciągnąć pas bezpieczeństwa (01) i przeprowadzić go przed dzieckiem przez jasnozielony uchwyt pasa (13) do klamry (3).

UWAGA! Upewnij się, że pas bezpieczeństwa nie jest skręcony, ponieważ w przeciwnym razie system zabezpieczający nie będzie w pełni skuteczny.

2. Przełóż pas ukośny (01) i pas biodrowy (02) przez ciemnozieloną prowadnicę pasa (12) fotelika samochodowego.

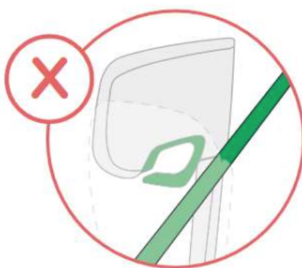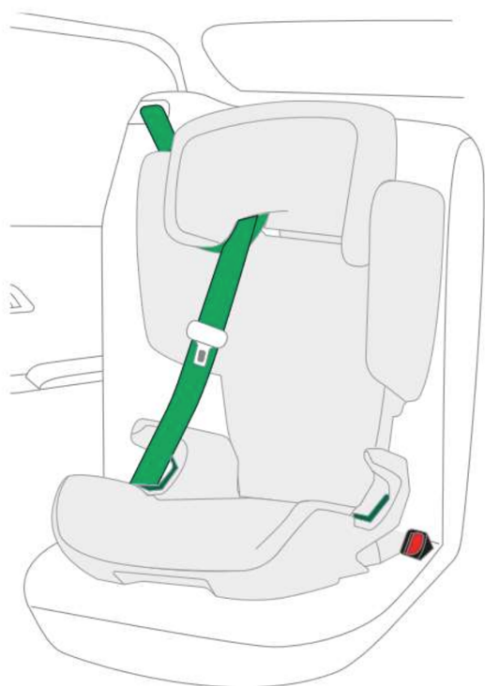

2 Bezpieczeństwo i montaż w samochodzie

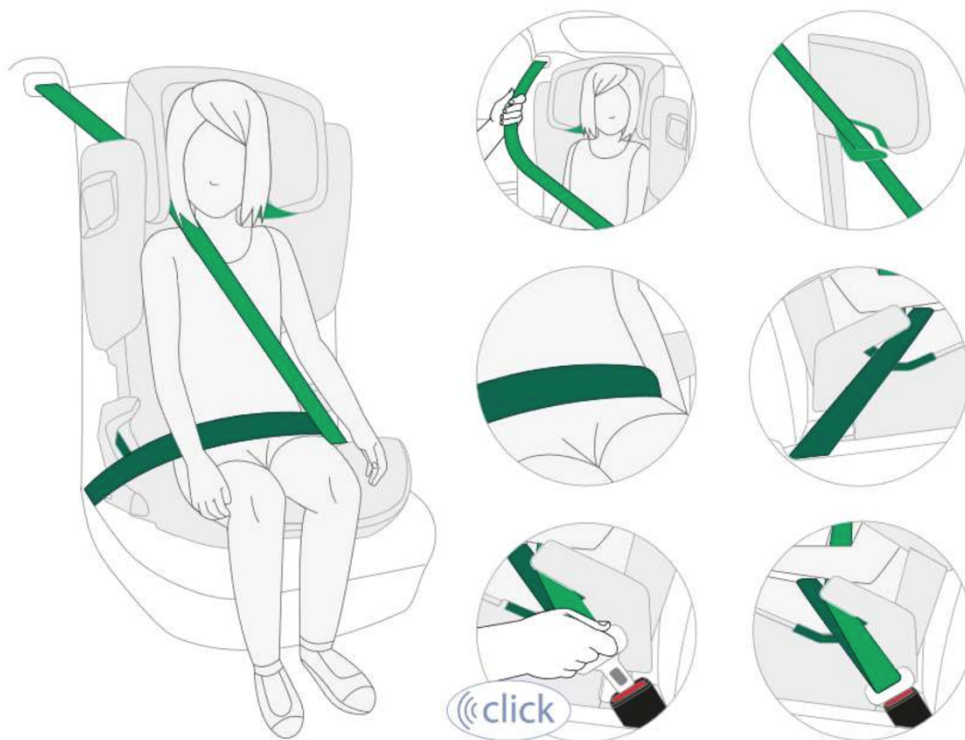

3. Zatrzasnąć klamrę pasów z kliknięciem w zamek (03) pojazdu.

UWAGA! Pas biodrowy (02) musi przebiegać po obu stronach jak najniżej nad biodrami dziecka.

WSKAZÓWKI! Jeśli oparcie zasłania uchwyt pasów (13), można podnieść zagłówek (14). Pas ukośny (01) można teraz łatwo włożyć. Następnie należy ponownie ustawić zagłówek (14) na odpowiedniej wysokości. Należy upewnić się, że pokrętko na uchwycie pasów (13) jest całkowicie zamknięte.

Upewnij się, że pas ukośny (01) przebiega nad obojczykiem dziecka, a nie przy szyi.

WSKAZÓWKI! Można również regulować wysokość zagłówka (14) w pojeździe.

UWAGA! Pas ukośny (1) musi przebiegać ukośnie do tyłu. Przebieg pasa można regulować za pomocą regulowanego przekierowania pasa w pojeździe.

UWAGA! Pas ukośny (1) nie może nigdy prowadzić do przekładki pasa w pojeździe. W takim przypadku fotelik dziecięcy należy używać wyłącznie na tylnym siedzeniu.

3 Obsługa podstawowego modelu fotelika

3 Obsługa podstawowego modelu fotelika

3.1 Regulacja 5-punktowego pasa bezpieczeństwa

Najpierw należy wydłużyć pasy, naciskając jednocześnie szary przycisk na regulatorze pasa (1) i pociągając za pasy. Następnie należy przełożyć pasy przez ramiona dziecka.

Następnie wsuń obie metalowe zapadki do klamry pasów (3), aż zaskoczą. Następnie napnij system pasów, pociągając za lewy i prawy koniec pasów (2), aż uzyskasz stabilną pozycję siedzącą.

Jeśli chcesz wyjąć dziecko z fotelika, najpierw rozpiąć pasy, naciskając szary przycisk na regulatorach pasów (1) i pociągając za pasy. Następnie można otworzyć klamrę pasów (3), naciskając mocno czerwony okrągły przycisk.



3.2 Regulacja poduszek piersiowych

Fotelik IPAI-LGT jest standardowo wyposażony w parę anatomicznie ukształtowanych poduszek piersiowych (4). Mogą one wspierać dzieci z słabą kontrolą górnej części ciała w utrzymaniu prawidłowej postawy.

Odłącz podkładki klatki piersiowej, delikatnie pociągając, aż połączenie na rzep zostanie rozłączone. Ponieważ wewnętrzna strona bocznej prowadnicy pleców została pokryta elementami rzepowymi, można teraz całkowicie swobodnie znaleźć odpowiednią pozycję, mocując ją ponownie za pomocą zapięcia na rzep.



3 Obsługa podstawowego modelu fotelika

3.3 Regulacja kąta nachylenia siedziska

Jeśli fotelik IPAI-LGT został zamontowany w pojeździe za pomocą systemu ISOFIX, można go wysunąć do przodu, wyciągając ramiona zatraskowe ISOFIX (2). Ponieważ elementy oparcia i siedziska są wyposażone w ruchome przeguby, powoduje to otwarcie kąta oparcia. Dziecko natychmiast przyjmuje wygodną pozycję.

W tym celu należy nacisnąć szary przycisk regulacyjny (1) z przodu siedziska i pociągnąć siedzisko do przodu. Kąt oparcia zostanie zwiększony. Aby uzyskać mniejszy kąt, można wybrać dowolną pozycję pośrednią.

Jeśli dziecko chce później przyjąć bardziej aktywną pozycję siedzącą, np. po śnie, można w ten sam sposób przesunąć siedzisko do tyłu, co spowoduje zwiększenie kąta oparcia.



3 Obsługa podstawowego modelu fotelika



4 Korzystanie z opcjonalnych akcesoriów

4 Korzystanie z opcjonalnych akcesoriów

4.1 Klin odwodzący

Instrukcje montażu:

1. Umieść IPAI-LGT na stabilnej powierzchni roboczej.
2. Wyjmij płytę montażową (1), cztery paski z rzepami (2) i blok abdukcji (3) z opakowania.
3. Najpierw należy usunąć białą folię ochronną z czterech taśm rzepowych. Należy upewnić się, że spód fotelika samochodowego jest czysty – nie może być pokryty kurzem ani wilgocią. Następnie należy przymocować paski rzepowe do spodu siedziska (patrz oznaczenie na rysunku 1).
4. Teraz zawieś płytę montażową (patrz rysunek 2). Profil w kształcie litery U (4) należy umieścić na plastikowej krawędzi (5). Płytę montażową należy umieścić płasko na spodzie siedziska, tak aby paski z rzepami utworzyły połączenie.
5. Odwróć ponownie IPAI-LGT. Teraz można umieścić blok addukcyjny (3) w uchwycie i zamocować go za pomocą dźwigni przechylnej.

WSKAZÓWKI! Jeśli blok addukcyjny nie jest używany, należy zdjąć płytę montażową. W przeciwnym razie istnieje ryzyko obrażeń spowodowanych wystającymi metalowymi elementami.



Abb. 1

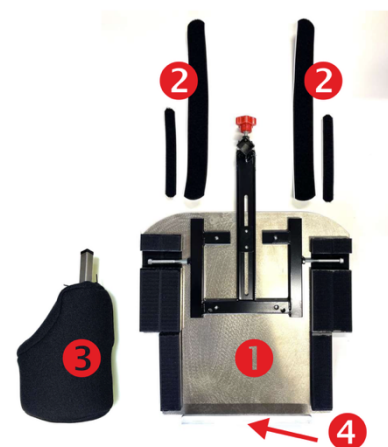


Abb. 3

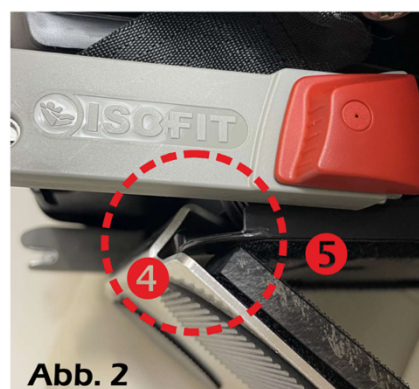


Abb. 2

4 Korzystanie z opcjonalnych akcesoriów

Regulacja bloku odwodzenia

Głębokość bloku odwodzenia można regulować.

1. Odkręcić 2 śruby (1) na spodzie siedziska za pomocą klucza imbusowego (patrz rysunek 1).
2. Teraz można przesunąć pałąk (2) do żądanej pozycji i zamocować go.
3. Umieścić blok addukcyjny (3) w uchwycie i zamocować za pomocą dźwigni przechyłnej (4).





Abb. 1



4 Korzystanie z opcjonalnych akcesoriów

4.2 Adapter głębokości siedziska

1. Ustawić IPAI-LGT na stabilnej powierzchni roboczej.
2. Wyjmij płytę montażową (1), cztery taśmy rzepowe (2) i adapter głębokości siedziska z opakowania.
3. Najpierw należy usunąć białą folię ochronną z czterech taśm rzepowych. Należy upewnić się, że spód fotelika samochodowego jest czysty – nie może być pokryty kurzem ani wilgocią. Teraz należy przymocować taśmy rzepowe do spodu siedziska (patrz oznaczenie na rysunku 1).
4. Teraz zawieś płytę montażową (patrz rysunek 2). Profil w kształcie litery U (4) należy umieścić na plastikowej krawędzi (5). Płyta montażowa musi być płasko umieszczona na spodzie siedziska, a paski z rzepami muszą tworzyć połączenie.
5. Odwróć ponownie IPAI-LGT. Teraz można włożyć adapter głębokości siedziska (3) do uchwytu (patrz rysunek 3).

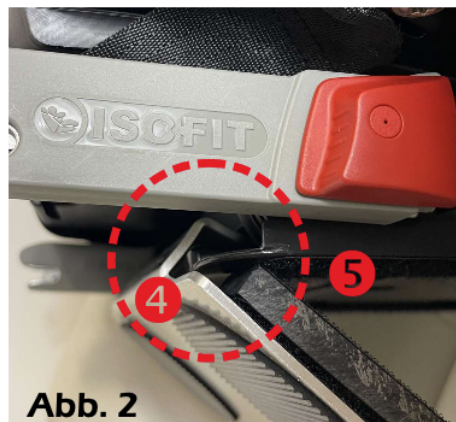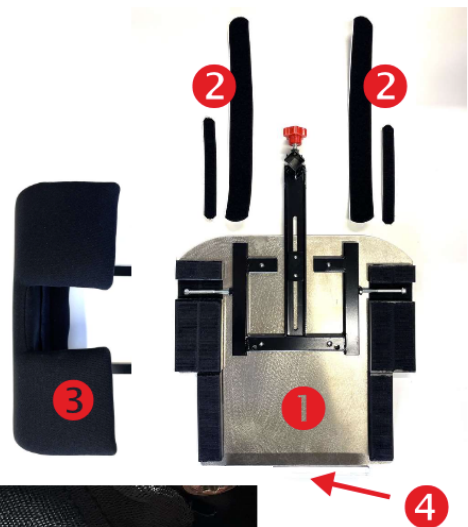

4 Korzystanie z opcjonalnych akcesoriów

Regulacja adaptera głębokości siedziska:

Adapter głębokości siedziska można ustawić na żądaną głębokość siedziska.

1. Odkręcić dwie śruby (1) po obu stronach fotelika samochodowego za pomocą klucza imbusowego.
2. Teraz można ustawić adapter głębokości siedziska (3) w żądanej pozycji.
3. Ponownie dokręć dwie śruby (1).



4 Korzystanie z opcjonalnych akcesoriów

4.3 Poduszka podtrzymująca i zabezpieczająca

Instrukcja montażu:

1. Podczas odbioru fotelika samochodowego poproś o pokazanie sposobu montażu poduszki podtrzymującej i zabezpieczającej.
2. Po posadzeniu dziecka w foteliku i zapięciu pasów bezpieczeństwa należy umieścić poduszkę podtrzymującą i zabezpieczającą (1) na foteliku samochodowym.
3. Przymocować poduszkę za pomocą dołączonych taśm rzepowych (2) z tyłu fotelika samochodowego.
4. Ramiona dziecka powinny spoczywać na stoliku, co zapewnia wyprostowaną pozycję siedzącą. Podtrzymuje to górną część ciała.
5. Należy unikać sytuacji, w których zabawki mogą znaleźć się na poduszce. Nie należy używać twardych, sztywnych ani ostrych przedmiotów.



5Gwarancja

5 Gwarancja

Produkty HERNIK są zgodne z najnowszym stanem techniki i są wytwarzane zgodnie z surowymi normami jakości. Jeśli w wyjątkowych przypadkach pojawią się podstawy do reklamacji, firma HERNIK GmbH gwarantuje zgodnie z ogólnymi warunkami handlowymi po dostawie

- 24 miesiące na wszystkie elementy stałe
- 12 miesięcy na wszystkie części ruchome

W przypadku produktów wykonanych na specjalne zamówienie nie udziela się gwarancji, o ile nie wynika to z wad produkcyjnych lub materiałowych. W takim przypadku zapewnia się wymianę reklamowanego produktu przez 12 miesięcy.


Roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji wymagają, aby urządzenie było używane prawidłowo, zgodnie z instrukcją obsługi.

W przypadku zmian konstrukcyjnych, przeróbek lub nieprawidłowych napraw bez uprzedniej konsultacji z firmą HERNIK GmbH roszczenia gwarancyjne tracą ważność.

Wyklucza się dalsze roszczenia, niezależnie od podstawy prawnej, w szczególności roszczenia o odszkodowanie za szkody bezpośrednie lub pośrednie.

6Oznakowanie

6 Oznakowanie

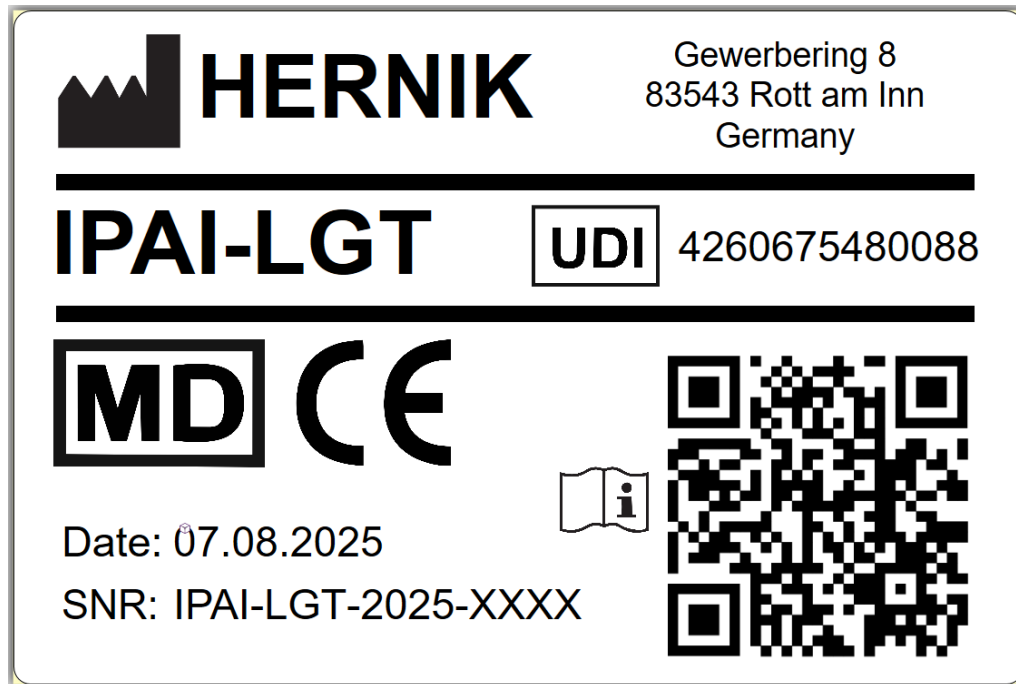

**Rückhalteeinrichtung für spezielle
Anforderungen "S" (DE)**

Lesen Sie bitte vor Gebrauch die
Bedienungsanleitung!

7 Konserwacja i pielęgnacja

7 Konserwacja i pielęgnacja

Ogólne wskazówki dotyczące pielęgnacji i konserwacji

Aby zapewnić pełną ochronę fotelika dziecięcego:

- W razie wypadku przy prędkości zderzenia powyżej 10 km/h fotelik dziecięcy może ulec uszkodzeniu, które nie jest od razu widoczne. W takim przypadku fotelik dziecięcy należy wymienić. Proszę go zutylizować w odpowiedni sposób.
- Należy regularnie sprawdzać wszystkie ważne części pod kątem uszkodzeń. Należy upewnić się, że wszystkie elementy mechaniczne działają prawidłowo.
- Aby uniknąć uszkodzeń, należy uważać, aby fotelik dziecięcy nie został zakleszczony między twardymi przedmiotami (drzwiami samochodu, szynami siedzeń itp.).
- Zasadniczo należy sprawdzić fotelik dziecięcy, jeśli został uszkodzony (np. jeśli spadł na podłogę).
- Nigdy nie smaruj ani nie olejuj części fotelika dziecięcego.
- Aby fotelik mógł zapewnić dziecku odpowiednią ochronę, konieczne jest zamontowanie i użytkowanie fotelika IPAI-LGT zgodnie z instrukcją obsługi.

8 Dane techniczne

8 Dane techniczne

	IPAI-LGT
SITZBREITE (Becken)	31 cm
SITZBREITE (Knie)	42 cm
SITZTIEFE	32 cm
RÜCKENHÖHE	41- 54 cm
SCHEITELHÖHE	59 - 74 cm
Höhe Thoraxpelotten	20 - 33 cm
Abstand Thoraxpelotten	14 - 28 cm
Rückenwinkel	85° - 120°
Gesamthöhe	68 - 88 cm
Gesamtbreite	44 cm
Gesamttiefe	42 cm
Gewicht	7,0 kg
getestete Belastbarkeit	36 kg

Wyposażenie standardowe:

- 5-punktowe pasy bezpieczeństwa z wyściółką, regulowane na wysokość
- Adapter ISOFIX, regulowany
- Zagłówek z regulacją wysokości
- Ochrona przed uderzeniami bocznymi SICT
- trzyczęściowa, zdejmowana i oddychająca tapicerka (można prac w temperaturze 30°C)
- Poduszki boczne, regulowane na wysokość

9 Skład materiałowy

9 Skład materiałowy

Zastosowano następujące materiały:

- Tworzywo sztuczne (siedzisko i obudowa konstrukcji nośnej)
- Stal (akcesoria)
- Aluminium (poduszki klatki piersiowej)
- Poliester (taśmy)
- Siatka pokryta pianką, antracytowa (pokrowiec)
- Gęstość objętościowa pianki

notatki

notatki



HERNIK GmbH
Gewerbering 8
83543 Rott am Inn • Germany

 **+49 8039-9093930** •  **+49 8039-90939319**
 **info@hernik.de** •  **www.hernik.de**