

gebruiksaanwijzing

HERO **NXT**



Inhoudsopgave

1	ALGEMENE INFORMATIE	4
1.1	Voorwoord	4
1.2	Doel en indicatie	5
1.3	Opmerkingen	5
1.4	Conformiteitsverklaring	5
1.5	Garantievoorwaarden	5
1.6	Service en reparaties	6
1.7	Gebruikstraining	6
2	VEILIGHEIDSINSTRUCTIES & INBOUW IN MOTORVOERTUIGEN	8
2.1	Veiligheidsinstructies	8
2.2	Gebruik in het voertuig	9
2.3	Inbouw in de auto	10
2.4	Het omdoen van de gordels	12
2.5	De hoofdsteun instellen	13
3	GEBRUIK VAN HET BASISMODEL	15
3.1	De zithoek instellen	15
3.2	Draaifunctie	15
3.3	Uitstapfunctie	16
3.4	Verzorging en onderhoud	16
4	GEBRUIK VAN DE OPTIONELE ACCESSOIRES	17
4.1	Thoraxsteunen	17
4.2	Abductiewig	17

Inhoudsopgave

4.3	Steun- en veiligheidsbekleding	18
4.4	Beschermmat	18
5	GARANTIE	19
6	MARKERING	20
7	TECHNISCHE GEGEVENS	21
8	MATERIAALOPSTELLING	22

1 Algemene informatie

1 Algemene informatie

1.1 Voorwoord

U hebt gekozen voor het autokindzitje "HERO-NXT" en ontvangt hiermee een hoogwaardig product van ons bedrijf. Wij willen u bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen.

Om ervoor te zorgen dat u lang plezier heeft van dit product en dat het u helpt uw dagelijks leven te vergemakkelijken, overhandigen wij u deze handleiding. Hierin vindt u informatie over het juiste en eenvoudige gebruik en het noodzakelijke onderhoud. Om schade als gevolg van bedieningsfouten te voorkomen en een optimaal gebruik mogelijk te maken, verzoeken wij u de volgende instructies en aanwijzingen zorgvuldig door te lezen. Als u nog vragen of problemen heeft, neem dan contact op met uw dealer. Wij wensen u veel plezier met het gebruik en hopen dat onze producten aan uw verwachtingen voldoen.

Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen aan het in deze handleiding beschreven model.

Voordat u het product in uw auto installeert en voor het eerst gebruikt, verzoeken wij u in het bijzonder de installatie-instructies op pagina 9-13 te lezen en op te volgen.

Zorg ervoor dat de gebruiksaanwijzing bij het product blijft en dus voor elke gebruiker beschikbaar is.

Uw HERNIK GmbH

1 Algemene informatie

1.2 Beoogd gebruik en indicatie

De HERO-NXT is ontwikkeld voor het vervoer van kinderen met speciale behoeften in motorvoertuigen. Kinderen met een slechte controle over hun hoofd en romp (bijv. infantiele cerebrale parese, spierdystrofie, hypotonie) kunnen worden ondersteund in hun houding door middel van individueel positioneerbare thoraxpelotten en speciale kussens, waardoor een veilig vervoer kan worden gegarandeerd.

Met belangrijke optionele accessoires kan in detail worden ingegaan op speciale aspecten, zoals de zithelling, de installatie van een stabiele abductiewig of thoraxsteunen. Meer hierover in het hoofdstuk4 .

1.3 Opmerkingen

De HERO-NXT revalidatieautostoel voor kinderen bestaat uit twee modules:

1. Een in de handel verkrijgbaar DUALFIX-autostoeltje van Römer-Britax (raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van de fabrikant).
2. Aanpassingsmodule met accessoires, waarmee de autostoel aan individuele behoeften kan worden aangepast. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van HERNIK GmbH.

1.4 Conformiteitsverklaring

HERNIK GmbH verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het autostoeltje "HERO-NXT" voldoet aan de fundamentele eisen (bijlage 1 van Richtlijn 93/42 EEG). Het product is voorzien van het CE-keurmerk volgens bovengenoemde richtlijn.

1.5 Garantievoorwaarden

Er kan alleen garantie worden gegeven als het product onder de voorgeschreven omstandigheden en voor de beoogde doeleinden wordt gebruikt. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door onderdelen en reserveonderdelen die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd.

1 Algemene informatie

1.6 Service en reparaties

Service en reparaties aan de "HERO-NXT" mogen alleen door gespecialiseerde dealers worden uitgevoerd. Neem bij problemen contact op met uw verantwoordelijke dealer. Bij reparaties krijgt u daar uitsluitend originele reserveonderdelen.

1.7 Gebruikstraining

Het autostoeltje wordt volledig gemonteerd geleverd. Bij levering instrueert de vakhandelaar de gebruiker met behulp van de gebruiksaanwijzing over het gebruik van het hulpmiddel. De vakhandelaar moet samen met de gebruiker het autostoeltje in de auto installeren en ervoor zorgen dat de Isofix-adapter correct is bevestigd.

Wanneer u de autostoel installeert, kunt u deze het beste met één hand aan de voorkant in het midden vasthouden en met de andere hand aan de zijkant bovenaan. Om een optimale zitpositie te bereiken, is het noodzakelijk om de autostoel individueel aan te passen aan de omstandigheden van het kind. Dit moet in principe door de gespecialiseerde dealer worden gedaan.

1.8 Gebruiksduur/onderhoud

De aanbevolen gebruiksduur van dit revalidatieautostoeltje is 7 jaar vanaf de datum van eerste ingebruikname.

Na afloop van deze periode mag het product om veiligheidsredenen niet meer worden gebruikt, omdat materiaalmoeheid en verouderingsverschijnselen de beschermende werking kunnen aantasten.

De veiligheidsrelevante onderdelen zijn onderhoudsvrij. Afhankelijk van het soort en de frequentie van het gebruik moet het product regelmatig worden gereinigd. De betreffende aanwijzingen vindt u in het hoofdstuk "Reiniging" van deze gebruiksaanwijzing. Bij gebruik van optionele accessoires wordt een regelmatige functiecontrole door de gebruiker aanbevolen. De frequentie van de controle is afhankelijk van de gebruiksfrequentie, de gebruiksomstandigheden en de invloed van de gebruiker (bijv. eenmaal per jaar). De controle moet worden uitgevoerd volgens de betreffende hoofdstukken van deze gebruiksaanwijzing.

1 Algemene informatie

2 Veiligheidsinstructies & Installatie in de auto

2 Veiligheidsinstructies & Installatie in de auto

2.1 Veiligheidsinstructies

- De "HERO-NXT" moet altijd volgens de montagehandleiding in het voertuig worden bevestigd, ook als hij niet wordt gebruikt. Een niet-bevestigde stoel kan bij een noodstop andere inzittenden verwonden.
- De "HERO-NXT" moet zo in de auto worden bevestigd dat hij niet bekneld raakt tussen de voorstoelen of de autodeuren.
- De gordels mogen niet verdraaid of bekneld raken en moeten strak worden aangetrokken.
- Na een ongeval mag het autostoeltje niet meer worden gebruikt!
- Maak uw kind altijd vast met de gordel.
- Controleer voor elke rit of de gordelsluiting en de ISOFIX correct zijn vergrendeld en of de voet correct is geplaatst.


2 Veiligheidsinstructies & Installatie in de auto

2.2 Gebruik in de auto

Raadpleeg de instructies voor het gebruik van kinderzitjes in de handleiding van uw auto. Houd rekening met eventuele beperkingen door airbags bij het gebruik. Raadpleeg de handleiding van uw auto voor informatie over de autostoelen die volgens R16 zijn goedgekeurd voor het gebruik van ECE-kinderzitjes.

Gebruiksmogelijkheden HERO-NXT (i-SIZE)*

in Fahrtrichtung	Ja ¹⁾
entgegen der Fahrtrichtung	Ja ¹⁾
Mit 2-Punkt- oder 3-Punkt-Sicherheitsgurt	Nein
auf Sitzen mit: ISOFIX-Befestigungen	Ja ²⁾

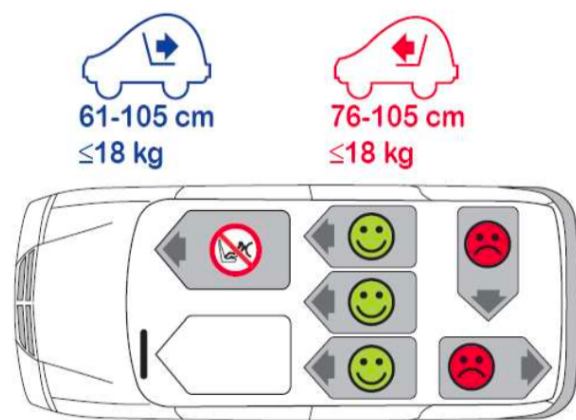

*(Houd rekening met de voorschriften die in uw land van toepassing zijn)

- In de rijrichting 76-105 cm / Tegen de rijrichting in 61-105 cm
- In de rijrichting 76-105 cm: Bij aanwezigheid van een passagiersairbag: schuif de passagiersstoel ver naar achteren en volg de instructies in de handleiding van uw auto.
- Tegen de rijrichting in 61-105 cm: Niet gebruiken op passagiersstoelen met actieve frontale airbag!
- Zorg bij kinderen vanaf 3 jaar voor voldoende ruimte naar boven (ca. 1 handbreedte tot het dak) en naar voren tot de rugleuning van de passagiersstoel (min. 76 cm in de rijrichting).

2 Veiligheidsinstructies & Installatie in de auto

2.3 Installatie in de auto

Als uw auto niet standaard is uitgerust met ISOFIX-bevestigingspunten, klem dan de twee bevestigingspunten (2) die bij de stoel zijn geleverd met de uitsparing naar boven gericht op de twee ISOFIX-bevestigingspunten (1) van uw auto.

TIP! De ISOFIX-bevestigingspunten bevinden zich tussen de zitting en de rugleuning van de autostoel.

2.3.1 ISOFIX voorbereiden

Druk de vergrendelknop (4) en de ontgrendelknop (2) tegen elkaar en schuif de ISOFIX-vergrendelingsarm (1) zo ver mogelijk naar buiten. Schuif ook de tweede vergrendelingsarm zo ver mogelijk naar buiten.

2.3.2 ISOFIX bevestigen

Verbind de ISOFIX-vergrendelingsarm (1) met de ISOFIX-bevestigingsbeugels van de autostoel. Beide ISOFIX-vergrendelingsarmen (1) klikken hoorbaar vast en geven de kleur groen weer.

LET OPI Gevaar voor letsel door onbeveiligd kindersitje. Zorg ervoor dat beide ISOFIX-vergrendelingsarmen volledig zijn vergrendeld. Beide armen moeten groen zijn.

2.3.3 Het kindersitje bevestigen





Span de ISOFIX-verbinding door het kindersitje met kracht tegen de rugleuning van de autostoel te drukken.

Verhoog de spanning van de ISOFIX-verbinding door met kracht op de zijkant van het basisstation te drukken.

2.3.4 Bevestiging controleren

Controleer of de ISOFIX-vergrendelingsarmen (1)

- even ver zijn ingeschoven (beide indicatoren moeten hetzelfde nummer aangeven).
- aan beide zijden zijn bevestigd aan de ISOFIX-beugels door aan het kindersitje te trekken.

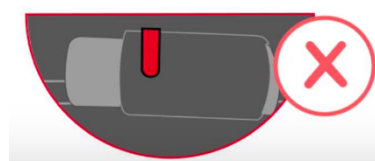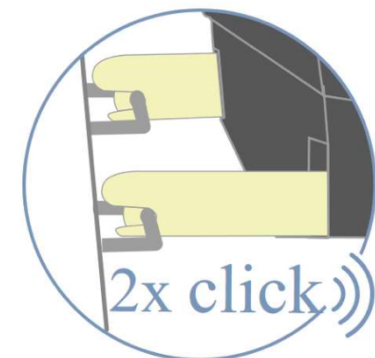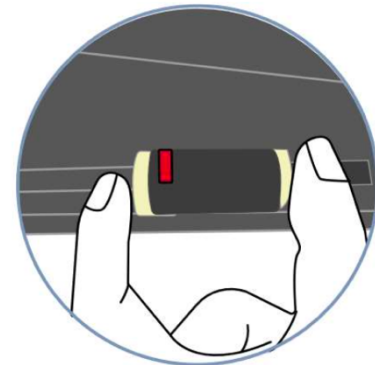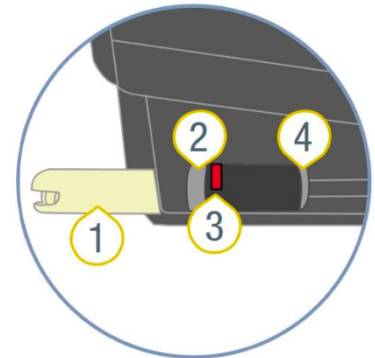

2 Veiligheidsinstructies & Installatie in de auto




2.3.5 Steunpoot instellen

Klap de steunpoot (1) van het kinderzitje volledig weg totdat deze hoorbaar vastklikt. De rode markering (2) mag niet meer zichtbaar zijn.

Houd de verstelknop (3) ingedrukt en schuif de steunpoot uit tot aan de vloer van de auto.

Laat de verstelknop (3) los. Deze klikt nu hoorbaar vast. De steunindicator (4) geeft de kleur groen weer.

LET OP! De steunpoot (1) mag nooit in de lucht hangen of met voorwerpen worden ondersteund. Zorg er ook voor dat de steunpoot (1) het HERO-NXT-onderdeel niet van de zitting van de autostoel tilt.

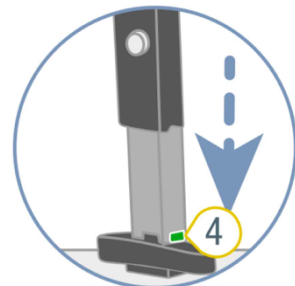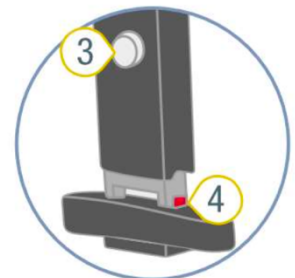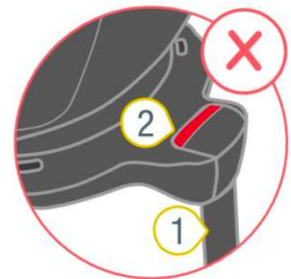

2 Veiligheidsinstructies & Installatie in de auto

2.4 De gordels omdoen

2.4.1 Schoudergordels losmaken

Om de gordels los te maken, drukt u op de verstelknop (3) en trekt u tegelijkertijd beide schoudergordels (1) naar voren.

LET OPI Trek niet aan de schouderkussens.

2.4.2 Gordelsluiting openen

Open de gordelsluiting (2) door op de rode knop te drukken.

2.4.3 Kind in kinderzitje plaatsen

Zorg ervoor dat de gordelsluiting (2) naar voren is geklapt en zet uw kind in het kinderzitje.

GEVAARI Gebruik het kinderzitje alleen achterwaarts gericht op de passagiersstoel als de frontale airbag is uitgeschakeld.

2.4.4 Schoudergordel plaatsen

Leg de schoudergordels (1) over de schouders van uw kind.

LET OPI De schoudergordels (1) mogen niet gedraaid of verwisseld zijn.





2.4.5 Sluit de gordelsluiting

Breng de twee sluitingstongen (5) samen en klik ze met een hoorbare 'klik' in de gordelsluiting (2).

2.4.6 Verstelriem spannen

Trek aan de verstelriem (4) totdat de riem plat en strak tegen het lichaam van uw kind aanligt.

WAARSCHUWING! De heupgordels moeten zo laag mogelijk over de liesplooï van uw kind lopen.

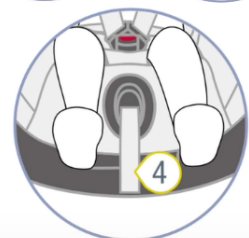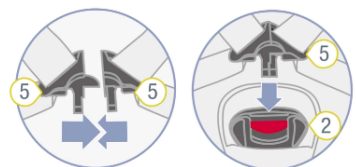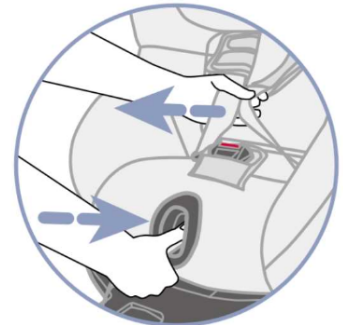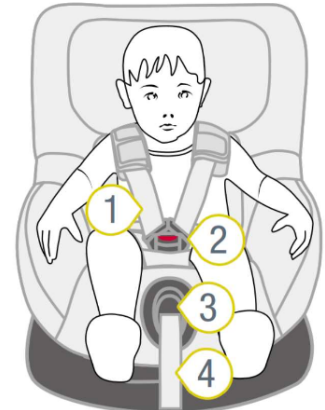

2 Veiligheidsinstructies & Installatie in de auto

2.5 De hoofdsteun instellen




Een correct afgestelde hoofdsteun (1) garandeert optimale bescherming voor uw kind in het kinderzitje. De hoofdsteun (1) moet zo worden afgesteld dat de schoudergordels (5) ter hoogte van de schouders van uw kind of iets daarboven liggen.

LET OP! De schoudergordels (5) mogen niet achter de rug, ter hoogte van of boven de oren van het kind lopen.

- Maak de gordels los.
- Houd de ontgrendelknop (6) van de hoofdsteun (1) ingedrukt en verschuif de hoofdsteun (1) tot de juiste hoogte van de schoudergordels.
- Controleer of de hoofdsteun (1) goed is vergrendeld door de hoofdsteun iets naar beneden te schuiven.

Opmerking over het hoofdkussen:

De met klittenband aan de hoofdsteun bevestigde kusseninzet bestaat uit 3 delen. Indien nodig kunnen de twee buitenste vleugels worden verwijderd, waardoor er meer ruimte ontstaat voor het hoofd van uw kind.

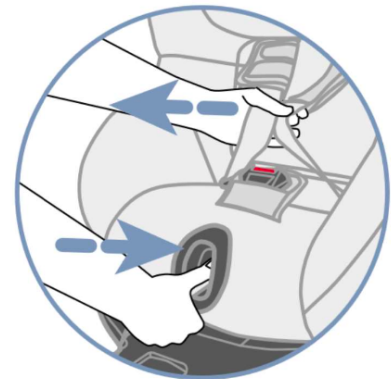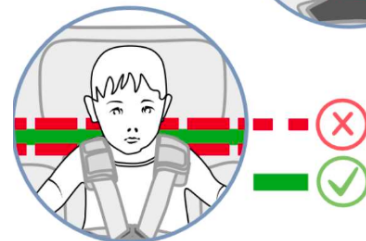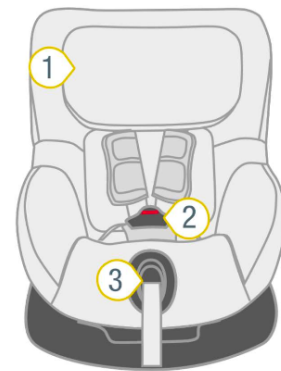



2 Veiligheidsinstructies & Installatie in de auto

Opmerking als er thoraxpelotten zijn geïnstalleerd:

Terwijl u de vergrendeling losmaakt, moet u met de andere hand de kunststofplaat (1) onderaan in de handgreep iets losmaken van de klittenbandverbinding.

Daarna kunnen de rug- en hoofdsteun gemakkelijk worden verplaatst. Zodra de gewenste positie is bereikt, wordt de klittenbandverbinding automatisch hersteld door de kunststofplaat los te laten.

Om een doorlopende, comfortabele bekleding mogelijk te maken, is een speciaal rugkussen (2) ontwikkeld. Het bovenste deel is verbonden met de hoofdsteun en beweegt naar boven, terwijl het onderste deel van het kussen indien nodig kan worden uitgeklappt en zo kan worden verlengd.

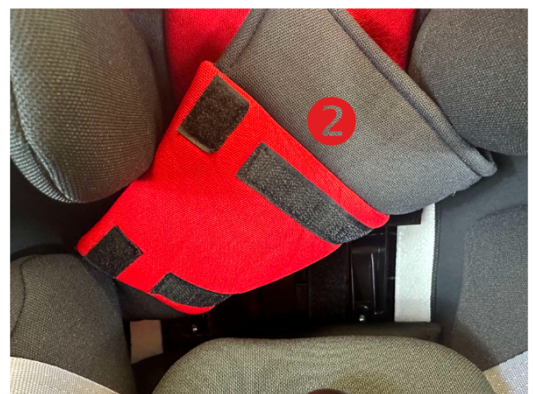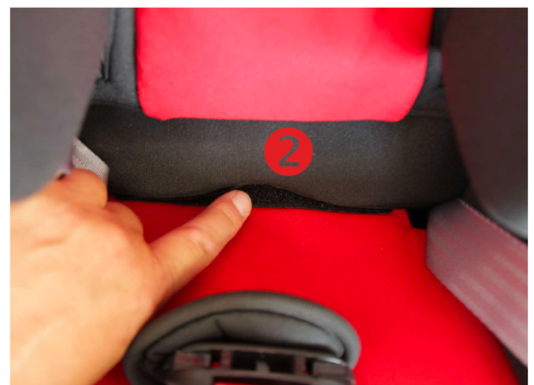

3 Gebruik van het basismodel

3 Gebruik van het basismodel

3.1 Zithoek instellen

De zitting van de HERO-NXT kan naar voren en naar achteren worden geplaatst in zes verschillende hellingshoeken.

Om de zithoek aan te passen:

Trek de verstelhendel (1) naar voren en druk/schuif de zitting (2) in de gewenste positie.

LET OPI De zitschaal (2) moet in elke positie stevig vastklikken met een 'klik'-geluid. Trek aan de zitschaal (2) om te controleren of deze goed vastzit.

3.2 Draaifunctie

De HERO-NXT kan:




1. Van 61-105 cm (<18 kg) achterwaarts gericht worden gebruikt.
2. Vanaf 15 maanden: 76-105 cm (<18 kg) voorwaarts gericht worden gebruikt.

Om de rijrichting te wijzigen, drukt u op de draaiknop (2) en draait u de stoel in de gewenste richting totdat deze vastklikt.

Bij gebruik in voorwaartse richting moet de dempingsbeugel in verticale positie staan.

LET OPI Controleer voor elke autorit of het draaibare deel van het kinderzitje volledig is vergrendeld door te proberen het kinderzitje in beide richtingen te draaien. De 2 indicatoren (3) moeten de kleur zwart aangeven.

LET OPI Gebruik het kinderzitje niet in voorwaartse positie als uw kind kleiner is dan 76 cm of jonger dan 15 maanden.

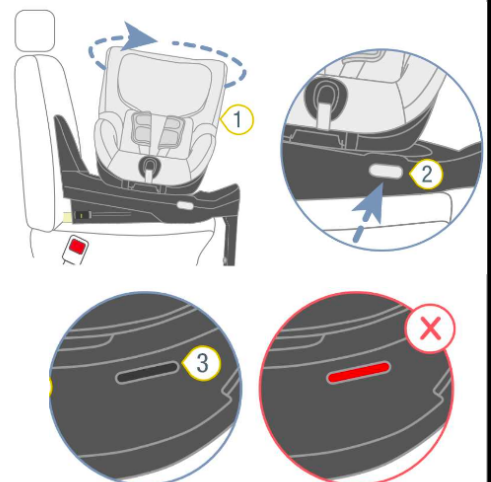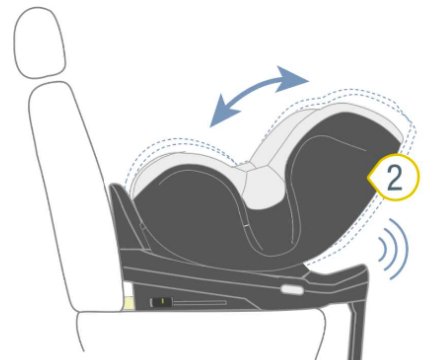
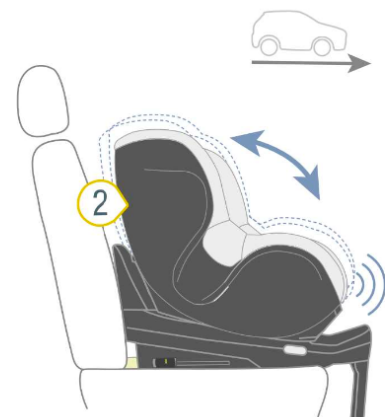


3 Gebruik van het basismodel

3.3 Uitstapfunctie

1. Druk op de draaiknop (2) aan de zijkant van het onderstel en draai tegelijkertijd de zitunit (1) 90° in de richting van de autodeur.
2. Nu kunt u uw kind gemakkelijk in- en uitstappen.
3. Zet uw kind vast.
4. Draai de zitunit 90° terug in de rijrichting die overeenkomt met de leeftijd van het kind, totdat deze met een 'klik' vastklikt.

Let op: Controleer voor elke rit of de draaibare zitunit volledig is vergrendeld en of beide indicatoren zwart zijn.

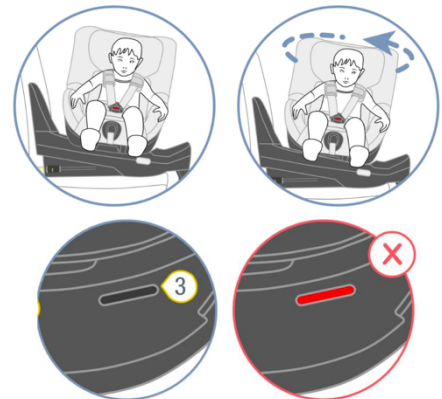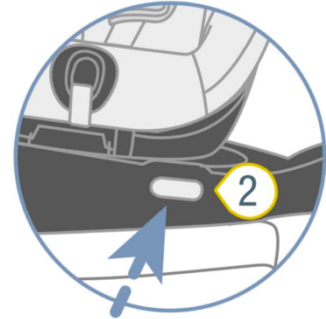

3.4 Verzorging & onderhoud

Gebruik uitsluitend originele HERNIK-stoelhoezen. De stoelhoes is een integraal onderdeel van het kinderzitje en vervult belangrijke functies om de goede werking van het systeem te garanderen. Reserve stoelhoezen zijn verkrijgbaar bij uw dealer.

- De hoes kan worden verwijderd en met een mild wasmiddel in het fijne wasprogramma van de wasmachine (30 °C) worden gewassen. Neem de aanwijzingen op het waslabel van de hoes in acht.
- De vulling kan net als de hoes worden gewassen. Verwijder alle schuimdelen uit het boven- en ondergedeelte voordat u de hoes wast. Deze mogen niet worden meegewassen.
- De schouderkussens kunnen worden verwijderd en met lauw zeepwater worden gewassen.
- De kunststof onderdelen en de riemen kunnen met zeepwater worden gereinigd. Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen (zoals oplosmiddelen).

4 Gebruik van de optionele accessoires

4 Gebruik van de optionele accessoires

4.1 Thoraxpelotten

De thoraxsteunen helpen uw kind om het bovenlichaam te stabiliseren wanneer de rompcontrole beperkt is. Ze zijn in de diepte verstelbaar met behulp van een schroefverbinding.

De steunen worden met klittenband op een montageplaat bevestigd. Ze kunnen met lichte kracht worden losgemaakt. Als u de optimale positie hebt gevonden, moeten de steunen opnieuw worden vastgezet door ze lichtjes te draaien en naar de rug toe te drukken.

De thoraxsteunen kunnen in de breedte met 9 cm en in de hoogte met 11 cm worden versteld.

De hoes is afneembaar en wasbaar.



4.2 Abductiewig

De abductiewig helpt uw kind om de benen in een gecontroleerde positie te houden. Deze is niet verstelbaar, maar is aangebracht op een stabiele kunststofplaat die zich onder de hoes bevindt.

Als het kussen correct is geplaatst, is de drukknop voor het losmaken van de 5-puntsgordel gemakkelijk bereikbaar.



4 Gebruik van de optionele accessoires

4.3 Steun- en veiligheidswatten

Dankzij het steun- en veiligheidskussen kan uw kind zijn armen neerleggen en zo het bovenlichaam stabiliseren.

Het is aan de onderkant voorzien van klittenband, zodat het stevig vastzit. Om het te monteren, moet de tafel aan de voorkant worden opgetild en in de gleuf tussen de rugleuning en het zitgedeelte worden geklemd. Bevestig het vervolgens met de banden aan de rugleuning.

De hoes is afneembaar en wasbaar.



4.4 Beschermmat

1. Plaats de beschermmat op de stoel van uw auto zonder de uitsparingen voor de ISOFIX te blokkeren.
2. Plaats de HERO-NXT in het midden van de beschermmat en zet hem vast zoals beschreven in hoofdstuk 2.3.



5Garantie

5 Garantie

HERNIK-producten voldoen aan de nieuwste stand van de techniek en worden volgens strenge kwaliteitsnormen vervaardigd. Mocht u in uitzonderlijke gevallen reden tot klagen hebben, dan garandeert HERNIK GmbH overeenkomstig de algemene voorwaarden na levering

- 24 maanden op alle vaste onderdelen.
- 12 maanden op alle bewegende onderdelen.

Voor speciale uitvoeringen kan geen garantie worden gegeven, tenzij deze het gevolg zijn van fabricage- of materiaalfouten. In dat geval wordt het product waarover u een klacht heeft, gedurende 12 maanden vervangen.

De aanspraken op grond van deze garantieverplichting veronderstellen dat het apparaat correct en in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing is gebruikt.

Bij constructieve wijzigingen, nabewerkingen of ondeskundige reparaties zonder voorafgaand overleg met de GmbH vervalt het recht op garantie van HERNIK.

Verdere aanspraken, ongeacht de rechtsgrond, in het bijzonder op vergoeding van directe of indirecte schade, zijn uitgesloten.

6Markering

6 Markering

Op de achterzijde vindt u de volgende markering:



7 Technische gegevens

7 Technische gegevens

	HERO-NXT MIT Polstereinlage	HERO-NXT OHNE Polstereinlage
SITZBREITE (Becken)	21	25 cm
SITZBREITE (Knie)	28	28 cm
SITZTIEFE	25	28 cm
RÜCKENHÖHE	21 (24) - 34	27 - 35 cm
SCHEITELHÖHE	41 - 53	44 - 56 cm
BRUSTBREITE (Pelotten)	12 - 21 cm	
Gesamthöhe	66 - 73 cm (ohne Standfuß 60 cm)	
Gesamtbreite	50 cm	
Gesamttiefe	65 cm	
Sitzwinkel	bis 45°	
Rückenwinkel	90°	
Größe des Kindes	61 - 106 cm	
Gewicht	15 kg	
getestete Belastbarkeit	bis 18 kg	

8Materiaalopstelling

8 Materiaalopstelling

De volgende materialen worden gebruikt:

- Kunststof (zitting en bekleding onderconstructie)
- Staal (draai-eenheid, Isofix en steunpoot)
- Aluminium (thoraxsteunen)
- Polyester (gordelband)
- Met schuim bekleed gaas, antraciet (bekleding)
- Schuimstof ruimtelijk gewicht

Aantekeningen

Aantekeningen



HERNIK GmbH
Gewerbering 8
83543 Rott am Inn • Germany

 **+49 8039-9093930** •  **+49 8039-90939319**
 **info@hernik.de** •  **www.hernik.de**