

# gebruiksaanwijzing

# HERO



# Inhoudsopgave

|          |                                                                                                           |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>ALGEMENE INFORMATIE</b>                                                                                | <b>4</b>  |
| 1.1      | Voorwoord                                                                                                 | 4         |
| 1.2      | Doel en indicatie                                                                                         | 4         |
| 1.3      | Opmerkingen                                                                                               | 5         |
| 1.4      | Conformiteitsverklaring                                                                                   | 5         |
| 1.5      | Garantievoorwaarden                                                                                       | 5         |
| 1.6      | Service en reparaties                                                                                     | 6         |
| 1.7      | Gebruikstraining                                                                                          | 6         |
| 1.8      | Goedkeuring/compatibiliteit met betrekking tot de combinatie met in de handel verkrijgbare autokindzitjes | 6         |
| 1.9      | Gebruiksduur/onderhoud                                                                                    | 6         |
| <b>2</b> | <b>VEILIGHEID EN MONTAGE IN DE AUTO</b>                                                                   | <b>8</b>  |
| 2.1      | Maak kennis met de HERO-XL                                                                                | 8         |
| 2.2      | Veiligheidsinstructies                                                                                    | 10        |
| 2.3      | Gebruik in het voertuig                                                                                   | 11        |
| 2.4      | Onderste bevestigingspunten                                                                               | 11        |
| 2.5      | Bevestiging van de spanbanden                                                                             | 12        |
| 2.6      | Inbouw in het voertuig                                                                                    | 15        |
| <b>3</b> | <b>GEBRUIK VAN HET BASISMODEL</b>                                                                         | <b>17</b> |
| 3.1      | Het kind vastmaken                                                                                        | 17        |
| 3.2      | De hoofdsteun instellen                                                                                   | 21        |
| 3.3      | Uit het voertuig halen                                                                                    | 22        |
| 3.4      | Verzorging en onderhoud                                                                                   | 23        |

# Inhoudsopgave

|          |                                             |           |
|----------|---------------------------------------------|-----------|
| <b>4</b> | <b>GEBRUIK VAN DE OPTIONELE ACCESSOIRES</b> | <b>24</b> |
| 4.1      | Thoraxsteunen                               | 24        |
| 4.2      | Abductiewig                                 | 24        |
| 4.3      | Zitdiepte-adapter                           | 25        |
| 4.4      | Steun- en veiligheidsbekleding              | 25        |
| <b>5</b> | <b>GARANTIE</b>                             | <b>26</b> |
| <b>6</b> | <b>MARKERING</b>                            | <b>27</b> |
| <b>7</b> | <b>TECHNISCHE GEGEVENS</b>                  | <b>28</b> |

# 1 Algemene informatie

## 1 Algemene informatie

### 1.1 Voorwoord

U hebt gekozen voor het autokindzitje "HERO-XL" en ontvangt hiermee een hoogwaardig product van ons bedrijf. Wij willen u bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen.

Om ervoor te zorgen dat u lang plezier heeft van dit product en dat het u helpt uw dagelijks leven te vergemakkelijken, overhandigen wij u deze handleiding. Hierin vindt u informatie over het juiste en eenvoudige gebruik en het noodzakelijke onderhoud. Om schade als gevolg van bedieningsfouten te voorkomen en een optimaal gebruik mogelijk te maken, verzoeken wij u de volgende instructies en aanwijzingen zorgvuldig door te lezen. Als u nog vragen of problemen heeft, neem dan contact op met uw dealer. Wij wensen u veel plezier met het gebruik en hopen dat onze producten aan uw verwachtingen voldoen.

Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen aan het in deze handleiding beschreven model.

Voordat u het product in uw auto installeert en voor het eerst gebruikt, verzoeken wij u in het bijzonder de installatie-instructies op pagina 7 - 15 te lezen en op te volgen.

Zorg ervoor dat de gebruiksaanwijzing bij het product blijft en dus voor elke gebruiker beschikbaar is.

Uw HERNIK GmbH

### 1.2 Beoogd gebruik en indicatie

De HERO-XL is ontwikkeld voor het vervoer van kinderen met speciale behoeften (GMFCS 3-5; bijvoorbeeld uitgesproken spierhypotonie met gebrek aan controle over hoofd en romp) in motorvoertuigen. Kinderen met een slechte controle over hun hoofd en romp (bijvoorbeeld cerebrale parese, spierdystrofie, hypotonie, motorische ontwikkelingsstoornis) kunnen worden ondersteund in hun houding door de in de basisuitrusting opgenomen zithoekverstelling en speciale kussens, waardoor een veilig vervoer kan worden gegarandeerd.

Met belangrijke optionele accessoires kan in detail op specifieke aspecten worden ingegaan, bijvoorbeeld de installatie van een stabiele abductiewig, thoraxpelotten, zitdiepteadapter of het steun- en veiligheidskussen.

Meer hierover in het hoofdstuk '4.3 '.

# 1 Algemene informatie

## 1.3 Opmerkingen

De HERO-XL autostoel voor kinderen met een handicap bestaat uit:

1. een in de handel verkrijgbaar autostoeltje van Axxid (raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van de fabrikant).
2. een aanpassingsmodule met accessoires waarmee u de autostoel kunt aanpassen aan de individuele behoeften van uw kind. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van HERNIK GmbH.

## 1.4 Conformiteitsverklaring

HERNIK GmbH verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het autokinderzitje "HERO-XL" voldoet aan de fundamentele eisen (bijlage 1 van richtlijn 93/42 EEG). Het product is voorzien van het CE-keurmerk volgens bovengenoemde richtlijn.

## 1.5 Garantievoorwaarden

Er kan alleen garantie worden gegeven als het product onder de voorgeschreven omstandigheden en voor de beoogde doeleinden wordt gebruikt. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door onderdelen en reserveonderdelen die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd.

# 1 Algemene informatie

## 1.6 Service en reparaties

Service en reparaties aan de HERO-XL mogen alleen door gespecialiseerde dealers worden uitgevoerd. Neem bij problemen contact op met uw verantwoordelijke dealer. Bij reparaties krijgt u daar uitsluitend originele reserveonderdelen.

## 1.7 Gebruikstraining

Het autostoeltje wordt volledig gemonteerd geleverd. Bij levering instrueert de vakhandelaar de gebruiker met behulp van de gebruiksaanwijzing over het gebruik van het hulpmiddel. De vakhandelaar moet samen met de gebruiker het autostoeltje in de auto installeren. Om een optimale zitpositie te bereiken, is het noodzakelijk om het autostoeltje individueel aan te passen aan de omstandigheden van het kind. Dit moet in principe door de vakhandelaar worden gedaan.

## 1.8 Goedkeuring/compatibiliteit met betrekking tot de combinatie met in de handel verkrijgbare autostoeltjes

De HERO-XL is inclusief alle accessoires een goedgekeurd autostoeltje volgens ECE R129/03. Onderdelen en accessoires van de HERO-XL zijn niet goedgekeurd voor combinatie met andere in de handel verkrijgbare autostoeltjes. Door een wijziging kan de goedkeuring van de HERO-XL en die van het in de handel verkrijgbare autostoeltje vervallen.

## 1.9 Gebruiksduur/onderhoud

De aanbevolen gebruiksduur van dit revalidatieautostoeltje is 7 jaar vanaf de datum van eerste ingebruikname. Na afloop van deze periode mag het product om veiligheidsredenen niet meer worden gebruikt, omdat materiaalmoeheid en leeftijdsgebonden veranderingen de beschermende werking kunnen aantasten.

De veiligheidsrelevante onderdelen zijn onderhoudsvrij. Afhankelijk van het soort en de frequentie van het gebruik moet het product regelmatig worden gereinigd. De betreffende aanwijzingen zijn te vinden in het hoofdstuk "Reiniging" van deze gebruiksaanwijzing. Bij gebruik van optionele accessoires wordt een regelmatige functiecontrole door de gebruiker aanbevolen. De frequentie van de controle is afhankelijk van de gebruiksfrequentie, de gebruiksomstandigheden en de invloed van de gebruiker (bijv. eenmaal per jaar). De

# 1 Algemene informatie

controle moet worden uitgevoerd volgens de betreffende hoofdstukken van deze gebruiksaanwijzing.


## 2 Veiligheids s & installatie in de auto

### 2 Veiligheids s & installatie in de auto

#### 2.1 Maak kennis met de HERO-XL



## 2Veiligheids s & installatie in de auto

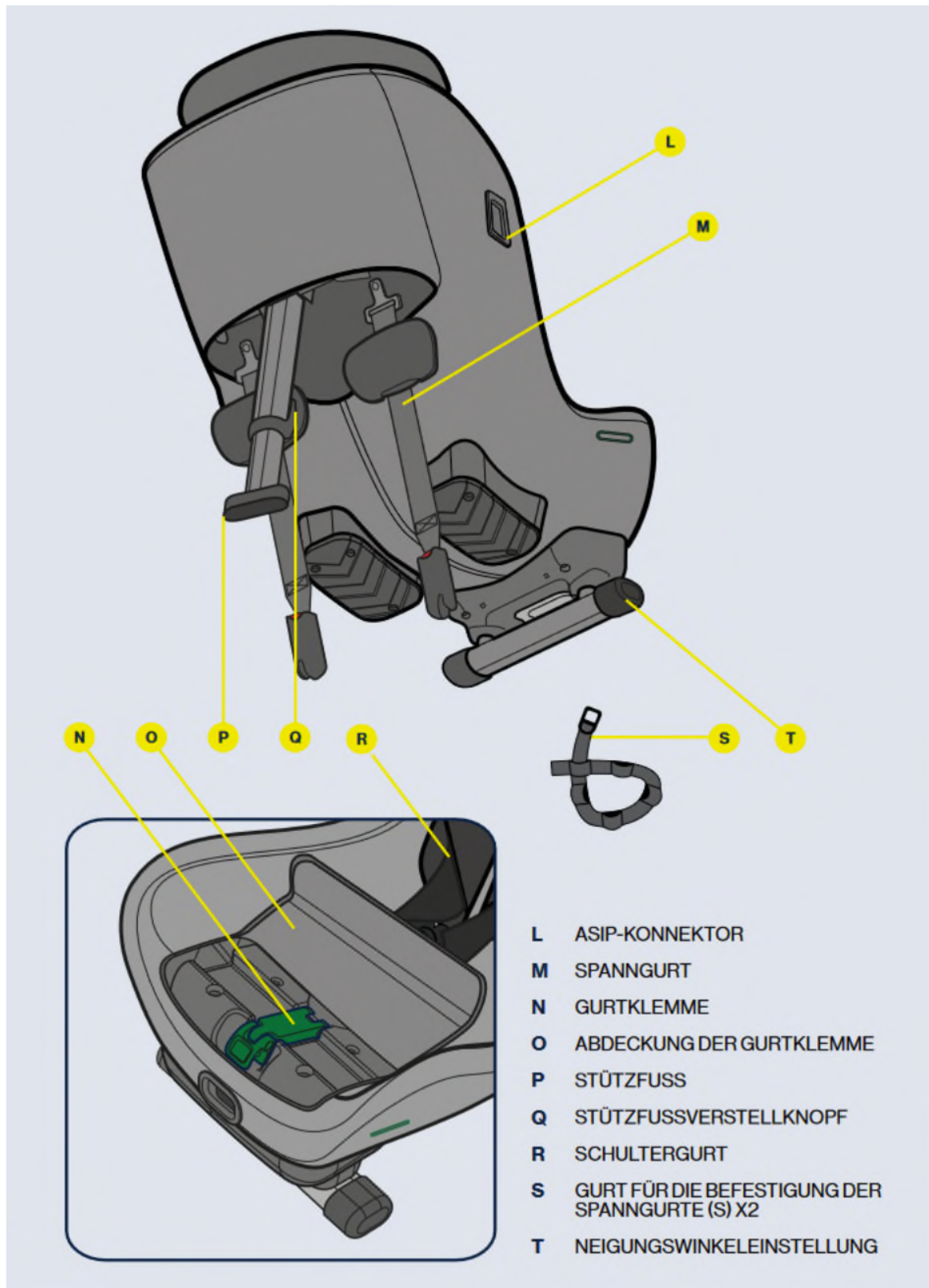

## 2 Veiligheids s & installatie in de auto

### 2.2 Veiligheidsinstructies

De HERO-XL moet altijd volgens de montagehandleiding in het voertuig worden bevestigd, ook als hij niet wordt gebruikt. Een niet-bevestigde stoel kan bij een noodstop andere inzittenden verwonden.

- De HERO-XL moet zo in de auto worden bevestigd dat hij niet bekneld raakt tussen de voorstoelen of de autodeuren.
- De gordels mogen niet verdraaid of bekneld raken en moeten strak worden aangetrokken.
- Na een ongeval mag het autostoeltje niet meer worden gebruikt.
- Maak uw kind altijd vast met de gordel.
- Controleer voor elke rit of de gordelsluiting correct is vergrendeld en of de voet correct is geplaatst.
- Zorg er ook voor dat alle vaste voorwerpen en kunststof onderdelen van de HERO-XL zo zijn bevestigd dat ze bij dagelijks gebruik van de auto niet bekneld kunnen raken door een bewegende stoel of in een deur.
- Het wordt aanbevolen om bagage of andere voorwerpen goed vast te zetten.
- Het autostoeltje mag niet zonder de bekleding worden gebruikt.
- Houd er rekening mee dat de autostoel te warm kan worden voor de huid van uw kind als deze langere tijd zonder de stoffen hoes in de zon staat.
- De hoes mag alleen worden vervangen door de originele hoes van HERNIK.
- Laat uw kind niet zonder toezicht achter in het autostoeltje.
- Breng geen wijzigingen of toevoegingen aan het apparaat aan.
- Volg de installatie-instructies van HERNIK nauwkeurig op.
- De gebruiksaanwijzing moet altijd in het voertuig worden bewaard.

## 2 Veiligheids s & installatie in de auto

### 2.3 Gebruik in de auto

Het HERO-XL revalidatieautostoeltje voor kinderen mag uitsluitend achterwaarts gericht worden geïnstalleerd. Het past op de meeste, maar niet op alle zitplaatsen. Raadpleeg de handleiding van uw auto voor informatie over de autostoelen die volgens ECE R16 zijn goedgekeurd voor het gebruik van kinderbeveiligingssystemen.

Gebruiksmogelijkheden HERO-XL (i-SIZE):

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Beifahrersitz (kein aktiver Airbag)    | JA/NEIN* |
| Beifahrersitz (aktiver Airbag)         | NEIN     |
| Rücksitz mit Dreipunkt-Sicherheitsgurt | JA       |
| Sitz mit Zweipunkt-Sicherheitsgurt     | NEIN     |
| Seit- und rückwärtsgerichtete Sitze    | NEIN     |



**BELANGRIJK!** Als u uw HERO-XL-autostoeltje op een zitplaats met frontale airbag wilt installeren, moet de airbag worden gedeactiveerd volgens de instructies van de autofabrikant. Houd er rekening mee dat bij sommige auto's de airbag alleen door een erkend servicecentrum kan worden gedeactiveerd.

### 2.4 Onderste bevestigingspunten


Spanbanden aan de voorkant worden gebruikt om de veiligheid van kinderen in auto's te verbeteren door een stevige en stabiele bevestiging van achterwaarts gerichte kinderzitjes met gordels mogelijk te maken. Deze bevestiging verhoogt de veiligheid van uw kind bij alle soorten botsingen, inclusief koprol- en kop-staartbotsingen.

De spanbanden zorgen voor een nauwkeurige en eenvoudige installatie in voertuigen met vooraf geïnstalleerde onderste bevestigingspunten. Vooraf geïnstalleerde onderste bevestigingspunten in voertuigen bevinden zich vaak op de aan de vloer bevestigde stoelrails, maar ook andere posities zijn mogelijk. Raadpleeg de handleiding van uw auto voor meer informatie over bruikbare bevestigingspunten. Als uw auto geen onderste bevestigingspunten heeft, kunt u de extra riemen voor de onderste bevestiging (S) gebruiken die bij de HERO-XL worden geleverd. De installatie-instructies vindt u in deze handleiding.

**BELANGRIJK!** Gebruik de HERO-XL nooit zonder de spanbanden naar voren. Deze zijn een belangrijk veiligheidsvoorziening en moeten altijd worden gebruikt bij de installatie van uw kinderzitje.

## 2 Veiligheids s & installatie in de auto


### 2.5 Bevestigen van de spanbanden

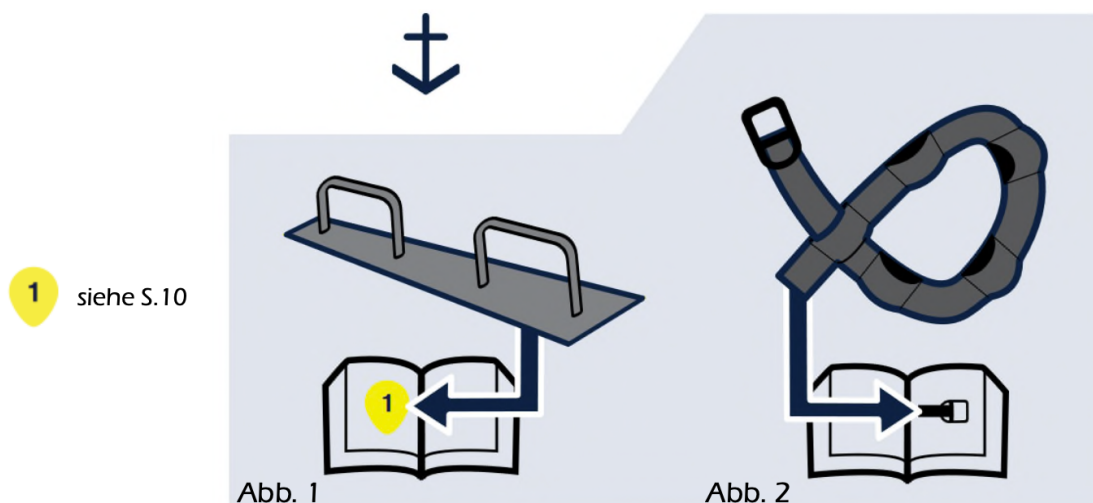

Als uw auto niet is uitgerust met geschikte vooraf geïnstalleerde bevestigingspunten aan de onderkant (afb. 1), kunt u de riemen voor bevestiging aan de onderkant gebruiken die bij de HERO-XL worden geleverd (afb. 2). Afhankelijk van het voertuig en de zitpositie waarin u uw kinderzitje wilt installeren, zijn er verschillende mogelijke bevestigingspunten voor het aanbrengen van de riemen (zie volgende pagina):

Om de riemen voor de onderste bevestiging (S) te installeren, voert u de riem eenvoudigweg rond het gekozen bevestigingspunt en voert u de metalen verankering door een van de sleuven in de riem (afb. 3). De bevestigingsriem heeft meerdere sleuven die kunnen worden gebruikt. Zorg ervoor dat u de gleuf gebruikt die het dichtst bij de metalen verankering ligt, zodat de metalen verankering zo dicht mogelijk bij de bodem van het voertuig wordt geïnstalleerd. Trek vervolgens aan de metalen verankering om de riem strak te trekken en herhaal dit voor de andere riem. Gebruik bij de installatie van de HERO-XL altijd twee bevestigingspunten, die bovendien van elkaar gescheiden moeten zijn, omdat dit een stabielere installatie mogelijk maakt.

## 2 Veiligheids s & installatie in de auto

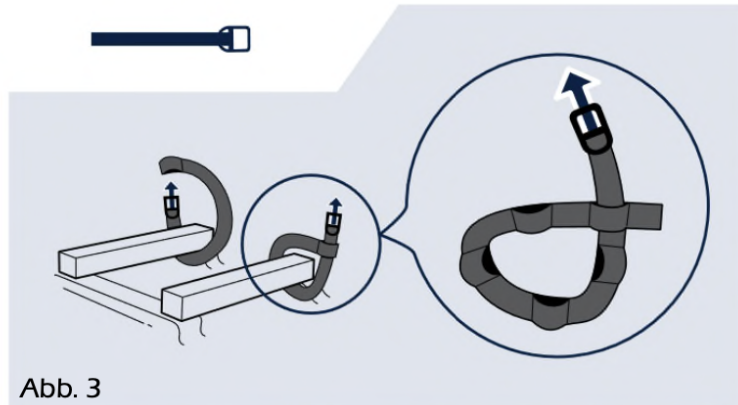

Opties voor het geleiden van de bevestigingsriem:

alt. a) Leid de riem rond de rand van het vooraf geïnstalleerde bevestigingspunt (gebruik deze methode alleen als de vooraf geïnstalleerde bevestigingspunten niet direct passen bij de onderste bevestigingsriemen).


alt. b) Bevestig de riem rond de zitrail voor het kindersitje door de riem tussen de zitrail en de vloer van het voertuig of door een geschikt gat in de zitrail te leiden.

alt. c) Bevestig de riem rond het zitgewricht van de autostoel vóór het kindersitje door de riem tussen de rugleuning van de autostoel en de zitkussen door te voeren.

alt. d) Bevestig de gordel rond de zitrail onder het kindersitje door de gordel tussen de zitrail en de vloer van het voertuig door te halen of door een geschikt gat in de zitrail.

alt. e) Als de HERO-XL op een passagiersstoel wordt gemonteerd en geen van de bovenstaande alternatieven mogelijk is, kunt u de riemen voor de onderste bevestiging aan een geschikt bevestigingspunt achterin de auto bevestigen en de riemen onder de autostoel naar de voorzijde van de auto leiden. Zorg ervoor dat de bevestigingsriemen aan de voorkant van de stoel uitkomen en niet aan de zijkanten.

## 2Veiligheids s & installatie in de auto

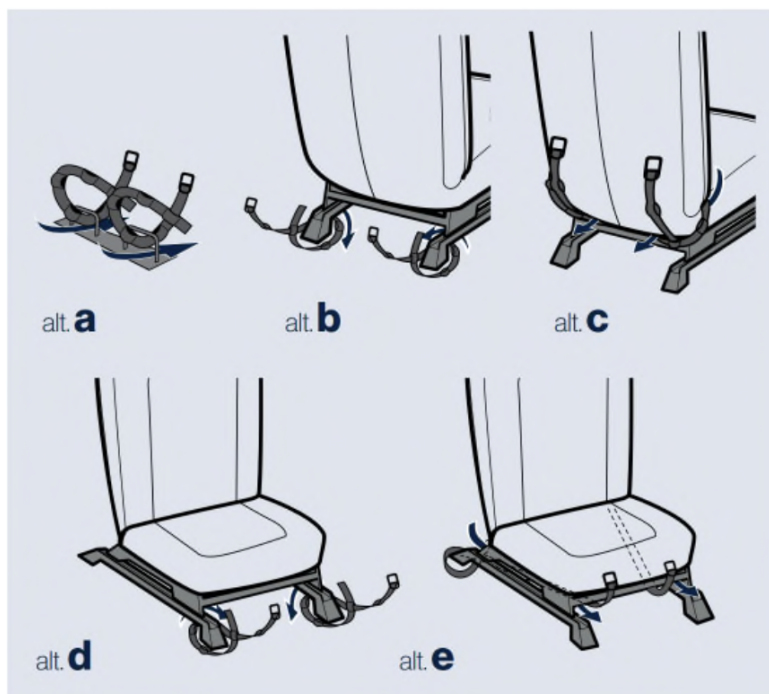


## 2 Veiligheids s & installatie in de auto

### 2.6 Installatie in het voertuig


- 1) Open de ritssluiting en open het deksel van de riemklem (O).
- 2) Plaats de HERO-XL op de autostoel, met de achterkant van het kinderzitje naar de voorkant van de auto. Pas de beenruimte van uw kind aan door het kinderzitje eenvoudig naar voren en naar achteren te schuiven op de autostoel. De HERO-XL kan dicht tegen de rugleuning van de autostoel worden geïnstalleerd, maar mag nooit zo worden geïnstalleerd dat de hiel (J) over de rand van de autostoel hangt. Zorg ervoor dat de verticale lijn (K) op de hiel (J) nooit over de rand van de autostoel loopt.

Stel de zithoek van het kinderzitje in door op de hendel voor het instellen van de hellingshoek (G) te drukken en een geschikte zithoekpositie te kiezen. Kies voor maximale veiligheid een zo rechtopstaande positie mogelijk en zorg er tegelijkertijd voor dat het hoofd van uw kind niet naar voren valt als het slaapt. Om redenen van comfort en veiligheid moet de hellingshoek naarmate uw kind groeit in een meer rechtopstaande positie worden ingesteld. Houd er rekening mee dat het kinderzitje iets meer naar achteren kantelt wanneer u de spanbanden (M) aanspant, omdat het in de bekleding van de autostoel zakt. Bij montage van de HERO-XL op een passagiersstoel is het mogelijk, maar niet noodzakelijk, dat de achterkant van het kinderzitje in contact komt met het dashboard.

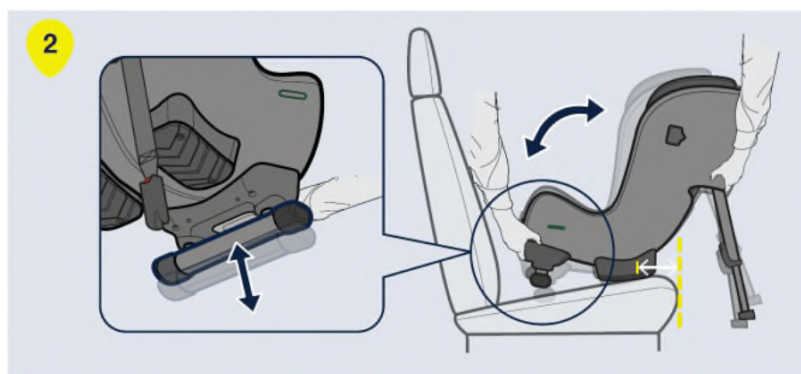


- 3) Open de gordelklem (N). Trek een armlengte van de autogordel uit en haal deze door de gordelsleuf (D) die het dichtst bij u ligt. Haal de gordel door de gordelklem (N) en vervolgens door de gordelsleuf (D) aan de andere kant. Maak de autogordel vast met de gordelsluiting en trek stevig aan het schoudergedeelte van de autogordel, zodat deze strak zit en het kinderzitje stevig vastzit. Hoe harder u trekt, hoe steviger de installatie. Als het kinderzitje stevig vastzit, sluit u de gordelklem (N) en vergrendelt u de autogordel in zijn positie. Zorg ervoor dat zowel de schouder- als de heupgordel samen in de gordelklem (N) zijn vergrendeld. Sluit het deksel van de gordelklem (O) en sluit de ritssluiting. Voor een nog stevigere en stabielere bevestiging drukt u het kinderzitje naar beneden terwijl u aan het schoudergedeelte van de veiligheidsgordel trekt.

## 2 Veiligheids s & installatie in de auto

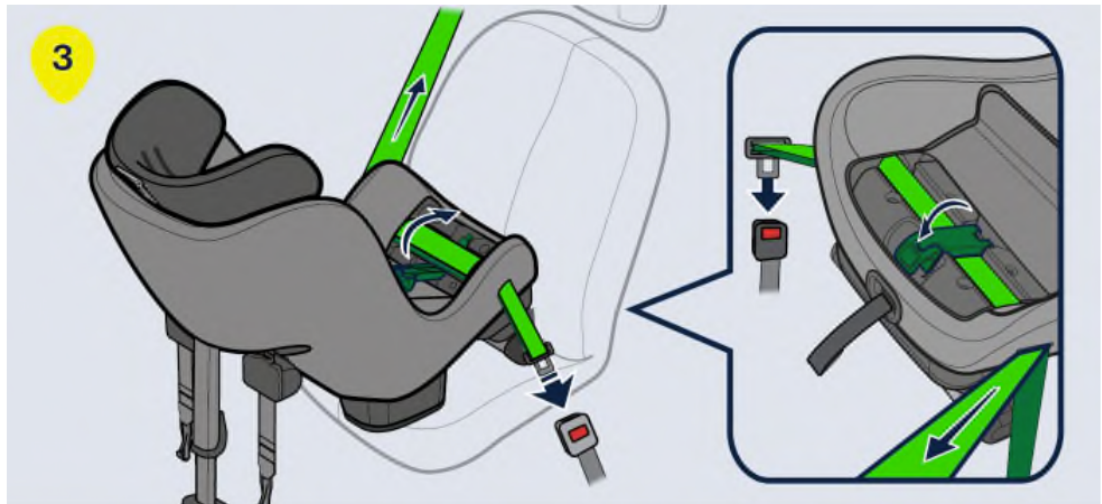


4) Trek de spanbanden (M) uit het kinderzitje en bevestig ze aan de onderste bevestigingspunten in uw auto. Meer informatie vindt u in het hoofdstuk 'Onderste bevestigingspunten' op pagina 10 van deze handleiding. Druk de bovenkant van het kinderzitje naar beneden en schud het kinderzitje heen en weer. De zelfspannende riemen (M) van de HERO-XL worden dan automatisch gespannen. Door de riemen (M) te spannen, stelt u ook de uiteindelijke hellingshoek van het kinderzitje in. Druk op het kinderzitje totdat het stevig vastzit en u een geschikte zithoek hebt bereikt. Controleer of de witte markering op de onderste bevestigingsriem zichtbaar is. Als dat niet het geval is, bevinden de onderste bevestigingspunten zich te dicht bij het kinderzitje en moeten ze worden aangepast. Als dat niet mogelijk is, kunt u ook de spanriemen achter het zitje kruisen om iets meer afstand te creëren.

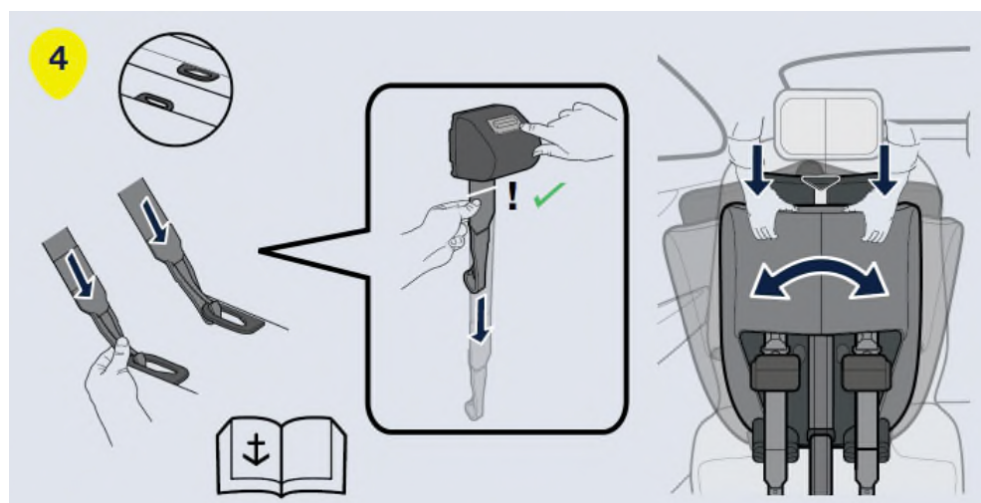


## 3 Gebruik van het basismodel

5) Trek de steunpoot (P) uit het kinderzitje. Druk op de steunpootknop (O) en trek de steunpoot (P) naar beneden totdat deze de vloer van de auto raakt. Laat de steunpootknop (O) los en til het kinderzitje omhoog om de steunpoot (P) verder uit te schuiven tot u een klikgeluid hoort. De steunpoot (P) moet nu vergrendeld zijn en stevig tegen de vloer van de auto drukken. Zorg ervoor dat de steunpoot (P) ongeveer 10° naar de voorkant van de auto is gekanteld. Controleer nogmaals of de veiligheidsgordel van de auto nog steeds strak gespannen is en of de heupgordel niet los is geraakt bij het spannen van de onderste bevestigingsriemen en de steunpoot. Als de autogordel iets aan spanning heeft verloren, span deze dan gewoon weer aan door stap 2 van deze instructies te herhalen zonder de spanriemen los te maken.

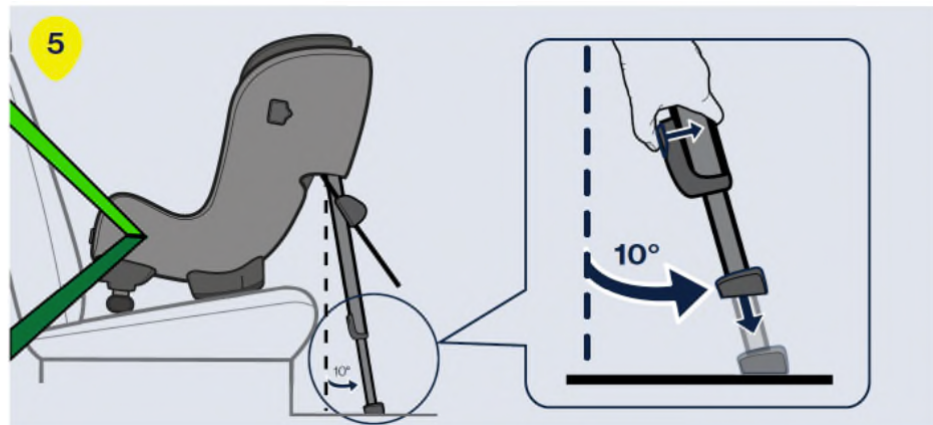

6) Schuif de ASIP (I) in de sleuven van de ASIP-connector (L) en duw deze naar beneden totdat de ASIP (I) vastklikt. Als er een plastic afdekking op de ASIP-connector (L) zit, verwijder deze dan en plaats deze op de ASIP-connector (L) aan de andere kant van de stoel voordat u de ASIP (I) bevestigt. Zorg ervoor dat de ASIP (I) aan de kant van het HERO-XL-kinderzitje is bevestigd die het dichtst bij de autodeur ligt.

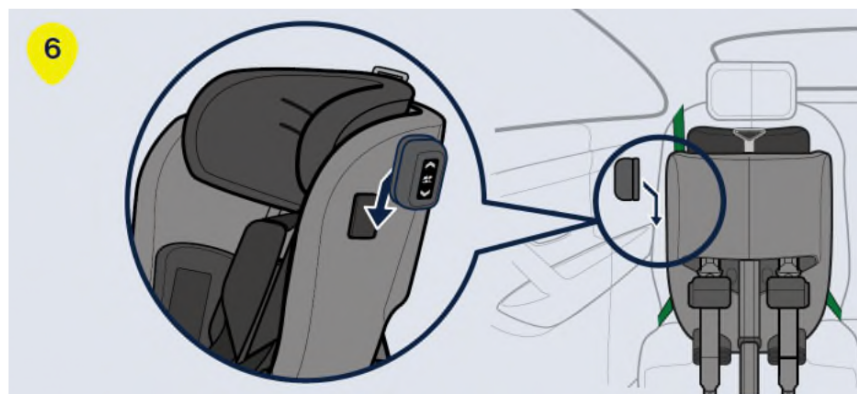

### 3 Gebruik van het basismodel

#### 3.1 Het kind vastmaken

## 3 Gebruik van het basismodel


Voordat u uw kind in het HERO-XL-kinderzitje vastmaakt, moet u controleren of de juiste inzet in het zitje zit. De HERO-XL is ontworpen om met uw kind mee te groeien en een comfortabele en veilige zitplaats voor kinderen te garanderen. Het wordt aanbevolen om de inzet te gebruiken totdat deze te krap wordt voor uw kind.

De HERO-XL is uitgerust met een automatische hoofdsteun (A) die automatisch in de juiste positie zakt wanneer u de geïntegreerde veiligheidsgordel vastmaakt. Om een optimale positie te garanderen, raadt HERNIK aan deze functie elke keer te gebruiken wanneer u uw kind vastmaakt. Voordat u uw kind in het kinderzitje zet, moet u controleren of de automatische hoofdsteun (A) in de ontgrendelde stand staat.

**7)** Controleer of de remhendel van de hoofdsteun (H) in de ontgrendelde stand staat. Als de hendel in de vergrendelde stand staat, drukt u de hendel in de ontgrendelde stand.




**8)** Maak de geïntegreerde veiligheidsgordel los door op de ontgrendelknop voor de gordel (E) te drukken en trek beide schoudergordels (R) tegelijkertijd naar buiten. Trek niet aan slechts één riem, omdat de schouderriemen (R) hierdoor ongelijkmatig kunnen worden. Zorg ervoor dat de hoofdsteun (A) in de hoogste stand staat:

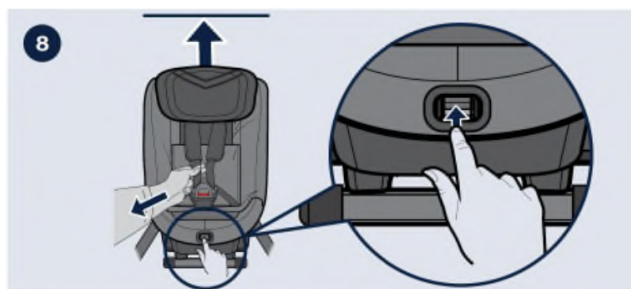


## 3 Gebruik van het basismodel

9) Ontgrendel de gordelsluiting door op de ontgrendelknop (C) te drukken en plaats de gordels buiten de stoel.

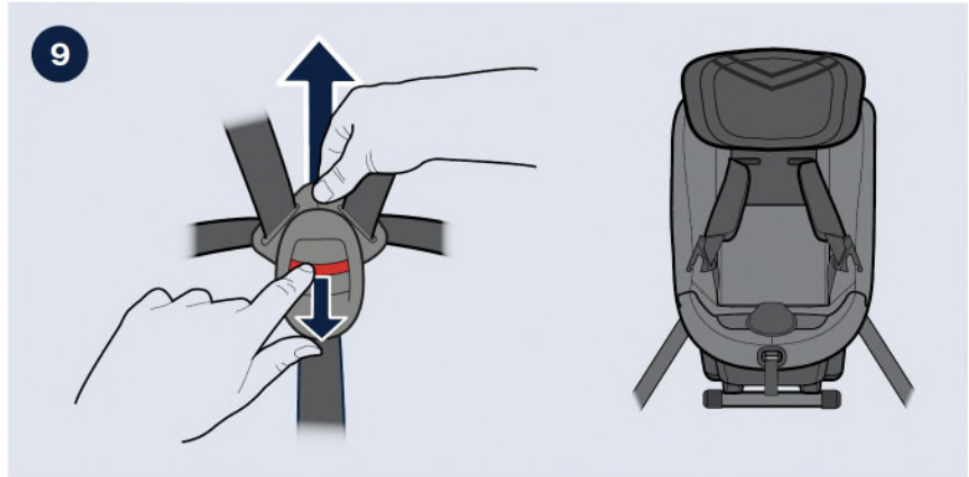


10) Zet uw kind in de stoel en leg de schoudergordels (R) over de schouders van uw kind. Vergrendel de geïntegreerde veiligheidsgordel door eerst de delen van de sluiting die aan de schoudergordels (R) zijn bevestigd samen te brengen en ze vervolgens in de sluiting te schuiven tot u een klik hoort.

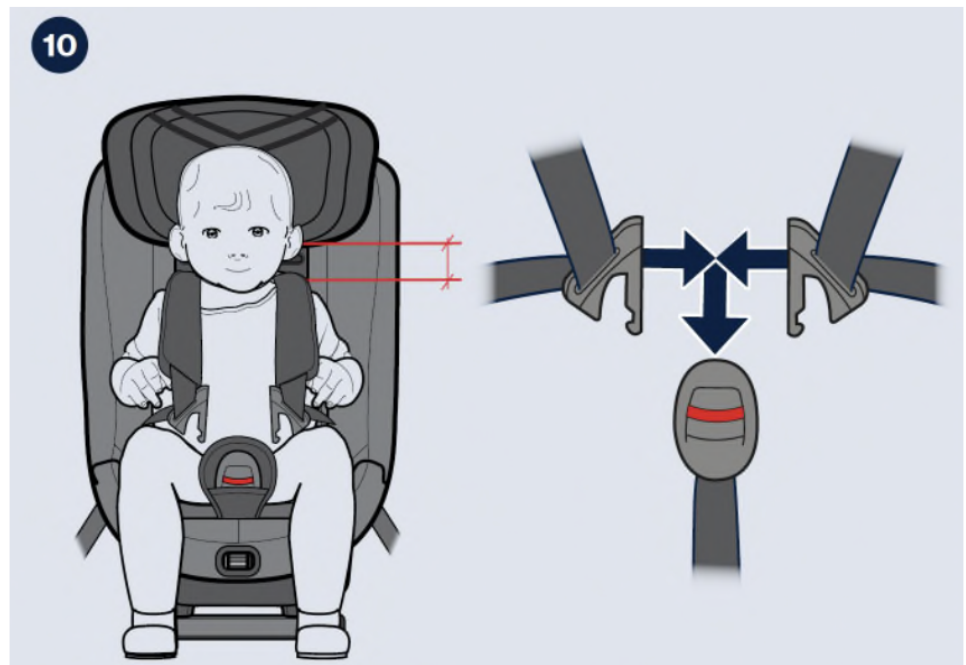

## 3 Gebruik van het basismodel

11) Trek aan de schoudergordels (R) om de geïntegreerde veiligheidsgordel over de heupen van uw kind te spannen. Terwijl de schoudergordels (R) gespannen blijven, trekt u de gordelspanner (F) recht van het kinderzitje af totdat de gordel strak genoeg zit. Er mag niet meer dan een vinger tussen de schoudergordels (R) en de schouders van uw kind passen. Bij het spannen van de gordel beweegt de hoofdsteen (A) automatisch naar beneden naar de voor uw kind geschikte positie.

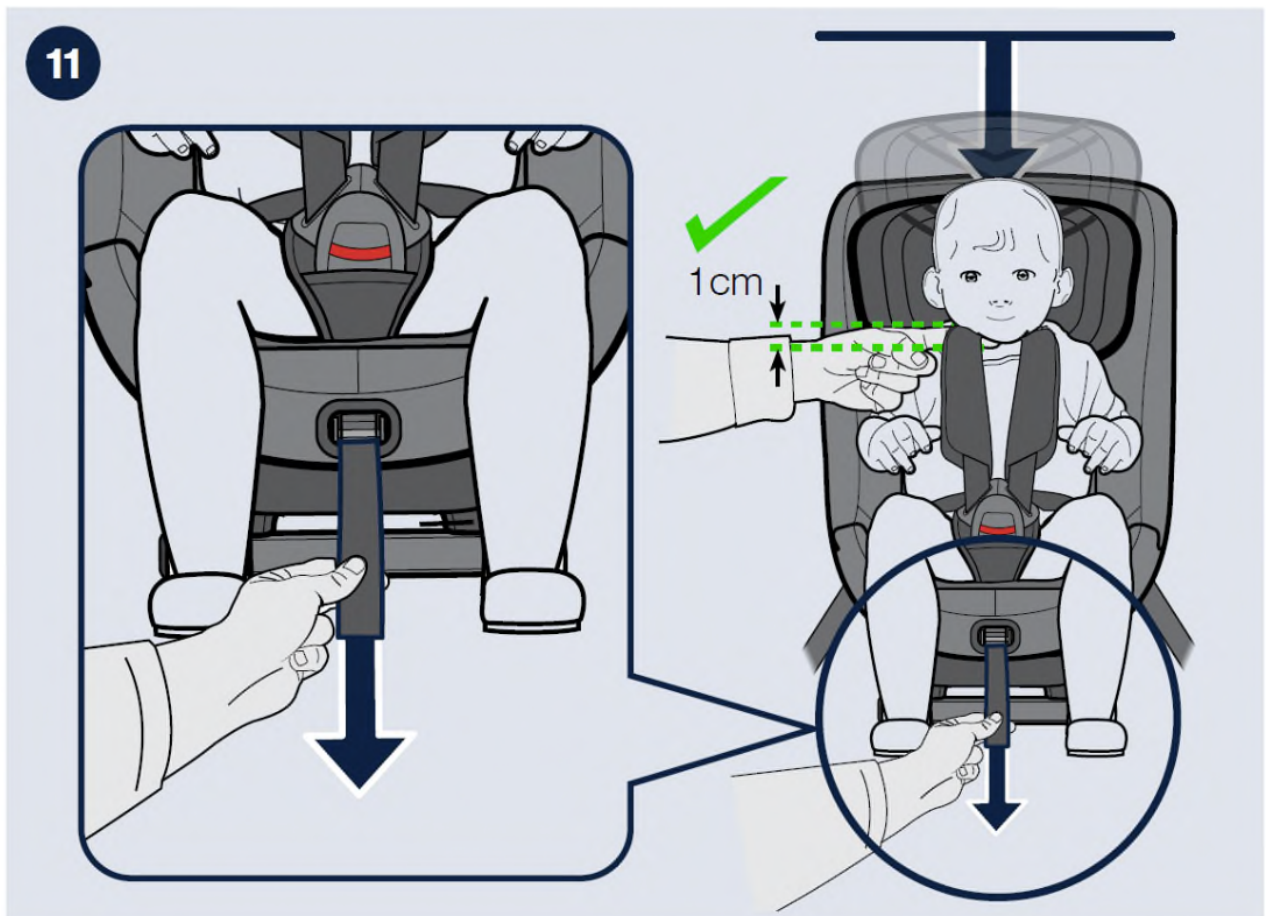

## 3 Gebruik van het basismodel

### 3.2 De hoofdsteun afstellen

De HERO-XL is uitgerust met een automatische hoofdsteun (A) die ervoor zorgt dat de hoofdsteun (A) altijd in de optimale positie voor uw kind staat. Wanneer de geïntegreerde veiligheidsgordel wordt aangespannen, zakt de hoofdsteun (A) naar de juiste hoogte en klikt automatisch vast. Wanneer de gordel wordt losgemaakt, gaat de hoofdsteun (A) terug naar de hoogste stand en wordt deze ontgrendeld. Om een optimale positie te garanderen, wordt aanbevolen om deze functie elke keer te gebruiken wanneer u uw kind vastmaakt.

De hoofdsteun (A) wordt alleen in de hoogste stand ontgrendeld. Let er daarom op dat de hoofdsteun (A) bij het losmaken van de geïntegreerde veiligheidsgordel volledig terugkeert naar de hoogste stand, omdat de hoofdsteun (A) anders vergrendeld blijft en niet naar beneden beweegt wanneer de gordel wordt aangespannen. Als u de automatische aanpassing wilt uitschakelen en de hoofdsteun (A) in een vaste positie wilt houden, brengt u de hoofdsteun (A) in de gewenste positie en zet u de remhendel van de hoofdsteun (H) in de vergrendelde positie. De hoofdsteun (A) is nu op de juiste hoogte vergrendeld en beweegt niet meer totdat u de remhendel van de hoofdsteun (H) weer in de ontgrendelde positie zet.

Als u uw HERO-XL met vaste hoofdsteun (A) gebruikt, zorg er dan voor dat de hoofdsteun (A) in de juiste positie voor uw kind staat. Zorg ervoor dat de schoudergordels (R) direct over de schouders van uw kind lopen of maximaal 1 cm daarboven door de stoel. Als dit niet het geval is, stel dan de hoofdsteun (A) bij door de remhendel van de hoofdsteun (H) in de ontgrendelde stand te zetten en de hoofdsteun (A) naar de bovenste stand te schuiven om deze te ontgrendelen, en herhaal vervolgens de procedure.

**OPMERKING!** Als de hoofdsteun is uitgeschoven, kan het rugkussen worden uitgeklappt (afb. 1). Zodra de hoogte van de hoofdsteun weer wordt verlaagd, moet het rugkussen overeenkomstig worden ingeklapt (afb. 2).



Abb. 1


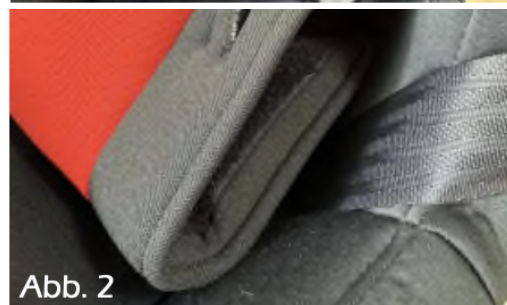


Abb. 2


## 3 Gebruik van het basismodel

### 3.3 Uitbouw uit het voertuig


1) Open de ritssluiting en open het klepje van de gordelklem (O). Ontgrendel de veiligheidsgordel van het voertuig door op de rode knop van de gordelsluiting te drukken. Open de gordelklem (N) en trek de veiligheidsgordel door de gordelsleuven (D) om deze uit het kindersitje te verwijderen (afb. 1).

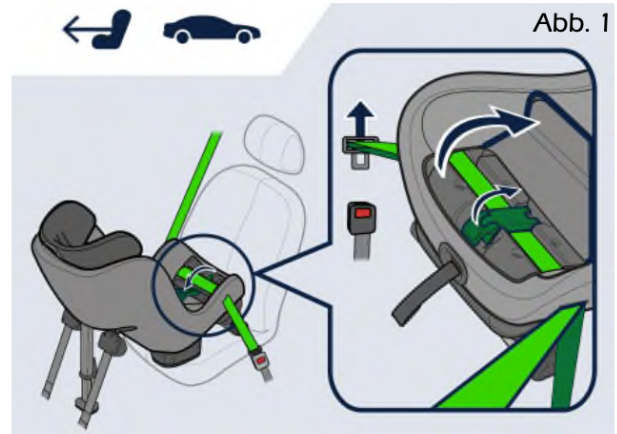

2) Ontgrendel de onderste bevestigingsriemen (M) door de koppelstukken met de hand vast te houden en met de duim op de rode knop te drukken. Houd het koppelstuk in de hand en breng het langzaam terug naar het kindersitje. Let erop dat u het koppelstuk van de onderste bevestigingsriem niet loslaat, omdat deze zich automatisch met hoge snelheid terugtrekt (afb. 2).

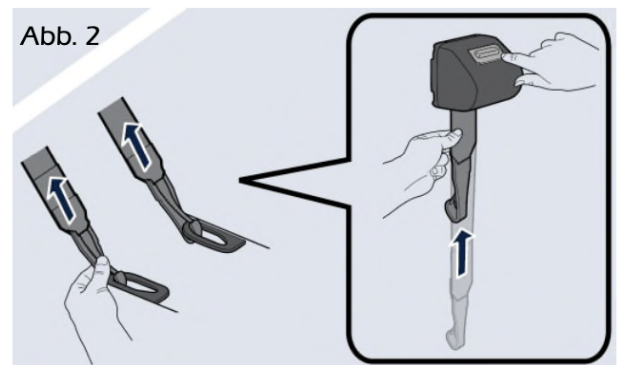

3) Druk op de steunpootknop (Q) en breng de steunpoot (P) in de kortste stand (afb. 3).

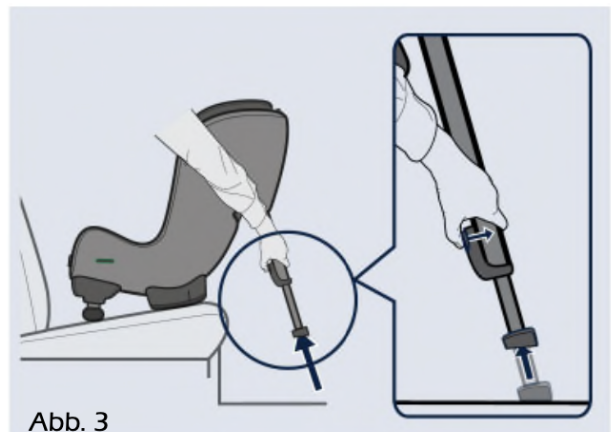

## 3 Gebruik van het basismodel

4) Druk op de hendel voor de zithoekverstelling (G) en druk de zithoekversteller (T) in de kortste stand. Til de HERO-XL uit de auto.

**TIP!** Vergrendel de gordelsluiting en span de gordels aan voordat u het kinderzitje uit het voertuig haalt. U kunt dan de schoudergordels (R) als draaggreep gebruiken om het kinderzitje gemakkelijker uit het voertuig te tillen en buiten het voertuig te vervoeren.

**BELANGRIJK!** Draag het kinderzitje nooit aan de hoofdsteun (A).

### 3.4 Verzorging en onderhoud

#### Algemene verzorgings- en onderhoudsinstructies

Om de volledige beschermende werking van het kinderzitje te garanderen:

- Bij een ongeval met een botsnelheid van meer dan 10 km/u kan het kinderzitje onder bepaalde omstandigheden beschadigd raken zonder dat de schade direct zichtbaar is. In dat geval moet het kinderzitje worden vervangen. Voer het op de juiste wijze af.
- Controleer alle belangrijke onderdelen regelmatig op beschadigingen. Zorg ervoor dat met name alle mechanische onderdelen correct functioneren.
- Om schade te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat het kinderzitje niet bekneld raakt tussen harde voorwerpen (autodeur, stoelrails enz.).
- Laat het kinderzitje altijd controleren als het beschadigd is (bijvoorbeeld als het op de grond is gevallen).
- Smeer of olieer nooit onderdelen van het kinderzitje.
- Om uw kind goed te kunnen beschermen, is het absoluut noodzakelijk dat u de HERO-XL precies volgens deze gebruiksaanwijzing installeert en gebruikt.

## 4 Gebruik van de optionele accessoires

### 4 Gebruik van de optionele accessoires

#### 4.1 Thoraxsteunen

De thoraxsteunen helpen uw kind om het bovenlichaam te stabiliseren wanneer de rompcontrole beperkt is. De steunen worden met klittenband op een montageplaat bevestigd. Ze kunnen met weinig kracht worden losgemaakt. Als u de optimale positie hebt gevonden, moeten de steunen opnieuw worden vastgezet door ze lichtjes te draaien en naar de rug toe te drukken. De hoes van de thoraxsteunen is afneembaar en wasbaar.



#### 4.2 Abductiewig

De abductiewig helpt uw kind om de benen in een gecontroleerde positie te houden. Hij is bevestigd aan een stabiel montageframe en kan met behulp van snelspanhendels in diepte en hoogte worden versteld. De hoes van de abductiewig is afneembaar en wasbaar.



## 4 Gebruik van de optionele accessoires

### 4.3 Zitdiepte-adapter

Met de zitdiepte-adapter (1) kan de zitdiepte met ca. 10 cm worden vergroot. Zo is de HERO-XL ook geschikt voor grotere kinderen.

De zitdiepte-adapter is bevestigd aan een stabiel montagekader en kan met behulp van een snelspanhendel (2) in de diepte worden versteld.

De bekleding is afneembaar en wasbaar.



### 4.4 Steun- en veiligheidsbekleding

Het steun- en veiligheidskussen (1) stelt uw kind in staat om zijn armen neer te leggen en zo het bovenlichaam te stabiliseren.

Het kan met behulp van twee klittenbanden aan de achterkant van de stoel worden vastgemaakt.

De hoes is afneembaar en wasbaar.



## 5Garantie

### 5 Garantie

HERNIK-producten voldoen aan de nieuwste stand van de techniek en worden volgens strenge kwaliteitsnormen vervaardigd. Mocht u in uitzonderlijke gevallen reden tot klagen hebben, dan garandeert de GmbH overeenkomstig de algemene voorwaarden van HERNIK na levering

- 24 maanden op alle vaste onderdelen
- 12 maanden op alle bewegende onderdelen

Voor speciale uitvoeringen kan geen garantie worden gegeven, tenzij deze het gevolg zijn van fabricage- of materiaalfouten. In dat geval wordt het product waartegen bezwaar wordt gemaakt gedurende 12 maanden vervangen.

De aanspraken op grond van deze garantieverplichting veronderstellen dat het apparaat correct en in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing is gebruikt.


Bij constructieve wijzigingen, nabewerkingen of ondeskundige reparaties zonder voorafgaand overleg met de GmbH vervalt het recht op garantie van HERNIK.

Verdere aanspraken, ongeacht de rechtsgrond, in het bijzonder op vergoeding van directe of indirecte schade, zijn uitgesloten.

## 6Markering

### 6 Markering

Op de achterzijde vindt u de volgende markering:

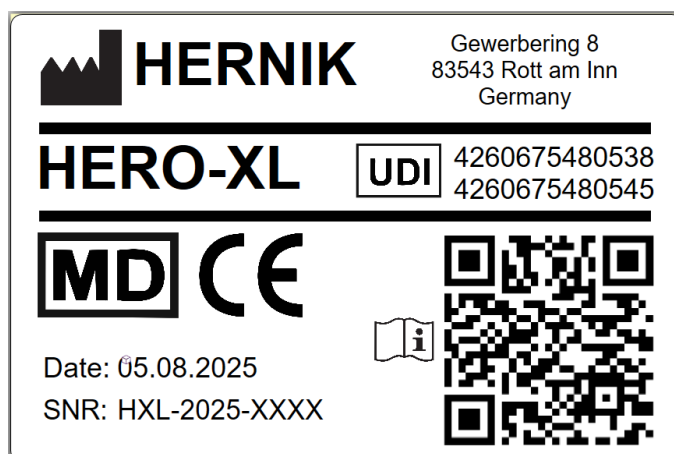

**Restraint device for special  
requirements "S" (EN)**

Please read the user manual  
before use!

## 7 Technische gegevens

### 7 Technische gegevens

| HERO-XL                 |            |
|-------------------------|------------|
| SITZBREITE (Becken)     | 24 cm      |
| SITZBREITE (Knie)       | 27 cm      |
| SITZTIEFE               | 25 - 34 cm |
| RÜCKENHÖHE              | 28 - 45 cm |
| SCHEITELHÖHE            | 48 - 68 cm |
| Höhe Thoraxpelotten     | 13 - 20 cm |
| Gesamthöhe              | 65 - 82 cm |
| Gesamtbreite            | 43 cm      |
| Gesamttiefe             | 55 cm      |
| getestete Belastbarkeit | 36 kg      |

## Aantekeningen

## Aantekeningen



**HERNIK GmbH**  
**Gewerbering 8**  
**83543 Rott am Inn • Germany**

 **+49 8039-9093930** •  **+49 8039-90939319**  
 **info@hernik.de** •  **www.hernik.de**