

gebruiksaanwijzing

IPA1 **LGT**



Inhoudsopgave

1	ALGEMENE INFORMATIE	4
1.1	Voorwoord	4
1.2	Doel en indicatie	4
1.3	Opmerkingen	5
1.4	Garantievoorwaarden	5
1.5	Service en reparaties	5
1.6	Gebruikstraining	5
1.7	Conformiteitsverklaring	5
1.8	Goedkeuring/compatibiliteit met betrekking tot de combinatie met in de handel verkrijgbare kinderzitjes	6
1.9	Contra-indicaties	6
1.10	Gebruiksduur/onderhoud	6
2	VEILIGHEID EN MONTAGE IN DE AUTO	7
2.1	Veiligheidsinstructies	7
2.2	Maak kennis met de IPAI-LGT	8
2.3	Installatie in de auto – met ISOFIX	9
2.4	De hoofdsteun instellen	11
2.5	Het vastmaken van de gordels	12
3	GEBRUIK VAN HET BASISMODEL	14
3.1	De 5-puntsgordel instellen	14
3.2	Instellen van de borststeunen	14
3.3	De zithoek instellen	15
4	GEBRUIK VAN DE OPTIONELE ACCESSOIRES	16

Inhoudsopgave

4.1	Abductiewig	16
4.2	Zitdiepteadapter	18
4.3	Steun- en veiligheidsbekleding	20
5	GARANTIE	21
6	MARKERING	22
7	ONDERHOUD & VERZORGING	23
8	TECHNISCHE GEGEVENS	24
9	MATERIAALOPSTELLING	25

1 Algemene informatie

1 Algemene informatie

1.1 Voorwoord

U hebt gekozen voor het autokindzitje "IPAI-LGT" en ontvangt hiermee een hoogwaardig product van ons bedrijf. Wij willen u bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen. Om ervoor te zorgen dat u lang plezier hebt van dit product en dat het u helpt uw dagelijks leven te vergemakkelijken, overhandigen wij u deze handleiding. Hierin vindt u informatie over het juiste en eenvoudige gebruik en het noodzakelijke onderhoud. Om schade door bedieningsfouten te voorkomen en een optimaal gebruik mogelijk te maken, verzoeken wij u de volgende instructies en aanwijzingen zorgvuldig door te lezen. Als u nog vragen of problemen heeft, neem dan contact op met uw dealer. Wij wensen u veel plezier met het gebruik en hopen dat onze producten aan uw verwachtingen voldoen.

Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen aan het in deze handleiding beschreven model.

Voordat u het product in uw auto installeert en voor het eerst gebruikt, verzoeken wij u in het bijzonder de installatie-instructies op pagina 9-13 te lezen en op te volgen.

Zorg ervoor dat de gebruiksaanwijzing bij het product blijft en dus voor elke gebruiker beschikbaar is.

Uw HERNIK GmbH

1.2 Beoogd gebruik en indicatie

De IPAI-LGT is ontwikkeld voor het vervoer van kinderen met speciale behoeften (GMFCS 3-5; bijvoorbeeld uitgesproken spierhypotonie met gebrek aan controle over hoofd en romp) in motorvoertuigen. Kinderen met een slechte controle over hun hoofd en romp (bijv. cerebrale parese, spierdystrofie, hypotonie, motorische ontwikkelingsstoornis) kunnen met behulp van de in de basisuitrusting inbegrepen 5-puntsgordel, kussens en thoraxpelotten in de juiste positie in de stoel worden ondersteund, waardoor een veilig vervoer kan worden gegarandeerd.

Met belangrijke optionele accessoires kan in detail op specifieke aspecten worden ingegaan, bijvoorbeeld de installatie van een stabiele abductiewig, thoraxpelotten, zitdiepteadapter of het steun- en veiligheidskussen. Meer hierover in het hoofdstuk 4.

1 Algemene informatie

1.3 Opmerkingen

De IPAI-LGT revalidatieautostoel voor kinderen bestaat uit twee modules:

1. Een in de handel verkrijgbaar Kidfix-autostoeltje van Römer-Britax (raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van de fabrikant).
2. Aanpassingsmodule met accessoires, waarmee de autostoel aan individuele behoeften kan worden aangepast. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van HERNIK GmbH.

1.4 Garantievoorwaarden

Er kan alleen garantie worden gegeven als het product onder de voorgeschreven omstandigheden en voor de beoogde doeleinden wordt gebruikt. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door onderdelen en reserveonderdelen die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd.

1.5 Service en reparaties

Service en reparaties aan de IPAI-LGT mogen alleen door gespecialiseerde dealers worden uitgevoerd. Neem bij problemen contact op met uw verantwoordelijke dealer. Bij reparaties ontvangt u daar uitsluitend originele reserveonderdelen.

1.6 Gebruikstraining

Het autostoeltje wordt volledig gemonteerd geleverd. Bij levering instrueert de vakhandelaar de gebruiker met behulp van de gebruiksaanwijzing over het gebruik van het hulpmiddel. De vakhandelaar moet samen met de gebruiker het autostoeltje in de auto installeren en ervoor zorgen dat de Isofix-adapter correct is bevestigd. Wanneer u de autostoel installeert, kunt u deze het beste met één hand aan de voorkant in het midden vasthouden en met de andere hand aan de zijkant bovenaan. Om een optimale zitpositie te bereiken, is het noodzakelijk om de autostoel individueel aan te passen aan de omstandigheden van het kind. Dit moet in principe door de gespecialiseerde dealer worden gedaan.

1.7 Conformiteitsverklaring

HERNIK GmbH verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het autokinderzitje "IPAI-LGT" voldoet aan de fundamentele eisen (bijlage 1 van Richtlijn 93/42 EEG). Het product is voorzien van het CE-keurmerk volgens bovengenoemde richtlijn.

1 Algemene informatie

1.8 Goedkeuring/compatibiliteit met betrekking tot de combinatie met in de handel verkrijgbare kinderzitjes

De IPAI-LGT is inclusief alle accessoires een goedgekeurd autokinderzitje volgens ECE R129/03. Onderdelen en accessoires van de IPAI-LGT zijn niet goedgekeurd voor combinatie met andere in de handel verkrijgbare autokinderzitjes. Door een wijziging kan de goedkeuring van de IPAI-LGT en die van het in de handel verkrijgbare autokinderzitje vervallen.

1.9 Contra-indicaties

Er zijn geen contra-indicaties bekend.

1.10 Gebruiksduur/onderhoud

De aanbevolen gebruiksduur van dit revalidatieautostoeltje is 7 jaar vanaf de datum van eerste ingebruikname.

Na afloop van deze periode mag het product om veiligheidsredenen niet meer worden gebruikt, omdat materiaalmoeheid en leeftijdsgebonden veranderingen de beschermende werking kunnen aantasten.

De veiligheidsrelevante onderdelen zijn onderhoudsvrij. Afhankelijk van het soort en de frequentie van het gebruik moet het product regelmatig worden gereinigd. De betreffende aanwijzingen zijn te vinden in het hoofdstuk "Reiniging" van deze gebruiksaanwijzing. Bij gebruik van optionele accessoires wordt een regelmatige functiecontrole door de gebruiker aanbevolen. De frequentie van de controle is afhankelijk van de gebruiksfrequentie, de gebruiksomstandigheden en de invloed van de gebruiker (bijv. eenmaal per jaar). De controle moet worden uitgevoerd volgens de betreffende hoofdstukken van deze gebruiksaanwijzing.

2 Veiligheid & inbouw in de auto

2 Veiligheid & inbouw in de auto

2.1 Veiligheidsinstructies

- Voor gebruik moeten de onderdelen worden gecontroleerd op een goede werking en staat.
- De gebruiksaanwijzing moet altijd bij de autokinderzitje worden bewaard.
- De veiligheid van uw kind is alleen gewaarborgd als het zitje correct is geïnstalleerd en het kind goed vastzit.


Controleer het volgende:

- A) of de heupgordel in de linker en rechter donkergroene gordelgeleiders zit.
 - B) of de diagonale gordel aan beide zijden in de donkergroene gordelgeleider zit.
 - C) of de diagonale gordel in de lichtgroene gordelgeleider zit.
 - D) of de veiligheidsgordel strak is aangetrokken en niet gedraaid is.
 - E) of het kind correct is vastgegespt.
 - F) of er geen kledingstukken bekneld zitten.
-
- Zorg ervoor dat er geen harde voorwerpen zoals pennen, gordelsluitingen enz. tussen het kind en de gordel zitten. Dit kan bij een ongeval tot verwondingen leiden.
 - Leg uw kind uit hoe belangrijk het is om goed vast te zitten en dat de loop van de gordels niet mag worden veranderd. Het mag niet aan de gordels trekken of de gordelsluitingen openen.
 - Breng geen wijzigingen aan het autostoeltje aan, anders brengt u de veiligheid van uw kind in gevaar.
 - Het autostoeltje mag niet worden beschadigd door bewegende onderdelen in de auto of door deuren.
 - Laat uw kind nooit alleen in het autostoeltje zitten.
 - Informeer uw medepassagiers hoe uw kind na een ongeval uit het zitje kan worden gehaald.
 - Na een ongeval moet het hele autostoeltje worden vervangen.

2 Veiligheid & inbouw in de auto

2.2 Maak kennis met de IPAI-LGT

- 01 Diagonal belt
- 02 Lap belt
- 03 Seat belt lock
- 04 Insertion aid
- 05 ISOFIX installation bracket
- 06 Green area
- 07 Red release button
- 08 Locking button
- 09 ISOFIX locking arms
- 10 Adjustment button
- 11 ISOFIX adjustment button
- 12 Dark-green belt guide
- 13 Light-green belt holder
- 14 Headrest

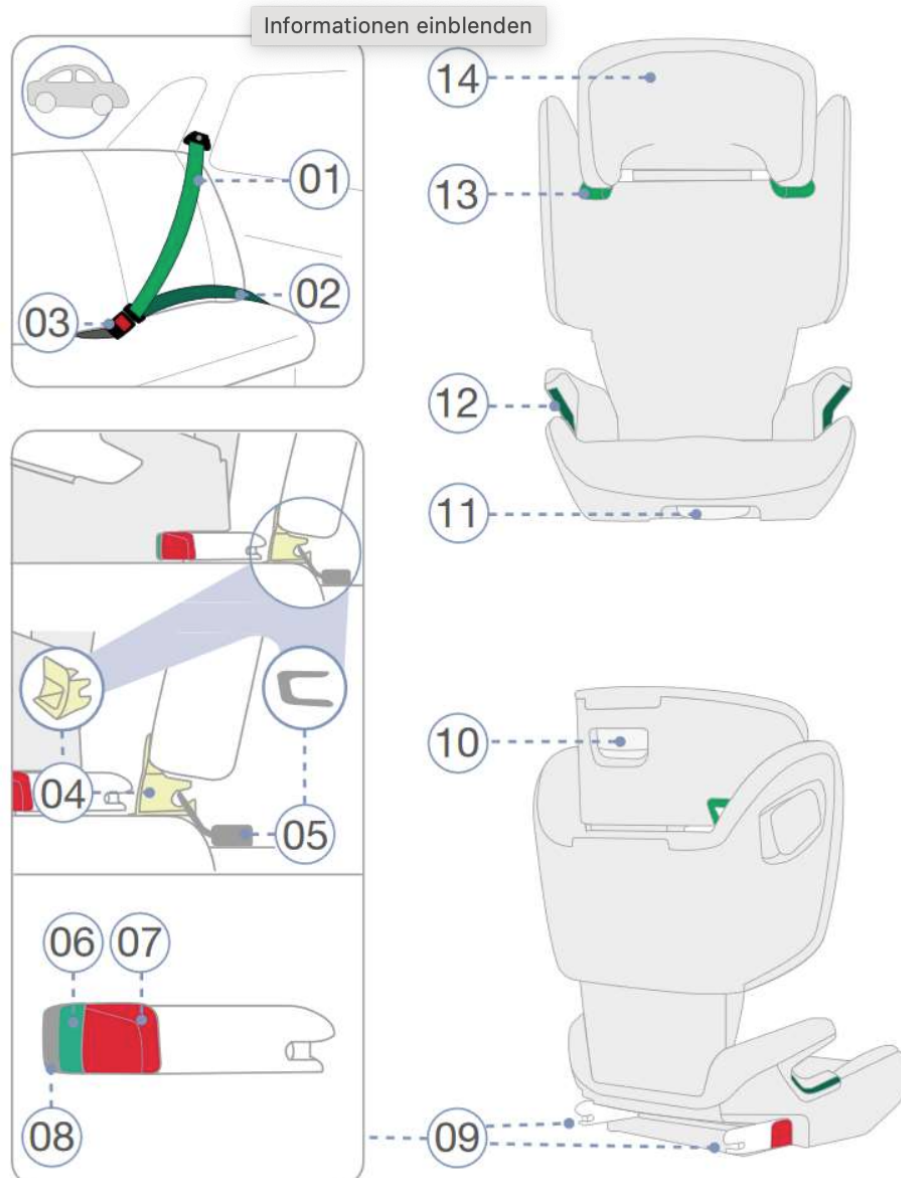

2 Veiligheid & inbouw in de auto

2.3 Installatie in de auto – met ISOFIX

De IPAI-LGT wordt met de ISOFIX-vergrendelingsarmen (09) vast in uw auto geïnstalleerd. Uw kind wordt vervolgens vastgespeld met de 3-puntsgordel van de auto.




1. Als uw auto niet standaard is uitgerust met ISOFIX-bevestigingspunten, klemt u de twee bevestigingspunten (04) die bij het zitje worden geleverd met de uitsparing naar boven op de twee ISOFIX-bevestigingspunten (05) van uw auto.

TIP! De ISOFIX-bevestigingspunten bevinden zich tussen de zitting en de rugleuning van de autostoel.

2. Zet de hoofddeun van de autostoel in de hoogste stand.
3. Houd de ISOFIX-instelknop (11) ingedrukt en schuif de ISOFIX-vergrendelingsarmen (09) helemaal naar buiten.


Opmerking! Als uw stoel is uitgerust met een stoeldiepte-adapter, verleng dan de adapter om de instelknop te kunnen bereiken (meer informatie op pagina 18 en 19).

4. Druk de vergrendelknop (08) en de rode ontgrendelknop (07) aan beide zijden van de stoel tegen elkaar. Hierdoor worden beide haken aan de ISOFIX-vergrendelingsarmen (09) geopend en zijn ze klaar voor gebruik.
5. Plaats het kinderzitje in de rijrichting op een daarvoor goedgekeurde autostoel. Zorg ervoor dat de rugleuning plat tegen de rugleuning van de autostoel ligt.

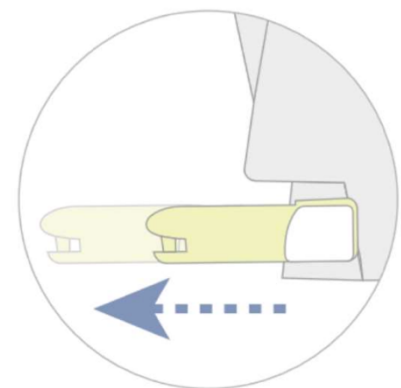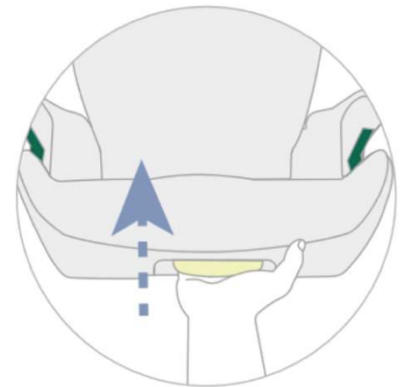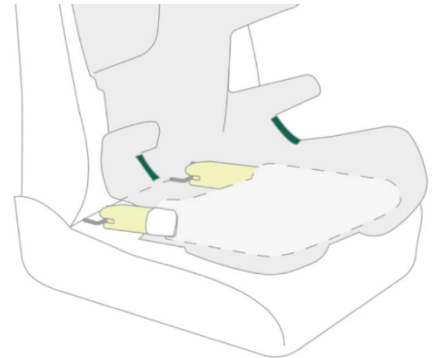


2Veiligheid & inbouw in de auto

6. Duw beide ISOFIX-vergrendelingsarmen (09) in de invoerhulpmiddelen (04) totdat de ISOFIX-vergrendelingsarmen (09) aan beide zijden met een 'klik'-geluid vastklikken.

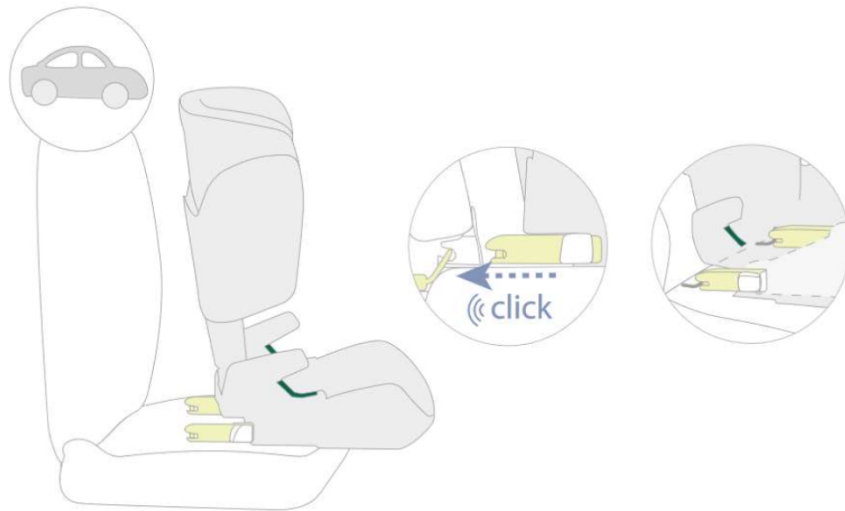

7. Houd de ISOFIX-instelknop (11) ingedrukt en schuif het kinderzitje zo ver mogelijk naar achteren.
8. Schud aan het kinderzitje om te controleren of het goed vastzit en controleer of het groene gedeelte (06) aan beide vergrendelingsarmen zichtbaar is.

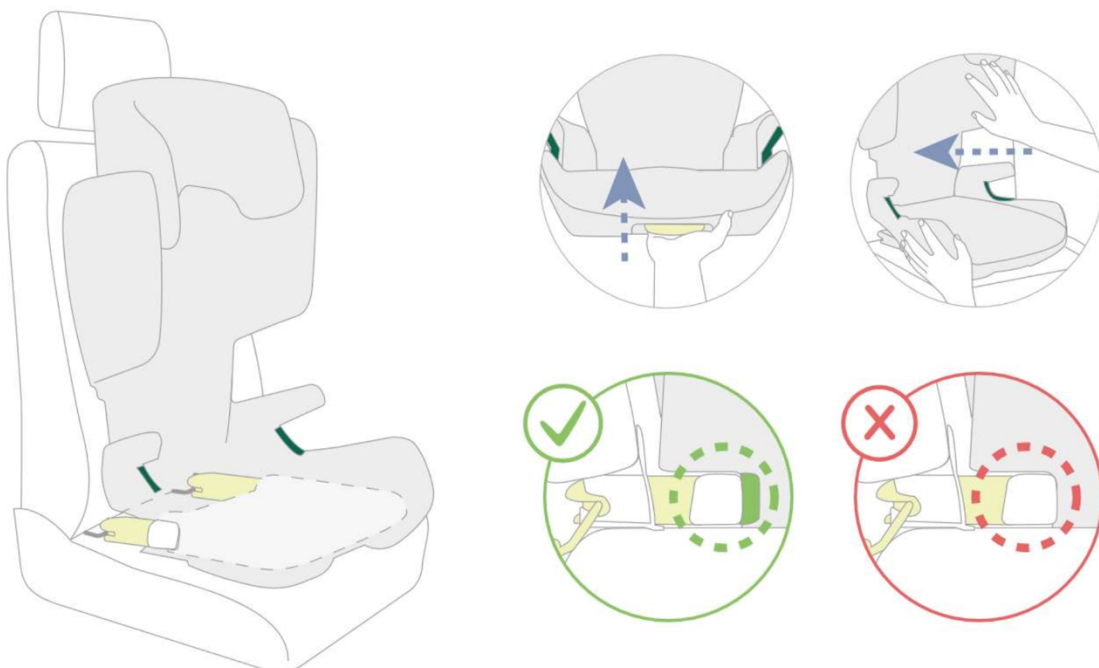


2 Veiligheid & inbouw in de auto

2.4 De hoofdsteun afstellen

Een correct afgestelde hoofdsteun (14) zorgt voor een optimale loop van de diagonale veiligheidsgordel (01) en biedt uw kind maximale bescherming. De hoofdsteun (14) moet zo worden afgesteld dat er tussen de schouders van uw kind en de hoofdsteun (14) nog ruimte is voor twee vingers.

1. Pak de verstelknop (10) aan de achterkant van de hoofdsteun (14) vast en trek deze omhoog. De hoofdsteun is nu ontgrendeld.
2. Nu kunt u de ontgrendelde hoofdsteun (14) naar de gewenste hoogte schuiven. Zodra u de verstelhendel (10) loslaat, klikt de hoofdsteun (14) vast.
3. Plaats het kinderzitje op de autostoel.
4. Laat uw kind op het kinderzitje plaatsnemen en controleer de hoogte. Herhaal deze procedure totdat de hoofdsteun (14) zich op de juiste hoogte bevindt.

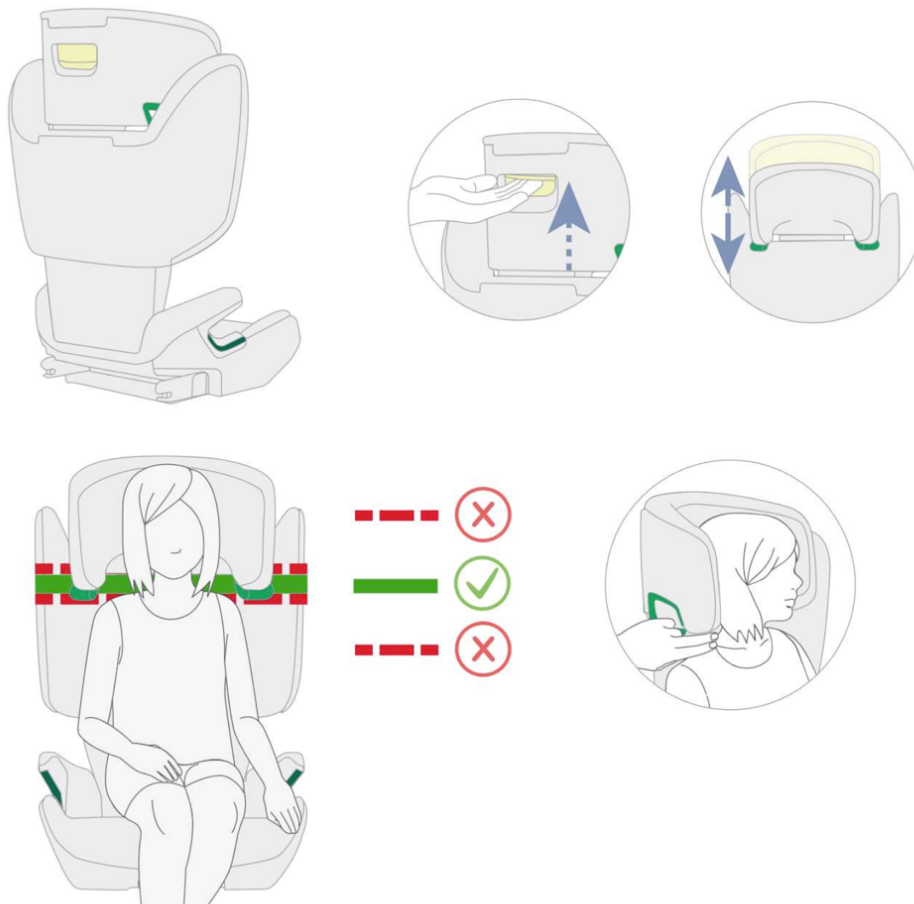



2 Veiligheid & inbouw in de auto

2.5 De gordels omdoen


1. Trek de autogordel (01) uit en leid deze voor uw kind door de lichtgroene gordelhouder (13) naar de gordelsluiting (3).

LET OP! Zorg ervoor dat de autogordel niet gedraaid is, anders is het veiligheidssysteem niet volledig effectief.

2. Leg de diagonale gordel (01) en de heupgordel (02) in de donkergroene gordelgeleider (12) van het autostoeltje.

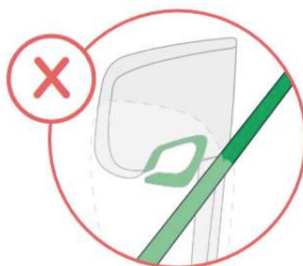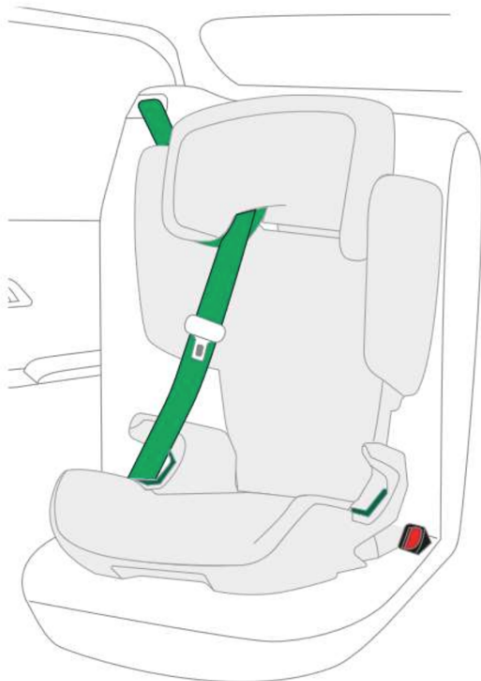

2Veiligheid & inbouw in de auto

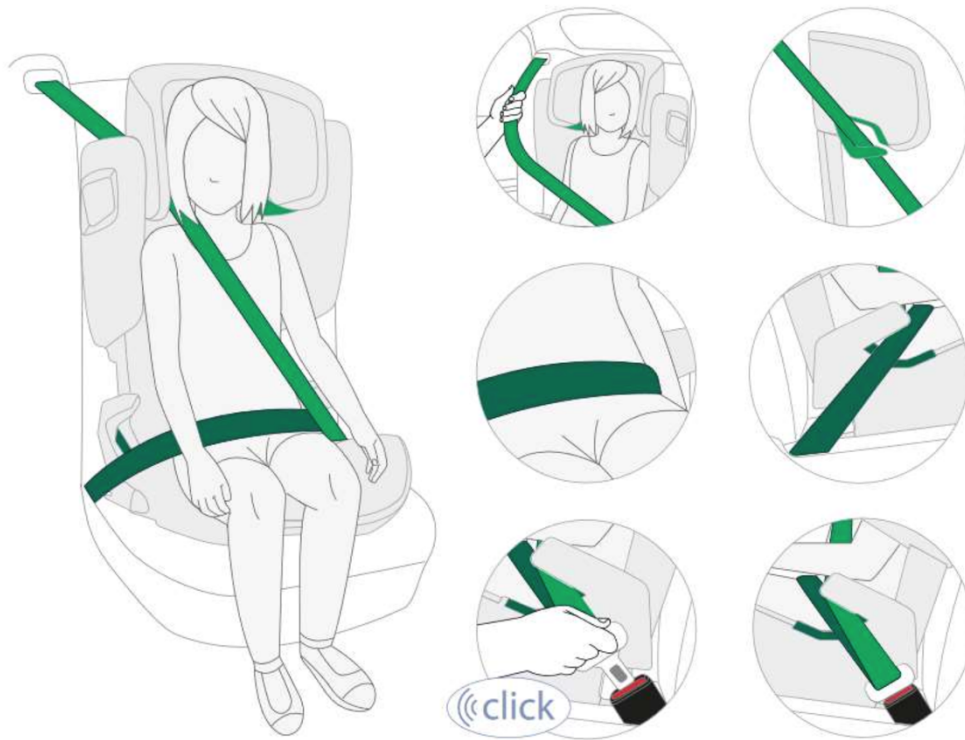

3. Laat de gordelsluiting met een KLIK in de sluiting (03) van de auto klikken.

LET OPI De heupgordel (02) moet aan beide zijden zo laag mogelijk over de heupen van uw kind lopen.

TIP! Als de rugleuning de gordelhouder (13) bedekt, kunt u de hoofdsteen (14) omhoog zetten. De diagonale gordel (01) kan nu gemakkelijk worden ingevoerd. Zet de hoofdsteen (14) nu weer op de juiste hoogte. Zorg ervoor dat de knop op de gordelhouder (13) volledig gesloten is.

Zorg ervoor dat de diagonale gordel (01) over het sleutelbeen van uw kind loopt en niet tegen de nek.

TIP! U kunt ook de hoogte van de hoofdsteen (14) in de auto aanpassen.

LET OPI De diagonale gordel (1) moet diagonaal naar achteren lopen. U kunt het verloop van de gordel aanpassen met de verstelbare gordelgeleider van uw auto.

LET OPI De diagonale gordel (1) mag nooit naar de gordelomleider van de auto lopen. Als dit wel het geval is, gebruik de kinderzitje dan alleen op de achterbank.

3 Gebruik van het basismodel

3 Gebruik van het basismodel

3.1 Afstellen van de 5-puntsgordel

Verleng eerst de gordels door tegelijkertijd op de grijze knop op de gordelversteller (1) te drukken en aan de gordels te trekken. Leg nu de gordels over de schouders van het kind.

Steek vervolgens de twee metalen tongen in de gordelsluiting (3) totdat ze vastklikken. Trek vervolgens het gordelsysteem strak door aan het linker- en rechteruiteinde van de gordel (2) te trekken totdat een stabiele zitpositie is gevonden.

Als u het kind uit het kinderzitje wilt halen, maakt u eerst de gordel los door op de grijze knop op de gordelverstellers (1) te drukken en aan de gordels te trekken. Vervolgens kan de gordelsluiting (3) worden geopend door krachtig op de rode ronde knop te drukken.



3.2 Afstelling van de thoraxsteunen

De IPAI-LGT is standaard uitgerust met een paar anatomisch gevormde thoraxsteunen (4). Deze kunnen kinderen met een slechte controle over hun bovenlichaam ondersteunen in hun houding.

Maak de thoracale kussentjes los door er lichtjes aan te trekken totdat de klittenbandverbinding loskomt. Omdat de binnenkant van de zijdelingse ruggeleiding met klittenbandelementen is bedekt, kan nu volledig vrij een geschikte positie worden gevonden door deze weer met klittenband vast te zetten.



3 Gebruik van het basismodel

3.3 De zithoek instellen

Als de IPAI-LGT met ISOFIX in het voertuig is geïnstalleerd, kan de stoeleenheid naar voren worden getrokken door de ISOFIX-vergrendelingsarmen (2) uit te schuiven. Omdat de rug- en zitelementen zijn voorzien van een beweegbaar scharnier, wordt hierdoor de rughoek geopend. Uw kind zit meteen in een ontspannen houding.

Druk hiervoor op de grijze verstelknop (1) aan de voorkant van de stoel en trek de zitting naar voren. De rugleuninghoek wordt groter. Voor een kleinere hoek kunnen willekeurige tussenposities worden gekozen.

Als uw kind later een actievere zitpositie wil aannemen, bijvoorbeeld als het heeft geslapen, kunt u de zitting op dezelfde manier naar achteren schuiven, waardoor de rugleuninghoek steiler wordt.



4 Gebruik van de optionele accessoires

4 Gebruik van de optionele accessoires

4.1 Abductiewig

Installatie-instructies:

1. Plaats de IPAI-LGT op een stabiel werkoppervlak.
2. Haal nu de montageplaat (1), de vier klittenbandstroken (2) en het abductieblok (3) uit de verpakking.
3. Verwijder eerst de witte beschermfolie van de vier klittenbandstroken. Zorg ervoor dat de onderkant van het autostoeltje schoon is – deze moet vrij zijn van stof en vocht. Bevestig nu de klittenbandstroken aan de onderkant van het zitgedeelte (zie markering in afbeelding 1).
4. Hang nu de montageplaat in (zie afbeelding 2). Het U-profiel (4) moet op de kunststof rand (5) worden geplaatst. De montageplaat moet plat op de onderkant van het zitgedeelte worden geplaatst, waarbij de klittenbandstroken een verbinding vormen.
5. Draai de IPAI-LGT weer om. Nu kan het abductieblok (3) in de houder worden geplaatst en met de kantelhendel worden vastgezet.



Abb. 1



TIP! Als het abductieblok niet wordt gebruikt, moet de montageplaat worden verwijderd. Anders bestaat er gevaar voor letsel door uitstekende metalen delen.



Abb. 3



Abb. 2

4 Gebruik van de optionele accessoires

Afstellen van het abductieblok

De diepte van het abductieblok kan worden ingesteld.

1. Draai de 2 schroeven (1) aan de onderkant van de zitting los met een inbussleutel (zie afbeelding 1).
2. De beugel (2) kan nu in de gewenste positie worden geschoven en vastgezet.
3. Plaats het abductieblok (3) in de houder en zet het vast met de kantelhendel (4).



Abb. 1



4 Gebruik van de optionele accessoires

4.2 Zitdiepteadapter

1. Plaats de IPAI-LGT op een stabiel werkoppervlak.
2. Haal nu de montageplaat (1), de vier klittenbandstroken (2) en de zitdiepteadapter uit de verpakking.
3. Verwijder eerst de witte beschermfolie van de vier klittenbandstroken. Zorg ervoor dat de onderkant van het autostoeltje schoon is – deze moet vrij zijn van stof en vocht. Bevestig nu de klittenbandstroken aan de onderkant van het zitgedeelte (zie markering in afbeelding 1).
4. Hang nu de montageplaat in (zie afbeelding 2). Het U-profiel (4) moet op de kunststof rand (5) worden geplaatst. De montageplaat moet plat op de onderkant van het zitgedeelte worden geplaatst, waarbij de klittenbandstroken een verbinding vormen.
5. Draai de IPAI-LGT weer om. Nu kan de zitdiepteadapter (3) in de houder worden geplaatst (zie afbeelding 3).



Abb. 1

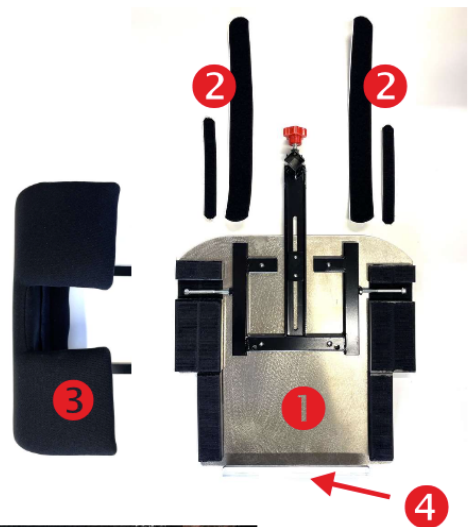


Abb. 3

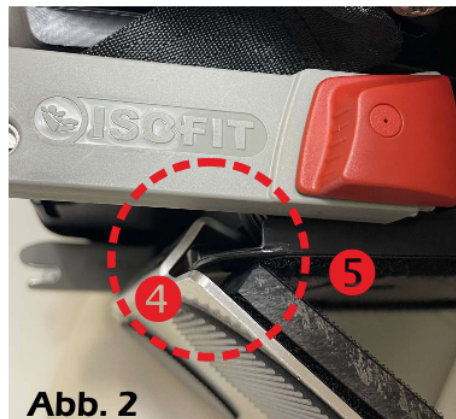


Abb. 2

4 Gebruik van de optionele accessoires

Instellen van de zitdiepte-adapter:

De zitdiepte-adapter kan op de gewenste zitdiepte worden ingesteld.

1. Draai de twee schroeven (1) aan beide zijden van het autostoeltje los met een inbussleutel.
2. De zitdiepteadapter (3) kan nu in de gewenste positie worden gebracht.
3. Draai de twee schroeven (1) weer vast.



4 Gebruik van de optionele accessoires

4.3 Steun- en veiligheidsbekleding

Installatie-instructies:

1. Laat u bij de overdracht van het autostoeltje de montage van het steun- en veiligheidskussen laten zien.
2. Plaats het steun- en veiligheidskussen (1) op het autostoeltje nadat u uw kind erin hebt gezet en vastgegespt.
3. Bevestig het kussen met de meegeleverde klittenbandstroken (2) aan de achterkant van het autostoeltje.
4. De armen van uw kind moeten op het tafeltje rusten, waardoor het rechtop zit. Dit ondersteunt het bovenlichaam.
5. Zorg ervoor dat u het gevaar van speelgoed dat op het kussen zou kunnen liggen, vermijdt. Gebruik geen harde, vaste of scherpe voorwerpen.



5Garantie

5 Garantie

HERNIK-producten voldoen aan de nieuwste stand van de techniek en worden vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen. Mocht u in uitzonderlijke gevallen reden tot klagen hebben, dan garandeert HERNIK GmbH overeenkomstig de algemene voorwaarden na levering

- 24 maanden op alle vaste onderdelen
- 12 maanden op alle bewegende onderdelen

Voor speciale uitvoeringen kan geen garantie worden gegeven, tenzij deze het gevolg zijn van fabricage- of materiaalfouten. In dit geval wordt gedurende 12 maanden vervanging van het gereclameerde product gegarandeerd.


De aanspraken op grond van deze garantieverplichting veronderstellen dat het apparaat correct en in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing is gebruikt.

Bij constructieve wijzigingen, nabewerkingen of ondeskundige reparaties zonder voorafgaand overleg met HERNIK GmbH vervalt het recht op garantie.

Verdere aanspraken, ongeacht de rechtsgrond, in het bijzonder op vergoeding van directe of indirecte schade, zijn uitgesloten.

6Markering

6 Markering

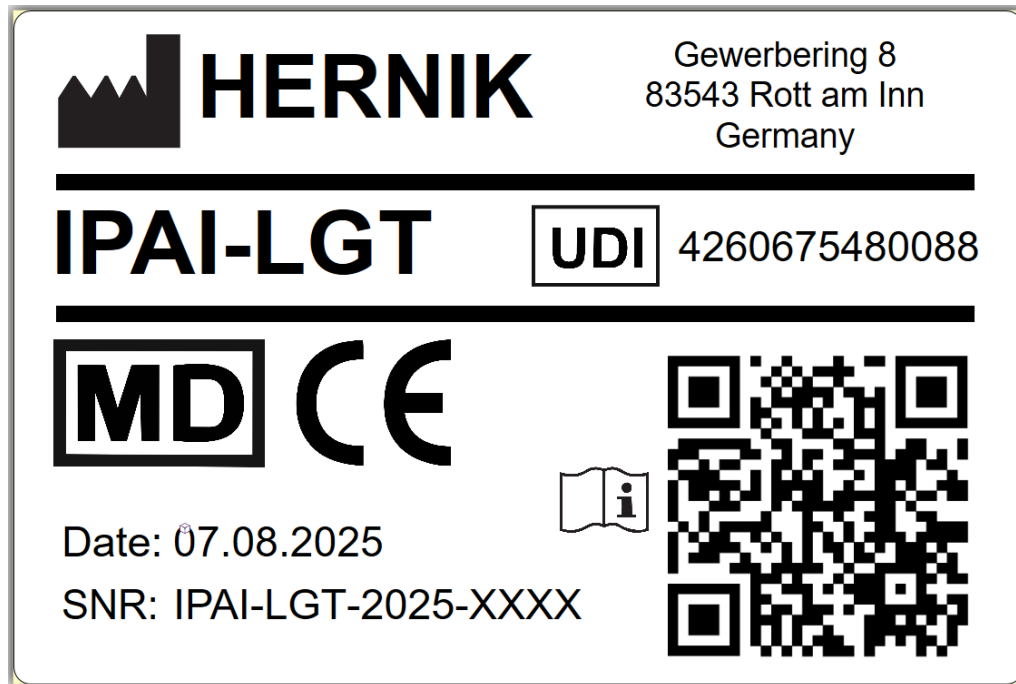

**Rückhalteeinrichtung für spezielle
Anforderungen "S" (DE)**

Lesen Sie bitte vor Gebrauch die
Bedienungsanleitung!

7Onderhoud & verzorging

7 Onderhoud & verzorging

Algemene onderhouds- en verzorgingsinstructies

Om de volledige beschermende werking van het kindersitje te garanderen:

- Bij een ongeval met een botssnelheid van meer dan 10 km/u kan het kindersitje onder bepaalde omstandigheden beschadigd raken zonder dat de schade direct zichtbaar is. In dat geval moet het kindersitje worden vervangen. Voer het op de juiste wijze af.
- Controleer alle belangrijke onderdelen regelmatig op beschadigingen. Zorg ervoor dat met name alle mechanische onderdelen correct functioneren.
- Om schade te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat het kindersitje niet bekneld raakt tussen harde voorwerpen (autodeur, stoelrails enz.).
- Laat het kindersitje altijd controleren als het beschadigd is (bijvoorbeeld als het op de grond is gevallen).
- Smeer of olieer nooit onderdelen van het kindersitje.
- Om uw kind goed te kunnen beschermen, is het absoluut noodzakelijk dat u de IPAI-LGT precies volgens deze gebruiksaanwijzing installeert en gebruikt.

8 Technische gegevens

8 Technische gegevens

	IPAI-LGT
SITZBREITE (Becken)	31 cm
SITZBREITE (Knie)	42 cm
SITZTIEFE	32 cm
RÜCKENHÖHE	41- 54 cm
SCHEITELHÖHE	59 - 74 cm
Höhe Thoraxpelotten	20 - 33 cm
Abstand Thoraxpelotten	14 - 28 cm
Rückenwinkel	85° - 120°
Gesamthöhe	68 - 88 cm
Gesamtbreite	44 cm
Gesamttiefe	42 cm
Gewicht	7,0 kg
getestete Belastbarkeit	36 kg

Standaarduitrusting:

- 5-puntsgordel met bekleding, in hoogte verstelbaar
- ISOFIX-adapter, verstelbaar
- Hoofdsteun, in hoogte verstelbaar
- SICT-bescherming tegen zijdelingse botsingen
- Driedelige, afneembare en ademende bekleding (wasbaar op 30 °C)
- Zijsteunen, in hoogte verstelbaar

9Materiaalopstelling

9 Materiaalopstelling

De volgende materialen worden gebruikt:

- Kunststof (zitting en bekleding onderconstructie)
- Staal (accessoires)
- Aluminium (thoraxsteunen)
- Polyester (riem)
- Met schuim bekleed netweefsel, antraciet (bekleding)
- Schuimrubber dichtheid

Aantekeningen

Aantekeningen



HERNIK GmbH
Gewerbering 8
83543 Rott am Inn • Germany

 **+49 8039-9093930** •  **+49 8039-90939319**
 **info@hernik.de** •  **www.hernik.de**