

HERO NXT

Der "Held" für die Kleinsten



~ 3 Monate -
4 Jahre

61 - 105 cm

bis 18 kg



Komfortabel & sicher

Wir setzen auf **modernste Technik**, um unsere Produkte sicher zu machen.

- ✓ Beste Bewertungen auf Vergleichsportalen
- ✓ Zugelassen nach R129



Vertrauen auf Erfahrung

Seit **20 Jahren** arbeiten wir daran, die besten Produkte zu entwickeln und herzustellen.

- ✓ Einziger Reboarder für kleine Kinder mit vollständiger europäischer Zulassung



Made in Germany

All unsere Produkte werden in **Deutschland entwickelt und produziert.**

- ✓ Zertifiziert nach der **ISO 9001**

Größter Schutz für die Kleinsten

Der HERO-NXT Kinderautositz ist ein für den Reha-Markt modifizierter Autositz. Dank der 360°-Drehfunktion kann der Sitz rückwärts- und vorwärtsgerichtet verwendet werden. Aufgrund der noch schwachen Nackenmuskulatur bei Kindern unter 15 Monaten, sollte der HERO-NXT mit Blick gegen die Fahrtrichtung eingesetzt werden.



1 5-Punkt-Gurt

Der integrierte 5-Punkt-Gurt fixiert Ihr Kind sicher im Autositz. Mithilfe des Schnellverschlusses ist zudem ein bequemes und schnelles Hineinsetzen und Herausheben Ihres Kindes möglich.

2 Innenpolster

Das von HERNIK entwickelte Innenpolster sorgt vor allem bei kleinen Kindern für eine optimale Positionierung und deutlich mehr Komfort

3 Schutzbügel und Tragegriff

Der Tragegriff hilft Ihnen, den Kindersitz ergonomisch und sicher zu tragen. Während der Fahrt fungiert er zusätzlich als Schutzbügel und sorgt bei einem Heckaufprall für einen stabilen Stand.


4	Gesamthöhe	66 - 73 cm
5	Gesamtbreite	50 cm
6	Gesamttiefe	65 cm

Schnelle Montage

Der Autokindersitz wird mittels ISOFIX-Anschluss im Auto schnell und einfach fixiert.

Eine Sicherung des Kindes über den 3-Punkt-Gurt ist nicht nötig.

Ein ISOFIX-System ist für unseren HERO-NXT Voraussetzung, weshalb der Anschluss bereits in der Grundausstattung integriert ist.

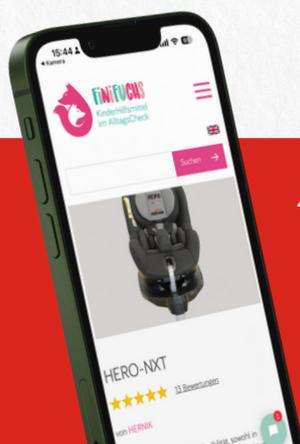

Auf die vielen positiven Kundenbewertungen sind wir sehr stolz. Warum HERNIK bei Vergleichsportalen regelmäßig Spitzenbewertungen erzielt, erfahren Sie auf unserer Website.

Markus Jacksch,
Geschäftsführer



Individuelles Zubehör für jedes Kind

1 2 **Einstellbare Rückenhöhe/ Einstellbarer Sitzwinkel**

Um Kinder mit eingeschränkter Oberkörperkontrolle zu unterstützen, lässt sich der Sitzwinkel verstellen, wodurch zwischen einer aktiven und einer passiveren Position gewechselt werden kann. Außerdem wächst der Autokindersitz dank der verstellbaren Kopfstütze mit Ihrem Kind mit.

3 **Thoraxpelotten**

Kinder mit schwacher Rumpfkontrolle haben meist das Bedürfnis nach einem festen, stabilen Halt. Dies ermöglichen die Thoraxpelotten aus Aluminium, welche völlig flexibel in der Breite und Höhe an den Körper des Kindes angepasst werden können. Dabei werden unvermeidbare Kräfte beim Beschleunigen, Bremsen und Kurvenfahren aufgefangen.

4 **Stütz- und Sicherheitspolster**

Das Stütz- und Sicherheitspolster sorgt für mehr Stabilität und eine aufrechtere Haltung beim Sitzen.

5 **Abduktionskeil**

Um eine Luxation der Hüften und ein Zusammenpressen der Knie (aufgrund von Muskelanspannungen) zu verhindern, kann ein Abduktionskeil gewählt werden.

6 **360° drehbar**

Der HERO-NXT lässt sich um 360° drehen und kann sowohl in als auch gegen die Fahrtrichtung verwendet werden. Für einen leichteren Transfer lässt sich der Autokindersitz um 90° schwenken, sodass man das Kind, ohne den eigenen Rücken überzustrapazieren, in den Autositz hineinsetzen kann. Das Anschnallen gelingt in der Position ebenfalls deutlich einfacher. Anschließend dreht man den HERO-NXT in die gewünschte Position.

7 **Teleskopierbarer Standfuß**

Unter Verwendung des teleskopierbaren Standfußes lässt sich der HERO-NXT leicht im Fahrzeug installieren. Das Stützbein gibt dem Autokindersitz über den Fahrzeugboden zusätzliche Stabilität und minimiert gleichzeitig die Kippbewegungen des Sitzes.

Wir sind uns sicher: Die besten Sitze können wir nur gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln. Deshalb freuen wir uns sehr über Ihre Verbesserungsvorschläge und werden diese in unsere Entwicklung einfließen lassen.

Schreiben Sie uns gerne eine Nachricht an:
info@hernik.de



Weitere Produkte aus dem Hause HERNIK




Kindersitze für jede Größe

HERNIK begleitet Ihr Kind vom Kleinkind- bis hin zum Erwachsenenalter (bis 75 kg). Bei komplexeren Anforderungen oder individuellen Wünschen, bieten wir außerdem Speziallösungen im Sonderbau an.

Kopfschutzhelme und Sitzschalenkonzepte

Mit unserem breiten Sortiment an Kopfschutzhelmen bieten wir jedem Nutzer den nötigen Schutz vor Verletzungen. Vor allem unser CAPOVARIO ist ein echtes Highlight, der durch seine besondere Konstruktion den Alltag deutlich erleichtert.

Außerdem versorgen wir Sie mit individuellen Sitzschalen, wie den Aluminium-Schalen ANATOMIC UNICO und ANATOMIC FLEX.

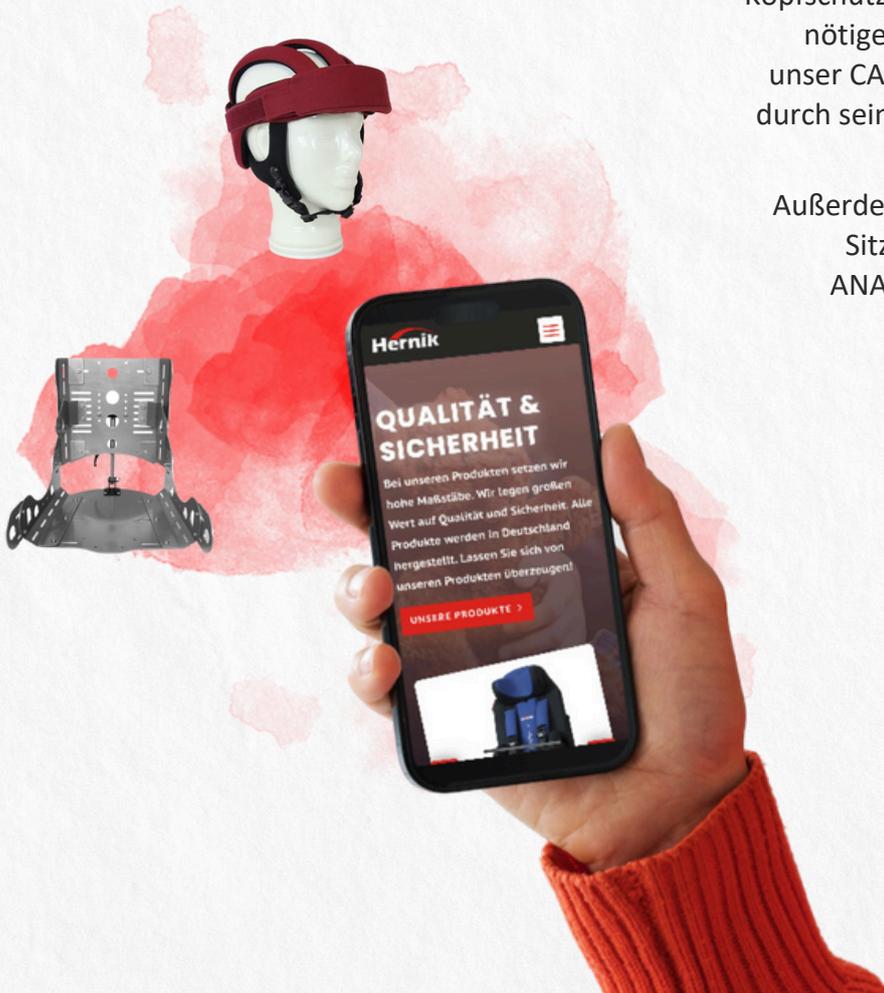

HERNIK

Entdecken Sie die ganze Auswahl auf hernik.de

HERNIK GmbH

Gewerbering 8,
83543 Rott am Inn

+49 (08039) 9093930
info@hernik.de
www.hernik.de

