

# IPAI **MINI**

**Unser kleiner Allrounder**

# Hernik



~3 - 9 Jahre

100 - 125 cm



## **Komfortabel & sicher**

Wir setzen auf modernste **Technik** und innovative **Features**.

- ✓ Schneller Wechsel zwischen aktiver und passiver Sitzposition



## **Vertrauen auf Erfahrung**

Seit **20 Jahren** arbeiten wir daran, die besten Produkte zu entwickeln und herzustellen.

- ✓ Reha-Autositz mit vollständiger europäischer Zulassung nach R129



## **Made in Germany**

All unsere Produkte werden in **Deutschland entwickelt** und **produziert**.

- ✓ Zertifiziert nach der **ISO 9001**

## Passt sich an die Bedürfnisse Ihres Kindes an!

Der neue IPAI-MINI ist ein modifizierter Autositz von Britax-Römer, der sich individuell an die besonderen Bedürfnisse von kleinen Kindern anpassen und dementsprechend ausstatten lässt.

Da der Transfer für Eltern immer eine besondere Herausforderung darstellt, empfiehlt sich der völlig neu entwickelte **Dreh-Mechanismus (1)**, der eine 90°-Drehung erlaubt. Damit kann das Kind erheblich leichter in den Autositz hineingesetzt und angeschnallt werden.

Auch an die Rumpfführung wurde gedacht: Hier kommen **Thoraxpelotten (2)** aus Aluminium zum Einsatz, die sich ohne Werkzeug in der Breite und in der Höhe verstellen lassen – mehr Platz im Winter und eine körpernahe Position im Sommer! Ein **integrierter 5-Punkt-Gurt (3)** ist natürlich auch mit an Bord.



Selbstverständlich sind auch sonst übliche Zubehörteile wie ein **Abduktionskeil (4)**, eine **Fußbank (5)**, eine **Sitztiefenverlängerung (6)**, **Laterale Beiführung (7)** oder ein **Stütz- und Sicherheitspolster (8)** verfügbar.

Der neue IPAI-MINI hat eine umfangreiche Crashtest-Untersuchung nach der Norm R129 erfolgreich hinter sich gebracht und eine europäische Zulassung mit E-Nummer.



*Auf die vielen positiven Kundenbewertungen sind wir sehr stolz. Warum HERNIK bei Vergleichsportalen regelmäßig Spitzenbewertungen erzielt, erfahren Sie auf unserer Website.*

**Markus Jacksch,  
Geschäftsführer**

## Schnell veränderbare Sitzposition

Eine völlig neu konstruierte ISOFIX-**Schnellverstellung (1)** ermöglicht innerhalb von Sekunden den Wechsel zwischen einer aktiven und einer passiven Sitzposition, da auch der **Rückenwinkel (2)** stufenlos verstellbar ist. Und das ganz schnell und unkompliziert ohne Werkzeug!

Das gab's bei einem Autositz im Reha-Bereich bisher noch nie!



Darüber hinaus bieten wir erstmalig einen neuen Mechanismus für die **Sitzwinkelverstellung (3)** an. Viele Kinder nutzen im Rolli oder im Buggy eine nach hinten geneigte Sitzfläche. Diese gewohnte Position können sie nun auch im Autositz nutzen. Mit nur einem Handgriff kann die Sitzneigung – ebenfalls ohne Werkzeug – von flach auf extrem steil geändert werden.

Wir sind uns sicher: Die besten Sitze können wir nur gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln. Deshalb freuen wir uns sehr über Ihre Verbesserungsvorschläge und werden diese in unsere Entwicklung einfließen lassen.

Schreiben Sie uns gerne eine Nachricht an:  
[info@hernik.de](mailto:info@hernik.de)



## Weitere Produkte aus dem Hause HERNIK




### Kindersitze für jede Größe

HERNIK begleitet Ihr Kind vom Kleinkind- bis hin zum Erwachsenenalter (bis 75 kg). Bei komplexeren Anforderungen oder individuellen Wünschen, bieten wir außerdem Speziallösungen im Sonderbau an.

### Kopfschutzhelme und Sitzschalenkonzepte

Mit unserem breiten Sortiment an Kopfschutzhelmen bieten wir jedem Nutzer den nötigen Schutz vor Verletzungen. Vor allem unser CAPOVARIO ist ein echtes Highlight, der durch seine besondere Konstruktion den Alltag deutlich erleichtert.

Außerdem versorgen wir Sie mit individuellen Sitzschalen, wie den Aluminium-Schalen ANATOMIC UNICO und ANATOMIC FLEX.

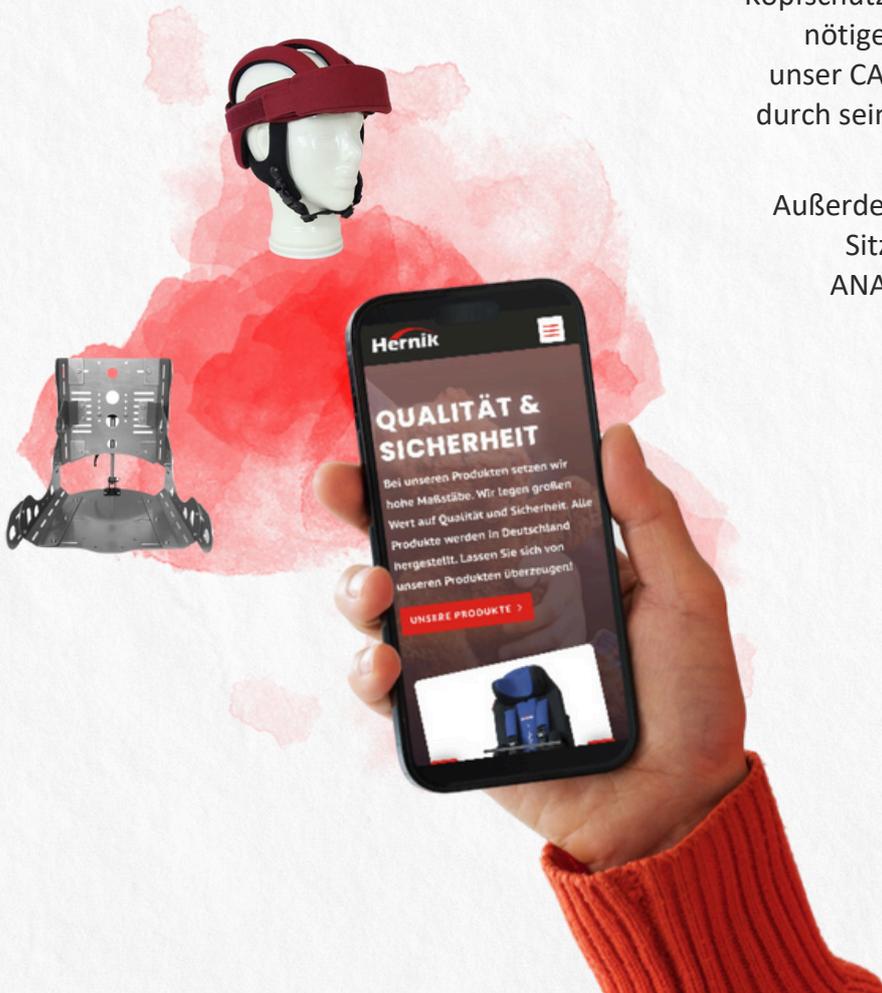

# HERNIK

**Entdecken Sie die ganze Auswahl auf [hernik.de](http://hernik.de)**

**HERNIK GmbH**

Gewerbering 8,  
83543 Rott am Inn

+49 (08039) 9093930  
[info@hernik.de](mailto:info@hernik.de)  
[www.hernik.de](http://www.hernik.de)

