


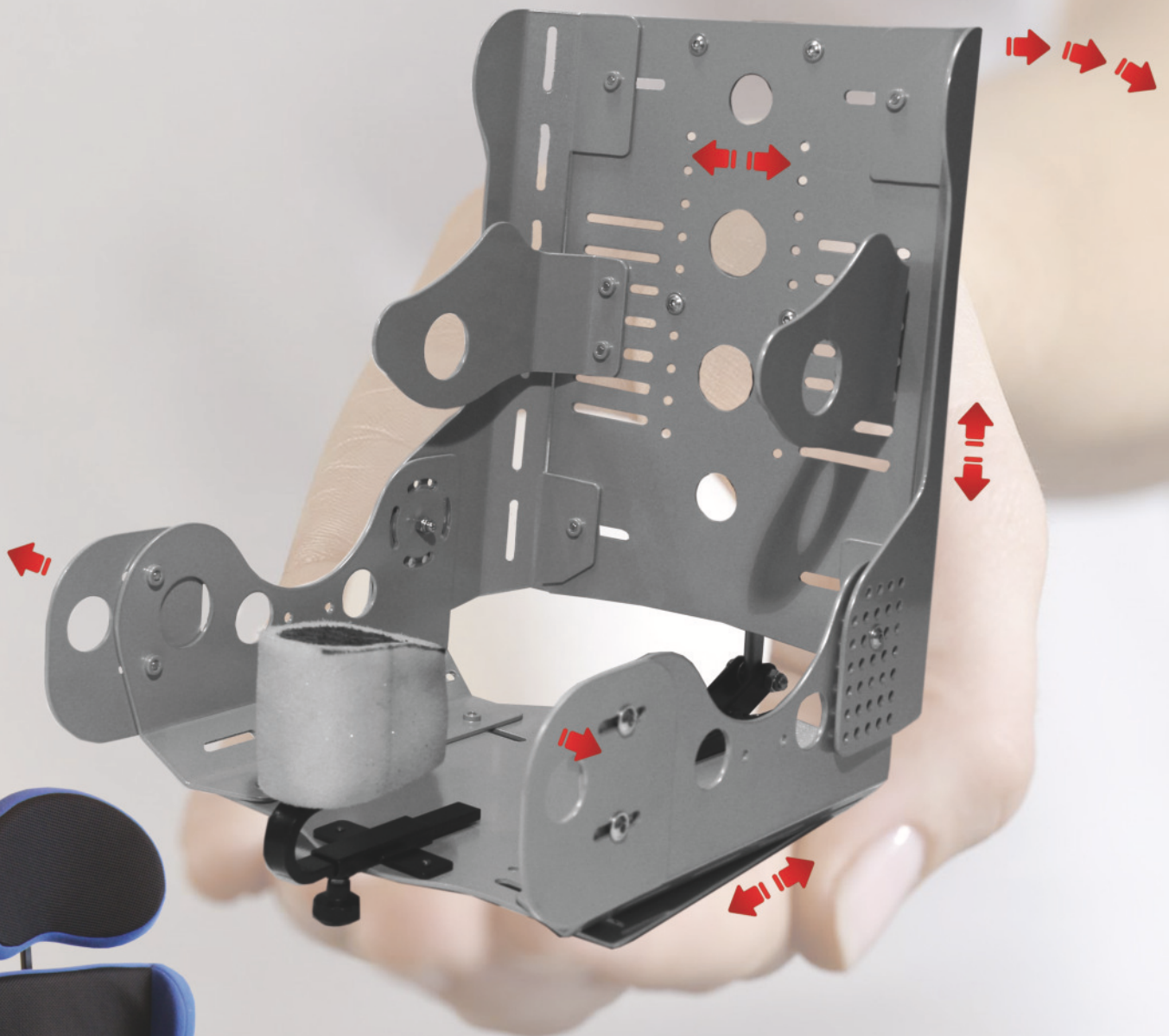

Anatomic Flex 

...modulares Sitzschalensystem
flexibel, 3D-verstellbar

... modulares Sitzschalensystem flexibel, 3D-verstellbar!

Mit dem neuen modularen Sitzschalenkonzept „Anatomic Flex“ haben Sie auf noch nie dagewesene Weise die Möglichkeit, schnell und flexibel eine Sitzschale nach Ihren Wünschen aufzubauen.


Durch den enormen Verstellbereich der Sitzbreite von 11 cm und der Verstell-Matrix im Bereich des physiologischen Drehpunktes von 35 Positionen, lässt sich nahezu jede Rückenhöhe, Sitztiefe und Sitzbreite einstellen. Dies erlaubt es dem Techniker, eine individuelle Sitzschale bei entsprechender Lagerführung innerhalb weniger Minuten aufzubauen - selbstverständlich sind die Einzelbausteine der Anatomic Flex bereits beschichtet.

Wie man auf den Bildern gut erkennen kann, wurde die Sitzplatte konisch gestaltet und mit unterschiedlich langen Schlitten ausgestattet. Damit kann die Sitzschale sowohl parallel, als auch abduziert eingestellt werden, ohne, dass man auf die Sitzbreiteneinstellung verzichten muss. Eine Rückenwinkeleinstellung ist über den physiologischen Drehpunkt gegeben.


Zudem steht eine breite Palette an Zubehör zur Verfügung, welches stets montiert wird, sodass die Werkstattzeiten auf ein Minimum reduziert werden können (Kopfstützen, Armlehnen, Abduktionskeile, Tische, Beinstützen). Außerdem wurden häufig benutzerfreundliche Einpressmuttern verbaut, um mit möglichst wenig Werkzeug auszukommen.

Die neue „Anatomic Flex“ spart wertvolle Arbeitszeit und hilft Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren:

... auf Ihre Kunden!

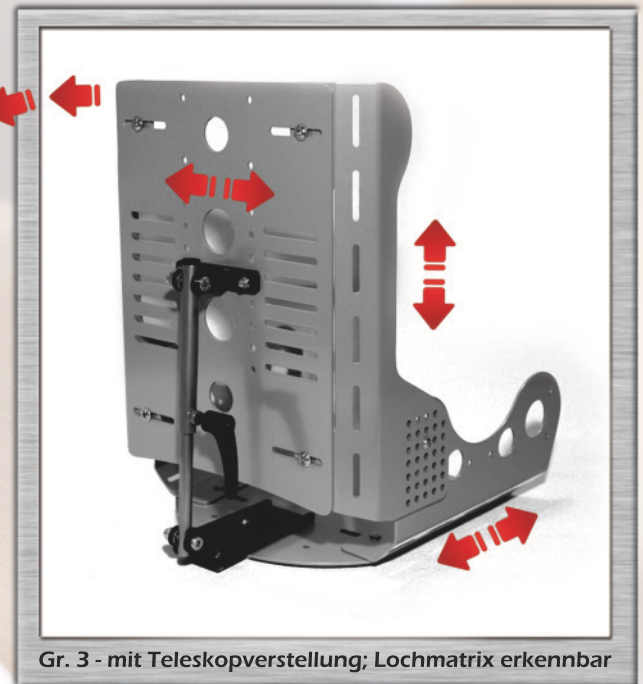


Gr. 3 - mit Teleskopverstellung; Lochmatrix erkennbar

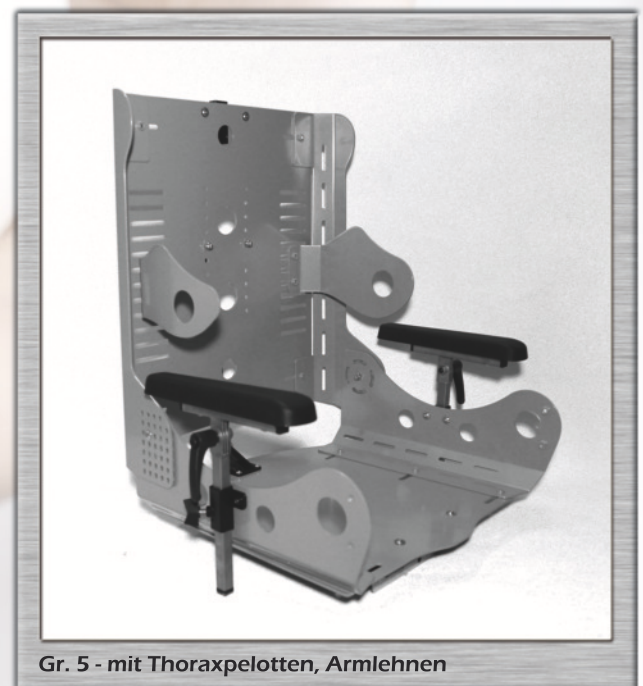

Gr. 5 - mit Thoraxpelotten, Armlehnen



Schale in starker Abduktion

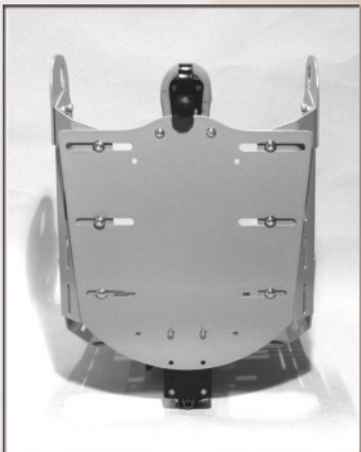

Schale in Parallelstellung

Ihr Fachgeschäft

HERNIK GmbH
Auf der Gröb 2c
83064 Raubling
☎ +49 (0)8035-9580448
☎ +49 (0)8035-9580446
✉ info@hernik.de
🌐 www.hernik.de
Ust.-IdNr: DE201281298